

Orion[®] Metro

De perfecte mix van comfort, veiligheid en betrouwbaarheid



Yes, you can.

Ergonomisch design voor maximaal comfort onderweg

Of u nu geniet van een uitstapje met vrienden of een dagtrip naar de lokale winkels, met de Orion® METRO komt u overal.

De nieuwe, ergonomisch ontworpen Orion® METRO is volledig samengesteld met eigenschappen voor zowel startende als ervaren scooter gebruikers. Uitgerust met talrijke functies voor een veilige, gemakkelijke en plezierige rit.

De Orion® METRO is de perfecte mix van comfort, veiligheid en betrouwbaarheid!



Gecontroleerd en veilig

- > Het veersysteem op de compacte Orion® METRO is ontworpen om verschillende dagelijkse rijomstandigheden ontspannen en gecontroleerd aan te kunnen, zodat u kunt genieten van de rit. De krachtige motor, in combinatie met 11" luchtbanden, neemt u soepel en veilig mee over obstakels of oneffen terrein.

Eenvoud en onderhoudsgemak

- > Door gebruik te maken van kwalitatieve componenten hebben wij een betrouwbare Orion® METRO gemaakt die eenvoudig te onderhouden is. Verwijder eenvoudigweg de bovenkap om toegang te krijgen tot de batterijen, elektronica, motor en kabels. De vitale delen, zoals de elektronica en de motor, worden beschermd tegen corrosie en water om te voorkomen dat vuil onnodige storingen veroorzaakt.

Veiligheid staat centraal

- > Naast een uniek verlichtingssysteem is de Orion® METRO uitgerust met een elektronische snelheidsreductie welke in bochten de snelheid automatisch vermindert. Dit zorgt voor veilige, comfortabele manoeuvres op ieder moment. Daarnaast voorkomt de twee-staps motorontkoppelingshendel onbedoeld wegvallen van de aandrijving. Deze kenmerken - gecombineerd met uitgebreide onafhankelijke laboratoriumtesten van de Duitse TÜV - maken dat veiligheid voorop staat bij de Invacare Orion® METRO.



Kenmerken en opties



Instelbare stuurkolom

Gebruikers kunnen de stuurkolom eenvoudig afstellen op de gewenste positie.



Ergonomisch stuur

Het ergonomisch ontworpen stuur zorgt voor een eenvoudigere en toegankelijke controle over het stuur.



Motorontkoppelingshendel

De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Automatische snelheidsreductie

Automatische snelheidsreductie vermindert de snelheid in bochten voor extra veiligheid.



Handrem

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



Remlicht

Duidelijke, heldere remverlichting waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.



Zijspiegels

Verhoog de veiligheid door uw zichtbaarheid achter u te verbeteren.



Afgesloten box

Deze afsluitbare box is beschikbaar voor zowel de voor- als achterkant van de scooter en stellen u in staat uw eigendommen veilig te vervoeren.



Open mand

Ideaal voor het dragen van uw boodschappen. Deze mand is stevig bevestigd aan de achterkant van uw scooter.



Stokhouder





Dit houdt uw stok stabiel en veilig tijdens de rit.





Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

				
	Breedte rugleuning ▼	Zitdiepte ▼	Zitting naar vloerhoogte ▼	Hoogte rugleuning ▼
Orion® METRO	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm


				
	Totale breedte ▼	Totale lengte ▼	Leeg gewicht ▼	Het zwaarste deel ▼
Orion® METRO	660 mm	1240 mm	110 kg	57 kg

				
	Max. gebruikersgewicht ▼	Accu capaciteit ▼	Draaicirkel ▼	Obstakelhoogte ▼
Orion® METRO	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm	80 mm

					
	Bodemspeling ▼	Max. veiligheids-helling ▼	Motor capaciteit ▼	Max. rijafstand ▼	Max. rij snelheid ▼
Orion® METRO	78 mm	10 °	10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 12 km/h: 550 W / 1500 W ¹	42 km	10 of 12 km/h

1. Piekvermogen

Frame kleuren

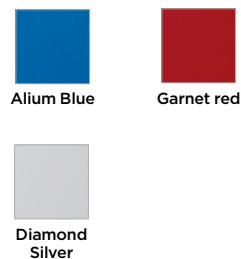

Bekleding



Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®