

Orion[®] Metro



En perfekt blandning av komfort,
säkerhet och tillförlitlighet



Oavsett om du tycker om att träffa dina vänner över en bit mat eller om du bara tar en kort tur till affären är **Orion Metro** det perfekta valet för att ta dig dit.

Den nya, ergonomiskt utformade **Orion Metro** har designats med fokus på aspekter som är viktiga för både nya och mer erfarna användare av scooter. Resultatet är en scooter utrustad med ett stort antal funktioner för att säkerställa upplevelsen av en säker, enkel och trevlig resa.

Orion Metro är den perfekta blandningen av komfort, säkerhet och pålitlighet!



Pålitlig och driftsäker

Fjädringssystemet på **Orion METRO** har utformats för att ge dig en komfortabel åktur oavsett underlag, så att du kan slappna av och njuta av en pålitlig färd med skön komfort. Motorn är kraftfull och i kombination med de pneumatiska 11"-däcken, tar den dig smidigt och säkert över olika hinder eller ojämna underlag.

Säkerhet som standard

Förutom det unika belysningsystemet, är **Orion METRO** utrustad med hastighetsreducering som automatiskt minskar hastigheten i svängar vilket ger ökad säkerhet. Dessutom förhindrar en två-stegs frikopplingsspak scootern från att rulla fritt om den ofrivilligt frikopplas. Dessa egenskaper, i kombination med omfattande tester av det oberoende TÜV laboratoriet ser till att säkerheten kommer som standard med Invacare **Orion METRO**.

Enkelheten

Det är enkelt att ta bort batterikåpan, vilket ger en snabb åtkomst till batterier, elektronik, motor och kablage vid en eventuell service.

Drivenheten och elektroniken är skyddade mot vattenstänk vilket garanterar en god funktion av scootern, då de skyddas mot smuts och väta och på så sätt förhindras att onödiga tekniska fel behöver uppstå.



Egenskaper och Tillbehör



Trehjulig Orion METRO



Fyrhjulig Orion METRO



Styrstångens vinkel

Kan justeras steglöst för att passa individuella behov.



Ergonomisk utformade handtag

Motverkar uttröttning av armar och händer under längre åkturen.



Handbroms

Försäkrar omedelbar inbromsning om det krävs.



Bromsljus

Bromsljuset aktiveras då gasreglaget släpps och varnar bakomvarande att scootern saktar in.




2-stegs frikopplingspak

Denna säkerhetsåtgärd förhindrar att scootern ofrivilligt frikopplas.



Automatisk hastighetsreducering

Hastigheten reduceras automatiskt då man svänger.

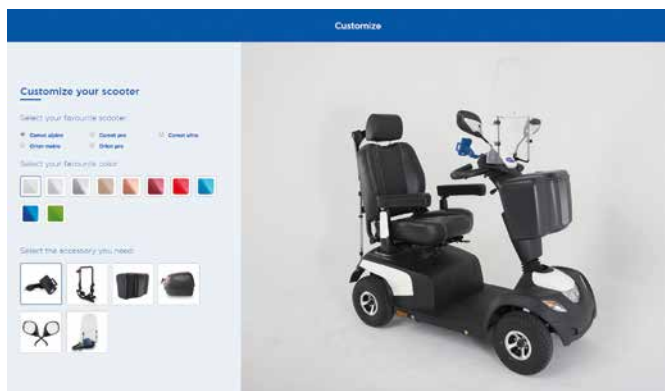

Skräddarsy din scooter med kåpor och tillbehör

Välj mellan 10 olika färger på kåpan och över 25 olika tillbehör för att skräddarsy din scooter till din individuella stil. Vill du veta mer, besök www.invacarescooter.com

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Hjulbas	Totallängd	Vikt
3-hjulig	510 mm	Comfort och Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1240 mm	103 kg
4-hjulig	510 mm	Comfort och Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Tyngsta del	Max brukarvikt	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Markfrigång	Max säker lutning
3-hjulig	52 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2250 mm	80 mm	78 mm	10°
4-hjulig	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm	80 mm	78 mm	10°

	Körsträcka	Hastighet	Motoreffekt
3-hjulig	54 km	10 km/h	10 km/h: 240 W / 600 W ¹
4-hjulig	54 km	6 / 10 km/h	6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 10 km/h: 240 W / 600 W ¹

1. Maxeffekt

Färger



Klädsel

Svart

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

