

rea

Dahlia[®]



Le fauteuil multi-positions
compact et maniable

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

L'*Invacare*® **Rea Dahlia**, avec sa faible largeur totale et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

Le **Dahlia** dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, 30° ou 45°, et d'une inclinaison de dossier de 30° ce qui augmente les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de pression.

Un transfert de poids tout en douceur

La bascule d'assise à 45° permet un soulagement important des zones de pression les plus vulnérables de l'utilisateur. La conception unique du mécanisme d'inclinaison permet de basculer l'assise en douceur, nécessitant peu de force musculaire pour la tierce-personne.



Un fauteuil au service de la mobilité

Le **Dahlia** équipé de la bascule d'assise à 30° est adapté aux utilisateurs plus actifs qui ont, notamment, la capacité de se propulser. La hauteur d'assise peut être réduite à 32,5 cm pour ainsi permettre à l'utilisateur de se déplacer par traction podale. En option, l'utilisateur peut avoir accès à la manette d'inclinaison d'assise limitée à 10° pour gérer de manière autonome sa position.



Dahlia 30° avec hauteur d'assise à partir de 32,5 cm pour permettre la traction podale.



Dahlia 30° avec auto inclinaison d'assise pour l'utilisateur qui peut changer de position de manière autonome.



Dahlia 45° pour un transfert des points de pression optimal.



Le DSS avec point de pivot haut pour le dossier réduit les frictions au minimum pendant le réglage du dossier.

Caractéristiques importantes et avantages



◀ Les nombreux avantages du Dahlia 30 et 45

- Facile à manoeuvrer par l'utilisateur grâce à des roues arrière positionnées au plus près de l'utilisateur
- Largeur totale réduite
- Des mouvements légers et une inclinaison souple
- Nombreux éléments compatibles avec les fauteuils Rea
- Des sièges standards ou des sièges sur mesure sont possibles



◀ Matrx

Les dossiers **Matrx**® peuvent être choisis en option. Ces dossiers offrent au corps un support stable et solide. Le **Matrx® Elite Deep** est doté de pelotes latérales intégrées et le **Matrx® Elite** a un contour léger qui permet plus de mouvement.



◀ Dual Stability System (DSS)

- Le système DSS assure la stabilité du fauteuil dans toutes les positions de bascule d'assise
- Facile à pivoter - grâce à une position active des roues arrière
- Le point de pivot haut sur le dossier réduit les frictions au minimum pendant l'inclinaison

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Hauteur du dossier ▼



Hauteur des accoudoirs ▼



UL ▼



Bascule d'assise ▼



Inclinaison de dossier ▼

**Rea
Dahlia**

390-440/
440-490/
490-540

16" (390-490/
440-540/490-
590 mm)

430 - 500 mm

30° :
330 - 500 mm

45° :
350 - 500 mm

500 - 800 mm
(sans coussin
d'assise)

250 - 320 mm

330 - 667 mm

30°: -1 - 30°
45°: 0 - 45°

0° - 30°



Largeur hors-tout ▼



Hauteur hors-tout ▼



Longueur hors-tout avec potence ▼



Poids du fauteuil ▼



Poids max. utilisateur ▼



Poids de transport ▼



Rayon de giration ▼



Crash-testé ▼

**Rea
Dahlia**

Largeur d'assise + 160 mm (16")

Largeur d'assise + 180 mm (24")

30°: 825 - 1250 mm
45°: 850 - 1250 mm

900 - 1195 mm

>35kg¹

Max 135 kg

21/25 kg (Largeur d'assise 390 mm)²

755 mm

ISO 7176-19



Pente max. d'utilisation de freins de stationnement ▼

**Rea
Dahlia**

7°

1. Poids total en largeur d'assise 39 cm et dans la configuration la plus légère. L'option bascules électriques ajoute 4,2 kg au poids de transport.
2. L'option bascules électriques ajoute 4,2 kg au poids de transport.



Coloris de châssis ▼

Coloris de la bande réfléchissante ▼

Revêtement du siège ▼



Noir




Argent




Bleu



Champagne

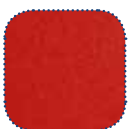

Rouge

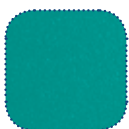

Vert pétrole



Dartex noir TR26



Plush noir TR35



Spacer noir TR36

Rea, Rea Design et DSS Design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Dahlia est conçu avec le DSS. Il fournit à l'utilisateur stabilité et sécurité lors de l'inclinaison d'assise ou de dossier.

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare S.A.
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgium



Scan here to view our Rea Dahlia video



Scan here to access the website.



Yes, you can.®



© 2019 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit. Rea Dahlia - BE-FR - 10/2019