

rea[®]

Dahlia[®]



La nuova carrozzina basculante
altamente maneggevole e compatta



Yes, you can.

Invacare **Rea Dahlia** ha tutto: un design moderno e compatto, opzioni di basculamento e facilità ineguagliabile di regolazione. Per chi cerca mobilità e comfort in combinazione all' alleggerimento e distribuzioni delle pressioni, questa carrozzina versatile è perfetta sia per utenti con necessità di supporto completo che per utenti con una buona partecipazione attiva.

Dahlia offre due angolazioni per il basculamento, 30° o 45°, che migliorano le possibilità di posizionamento poiché in combinazione con la funzione della reclinazione fino a 30° riducono e ridistribuiscono lo scarico delle pressioni. È inoltre dotata del Component Cross-Compatibility (CCC) l'intercambiabilità dei componenti all'interno dell'intera gamma di prodotti Rea, incluso il sistema di seduta **Flex3**.

Facile ridistribuzione dei pesi

La versione con il basculamento fino a 45° garantisce eccellenti proprietà di scarico della pressione, proteggendo le aree più vulnerabili dell'utente.

L'esclusiva struttura del meccanismo di basculamento lo rende leggero da azionare, richiedendo poca forza per il funzionamento.



Una carrozzina ideale per la propulsione con i piedi

La versione con il basculamento a 30° è più adatta agli utenti con maggiore autonomia, che riescono a spingersi facilmente. L'altezza del sedile può arrivare fino a 32,5 cm, consentendo la possibilità della propulsione con i piedi. Con la versione a basculamento autonomo, gli utenti possono cambiare postura attivamente e con grande facilità, ogni volta che lo desiderano.



Dahlia 30° per la propulsione con i piedi, con altezza della seduta da 330 a 500 mm.



Dahlia 30° con basculamento autonomo per l'utente in grado di cambiare postura attivamente.



Dahlia 45° per un ottimale scarico delle pressioni specialmente nell'area posteriore dell'utente



Il sistema brevettato DSS, con il punto di giunzione dello schienale al livello del trocantere, riduce al minimo lo scivolamento durante la reclinazione

Caratteristiche chiave e benefici

◀ Benefici per entrambe, Dahlia 30 e 45

- Facile da manovrare, con le ruote posteriori molto più vicine al corpo per una facile spinta
- Larghezza complessiva estremamente ridotta – ingombro minimo
- Funzionamento semplice, con movimenti leggeri e basculamento fluido
- Compatibilità tra componenti (Component Cross-Compatibility) con la gamma Invacare Rea
- Sistemi di seduta completi o con possibilità di personalizzazioni su misura



◀ Dahlia Base **NOVITÀ**

La carrozzina posturale compatta Dahlia Base, dotata di un sistema di basculamento fino a 45°, offre un equilibrio ideale tra comfort, stabilità e maneggevolezza. Dahlia Base rappresenta una soluzione molto versatile per gli utilizzatori e per i professionisti della riabilitazione, poiché può essere configurata in modo altamente personalizzato, creando una soluzione su misura adattabile a specifiche necessità cliniche e posturali.




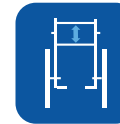



◀ Dual Stability System (DSS)




- Dual Stability System (DSS) che mantiene la massima stabilità della carrozzina in ogni posizione di basculamento
- Facile da sterzare grazie alle ruote posteriori che bilanciano il baricentro
- Grazie al punto di snodo dello schienale in linea con il trocantere, si riduce al minimo lo scivolamento durante la reclinazione



Dati tecnici ▼

Per informazioni più dettagliate pre-vendita su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, si prega di consultare il sito web Invacare locale.

								
	Larghezza seduta ▼	Profondità seduta ▼	Altezza seduta ▼	Altezza dello schienale ▼	Altezza braccioli ▼	Lunghezza gambe ▼	Angolo basculamento ▼	Angolo reclinazione ▼
Rea Dahlia	390-440/ 440-490/ 490-540 16" (390-490/ 440-540/490-590 mm)	430 - 500 mm	30° : 330 - 500 mm 45° : 350 - 500 mm	500 - 800 mm (senza cuscino seduta)	250 - 320 mm	330 - 667 mm	30°: -1 - 30° 45°: 0 - 45°	0° - 30°

								
	Ingombro totale laterale ▼	Altezza totale ▼	Profondità totale incluso poggiatesta ▼	Peso totale ▼	Peso massimo utente ▼	Peso per il trasporto ▼	Radius ▼	Crash-tested ▼
Rea Dahlia	larghezza seduta + 160 mm (16") larghezza seduta + 180 mm (24")	30°: 825 - 1250 mm 45°: 850 - 1250 mm	900 - 1195 mm	>35kg ¹	Max 135 kg	21/25 kg (larghezza seduta 390 mm) ²	755 mm	ISO 7176-19



Pendenza massima per l'uso del freno di stazionamento ▼

7°

Rea Dahlia

Per opzioni e accessori, consultare la brochure "Accessori Rea".

1. Peso totale con larghezza seduta da 39 cm e configurazione più leggera. L'opzione di basculamento e reclinazioni elettriche aggiunge 4,2 kg al peso per il trasporto.
2. Il peso per il trasporto aumenta di 4,2 kg se si utilizza l'opzione del basculamento e reclinazioni elettriche.




Colore telaio ▼

Colore fascia riflettente ▼

Tipo di tela ▼



Nero

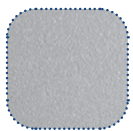

Argento



Blu



Champagne




Rosso



Verde



Dartex/
grigio scuro
TR26

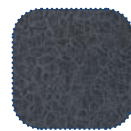

Felpato nero
TR35



Black spacer
TR36

Rea, il design Rea e il design DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati di Invacare International. La Rea Azalea è progettata con il DSS (Dual Stability System), che offre all'utente maggiore stabilità e sicurezza durante il basculamento o la reclinazione dello schienale.



Scansiona qui per vedere il nostro video su Rea Dahlia



Scansiona qui per accedere al sito web.

Tel.: +39 0445 380059
italia@invacare.com
www.invacare.it

Invacare Mecc San srl
Via M. Corner, 19
36016 THIENE (VI)
Italy



© 2025 Invacare International GmbH. Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni citate sono ritenute corrette al momento della stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. IT 12/25

Yes, you can.®