

Storm[®] 4



Snygg och flexibel
mobilitet för alla tillfällen

LINX[®]



Invacare Storm⁴ har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion och möjlighet att konfigurera samt anpassa.

Storm⁴ har inte enbart en imponerande förmåga att ta sig fram utomhus då den erbjuder en säker och stabil körupplevelse. Inomhus kompromissar man inte med manövrerbarheten. Den moderna designen gör elrullstolen elegant och stilfull.

- **Mycket konfigurerbar**
- **Enkel att använda, enkel att hantera**
- **Stilfull design**
- **Simply Smart LiNX kontrollsystem**



Mycket konfigurerbar

Tack vare sitt modulkoncept kan *Invacare Storm⁴* uppfylla en mängd olika krav. Motorns modell och hastighet väljs beroende på var stolen skall användas. Ett stort urval av ryggstödsmodeller är tillgängligt till Modulate™ -sitsen vilket ger möjlighet att hitta bästa tänkbara sittställning. Möjligt att välja sits- och ryggstödsbredd över ett större intervall. Teleskopfunktionen på sitslyften möjliggör en sitthöjd på 40 cm som bl a underlättar då man t ex skall in mot ett bord.

Enkel att hantera

Storm⁴ har utvecklats med enkel hantering i åtanke. Exempelvis är batterierna mycket enkla att ta bort och elektroniken är lättillgänglig för snabb och problemfri service.

Stilfull design

Den moderna designen framhäver den solida konstruktionen och de goda köregenskaperna hos **Storm⁴**. Med moderna LED lyktor som tillval får Storm4 ett elegant utseende. De främre länkhjulsarmarna kan erbjudas med applikationer i olika utformning på sidorna som matchar färgen på kåporna som finns i olika nyanser.

Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid. Med enkel access till statistik och diagnosinformation, ger LiNX en transparens för den som skall arbeta med produkten.



Modern pekskärmsteknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens fysiska och kognitiva förmåga.



Alternativa styrningar

Ett brett urval av alternativa styrningar är framtaget till LiNX. För dem som inte kan använda sig av standardmanöverenheterna. Allt för att underlätta kontroll och oberoende. Joystick Compact, Low Force, Extremity, hakstyrningsbox eller en vårdarstyrningsbox finns bland annat i urvalet.

Egenskaper och tillbehör

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A vilket gör att enheterna behåller sin batterikapacitet längre. Kan monteras i sidoskenan för att enklare nås.



Bluetooth

Manöverboxen REM400 tillåter användaren att ansluta till tre olika enheter samtidigt, inklusive PC.

LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen unik riktningstabilitet och förbättrade köregenskaper



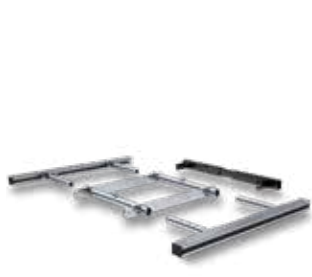
Låg sitthöjd

Med den låga sitthöjden på 40 cm (med sitslyft som tillval) kommer man lättare under bordskanten samt i och ur bilen.



Sits-tilt

Manuell eller elektrisk tilt på maximalt 25° ger möjlighet till ett bekvämt och tryckavlastat sittande.



Modulite™ teleskoperande sitsram

Grunden består av en teleskoperande sitsram inkl monteringskena som möjliggör enkel placering av armstöd och tillbehör.



Uppfällbara armstöd

Uppfällbara armstöd till Modulite-sitsen. Underlättar i- och urstigning ur stolen.



El-rygg

El-ryggen har en hög ledpunkt för en naturlig rörelse. Kan eftermonteras.



Stilfull design

Modern och attraktiv design. Chassikåpor och detaljer i många nyanser. Det går lätt att ändra utseende.



Sidoskenor

Sidoskenor sitter monterade på vardera sida i den teleskoperande sitsramen. För montering av tillbehör



Lättåtkomlig

All elektronik, som kablar och kontakter, är lättåtkomliga för service och snabbt och problemfritt underhåll.





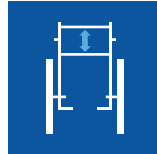


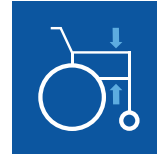

LED belysning




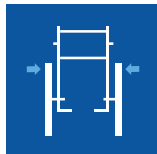



Attraktiva LED lampor med starkt, klart sken gör turen säker.










Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Ryggstödshöjd	Totalhöjd	Intervall ryggstödsvinkel	Intervall armstödshöjd	Vikt
Module™	 380 - 530 mm	 410 - 510 mm	 480, 540, 560 mm ^{1,10}	 1020 - 1190 mm	 90 - 120°	 275 - 340/ 325 - 390 mm ¹⁰ 245 - 310/ 295 - 360 mm ¹¹	 174 kg ³

	Sitthöjd	Underbenslängd	Sitsvinkel	Hjulbas	Längd inkl. benstöd	Längd exkl. benstöd	Max brukarvikt
Invacare Storm™	 400 - 650 mm ⁴ 450 / 480 mm utan elektrisk sitslyft	 290 - 460 mm ⁵	 0° - 25° ⁹	 630 mm	 1190 mm ⁷	 910 mm	 150 kg

	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Max säker lutning	Motoreffekt	Hastighet	Körsträcka
Invacare Storm™	 73.5 Ah	 1770 mm	 60 / 100 mm	 20% (11.3°) 15% (8°) med lyft	 340 W	 6 / 10 km/h	 upp till 36 km ⁸









- Mätt från sitsplatta
- Manuellt ställbar
- Genomsnittligt värde, kan variera mellan olika konfigurationer
- Mätt från golv till sitsplatta utan sittedyna
- Mätt från fotplatta till sitsplatta
- Ytterligare 50 mm med armstöden
- Med benstöden i största vinkeln

- I enlighet med ISO 7176-4 med 6 km/h och 73.5 Ah batterier; körsträckan kan variera beroende på en mängd faktorer. (batteristorlek, hastighet, temperatur etc.).
- Med el-tilt. Manuellt ställbar 0-9°
- Beroende på val av ryggstöd
- Med sitsplatta "one-piece"
- Med teleskoperande sitsram

- Invacare **Module™** är korskompatibel med stora delar av Invacares sortiment av elrullstolar samt delvis med Invacare **Rea™**-sortimentet.

Färg kåpa och etiketter

Blå	Svart	Champagne	Röd	Vit	Grön
					

Kom ihåg att du kan anpassa din **Storm™** med hjälp av tjänsten Invacare UNIQUE.

Annan RAL-färg finns som ytterligare tillval till en ökad kostnad och med längre leveranstid.

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
 sweden@invacare.com | Sweden
 www.invacare.se

