



Invacare®

Storm^{®4} X-plore

Tout simplement le meilleur
tout-terrain !

LiNX[®]



En conservant tous les avantages du fauteuil *Invacare Storm⁴*, le **Storm⁴ X-plore** est également doté de quatre suspensions réglables individuellement, permettant d'absorber les chocs et d'apporter de meilleures performances quel que soit le terrain. Le choix des pneumatiques améliore le confort de conduite en extérieur.

Le **Storm⁴ X-plore** est tout simplement le meilleur tout-terrain. Ses principales caractéristiques sont :

- **4 Suspensions réglables**
- **La version Tout-terrain**
- **L'électronique LiNX, simplement intelligente**



4 Suspensions réglables

Quatre suspensions réglables individuellement avec amortisseurs intégrés garantissent plus de confort et une traction supérieure sur des terrains accidentés. A l'extérieur, les pneus à aire améliorent encore plus le confort.

La version Tout-terrain !

Comme l'*Invacare Storm⁴*, le **Storm⁴ X-plore** se caractérise par sa facilité d'utilisation.

Les batteries et composants électriques sont accessibles afin de faciliter l'entretien. La largeur du siège **Modulite™** peut être réglée de 380 à 530 mm.

Technologie intelligente LiNX : Mobilité redéfinie

Invacare LiNX est notre système électronique pour fauteuil roulant électrique. Il intègre des technologies de pointe qui apportent une expérience de conduite révolutionnaire à l'utilisateur.

Cette nouvelle électronique permet aux professionnels de santé d'ajuster la programmation du fauteuil en toute simplicité et en temps réel pendant la conduite grâce à une connexion sans fil. **LiNX** inclut des fonctions de diagnostics et l'accès à de nombreuses statistiques, ce qui facilite la maintenance du fauteuil.



Technologie avec écran tactile

Le manipulateur REM400 intègre un inédit écran couleur 3,5" tactile qui requiert une force minimale pour être utilisé. Premier manipulateur sur le marché du fauteuil roulant électrique à utiliser cette technologie moderne, l'écran et l'interface du REM400 peuvent être configuré pour répondre aux capacités physiques et cognitives de l'utilisateur.



Joysticks externes

LiNX offre une large gamme de joysticks externes pour les utilisateurs ne pouvant utiliser un joystick standard, ce qui leur permet d'avoir un meilleur contrôle du fauteuil et plus d'indépendance. Cette gamme inclut notamment un joystick Compact, un joystick Compact Low Force, un joystick pour une conduite au menton et des solutions de double commande.

Caractéristiques et options

Chargeur USB

Inclut 2 prises de charge USB 2.0 d'une intensité de 1A chacune pour permettre de charger ses équipements électroniques. Montées sur le rail d'assise, elles sont facilement accessibles.



Contrôle total

Pour ceux qui ont des besoins de contrôle plus importants, le **G-trac**® (optionnel) améliore le contrôle et les performances de conduite et assure que la direction demandée soit suivie par le fauteuil.



Bluetooth de série

Le manipulateur REM400 permet à l'utilisateur de se connecter jusqu'à 3 appareils en simultané et de profiter d'une fonction d'émulation souris.



Éclairage par LED

Design attractif, forte luminosité orientable, pour une sécurité optimale.




Choix de coloris

Personnalisez le coloris de votre **Storm⁴** parmi six coloris de carénages et d'autocollants. D'autres coloris sont disponibles grâce au service Invacare Unique.



Maintenance

L'accès à l'électronique et aux batteries se fait facilement et sans outils pour une maintenance simple et rapide.

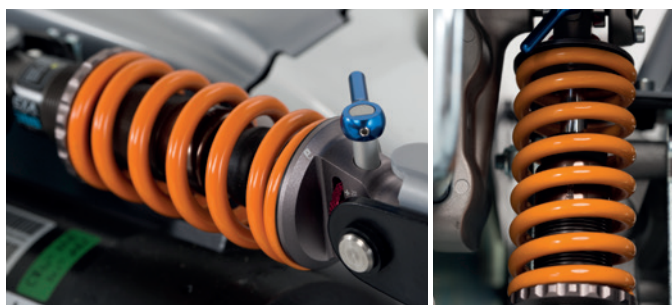

Suspensions

Les suspensions avant du **Storm⁴ X-plore** sont réglables selon les besoins de l'utilisateur, et les suspensions arrière ont été conçues pour absorber les aspérités des sols, mêmes les plus irréguliers.



Bascule d'assise jusqu'à 25°

L'inclinaison manuelle ou électrique jusqu'à 25° est suffisante pour procurer une position confortable et une bonne prévention des escarres.



Bascule de dossier jusqu'à 30°

La bascule de dossier possède un point de pivot pour une sensation plus naturelle et minimiser les forces de cisaillement.



Le lift à colonne

Le lift à colonne offre une amplitude de levage de 250 mm. Stable et sécurisant, sans risque de pincement.



L'assise Modulite™

Les composants **Invacare Modulite** sont compatibles avec notre gamme de fauteuils électriques.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur de dossier	Hauteur	Inclinaison du dossier	Hauteur d'accoudoirs	Poids du fauteuil
Modulite™	380 - 530 mm ⁶	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm ^{1,10}	1020 - 1190 mm	90 - 120°	275 - 340 / 325 - 390 mm ¹¹ 245 - 310 / 295 - 360 mm ¹²	174 kg ³
Recaro	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	770 - 830 mm ¹	1300 mm	90 - 135°	250 - 340 / 290 - 380 mm	174 kg ³

	Hauteur sol/ siège	Longueur UL	Inclinaison de l'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Longueur sans repose-jambes	Poids max. utilisateur
Invacare Storm⁴ X-plore	440 - 690 mm ⁴ 450 / 480 mm sans lift	290 - 460 mm ⁵	0° - 25° ⁹	630 mm (Base motrice)	1190 mm ⁷	910 mm	150 kg

	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement	Pente max. sécurité	Puissance des moteurs	Vitesse	Autonomie
Invacare Storm⁴ X-plore	73.5 Ah	1770 mm	60 / 100 mm	Jusqu'à 20% (11.3°)	340 W	6 / 10 km/h	Jusqu'à 42 km ⁸



- Mesuré à partir de la plaque d'assise
- Réglable manuellement
- Dépend de la configuration
- Du sol à la plaque d'assise, sans coussin d'assise
- Mesuré à partir de la palette à la plaque d'assise
- + 50mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs
- Repose-jambe relevé au maximum
- Conforme à la norme ISO 7176-4 @6 km/h
- Electrique; réglable manuellement 0-9°
- Dépend du dossier choisi
- Avec plaque d'assise en une pièce
- Avec cadre d'assise télescopique
- Les composants de l'assise **Modulite™** sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils Invacare Rea[®].

Coloris standard

Blue (RAL 5026) Black (RAL 9005) Champagne (O314) Transparent Red (O200) White (RAL 9016) Olive Green (RAL 6003)



Personnalisez votre **Storm⁴** grâce au service Invacare[®] Unique !

Autres couleurs RAL sont disponibles avec un supplément de prix et des délais de livraison plus longs.

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Trusted Solutions,
Passionate People

