

VICAIR®

02

Vicair® O2 Sittdynor



Den optimala lösningen för
tryckavlastning och positionering



Yes, you can.®

Vicair® O2 Sittdynor

Vicair O2 sittdynor ger optimal kombination av tryckavlastning, hög kvalitet och stabil positionering för brukare i medel och hög risk att utveckla trycksår.

Sittdynorna som är kliniskt testade, kan anpassas individuellt och kräver nästan inget underhåll. Sittdynorna behöver ingen daglig kontroll och är därför enkla att använda både för brukare och vårdare. Vikten på sittdynorna är otroligt låg med ett genomsnitt på mindre än 750 gram.



Unik design

I **Vicair O2 sittdynor** används **Vicair Technology™**, en unik och innovativ metod som ger dynamisk yta och stöd. Sittdynorna innehåller flera hundra små tetraformade luftfyllda celler, **SmartCells**, med mycket låg friktion och rundade hörn. Cellerna glider därför lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen. Resultatet ger en optimal kombination av tryckavlastning, stöd och stabilitet. Sittdynorna är indelade i flera sektioner med olika fyllningsgrad för att minimera tryck och skjuvning.

Optimal positionering och tryckavlastning

Vicair O2 sittdynor är kliniskt testade med mycket bra resultat. Sittdynorna kan användas för att förebygga trycksår och för brukare i medel och hög risk. Dynorna kan användas för att understödja behandling av trycksår kategori 1-4. Sittdynorna ger en hög grad av stabilitet, något som innebär komfort och rörelsefrihet för brukaren.

Många möjligheter

Det finns en mängd behov vid sittande. Sittdynorna skall vara tryckavlastande samtidigt som det finns behov av positionering. Det kan vara att korrigerar felställningar eller för att förebygga att inte nya uppstår. För att täcka de flesta behoven finns **Vicair** i flera olika modeller. **Active O2***, **Vector O2**, **Vector Junior O2** finns i höjderna 6 och 9/10/12* cm. Alla **Vicair sittdynor** kan justeras individuellt.

SmartCells



SmartCells

Tunt och följsamt material i en ny färg, med rundade hörn för ökad komfort. Cellerna är tvättbara i tvättmaskin 60°.



Standarddynor



Vicair Active O2

En kombination av Vicairs teknologi tillsammans med skum. Den främre sektionen är uppbyggd av ett ergonomiskt format skum för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Skummet skyddas av ett avtagbart hygienöverdrag. Den bakre delen består av 4 sektioner med påsar fyllda med Smartcells. Dynan är uppbyggd av ett luftgenomsläppligt material och hela dynan exkl. skum går att tvätta i maskin 60°.



Vicair Adjuster O2

Indelad i 5 sektioner för individuella lösningar och för brukare med nedsatt kroppsfunction. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning. Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i maskin 60°.



Vicair Vector O2

Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåttrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåttrotation och motverkar nedglidning. Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i maskin 60°.



Vicair Multifunctional O2 8 cm

Uppbyggd på samma sätt som Adjuster O2 men med något längre sektion baktill för optimal anpassning för djupställbara rullstolar/komfortsitsar.



Vicair Vector Junior O2 6 cm

Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåttrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåttrotation och motverkar nedglidning. Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i maskin 60°.



Adjuster O2 12 cm

Indelad i 6 sektioner för individuella lösningar och för brukare med nedsatt kroppsfunction. Bra justeringsmöjligheter vid **mycket komplexa** positioneringsbehov och optimal tryckavlastning. Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i maskin 60°.



Vicair All-Rounder O2

Ger ökad frihet för brukaren. Utvecklad för att användas utanför rullstolen. Fästs på kroppen så att man enkelt kan ta den med sig.



Vicair Center Relief O2

Specialdesignad sittdyna. Rekommenderas till brukare som genomgått rektal kirurgi eller som har behov av avlastning/smärtlindring i ovanstående område.

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

	Storlek	Vikt	Max brukarvikt	Rengöring ytter- och inneröverdrag
Vicair O2 Dynor	Storlek se schema nedan	0,4-1,2 kg	250 kg	maskintvättas 60°, med Smartcells kvar i dynan
AllRounder	Storlek se schema nedan	0,4-1,2 kg	125 kg	
Active O2	Storlek se schema nedan	0,4-1,2 kg	200 kg	
Vector Junior O2	25x25, 30x30, 35x35	0,4kg	100kg	



Vicair O2 finns i olika specialstorlekar.



Vicair O2 sittdynor finns även för extra tunga brukare upp till 500 kg.

Garanti: 2 år



Överdrag

Alla sittdynorna har ett slitstarkt, sträckbart och komfortabelt överdrag. Finns i standard och som inkontinensöverdrag. Till Vector O2, Adjuster O2 och Active O2 finns ett extra luftgenomsläppligt toppöverdrag.

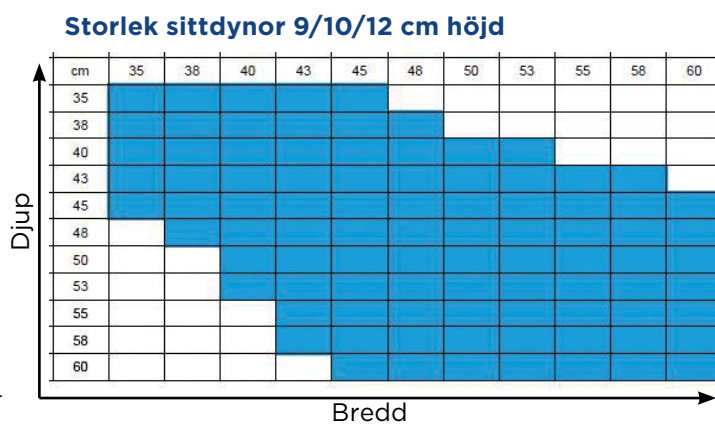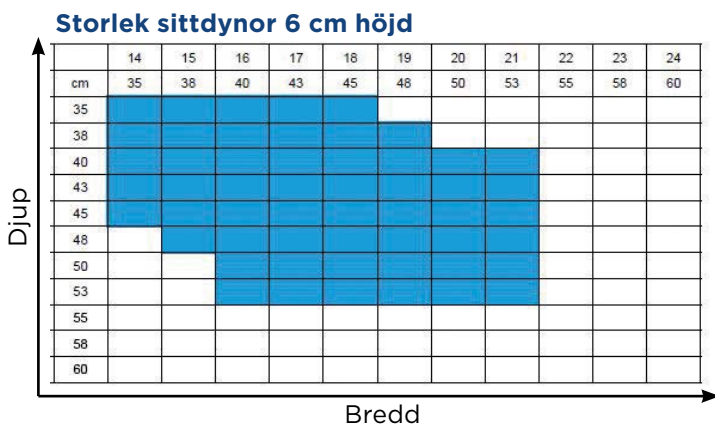

Storlekar på de olika modellerna kan variera. Mer information om tillgängliga storlekar besök www.invacare.se/produkter/dynor/Vicair/dokumentation

Storlek, Höjd

Active O2	Adjuster O2 6/10/12	Vector O2 6/10	Multi- functional O2 8	Vector Junior O2	Allrounder O2	Centre Relief O2
6/9	6/10/12	6/10	8	6	5	10

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

