

NOUVEAU

Nouvelles assises  
**Modulite™**



### Une traction optimale en toutes circonstances !

En intérieur comme en extérieur, aucun compromis pour les Utilisateurs actifs ! Séduisant et puissant, le fauteuil électrique *Invacare FDX* ne laissera pas indifférents les amateurs de roues avant motrices et les futurs adeptes!

La conduite sur roues avant motrices combinée avec la technologie **G-Trac®** offre une excellente maniabilité en intérieur et une parfaite maîtrise de la trajectoire en toutes circonstances, y compris jusqu'à 10 Km/h.

Une version compact (<600 mm de largeur hors-tout) est disponible pour accéder dans les espaces les plus exigus.

Les nouvelles assises **Modulite™** permettent une personnalisation rapide et précise de la largeur et de la profondeur d'assise pour une adéquation parfaite avec les besoins de l'utilisateur. Elles facilitent également les transferts grâce à une réduction de la hauteur d'assise.



**Yes, you can.®**



## Maniabilité

La conception du fauteuil avec roues avant motrices offre d'excellentes performances en termes de manœuvrabilité en intérieur comme en extérieur. Il est possible de choisir des roues avant de plus petites tailles pour obtenir une largeur hors-tout < 600 mm, afin d'accéder aux espaces réduits et étroits (ascenseur, passage de portes, boutiques, restaurants).

## G-Trac® : comme sur des rails !

Le nouveau dispositif **G-trac** opère comme une boussole électronique (Gyroscope) offrant d'excellentes capacités de conduite sans aucun phénomène de Zig-Zag dans les devers et aucune instabilité dans les virages ! **G-trac** procure une sensation de conduite sécurisante, plus confortable et moins fatigante pour l'Utilisateur.

## Vitesse élevée et entretien facile

Le **FDX** peut atteindre une vitesse de 10km/h en toute sécurité, ce qui est une véritable performance pour un fauteuil à roues avant motrices.

De plus, le **FDX** offre un accès facile à l'électronique et aux batteries ce qui rend la maintenance simple et efficace.

## Caractéristiques et options



### Large choix d'assises

Les assises **Easy-Adapt**, **Onyx**, **Recaro** ainsi que les nouvelles assises **Modulite™** sont disponibles sur le fauteuil **FDX**.



### Compact

<600 mm de largeur hors tout uniquement avec des roues de 12.5" par 2 x ¼. Idéal pour faciliter l'accès dans des endroits exigus. Option disponible en version 6 km/h.



### Bras arrière articulés

Le train arrière est doté de suspensions pour absorber les chocs et garantir une bonne traction durant le franchissement d'obstacles.



### Inclinaison d'assise électrique & lift

Le **FDX** est doté d'une élévation électrique de 300 mm (lift), incluant une inclinaison d'assise à translation de 0° à 30°.

## Nouvelles assises Modulite™

NOUVEAU



### ① Dossier réglable en tension avec pochette de rangement


La toile de dossier bimatière est réglable en tension (7 ou 8 sangles selon la hauteur) afin de s'ajuster au mieux à la morphologie de l'utilisateur. Son revêtement micro aéré limite les effets de sudations.

### ② Dossier Rea® Flex3

Le dossier **Flex3** est ajustable en hauteur et en largeur pour permettre une personnalisation du dossier selon la morphologie de l'utilisateur indépendamment de la largeur d'assise.

### ③ Dossier Invacare Matrix®

Les différents types de dossier de Positionnement **Matrix®** offrent aux utilisateurs un positionnement et un confort optimal.

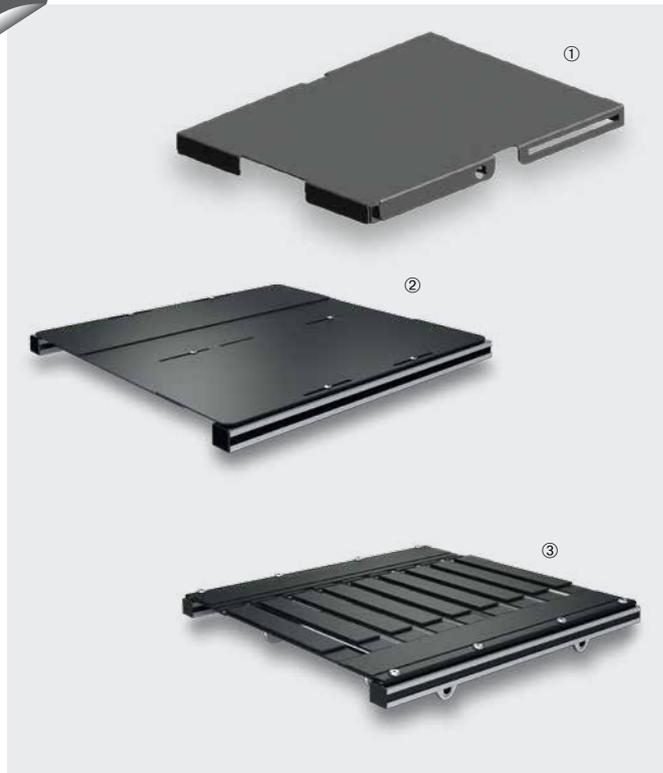

### ① Assise standard

Plaque d'assise standard d'une largeur fixe de 430 mm. Cette assise bénéficie d'une profondeur réglable en continue de 410 mm à 510 mm. Ce réglage peut s'effectuer directement avec l'utilisateur assis sur le fauteuil pour limiter le nombre de transferts.

### ② Assise rigide réglable en largeur et en profondeur

Les 3 plaques qui composent cette assise couvrent la totalité des largeurs (380 à 530 mm) et profondeurs (410 à 510 mm) disponibles.

### ③ Assise souple réglable en tension, en largeur et en profondeur

Equippée de 9 sangles réglables par velcro, la souplesse de cette assise améliore le confort et le positionnement de l'utilisateur au quotidien.



NOUVEAU

### Dossier réglable en angle

Amplitude de 0 à 30°. Ce système est démontable sans outil pour réduire l'encombrement du fauteuil lors du transport.



### Inclinaison de dossier électrique (0 à 30°) rabattable sur l'assise grâce à un inédit système à démontage rapide.


La position du point de pivot du dossier permet une inclinaison à compensation.



NOUVEAU

### Repose-jambes réglables en largeur

+ 25 mm par côté.

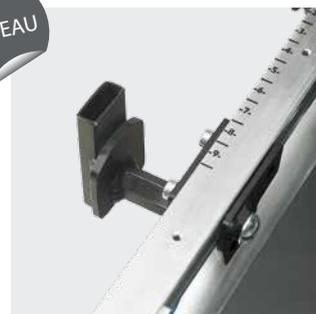

### Accoudoirs réglables en largeur et en profondeur

+ 25 mm par côté.

## Données techniques

<b>Modulite™</b>	380 - 530 mm	410 - 510 mm	0° - 30°	480, 540, 560 mm <sup>8</sup>	970 mm <sup>8</sup>	455 / 470 mm <sup>4</sup>	290 - 360 mm
<b>Easy-Adapt®</b>	390 - 620 mm <sup>1</sup>	410 - 530 mm	0° - 30°	550 mm	1060 mm	465 / 470 / 480 mm <sup>4</sup>	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
<b>Onyx</b>	390 - 620 mm	410 - 530 mm	0° - 30°	500 / 630 mm	1090 / 1220 mm	465 / 470 / 480 mm	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
<b>Recaro</b>	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	0° - 45°	770 - 830 mm	1290 mm <sup>2</sup>	465 / 470 / 480 mm <sup>4</sup>	290 - 380 mm


 595 mm<sup>5</sup>  
640 mm<sup>6</sup>

 290 - 510 mm<sup>7</sup>

 0° / 4° / 8°  
0° - 30°<sup>3</sup>


1250 mm



1070 mm


 140 kg<sup>9</sup>


136 kg



60 Ah (C20)



1400 mm



60 mm



14% (8°)


 2 x 250 W<sup>10</sup>  
2 x 340 W<sup>11</sup>

 32km<sup>12</sup>

 6 km/h  
10 km/h


- 1/** Largeur d'assise réglable, réglages supplémentaires en fonction du type d'accoudoirs choisi.  
**2/** Hauteur incluant l'appui-tête  
**3/** Inclinaison d'assise électrique pour Modulite™  
**4/** Du sol vers la plaque d'assise, sans coussin  
**5/** Taille des roues motrices 12 ½", version 6 km/h  
**6/** Taille des roues motrices 14", version 10 km/h  
**7/** Dépend du type de repose-jambes

- 8/** Dépend du dossier choisi  
**9/** Dépend de la configuration  
**10/** Version 6 km/h  
**11/** Version 10 km/h  
**12/** l'autonomie peut varier de façon importante en fonction de l'utilisation et de l'environnement. Test ISO 7176-4 :2008 partie 4 – tests TUV

## Coloris de châssis



Rouge électrique



Gris Tendance

Invacare Poirier S.A.S.  
 Route de Saint Roch  
 37230 Fondettes - France  
 Tel. : +33 2 47 62 64 66  
 Fax : +33 2 47 42 12 24  
 Email : contactfr@invacare.com  
 www.invacare.fr

© 2013 Invacare International Sàrl  
 Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).  
 Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

FDX - FR - 09/2013 - 1573631



Fabrication spéciale en option: différentes fabrications sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais.  
 Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

