

Action® Ampla™



Onafhankelijkheid voor een actieve levensstijl

VLOT | INNOVATIEF | BEKROOND



Bariatrische rolstoelen naar een hoger niveau

De *Invacare Action® Ampla™* is speciaal ontwikkeld voor Plus-size gebruikers, rekening houdend met hun morfologie, hun activiteitsniveau en hun behoefte aan maximaal ondersteunend gewicht. Maar daar stopt het niet! De slanke en compacte rolstoel, met zijn moderne uitstraling, biedt onafhankelijkheid en ondersteuning voor een comfortabele en actieve levensstijl.



Bekroond

Nu al een bekroonde stoel, de vlotte en stijlvolle *Invacare Action® Ampla™* heeft een Red Dot Award gewonnen voor Product Ontwerp. Deze prijs is niet alleen de grootste productcompetitie in de wereld, maar ook een van de meest prestigieuze ontwerp prijzen. De *Action® Ampla™* heeft ook de Italiaanse Platinum A'Design Award en de Gold German Design Award gewonnen.



reddot design award
winner 2019



5

TOP KENMERKEN



Ingebouwde transportlagers

1

De transportlagers op de **Action® Ampla™** zijn slim ontworpen om het gewicht van de rolstoel te dragen, waardoor deze gemakkelijk door deuropeningen of smalle ruimtes kan:

1. Klap de rugleuning naar beneden
2. Til het beensteungedeelte van de rolstoel op
3. Kantel de rolstoel op de vier zwenkwielen.

In deze positie kan de rolstoel eenvoudig verplaatst worden.

1.



2.



3.



Meerdere actieve achterwielposities

5

- ▶ Zeer makkelijk om voort te sturen
- ▶ Gebruikers kunnen verder gaan, met minder energie



2

Ergonomische rugleuning

- ▶ Maximale toegang tot de hoepels
- ▶ Geen scapulair ongemak tijdens de voortstuwing
- ▶ Meer bewegingsvrijheid
- ▶ Uitzonderlijke rijeigenschappen en manoeuvreerbaarheid



3

Hoogteverstelbare handgrepen

- ▶ Ondersteuning bij het opstaan uit en het gaan neerzitten in de stoel
- ▶ Kan naar binnen of naar buiten worden gedraaid
- ▶ Kan worden verlaagd om met de stoel onder een tafel te kunnen zitten



4

Personaliseerbaar


- ▶ Keuze uit drie stijlvolle kleuren



Innovatief design van de rugleuning



Het design van de rolstoel biedt een perfecte pasvorm aan zowel mannelijke als vrouwelijke Plus-Size gebruikers. Mannelijke Plus-Size gebruikers hebben meer de neiging een "appel" lichaamsvorm te hebben en vrouwelijke Plus-Size gebruikers meer de neiging een "peer" lichaamsvorm. De innovatieve rugleuning op de **Action® Ampla™** is ontworpen om tegemoet te komen aan de anatomie van beide lichaamsvormen en tegelijkertijd ondersteuning en comfort aan de gebruiker te bieden.

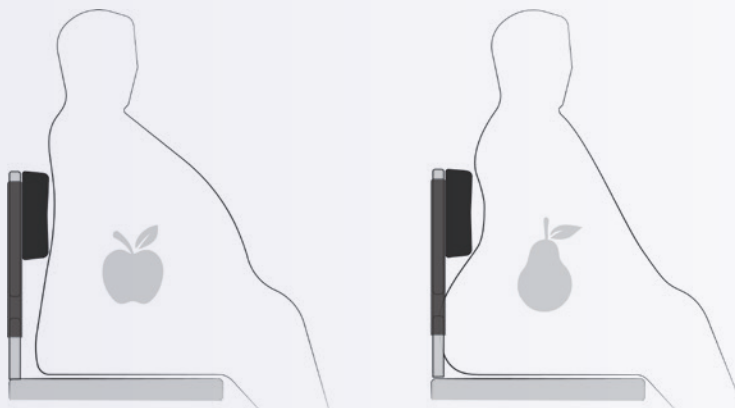

Belangrijkste functies

- ▶ Ingebouwde transportlagers
- ▶ Ergonomische rugleuning
- ▶ Hoogteverstelbare handgrepen
- ▶ Personaliseerbaar
- ▶ Meerdere posities voor de achterwielen

Extra functies


- ▶ Een elastische, ademende privacy hoed verbergt inkijk bij de gluteale regio
- ▶ Push-to-lock-remmen zijn geïntegreerd in de kledingbeschermers voor makkelijke toegankelijkheid

Technische gegevens ▼

Meer informatie over dit product, zoals de gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze website www.invacare.be.

					
Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithoek ▼	Zithoogte ▼	Rughoek ▼	Rughoogte ▼
Action Ampla 505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm	460 / 510 mm	1°	380 - 455 mm in stappen van 25 mm	0°	425 - 500 mm
					
Voorframe hoek ▼	Onderbeen- lengte ▼	Totale breedte ▼	Totale lengte incl. voetsteunen ▼	Totale lengte excl. voetsteunen ▼	Totale hoogte ▼
Action Ampla 90 - 100°	365 - 525 mm in stappen van 25 mm	Zitbreedte + 205 mm	1065 - 1145 mm	855 - 920 mm	825 - 900 mm
					
Max. veiligheidshelling ▼	Radius ▼	Max. gebruikers- gewicht ▼	Totale gewicht ▼	Transportation weight from ▼	
Action Ampla 7°	1420 - 1660 mm	300 kg	27 kg	19.5 kg	

Framekleuren ▼

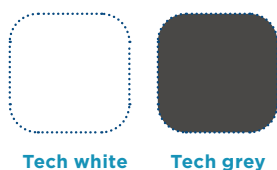

Tech white

Tech grey

Accentkleuren ▼



Blue Pulse

Pink Pulse

Green Pulse

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de kleuren die hier worden weergegeven.

Regelgeving ▼



Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®