

NordBed Kid



Veiligheid en comfort voor
elk kind in elke fase

VEILIG | VERTSELBAAR | COMFORTABEL



NordBed Kid

Een veilig, configureerbaar bed dat meegroeit met het kind

Ons nieuw NordBed Kid is het ideale bed voor thuis- en zorgomgevingen.

Ontworpen om bij het kind te passen

Onze bedden zijn geschikt voor kinderen van 3-12 jaar of 75-154 cm lang. Het bed is verkrijgbaar in drie lengtes met een keuze uit zijpanelen en kan worden geconfigureerd om aan de behoeften van het kind te voldoen.

Opties voor onrusthekkens zijn onder meer vouwbare deuren, inzinkbare en vaste onrusthekkens, in beuken spijlen of plexiglas. De onrusthekkens zijn 40 cm hoog, of 80 cm (enkel bij de opties met vouwbare deuren en vaste onrusthekkens) - zodat u de meest geschikte zijpanelen kunt kiezen voor het kind.

De matrasbodem, met verstelbare rug-, dij- en beensteun, is gebaseerd op antropometrische afmetingen van het kinderlichaam en biedt anatomische ondersteuning en uitzonderlijk comfort.

Beschermende bekleding met hygiënemateriaal is ook beschikbaar - de bekleding wordt met klittenband aan de binnenste zijhekken bevestigd en biedt extra bescherming voor het kind terwijl het op zijn plaats blijft bij het manoeuvreren van de onrusthekkens.

Veiligheid

Bij het design van het bed stond veiligheid voorop. Van het veilige vergrendelingsmechanisme van de vouwbare deuren tot de houder die de handbediening veilig opbergt buiten het bereik van het kind. Bovendien voldoet NordBed Kid aan de nieuwe EU-veiligheidsnorm EN5063: 2017 voor een medisch bed voor kinderen.

Veilige werkomgeving voor de verzorger

Onze NordBed Kid bedden zijn in hoogte verstelbaar van 30 cm (laagste positie) om zelftransfers mogelijk te maken, tot 80 cm voor de verzorger. De centrale rem (optioneel), de neerlaatzijde met centrale ontgrendeling en de volledig elektrisch bediende matrasbodem zijn allemaal ontworpen om een veilige en comfortabele werkomgeving voor de verzorger te garanderen.



Hoofdkenmerken van het NordBed Kid

We bieden
matrassen en
zijn ontworpen
het NordBed
Lees meer info
ons **Daca**

1. Deurvergrendeling

- ▶ Vouwbare deuren hebben een vergrendeling aan de bovenkant, die de verzorger eenvoudig kan bedienen
- ▶ Ontworpen zodat het kind in bed geen risico loopt op letsels

2. Discrete en gebruiksvriendelijke handbediening met veiligheidsloten

- ▶ De belangrijkste knoppen hebben duidelijk herkenbare kleuren
- ▶ Het magnetisch veiligheidsvergrendelingsmechanisme zorgt voor een correct en veilig gebruik door alleen de verzorger



3. Veilige opberging van de handbediening

- ▶ De handbediening kan veilig in de houder worden opgeborgen en aan de onderkant van het bed worden vergrendeld, zodat enkel de verzorger het bed bedient

4. Hoogteverstelbaar

- ▶ Van slechts 30 cm voor zelftransfer voor valide patiënten tot 80 cm werkhoogte voor zorgverleners



Veiligheidsnorm EN50637:2017

Het design voldoet aan de nieuwe EU-veiligheidsnormen voor bedden



Design

Modern, huiselijk design in een lichte en moderne afwerking uit beukenhout



Diverse maten

Verkrijgbaar in kleine, middelgrote en grote lengtes om aan elke lichaamsvorm te voldoen

den ook
die speciaal
orpen voor
ed Kid bed

rmatie omtrent
oo matras.



5. Keuze uit onrusthekkens


- ▶ Dankzij de verscheidene onrusthekkens kunt u het bed aanpassen aan de behoeften van het kind
- ▶ Opties zijn onder meer vouwbare deuren, inzinkbare en vaste onrusthekkens, in beuken spijlen of plexiglas
- ▶ Verkrijgbaar in hoogte-opties van 40 cm en 80 cm

6. Configureerbaar inlegraam


- ▶ De lengte van de delen van het inlegraam is gebaseerd op antropometrische afmetingen van het kinderlichaam en biedt uitzonderlijk comfort

7. Matras profilering

- ▶ Het inlegraam kan worden geconfigureerd zonder profileringsfuncties, een combinatie van manuele rastofix en elektrische handbediening, of volledig elektrisch bediend - om het kind optimaal te ondersteunen

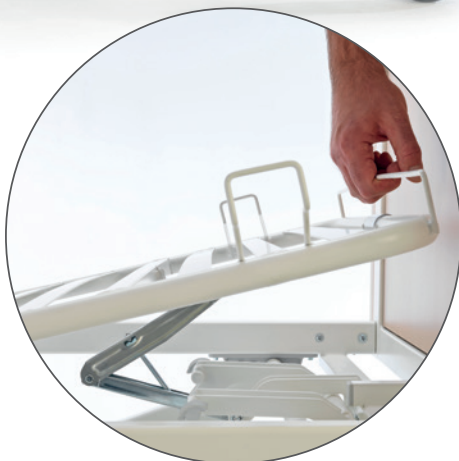

Mogelijke configuraties van het inlegraam

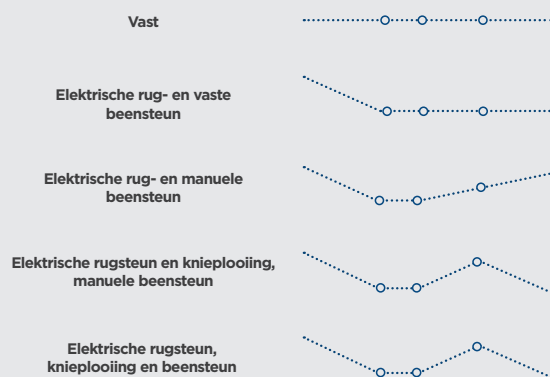

Ontworpen voor comfort en veiligheid

NordBed Kid biedt maximaal comfort en voldoet aan de strenge EU-veiligheidsnormen.

Opties onrusthekkens

NordBed Kid is verkrijgbaar met verschillende onrusthekkens, zodat u het bed kunt aanpassen aan de behoeften van het kind. De onrusthekkens zijn extra sterk en rigide om te voldoen aan de norm EN50637:2017.

De beschikbare opties worden hieronder weergegeven.

Vouwbare deuren

- ▶ Deuren kunnen gedeeltelijk of volledig worden geopend voor gemakkelijke toegang met behoud van de stabiliteit van het bed en de veiligheid van het kind
- ▶ Gebruiksvriendelijke vergrendeling van de bovenste deur, met behoud van de sterkte van de onrusthekkens
- ▶ De grendel is ontworpen om te voorkomen dat het kind in bed blijft haken of ietsels oploopt
- ▶ Verkrijgbaar in een hoogte van 40 cm voor middelgrote en grote bedden en een hoogte van 80 cm voor alle bedden

Inzinkbaar in spijlen

- ▶ Enkel paneel waarbij de zijkant in één beweging wordt verlaagd voor gemakkelijke toegang
- ▶ Dankzij de eenvoudig te gebruiken centrale ontgrendeling kan de verzorger voor het kind blijven staan

- ▶ Enkel verkrijgbaar met een hoogte van 40 cm voor middelgrote en grote bedden

Inzinkbaar in perplex

- ▶ Alternatieve optie voor spijlen
- ▶ Transparant voor maximale zichtbaarheid

Vast

- ▶ Vaste onrusthekkens verkrijgbaar in hoogte-opties van 40 cm en 80 cm

Bekleding

- ▶ Beschermende bekleding met hygiënische hoezen is beschikbaar voor alle onrusthekkens, wat extra bescherming biedt voor het kind en gemoedsrust voor de verzorger
- ▶ Alle onrusthekkens kunnen volledig worden bediend terwijl de bekleding blijft zitten



Technische gegevens ▼


Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Buitenbreedte
Binnenbreedte



Buitenlengte
Binnenlengte ▼

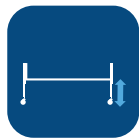


Verstelbare
hoogte ▼



Afmetingen
inlegraam ▼



Grondspeling
onder bed ▼

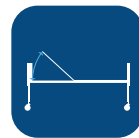

Hoek rugsteun
▼

Small	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
Medium	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
Large	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°



Hoek
knieplooiing ▼



Hoek
beensteun ▼



Max.
gebruikers-
gewicht ▼




Totale gewicht
(zonder
bedframes) ▼



Zwaarste
onderdeel van
het product ▼

Small	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
Medium	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
Large	0-12°	0-30°	70kg	97kg	42kg

Kleur frame en hout ▼

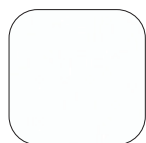

Verkeerswit
RAL: 9016



Beuken (hout)



Getest door TÜV volgens
norm EN50637: 2017

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de hierboven weergegeven kleuren.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®