

NordBed™ Accessoires



Oplossingen voor iedereen!



Voor de Invacare NordBed range is een breed scala aan accessoires beschikbaar die de mogelijkheid bieden om het bed naar behoefte aan te passen. Zo kan een bed worden gecreëerd dat aansluit bij de persoonlijke omgeving en individuele wensen van de cliënt.

Deze brochure toont tevens compatibiliteit van bedden, zijhekken en bedeinden.

Bedeinden

Een moderne range hoofd-/voetenborden met een huiselijke uitstraling voor iedere smaak en voorkeur. Verkrijgbaar in verschillende houtafwerkingen en kleuren. Alle bedeinden zijn eenvoudig afneembaar zonder gereedschap.



Una

Kan in combinatie met volle lengte zijhekken, gedeelde zijhekken of zijpanelen



Una / Una Low

Kan in combinatie met zijpanelen



Nora

Kan in combinatie met volle lengte zijhekken, gedeelde zijhekken of zijpanelen



Nanna

Kan in combinatie met zijpanelen

Bedeinden	Beuken	Eiken	Omber
			
Una bedeinden	✓	✓	✓
Nora bedeinden	✓	✓	✓
Nanna bedeinden	✓	✓	✓

Zijpanelen

Onze range zijpanelen geven een huiselijke uitstraling.



Houten zijpaneel

Kan in combinatie met Una en Nora bedeinden



Houten zijpaneel

Kan in combinatie met Nanna bedeinden

Zijhekken

Zijhekken kunnen om verschillende redenen worden ingezet: voor valpreventie van de cliënt, voor ondersteuning bij het herpositioneren in bed, als transferondersteuning etc.

De Invacare zijhekken kunnen bij deze doelen worden ingezet zonder in te boeten op gezonde werkomstandigheden voor de zorgverlener.



Freya

Zijhek, volle lengte in hout
200 cm, 210 cm en 220 cm



Embla

Zijhek, volle lengte in aluminium
200 cm



Embla verlengbaar

Zijhek, volle lengte in aluminium.
Traploos instelbare lengte 200 -
220 cm



Torill Kort - deelbaar

Instelbaar in 3 hoogtes, 80 cm



Torill Lang - deelbaar

Instelbaar in 3 hoogtes, 97 cm

Zijhekken



Freya zijhek verhoger

Freya zijhekken kunnen worden verhoogd met 6 cm of 10 cm voor veilig gebruik van een hoog matras



Embla zijhek verhoger

Embla zijhekken kunnen worden verhoogd met 6 cm of 10 cm en verlengd naar 200 - 220 cm

Zijhekken	Una	Nora	Nanna
			
Freya	✓	✓	
Embla	✓	✓	
Torill	✓*	✓*	

* Bedeinden zonder geleiderails voor zijhekken over de volle lengte

Zijhek hoezen

Er is een keuze uit 2 soorten zijhek hoezen. De gepolsterde versie wordt gebruikt om te voorkomen dat de cliënt zich verwondt. De net versie voorkomt dat de cliënt met arm of been door de openingen van het zijhek steekt, zonder dat het zicht van de cliënt wordt ontnomen.

Alle hoezen kunnen op de zijhekken blijven als deze omhoog/omlaag gaan.

Alle hoezen kunnen eenvoudig worden verwijderd en zijn te wassen op 90 graden.



Zijhek hoezen gepolsterd

Voor Freya en Embla zijhekken



Zijhek hoezen gepolsterd

Voor Freya en Embla zijhekken met verhoger



Net cover

Voor Freya en Embla zijhekken

Hulpmiddelen voor herpositionering

Onze stabiele handgrepen en mobiliteit accessoires bevorderen de onafhankelijkheid van de cliënt door hem/haar te ondersteunen bij het zichzelf herpositioneren in bed en bij het veilig in en uit bed stappen.



Steungreep

H40 x B30 cm



Steungreep

H40 x B90 cm



Steungreep zwenkbaar

De zwenkbare handgrepen maken het mogelijk om de benen over de grepen heen te zwaaien voordat de greep uitgevouwen wordt. Kan enkel of dubbel worden gebruikt



Sta-op steun

Maakt het in en uit bed komen eenvoudiger



Zit-op steun


Ondersteunt de cliënt bij het goed rechtop zitten en kan ook helpen bij het in en uit bed stappen



Papegaai

Handgreep kan in zowel hoogte als diepte worden aangepast

Overige accessoires

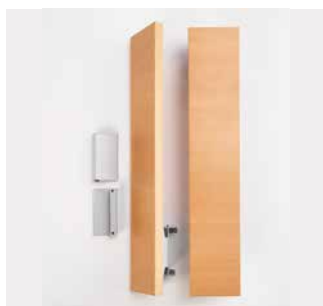

Torill zijhek verlengset



Buisbedekker

Te monteren op het bedframe om de verlenging te bedekken



Handset houder



Stootbumper

Voorkomt dat muren beschadigd raken wanneer het bed verplaatst wordt. Kan eenvoudig op het bedframe gemonteerd worden, zowel aan de zijkant als de korte kant

NB. Ook een uitrolmatras en stootwielen behoren tot de mogelijkheden. Verlengkit +10 cm: beschikbaar op het NordBed Essential

Elektrische accessoires

Er zijn verschillende handbedieningen voor verschillende behoeftes verkrijgbaar voor de NordBed range.



Handbediening voor Optimo en Ultra

Optioneel verkrijgbaar met trend / anti-trendelenburg, alsook verlichting onder bed in optie.



LCD Handbediening

Met RememberMe™ functionaliteit (Optimo en Ultra)



Verlichting onder het bed (optie)

Eenvoudig om het licht aan te zetten, Helpt bij valpreventie



Handbediening voor Essential

De standaard handbediening



Handbediening voor Essential

Verkrijgbaar met anti-trendelenburg en optioneel trendelenburg



LED lamp

Mooi, modern ontwerp, laag energieverbruik (4W). Kan worden vastgemaakt aan de steungreep bracket op alle Invacare bedden in aluminium

Optimo & Ultra																						
Matras hoogte cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm)																						
Embla/Embla Verlengd																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm																						
Torill Lang/Torill Kort																						

Essential																						
Matras hoogte cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm)																						
Embla/Embla Verlengd																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm																						
Torill Lang/Torill Kort																						

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



© 2022 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging. Nordbed Accessoires - BE-NL - 01/2022