

rea[®]

Clematis[®] Pro

Carrozzina basculante innovativa e all'avanguardia



Riduzione delle forze di taglio per un maggior comfort.

Dotata del Dual Stability System



Yes, you can.[®]

Design impareggiabile

La nuova Clematis Pro è stata progettata per ridurre al minimo le forze di taglio, migliorare la distribuzione delle pressioni e massimizzare il comfort.

Clematis Pro si conferma all'avanguardia nel design fra le carrozzine basculanti (tilt-in-space). Una recente ricerca indipendente ha analizzato l'incidenza nell'utilizzo delle carrozzine basculanti sia sulla pressione che sulla circolazione sanguigna. Lo studio ha dimostrato che esiste una relazione significativa tra l'utilizzo simultaneo delle funzioni di inclinazione della seduta (tilt) e di reclinazione. Tale relazione ha un effetto positivo sia sulla circolazione sanguigna che sulla ridistribuzione della pressione.

Dual Stability System

Il nostro sistema di spostamento del peso Dual Stability System garantisce un'eccellente stabilità in ogni posizione di basculamento e reclinazione. I punti di snodo sono posizionati in alto per ridurre al minimo le forze di taglio.

Comfort eccezionale

Scegli tra uno schienale tensionabile e uno schienale con supporto rigido. Entrambi disponibili con il cuscino schienale Laguna per un comfort eccezionale e stabilità posturale.

Design compatto

Il telaio offre una straordinaria manovrabilità anche negli spazi estremamente ristretti. La posizione delle ruote posteriori è stata spostata in avanti per meglio permettere l'accesso all'autospinta.

Modello E-Tilt

La Clematis Pro è disponibile nella versione standard e versione E-Tilt. Il modello E-tilt monta un sistema elettrico sia per l'azionamento del basculamento che della reclinazione facilmente azionabile dall'accompagnatore attraverso un comando, per lo scarico delle pressioni dell'utilizzatore. Le movimentazioni elettriche possono essere bloccate per prevenire l'uso scorretto e per aumentare l'autonomia della batteria. Il comando può essere facilmente agganciato alla spondina quando non in uso.

Schienale Modulare

Rapido e facile da regolare per le necessità individuali. I tre diversi schienali garantiscono un adattamento preciso per numerose patologie.

Anti-ribaltamento

Testati rigorosamente, aiutano gli assistenti a inclinare la sedia a rotelle più facilmente durante il superamento di ostacoli.

NEW

1



Maggiore rigidità

Piastra per le ruote posteriore rinforzata

2



Manovrabilità migliorata

Posizione più attiva delle ruote posteriori

3



Larghezza seduta maggiorata

per una maggiore personalizzazione



390 - 540 mm
in incrementi di 50 mm

Regolazioni

- Reclinazione fino a 30°
- Basculamento fino a 30°
- Pedane elevabili fino a 80°
- Snodo posizionato in alto

E-Tilt
30°

(Standard 25°)



Portapedane regolabili in inclinazione

Permettono di sollevare le gambe per un comfort maggiore in posizione basculata o reclinata. Poggiapolpaccio regolabile in altezza e profondità. Poggiapiiede regolabile in altezza, profondità, larghezza e inclinazione per un perfetto posizionamento del piede.



Accessori e opzioni



Matrix Contour Visco NG

Accessorio: cuscino altamente resiliente e sagomato, 100% in Visco per incrementare la stabilità e lo scarico delle pressioni.



Imbottitura con forma concava

Facile da pulire e sagomato in un solo pezzo, assicura un posizionamento stabile del braccio sia durante il basculamento che la reclinazione.

Per ulteriori accessori, fare riferimento alla brochure relativa Rea

Innovativa e all'avanguardia Clematis® Pro

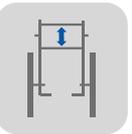
Abbiamo ulteriormente migliorato la nostra gamma di carrozzine basculanti Rea **Clematis® Pro**.

Apprezzata per il comfort, per le dimensioni compatte, per la qualità costruttiva e per facilità di regolazione, si impone come punto di riferimento nel segmento delle carrozzine basculanti entry level.



Dati tecnici

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.invacare.it

	 Larghezza seduta ▼	 Profondità seduta ▼	 Altezza seduta ▼	 Altezza schienale ▼	 Altezza braccioli ▼
	Fisso: 390 - 490 mm, con incrementi di 50 mm	Fisso: 420 - 480 mm	400 - 450 mm	570 - 710 mm	230 - 350 mm
Clematis Pro Clematis Pro E-Tilt	Regolabile: 390 - 590 mm, con incrementi di 50 mm	Regolabile: 430 - 500 mm			

	 Lunghezza poggiatesta ▼	 Angolo della seduta ▼	 Angolo dello schienale ▼	 Ingombro totale ▼	 Altezza totale ▼
Clematis Pro Clematis Pro E-Tilt	355 - 465 mm 355 - 465 mm	0° - 25° 0° - 30°	0° - 30° 0° - 30°	605 - 770 mm	1200 - 1550 mm 1200 - 1550 mm

	 Lunghezza totale pedane incluse ▼	 Peso totale ▼	 Peso massimo utente ▼	 Peso trasportabile ▼	 Pendenza massima per l'uso del freno di stazionamento ▼
Clematis Pro Clematis Pro E-Tilt	955 - 1470 mm 955 - 1470 mm	da 37.5 kg	135 kg 135 kg	da 20 kg da 25.5 kg	7° 7°

inc. battery

Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) design sono marchi registrati da Invacare International



Nero TR26

Fodere



Beige perla

Colore telaio

+39 0445 380059
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Invacare Mecc San s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®