



NIEUW

Invacare®

**Action® 4
NG**

Stijlvol en stabiel met uitstekende
functionaliteit

INVACARE
Yes, you can.

De nieuwe verbeterde Action4NG is bijna 1 kg lichter dan het vorige model. En dit zelfs met nog meer functionaliteit. Het heeft een dubbel vouwframe dat zorgt voor stabiele en soepele rijeigenschappen. Daarnaast past het goed in de Action familie van rolstoelen en zijn de onderdelen uitwisselbaar, zodat het een kost efficiënte lijn is om te onderhouden.

- **Veel lager gewicht**
- **Verbeterde functionaliteit en opties**
- **Nieuw design en nog meer kleur mogelijkheden**



Significante gewichtsverlaging

Zonder in te boeten aan functionaliteit - of de flexibiliteit om het frame aan te passen - is het gewicht van de **Action⁴_{NG}** met bijna 1 kg verlaagd. Dit is grotendeels te danken aan het design van de voorvork en geoptimaliseerde asplaten voor de achterwielen, beide zijn gemaakt van aluminium. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de **Action⁴_{NG}** nog gemakkelijker mee te nemen is in een auto.

Oog voor detail

Het team van Invacare heeft het design van de **Action⁴_{NG}** op verschillende gebieden aangepast. Het nieuwe voorvork design is transparanter, nieuwe frame kleuren zorgen voor een frisse look. Je ziet het oog voor detail terug in elk component van de rolstoel.

Verbeterde functionaliteit

Nieuwe, slim ontworpen, opties maken dat de **Action⁴_{NG}** nog gemakkelijker te gebruiken is dan zijn voorganger. Zo is het nog eenvoudiger geworden om de wegzwenkbare armsteun weg te klappen, zodat transfers makkelijker gemaakt kunnen worden. En de zijschotjes hebben nu een uitsparing en schuimgrip, om met nog meer gemak een transfer te kunnen maken (op de hoogte instelbare versie).

Een gepatenteerde, intuïtieve, traploos instelbare rugleuning die neergeklapt kan worden is toegevoegd als optie. Daarnaast zorgt de rugbekleding er nu voor dat de rugbuizen goed bedekt zijn, wat zorgt voor meer comfort. De spanbanden zijn hoogte instelbaar geworden, zodat nog beter gepositioneerd kan worden, ongeacht de hoogte van de rugleuning.

We hebben deze wijzigingen doorgevoerd omdat we weten dat deze details een grote impact kunnen hebben op het dagelijks leven.

Gemakkelijk instelbaar en te wijzigen

Ondanks deze aanpassingen blijven de onderdelen van de **Action⁴_{NG}** uitwisselbaar met de andere rolstoelen van de Action familie en ook vorige modellen.



Kenmerken en opties



Lichtgewicht

De **Action⁴_{NG}** heeft een basis gewicht van 14,7 kg en transport gewicht van 8 kg (zonder beensteunen, armsteunen en achterwielen). Met de lichtgewicht wielen kan het basisgewicht verder verlaagd worden naar 14,0 kg.





Achteras

De nieuwe aluminium achteras combineert een licht gewicht met functionaliteit.



Voorvork

Een nieuw voorvork ontwerp van aluminium zorgt voor stijl en gewichtsafname.

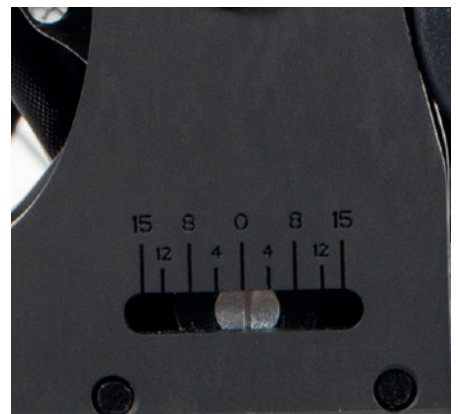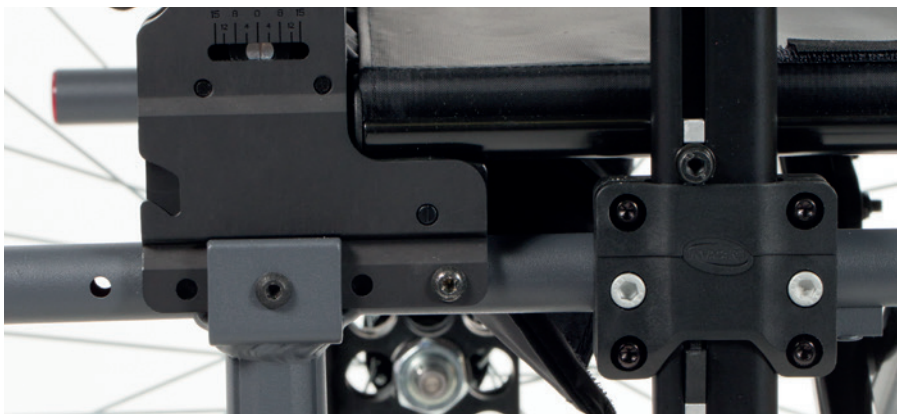

Traploos instelbare, neerklapbare rugleuning

Deze innovatieve, gepatenteerde hoekverstelbare rugleuning, zoals ook gebruikt bij de **Action⁵**, zorgt ervoor dat de rughoek zeer nauwkeurig ingesteld kan worden, terwijl de gebruiker in de stoel zit. Het unieke vouwmechanisme maakt dat de stoel zeer compact opgevouwen kan worden, waardoor deze ideaal op te bergen of mee te nemen is.



Opklapbare armsteunen No. 2 en 3

Beide armsteunen hebben nu een vergrendeling en een uitsparing, zodat de armsteun gemakkelijk opgeklapt kan worden. Aanvullend is de No. 3 armsteun hoogte instelbaar.



Amputatiesteun

Deze wegzwenkbare amputatiesteun is ideaal voor transfers: hoogte, hoek en diepte instelbaar.



Voorwielen

De voorwielen zijn verkrijgbaar in 5", 6" en 8" lucht -of rubberband, met keuze uit diverse bandbreedtes.



Transporthaak

Een fel oranje transporthaak zorgt ervoor dat de rolstoel goed vastgezet kan worden tijdens transport.



Eenhandsbediening

De eenhandige bediening is ideaal voor mensen met hemiplegie. De telescopische, geveerde verbinding kan verwijderd worden zodat de rolstoel opvouwbaar blijft.



Gespriem

Deze optionele BodyPoint® riem garandeert de gebruiker meer veiligheid en verhoogt zowel comfort, als posturale ondersteuning.



Matrx kussens

Van basis kussens tot het zeer geavanceerde *Invacare Matrx Libra* kussen, Invacare heeft een breed assortiment aan kussens dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker. De *Invacare Matrx Elite* en *Elite Deep* ruggen worden geleverd met het EasyMount quick release systeem, zodat de rug eenvoudig eraf gehaald kan worden als de rolstoel gevouwen wordt. De brede range van ruggen en kussens zorgt ervoor dat de gebruikers zeer goed gepositioneerd kunnen worden in de *Action⁴_{NG}*.



Lengte compenserende hoekverstelbare beensteunen

Deze beensteun combineert optimale lengte compensatie met 0 - 80 graden verstelling.

Hoekverstelbare rugleuning

De hoekverstelbare rugleuning, zowel mechanisch en ook met gasveer, zorgt ervoor dat verzorgers eenvoudig aanpassingen kunnen maken aan de positie van de gebruiker.



Hoofd- en neksteunen

Diverse hoofd- en neksteunen zijn beschikbaar, voor een maximale ondersteuning en comfort.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithelling	Zithoogte	Rughelling	Rughoogte	Voorste framehoek
Zelfrijder	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
Transit	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°

	Onderbeenlengte	Hoogte armsteun	Totale breedte	Totale breedte (dichtgevouwen)	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale lengte zonder voetsteunen	Totale hoogte
Zelfrijder	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Zitbreedte + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
Transit	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Zitbreedte + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm

	Max. veiligheidshelling	Draaicirkel	Max. gebruikersgewicht	Totaalgewicht	Transportgewicht
Zelfrijder	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,0 kg	8,0 kg
Transit	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,5 kg	11,7 kg



1. Heavy duty versie

Frame kleuren

Hypnotic Purple



Matt Black




Blue Pop




Matt Red



Black Nylon

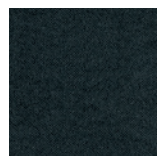

Pearl White



Slate Grey



Electric Green



Anthracite Black



Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Trusted Solutions,
Passionate People

