




Elämäntyyliä täydellisesti sopiva

Invacare **MyOn^{HC}** on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia ja kuljetusta varten. Kahden patentoidun ratkaisunsa ja kevyen rakenteensa myötä uusi **MyOn^{HC}** merkitsee käyttäjälle tuolia, johon voi luottaa. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi
- Kiinteärunkoisen tuolin vakaus
- Nopea ja portaaton säätö
- Paljon mukautusvaihtoehtoja

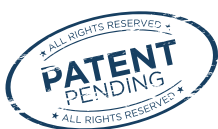

reddot award 2015
winner



Yes, you can.®



Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi



- Pyörätuolin innovatiivisen rakenteen ansiosta runko taittuu **erittäin pieneen kokoon** ja selkänoja taittuu istuimen päälle
- Tuolin kokoon taittaminen on helppoa, joten se on vaivaton **säilyttää ja kuljettaa**



Kiinteärunkoisen tuolin vakaus



- Patentoitu Vaakasuoja "H-Shaped"-taittomekanismi merkitsee parempaa **vakautta verrattuna** muihin markkinoilla oleviin tuoleihin
- Automaattinen lukitustoiminto varmistaa istuimen turvallisen asennon ja tekee tuolista erittäin vaivattomasti kelattavan ja **parantaa käyttöominaisuuksia**



Tuolin säätö käyttäjän istuessa

- Ainutlaatuisen patentoidun teknologiamme ansiosta selkänojan kulmaa voidaan säätää, vaikka **käyttäjä istuu tuolissa**
- Portaaton säädettävyys tekee **arvioinnista ja sovituksesta nopeaa ja helppoa**, mikä takaa täydellisen sopivuuden käyttäjän tarpeisiin
- Tuoliin merkitty asteikko helpottaa **selkänojan tarkan kulman** asettamista



Muokkaa mielesi mukaan

- Laaja värivalikoima antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata tuolia vastaamaan omaa persoonallisuuttaan
- **MyOn^{HC}** voidaan myös **muokata käyttäjän tarpeiden mukaan**, esimerkiksi valitsemalla kiinteän rungon myötä aktiivisempi ilme tai helpottamalla entisestään kokoon taittamista ja kuljetusta kääntyvän mallin avulla
- Kahdella seuraavalla sivulla kerrotaan tarkemmin **MyOn^{HC}**: n tarjoamista vaihtoehdoista
- **MyOn^{HC}** on myös yhteensopiva muiden Invacare-tuotteiden kuten Alberlisävoimalaitteiden kanssa.



Palkittua tekniikkaa

- Invacare **MyOn^{HC}** - tuoli on jo **saanut tunnustusta** voittamalla suunnittelustaan Red Dot Award for Product Design -palkinnon
- Maailman suurin tuotekilpailu Red Dot Award myöntää myös arvostetuimpiin kuuluvia suunnittelupalkintoja



reddot award 2015
winner



MUKAUTETTAVUUS



①



②



③

JALKALAUTAVAIHTOEHDOT



④



⑤



⑥

TARVIKKEET



⑦



⑧



⑨

MUKAUTETTAVUUS

① Istuimen jäykkyyden ja syvyyden säätö

Säädöt onnistuvat helposti hihnojen avulla.

② Painopiste

100 mm:n painopisteen säätö voidaan tehdä 25 mm:n portaittain, hienosäätö jopa 12 mm.

③ Kallistuskulma

Vakiosäädöt ovat 0-2° ja optiona 3 & 4° -säädöt tarvittaessa.

JALKALAUTAVAIHTOEHDOT

④ Sivulle kääntyvät jalkalaudat

Jalkalaudat voidaan kääntää joko sisään tai ulos.

⑤ Kiinteä etuosa

Saatavana on 80°:n kiinteä eturunko itsenäisille käyttäjille.

⑥ Jalkalautavaihtoehdot

Valittavissa on 70°, 80° tai 90° asteen jalkalaudat, nostettavat jalkalaudat tai amputaatiotuki

TARVIKKEET

⑦ Selkänojan suojus

Mukana selkänojatasku ja heijastinraitia näkyvyyden parantamiseksi.

⑧ Aktiivinen kaatumisenesto

Sekä käyttäjän itsensä että avustajan käytettävissä lisätukea varten.

⑨ Etupyörät

Pyörävalikoima 4" - 7", myös tyylikäs alumiininen soft-roll-vaihtoehto

KÄSINOJAT



①



②



③

UUDET KÄÄNTYVÄT JA IRROTETTAVAT KÄSINOJAT




④



⑤



⑥

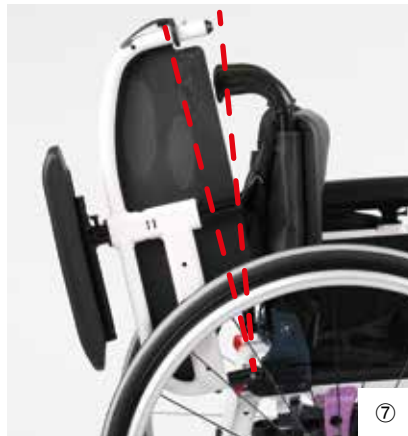

⑦



⑧

KÄSINOJAT

① Lokasuojat

Tyylikkääst ja kevytrakenteiset lokasuojat eivät juurikaan lisää tuolin kokonaispainoa.

② Perinteinen korkeussäädettävä käsinoja

Korkeus säädettävissä liu'uttamalla istuinputkea pitkin.

③ Hemi-käsinoja

Tämä vaihtoehtoinen käsinoja lisää käyttömukavuutta korkeuden, syvyyden ja kallistuskulman säädettävyyden ansiosta.

UUDET KÄÄNTYVÄT JA IRROTETTAVAT KÄSINOJAT

④ Uudet kääntyvät ja irrotettavat käsinojat

Käyttäjän ulottuvilla, kääntyy ulospäin siirtojen helpottamiseksi.

⑤ Korkeudensäätö

Yksinkertainen painike helppoja säätöjä varten.

⑥ Vapautusvipu

Vaikka käden toimintakyky olisi rajoittunut, käsinoja on helppo vapauttaa ja kääntää taakse.








⑦ Taakse käännetty asento








Taakse käännetty käsinoja saadaan pysymään paikallaan helpolla ruuviasetuksella tuoliin asettumisen helpottamiseksi.






⑧ Käännettävä käsivarsipehmuste

Käsinojan asento voidaan kääntää helposti toisin päin, jolloin samaa käsinojaa voidaan käyttää lyhyellä ja pitkällä käsivarsipehmusteella.

TEKNISET TIEDOT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Invacare MyOn ^{HC} | 305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm | 350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm | 0 - 9 ° | Front 360-535 mm in steps of 25 mm Rear: 360-510 mm in steps 25 mm | Fixed 90° Or stepless 90° -15°/+15° | Fixed 300 /325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Adjustable 360-400 and 410-490 mm | Fixed front 80° Swing away legrest Elevating legrest 0-80° |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Invacare MyOn ^{HC} | Swing away frame: 200-510 mm Fixed frame: 300-530 mm | 186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm | SW +180 mm To SW+ 250 mm | 320 -380 mm | 845 -1205 mm | 670 -860 mm | 701 -1108 mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Invacare MyOn ^{HC} | 7° | 1050 -1380 mm | 100 & 130 kg | From 12,3 kg From 8,3 kg |




Tuote on testattu ja mitattu standardin EN 12183:2014 mukaisesti. Mitat voivat vaihdella 15 mm / 2°. Lisäksi pyörätuolimme täyttävät standardien ISO 7176:2008 ja ISO 10542 vaatimukset, ja niissä on lisäominaisuuksia, jotka lisäävät käyttövarmuutta ja -turvallisuutta moottoriajoneuvolla liikuttaessa. Pyörätuolin käyttäjien tulisi kuitenkin siirtyä ajoneuvon istuimelle ja käyttää ajoneuvon asennettuja turvajärjestelmiä aina, kun se on mahdollista. Tarkempia myyntiä edeltäviä tietoja tästä pyörätuolista on verkko-osoitteessa www.invacare.eu.com. Kuvauksia tyypillisistä käyttäjistä, käyttötarkoituksesta, säädöistä ja kuljetuksesta on käyttöohjeessa.

RUNGON VÄRIT

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Dark Red | Pop Blue | Anthracite Black | Pearl White | Electric Green | Hypnotic Purple |
|  |  |  |  | | |
| Pearl Grey | Matt Black | Intense Yellow | Vibrating Orange | | |

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

VERHOILU

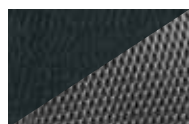

Black Nylon /
Grey mesh

YKSITYISKOHDAT

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Silver | Blue | Purple |

Tuolin värit voivat vaihdella verrattuna väreihin jotka näkyy tässä.

© 2015 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.

All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.

MyOnHC - FI - 10/2015



Yes, you can.®