

TDX[®] SP2^{NB}



Manöverförmåga möter
stabilitet och stil

LINX[®]





Invacare **TDX SP2^{NB}** med sitt kompakta smala chassi är både slitstark och högpresterande. Lättmanövrerad inomhus såväl som utomhus och med ett brett urval av sitsalternativ för bästa individuella komfort. Sammantaget gör detta **TDX SP2^{NB}** till en elrullstol för den som kräver full funktionalitet men inte vill kompromissa med designen.

- Lättmanövrerad och stabil
- Intuitiv körteknik
- Simply Smart LiNX kontrollsystem

Lättmanövrerad och stabil

TDX SP2^{NB} är beprövad och tålig. Den erbjuder maximalt med grepp, stabilitet och säkerhet. Stability Lock säkerställer att alla sex hjulen stannar på marken även under körning i ojämn terräng. Den patenterade SureStep[®] teknologin möjliggör en mjuk gång samtidigt som den övervinner hinder.

Intuitiv körteknik

Invacare **TDX SP2^{NB}** användare kan säga "ja" till framkomlighet och "nej" till kompromisser. Tack vare en anmärkningsvärt liten svängradie, ett kompakt chassi och mitthjulsdrift erbjuds en utmärkt manövrerbarhet och en intuitiv körupplevelse.

Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Invacare **LiNX** är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid. Med enkel access till statistik och diagnosinformation, ger **LiNX** en transparens för den som skall arbeta med produkten.



Modern pekskärms teknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens fysiska och kognitiva förmåga.



Display only version

The REM500 is a **display only** version of the REM400, retaining the 3.5" interactive touch screen, and allows specialist controls to be used to operate the powerchair.



Inbyggd Bluetooth

Manöverboxen REM400 tillåter användaren att ansluta till tre olika enheter samtidigt, inklusive PC.

Urval av alternativa styrningar

För att ge bästa möjlighet till kontroll och oberoende så möjliggör REM400 och REM500 ett stort urval av alternativa styrningar som kan kombineras med **TDX SP2 ULM**.



Joystick Compact (DLX-CR400)

Passar användare med nedsatt motorik och styrka.



Joystick Extremity (ASL138)

Lämplig att använda som hakstyrning då ytterhöljet står emot väta.



Joystick MEC (ASL130)

Passar användare med nedsatt motorik och styrka.



Joystick Compact single switch (ASL133)

Passar användare med hög muskeltonus.



Huvudstyrning Sensorstyrd (ASL104)

Sensorer inbyggd i huvudstöd. Bluetoothintegrerat.



Huvudstyrning Sensorstyrd (ASL104P)

Justerbara sensorer inbyggd i huvudstöd. Bluetoothintegrerat.



Sensorstyrning Four Switch (ASL106)

Passar användare med nedsatt rörelseomfång och/eller nedsatt styrka.



Vårdarstyrning

Ger assistent/anhörig tillgång till vissa funktioner/valmöjligheter utöver att framföra elrullstolen.



Vårdarstyrning IDC

Ger assistent/anhörig möjlighet att framföra elrullstolen. Inbyggd nödstopp.

Egenskaper och tillbehör



LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen unik riktinstabilitet och förbättrade köregenskaper



SureStep® och Stability Lock

Hjälper till att övervinna hinder med enkelhet och ge en mjuk nedgång från trottoaren.



Elektrisk "enkel" tilt

Elektrisk tilt möjliggör en lutning på upp till 20°



Singel-länkhjulsgaffel

Minskar bredden över länkhjulen och minskar risken för skador vid körning inomhus, då inga skruvar skjuter ut.



Mitthjulsdrivet chassi

Möjliggör en smidig manövrerbarhet i trånga utrymmen och en intuitiv körteknik.



Elektrisk CoG tilt

En maximal sitsvinkel på 30° ger förutsättningar till ökad komfort och fullgod tryckavlastning samt innefattar tyngdpunktsförskjutning.

El-rygg

El-ryggen har en hög ledpunkt för en naturlig rörelse. Quick release-funktion möjliggör att ryggen kan fällas vid transport. Kan eftermonteras.

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A vilket hjälper till att enheterna behåller sin batterikapacitet längre. Kan monteras i sidoskenan för att enklare nås.



DuraWatt drivenhet

Tystare motorer tack vare de förseglade kolborstarna som håller genom hela motorns livstid och inte ger några toleransproblem.



Svarta däck

Svarta däck, "Non-Marking"-säkra, på både driv- och länkhjul tillsammans med svarta fälgar ger ett modernt utseende.



LED-belysning

Attraktiva, energisparande LED-lampor finns som ett tillval och är dessutom integrerade i ett väl skyddat läge i den bakre kåpan.



Sitslyft

Hjälper till att nå högre eller samtala med andra i ögonhöjd. Tilten hjälper till med tryckavlastning och positionering.



Sidomonterade benstöd

Välj mellan ett stort urval av manuella eller elektriska benstöd.



Centralt placerade benstöd

Erbjuder ett aktivt sittande.

Teleskoperande innerram

Det finns en version vid montering av tilt- och lyftmoduler. Därmed kan användaren placeras så lågt som möjligt vid exempelvis förflyttning.

1. Invacare **Modulite™** är korskompabil med stora delar av Invacares sortiment av elrullstolar och delvis med Invacare Rea®-familjen

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel
Modulite™ Hel sitsplatta	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ⁴	480 mm ⁷	275 - 340 mm	290 - 460 mm ⁸	0 - 8°
Modulite™ Teleskoperande sitsram	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm 510 - 560 mm ³	450 / 475 mm ^{4,5} 475 - 775 mm ⁶	480, 540, 560 mm ⁷	245 - 310 mm	290 - 460 mm ⁸	0 - 20° / 0 - 30° ⁵
	Intervall ryggstödvinkel	Totalhöjd	Hjulbas	Totallängd inkl fotplatta	Totallängd utan benstöd	Max brukarvikt	Batterikapacitet
Modulite™ Hel sitsplatta	90° - 120°	1010 mm ¹¹	610 mm ¹⁰	1160 mm ⁹	980 mm	150 kg	50 Ah
Modulite™ Teleskoperande sitsram	90° - 120°	1010 - 1170 mm ¹¹					
	Svängradie	Max hindertagning	Max lutning vid användning av parkeringsbroms	Motorkapacitet	Hastighet	Körsträcka	Vikt
	1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 324 W	upp till 26 km ¹²	6 och 10 km/h	138 kg ¹¹




1. Sittdyna 430 mm
2. Ytterligare 100 mm med armstödsjustering
3. Möjlighet till större sitsdjup
4. Golv till sitsplatta utan dyna
5. Med sitslyft eller el-tilt
6. Med lyft
7. Med sitslyft eller el-tilt
8. Mätt från fotplatta till sitsplatta

9. Beroende på sitsen position
10. Hjulbas
11. Beroende på konfiguration
12. Enligt ISO 7176-4:2008
13. Invacare Modulite™ är korskompabil med stora delar av
14. Invacares sortiment av elrullstolar och delvis med Invacare Rea*-familjen

Varumärket LiNX och logotyper är registrerade varumärken och ägs av Dynamic Controls och all användning av Invacare sker med licens.

Färger kåpor

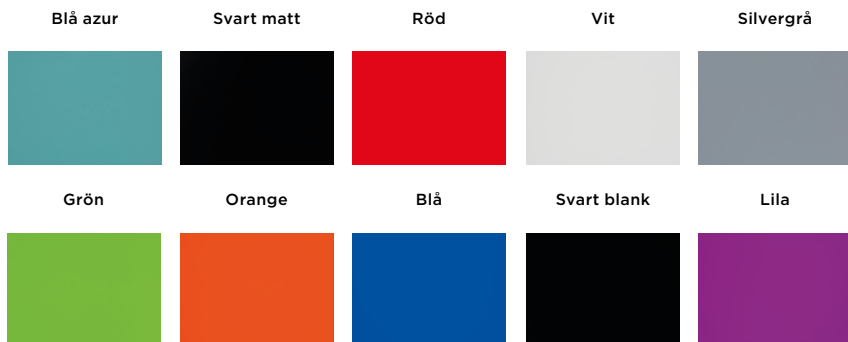

Kom ihåg att du kan anpassa din **TDX SP2** med hjälp av tjänsten Invacare UNIQUE.



Scanna denna QR-kod för att komma till LiNX microsite.

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
 sweden@invacare.com | Sweden
 www.invacare.se

