



Vector O2

Vår mest stabile pute for rullestolbrukere



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.®

Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#theperfectpackage!**

Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppsformen. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinestrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



Vicair Vector O2

På anbud med NAV

Vicair Vector O2 er en forhåndsformet pute bestående av 9 individuelle kamre. Hvert kammer er designet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet, og puten gir med det en unik balanse mellom å bevare huden rundt sitteknutene og halebeinet, omfordele trykket, stabilisere bekkenet og oppnå en hensiktmessig plassering av lårbeina.

For individuell tilpasning og ved spesifikke behov kan fyllingen av de ni kamrene enkelt justeres. Dette kan være en fordel for brukere som: (1) trenger korrigering eller tilpasning av bekkenskjevhet, (2) Ønsker (delvis) avlastning av sitteknuter og halbeinsområdet eller (3) Trenger korrigering eller tilpasning for bedre posisjonering av lårene (f.eks. abduksjon eller ved ensidig fotfremdrift).

1. plass i delkontrakt 4 (6 cm)

1. plass i delkontrakt 5 (10 cm)

2. plass i delkontrakt 7 (10 cm)

✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet

✓ Forbedrer brukerens rekkevidde


✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter


› **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov


› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

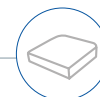

Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår

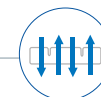

100 % pustende

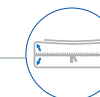

Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Vicair Vector Junior

På anbud med NAV

Vicair Vector Junior er velegnet for barn, og gir god komfort samtidig som den reduserer risikoen for trykksår. Sitteputen er delt opp i 6 individuelle kamre med hundrevis av luftfylte SmartCells for god individuell tilpasning. Puten gir gode justeringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov og ønske om optimal trykkavlastning.

5. plass i delkontrakt 7 (Vector Junior)

✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet

✓ Forbedrer brukerens rekkevidde

✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

Størrelsesoversikt

Vicair Vector O2 6

Dybde i cm	Bredde i cm							
	35	38	40	43	45	48	50	53
	245277	245277	245283	245291	245299			
	OVR6/ TP/3535	OVR6/ TP/3835	OVR6/ TP/4035	OVR6/ TP/4335	OVR6/ TP/4535			
	245278	245278	245284	245292	245300	245300		
	OVR6/ TP/3538	OVR6/ TP/3838	OVR6/ TP/4038	OVR6/ TP/4338	OVR6/ TP/4538	OVR6/ TP/4538		
	245279	245279	245285	245293	245301	245308	245314	245320
	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/4040	OVR6/ TP/4340	OVR6/ TP/4540	OVR6/ TP/4840	OVR6/ TP/5040	OVR6/ TP/5340
	245280	245280	245286	245294	245302	245309	245315	245321
	OVR6/ TP/3543	OVR6/ TP/3843	OVR6/ TP/4043	OVR6/ TP/4343	OVR6/ TP/4543	OVR6/ TP/4843	OVR6/ TP/5043	OVR6/ TP/5343

245281	245281	245287	245295	245303	245310	245316	245322
OVR6/ TP/3545	OVR6/ TP/3845	OVR6/ TP/4045	OVR6/ TP/4345	OVR6/ TP/4545	OVR6/ TP/4845	OVR6/ TP/5045	OVR6/ TP/5345
	245282	245288	245296	245304	245311	245317	245323
	OVR6/ TP/3848	OVR6/ TP/4048	OVR6/ TP/4348	OVR6/ TP/4548	OVR6/ TP/4848	OVR6/ TP/5048	OVR6/ TP/5348
		245289	245297	245305	245312	245318	245324
		OVR6/ TP/4050	OVR6/ TP/4350	OVR6/ TP/4550	OVR6/ TP/4850	OVR6/ TP/5050	OVR6/ TP/5350
		245290	245298	245306	245313	245319	245325
		OVR6/ TP/4053	OVR6/ TP/4353	OVR6/ TP/4553	OVR6/ TP/4853	OVR6/ TP/5053	OVR6/ TP/5353

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Vicair Vector Junior

Dybde i cm	Bredde i cm		
	25	30	35
	335456		
	OJVR/ TP/2525		
		335457	
		OJVR/ TP/3030	
			335458
			OJVR/ TP/3535



Vicair Vector O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35		245439	245439	245445	245453	245463						
		OVR10/ TP/3535	OVR10/ TP/3835	OVR10/ TP/4035	OVR10/ TP/4335	OVR10/ TP/4535						
38		245440	245440	245446	245454	245464	245464					
		OVR10/ TP/3538	OVR10/ TP/3838	OVR10/ TP/4038	OVR10/ TP/4338	OVR10/ TP/4538	OVR10/ TP/4538					
40		245441	245441	245447	245455	245465	245475	245484	245493			
		OVR10/ TP/3540	OVR10/ TP/3840	OVR10/ TP/4040	OVR10/ TP/4340	OVR10/ TP/4540	OVR10/ TP/4840	OVR10/ TP/5040	OVR10/ TP/5340			
43		245442	245442	245448	245456	245466	245476	245485	245494	245502	245510	
		OVR10/ TP/3543	OVR10/ TP/3843	OVR10/ TP/4043	OVR10/ TP/4343	OVR10/ TP/4543	OVR10/ TP/4843	OVR10/ TP/5043	OVR10/ TP/5343	OVR10/ TP/5543	OVR10/ TP/5843	
45		245443	245443	245449	245457	245467	245477	245486	245495	245503	245511	245518
		OVR10/ TP/3545	OVR10/ TP/3845	OVR10/ TP/4045	OVR10/ TP/4345	OVR10/ TP/4545	OVR10/ TP/4845	OVR10/ TP/5045	OVR10/ TP/5345	OVR10/ TP/5545	OVR10/ TP/5845	OVR10/ TP/6045
48			245444	245450	245458	245468	245478	245487	245496	245504	245512	245519
			OVR10/ TP/3848	OVR10/ TP/4048	OVR10/ TP/4348	OVR10/ TP/4548	OVR10/ TP/4848	OVR10/ TP/5048	OVR10/ TP/5348	OVR10/ TP/5548	OVR10/ TP/5848	OVR10/ TP/6048
50				245451	245459	245469	245479	245488	245497	245505	245513	245520
				OVR10/ TP/4050	OVR10/ TP/4350	OVR10/ TP/4550	OVR10/ TP/4850	OVR10/ TP/5050	OVR10/ TP/5350	OVR10/ TP/5550	OVR10/ TP/5850	OVR10/ TP/6050
53				245452	245460	245470	245480	245489	245498	245506	245514	245521
				OVR10/ TP/4053	OVR10/ TP/4353	OVR10/ TP/4553	OVR10/ TP/4853	OVR10/ TP/5053	OVR10/ TP/5353	OVR10/ TP/5553	OVR10/ TP/5853	OVR10/ TP/6053
55					245461	245471	245481	245490	245499	245507	245515	245522
					OVR10/ TP/4355	OVR10/ TP/4555	OVR10/ TP/4855	OVR10/ TP/5055	OVR10/ TP/5355	OVR10/ TP/5555	OVR10/ TP/5855	OVR10/ TP/6055
58					245462	245472	245482	245491	245500	245508	245516	245523
					OVR10/ TP/4358	OVR10/ TP/4558	OVR10/ TP/4858	OVR10/ TP/5058	OVR10/ TP/5358	OVR10/ TP/5558	OVR10/ TP/5858	OVR10/ TP/6058
60						245473	245483	245492	245501	245509	245517	245524
						OVR10/ TP/4560	OVR10/ TP/4860	OVR10/ TP/5060	OVR10/ TP/5360	OVR10/ TP/5560	OVR10/ TP/5860	OVR10/ TP/6060

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettside vår finner du derfor et [visuelt og enkelt skjema](#) som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Vector O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	CM	bredde											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35												
15	38												
16	40												
17	43												
18	45												
19	48												
20	50												
21	53												
22	55												
23	58												
24	60												

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm.
Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6 og 10 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

725 g
(vil variere noe ut i fra putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinestrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo