

Action^{®3} NG



Enkel, lätt och praktisk!



Yes, you can.

Träffa vår berömda Action³_{NG}

Action³_{NG} är lätt att ställa in och erbjuder ett omfattande utbud av korskompatabla alternativ och tillbehör för att möta ett stort antal olika användares krav.

Denna korskompabilitet mellan Action_{NG}-familjen och andra Invacare-modeller gör stolen extra attraktiv för användarna.

- ▶ Lättaste rullstolen inom sitt område
- ▶ Ökad stabilitet för en mjukare körning
- ▶ Förbättrad design för bättre stöd

KEY EKLUSIVA FUNKTIONER

1 Lätt att ta med

- ▶ Redan den lättaste rullstolen inom sitt område. Action³_{NG} kan bli ännu lättare genom att använda valfritt drivhjul och länkhjul, kan den potentiellt minska totalvikten med 1,2 kg. Inkluderat i den låga transportvikten, har stolen även ett fällbart ryggstöd, så att den är enkelt att fälla och demontera. Detta gör den lätt att transportera även i den minsta av bilar.

2 Komfort och funktion

- ▶ Action³_{NG}s speciella hopfällningsmekanism, förbättrar stabilitet och gör fällningen ännu lättare. Tillsammans med en ny lösgöringsspak – för att ännu enklare fälla upp armstöden på Action³_{NG} så är den ett utmärkt val för maximalt bekvämlighet i vardagen.



3 Lätt att anpassa

- ▶ Korskompabilitet finns genom hela Action-Familjen, för både stolar och tillbehör vilket innebär att varje stol är anpassningsbar och modular. Därför är Action³_{NG} rätt val för att tillgodose förändringar i användarbehov över tid, enkel att hantera och har tillgång till ett brett utbud av anpassningsalternativ.

4 Anpassa stolen

- ▶ Ett nytt, ökat färgurval och en ny design på ryggstödsklädsel skapar ännu fler möjligheter till användare att skraddarsy stolen efter sina unika behov. Den nya ryggklädseln täcker de bakre ryggrören för extra komfort och ryggstödet innehåller nu ett avtagbart svankstöd för ytterligare stöd till användarna oavsett deras form.



Funktioner och tillbehör ▾

► Låg vikt

Med en totalvikt från ca 14,2 kg och en transport vikt från 7,5 kg är **Action³_{NG}** lätt att hantera. Om man önskar ännu lägre vikt så finns det särskilda val (drivhjul, länkhjul m.m.) att göra för att få ner totalvikt till ca 13kg.



► Vinkelställbar rygg

Den patenterade, steglösa, vinkeljusterbara ryggstödsdesignen möjliggör justeringar även då användaren sitter i rullstolen. Dessutom gör den framåtfällda ryggstödsfunktionen att den totala storleken minskar vid transport eller förvaring.



▲ Armstöd/Sidoskydd

På sidoskyddet till vissa armstöd finns en öppning för att få ett bra grepp för handen vid en förflyttning.



▲ Armstöd fällbara

Ny design på lösgöringspak av armstöden säkrar en följsam uppfällning.



▲ Transportfästen

Krocktestad och godkänd. Kan väljas utan fästen om behovet inte finns.



▲ Vinkelställbara benstöd

De vinkelställbara benstöden är likadana som finns till våra komfortrullstolar och erbjuder längdkompensation.



◀ Amputationsbenstöd

Är justerbart i höjd, djup och vinkel. Kan även svängas undan vid en förflyttning. Likadant benstöd som används till våra komfortrullstolar.



◀ Bättre köregenskaper

Då drivhjulet kan placeras i 20 olika positioner.



◀ Bi-material cover*

Det svarta meshöverdraget är överdimensionerat för att täcka ryggrören bättre och gör det enkelt att justera ryggbanden.



◀ Transportmodell

Transportmodellen finns i sitthöjderna 460, 485 och 510mm. Drivhjulstorleken är 12".



◀ Konkav armdyna

Tunnare än en klassisk hemi-armdyna, den konkava armdynan ger bättre åtkomst till drivringarna samtidigt som det ger ett bekvämt armbågsstöd.



Vinklinsbart ryggstöd

Ett ryggstöd där vinkeln enkelt kan justeras av anhörig eller personal. Justeringen sker med hjälp av en gaskolv, intervall mellan 0°-30°.

Funktioner och tillbehör ▾



▲ Roterande hemi armdyna med handstöd

Denna nya 360° roterande hemi-armkudde är idealisk i kombination med dubbel drivring. 3 olika handstöd finns tillgängliga för bättre handpositionering.

▲ (1) Rundad, (2) Horn and (3) Flat



▲ Huvudstöd

Ett nackstöd, Elan huvudstöd eller 4-punkts huvudstöd är alla tillgängliga, beroende på användarens behov. Dessa element kan alla justeras på ryggstödet, ändras i höjd eller djup för att säkerställa den mest optimala positionen.



◀ Enhandsdrift

Den klassiska enhandsdriften med en drivring som driver båda hjulen, passar perfekt för en hemplegiker. Finns både för höger och vänster.



◀ Ryggstöd

Finns i ett flertal modeller Fast rygg med 0° eller 7° vinkel är standardryggar med det finns fyra andra varianter. Fällbar (viks på mitten) Vinkelställbar och fällbar (15°/+15°) Vinklinsbart med fasta lägen (0°/30°) och Vinklinsbart med gaskolv (0°/30°)

Funktioner och tillbehör ▾



▲ Armstöd

① Armstöd Swingaway, ② Armstöd Swingaway och höjjusterbart, ③, ④ och ⑤ Armstöd avtagbara och höjjusterbara med olika varianter av armstödsdyna, ⑥ Armstöd smaldyna avtagbar och, ⑦ Armstöd Hemi.



▲ Länkhjul

Länkhjul finns i storlekarna 5", 6" och 8" i båden massivt och luft.



▶ Val av dynor

Finns ett stort urval av dynor från enkel skumdyna till MatrX dynor med gel.



▲ Tippskydd

Finns i två varinter, fasta (vänster bild) och undanfällbara (höger bild).



▲ Bord

Transparent bordsyta för matstunder eller aktiviteter så som läsning.



▲ Matrix® ryggsystem

Matrix ryggsystem kan monteras för extra komfort och anpassning.



▲ Positioneringsbälte

BodyPoint® positioneringsbälten kan beställas med rullstolen.

Teknisk data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t ex manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▼



Sittdjup ▼




Sitsvinkel ▼



Sitthöjd ▼



Ryggvinkel ▼

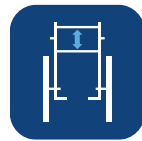

Rygghöjd ▼



Benstöds-
vinkel ▼

**Drivhjul 20",
22" el 24"**

380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 /
435 / 460 / 485 /
510 mm

325 - 510 mm

325 - 510 mm

80° /
0 - 80° / 90°

**Drivhjul 12"
transport**

380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

460 / 485 /
510 mm

380 - 460 mm

380 - 460 mm

80° /
0 - 80° / 90°



Undebenslängd
▼



Armstödshöjd ▼



Totalbredd ▼



Totalbredd ihop-
fälld ▼



Totallängd inkl
benstöd ▼



Totallängd utan
benstöd ▼



Totalhöjd ▼

**Drivhjul 20",
22" el 24"**

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Sittbredd
+ 190 mm

295 mm

995 - 1170 mm

835 - 960 mm

820 - 1050 mm

**Drivhjul 12"
transport**

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Sittbredd
+ 160 mm

260 mm

950 - 1050 mm

710 - 910 mm

920 - 1050 mm



Max lutning vid
användning
av parkerings-
broms ▼



Svängradie ▼



Brukarvikt ▼



Vikt ▼



Transportvikt ▼



**Drivhjul 20",
22" el 24"**

7°

870 mm

125 kg

13.0 kg

7.1 kg

**Drivhjul 12"
transport**

7°

870 mm

125 kg

13.5 kg

10.3 kg

Ramfärg ▼



Dark Purple



Matt Black



Navy Blue



Matt Red



Pearl White



Slate Grey



Electric
Green



Anthracite
Black

Klädsel ▼



Black Nylon

Stolens färger kan skilja sig jämfört med färgerna som visas här.

Kundservice: 08-761 70 90

Fax 08-761 81 08

sweden@invacare.com

www.invacare.se

Invacare AB

Box 66 - 163 91 Spånga

Sweden



Yes, you can.®

