

Invacare Eslingas



Óptima comodidad y ajuste



Yes, you can.

La gama de eslingas

Brinda un ajuste óptimo

Nuestra gama de eslingas han sido diseñadas para facilitar transferencias seguras y cómodas para los usuarios. La gama incluye varios modelos, tallas y material para asegurar que la eslinga se ajusta perfectamente a cada usuario, tanto si tienen alguna incapacidad o requieren un completo soporte corporal.


Nuestro equipo de expertos y terapeutas ocupacionales han dedicado tiempo para asegurarse de que las eslingas sean intuitivas y fáciles de manipular por el cuidador.

La gama de eslingas consiste en nueve modelos, con diferentes tallas y materiales para elegir.

La amplia gama de eslingas asegura que exista una eslinga adecuada para todos los usuarios y cada situación: tranferencias diarias de la cama a una silla de ruedas/sofá, una transferencia de limpieza o incluso para un baño o ducha.



5 CARACTERÍSTICAS CLAVES

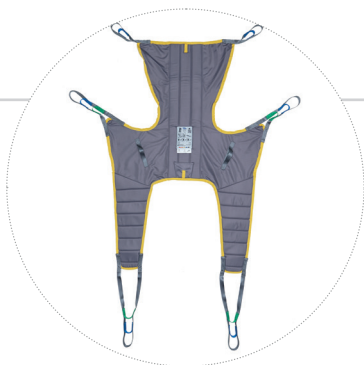

◀ Ajuste óptimo

- ▶ La eslinga correcta para cada usuario y tipo de transferencia.
- ▶ Increíble oferta de 9 modelos, en diferentes tallas y 4 tipos de materiales.
- ▶ Patrones bien definidos para brindar soporte en las partes del cuerpo adecuadas.
- ▶ Todas las eslingas tienen diferentes cintas de posición para mayor compatibilidad de perchas.

Seguridad y confianza mejoradas ▶

- ▶ Videos de utilización de fácil acceso mediante códigos QR
- ▶ Etiquetas claras con ilustraciones intuitivas de la colocación de las eslingas.
- ▶ Material ignífugo certificado y respetuoso del ambiente para el modelo de las Eslingas Comfort In Situ.



◀ Comodidad óptima

- ▶ Material suave para incrementar la comodidad
- ▶ Las secciones de la espalda y piernas están acolchadas para una distribución óptima del peso.
- ▶ Extra-acolchado en la zona sensible de las axilas.

Fácil aplicación ▶

- ▶ Bolsillo de posicionamiento, que ayuda a deslizar la eslinga en la espalda del usuario cuando está sentado.
- ▶ Dos marcas de posicionamiento que permiten alinear la eslinga a la columna.
- ▶ Cinchas de posición de colores que ayudan de forma visual a seleccionar la posición de la eslinga en la percha.



◀ Apoyo de cabeza para Eslinga


- ▶ Accesorio para brindar apoyo de cabeza en las eslingas que no disponen de esta característica.

Seleccionar el modelo correcto

El objetivo principal de la selección de eslingas es **brindar la cantidad de apoyo necesaria para el cuerpo del usuario**. Las eslingas de Invacare están diseñadas para dar soporte en aquellas áreas donde disminuye el control corporal y el tono muscular. Las principales partes del cuerpo a evaluar son las piernas, la cadera, el tronco y la cabeza.

La ilustración a continuación ofrece una visión general sobre qué modelo de eslinga es el adecuado según la capacidad física del usuario:

Evaluación del **control corporal** ▼

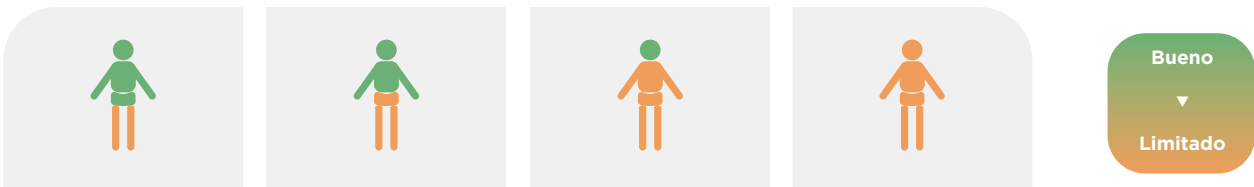

Control corporal que brinda el modelo de eslinga Invacare ▼


Muy leve ▼	Leve ▼	Intermedio ▼	Completo ▼	Uso previsto
				Universal Standard
		Universal Standard		▲ Menos óptimo* ▲ Óptimo
		Universal High		
		Universal High Plus		
		Easy-Fit		
		Comfort In Situ		
		Comfort High		
Dress Toileting Low				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				

***Menos óptimo**
Es importante considerar que el usuario mantiene ciertas capacidades/habilidades de las que la eslinga le permite usar; por lo tanto quedarán inmobilizados con el tiempo. Adicionalmente, se utiliza más tela de la necesaria, por lo que requiere mayor esfuerzo colocar la eslinga.

Seleccionar la talla correcta

Las medidas más importantes para seleccionar la talla de la eslinga son el ancho de la cadera y el alto de la espalda medida en posición sentado. La circunferencia de la cintura es necesaria para las eslingas con cinturones.

El peso del cliente debe considerarse principalmente para el peso máximo de usuario de la eslinga. A continuación la tabla de pesos para tener referencia de la talla de la eslinga.

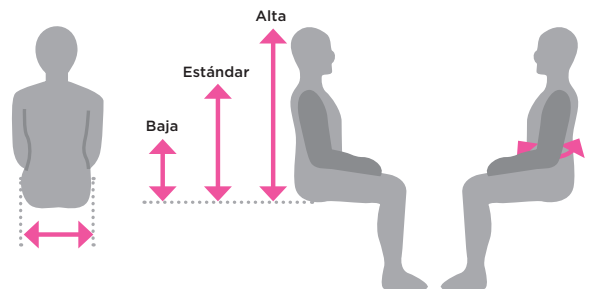

De igual forma, en el detalle de cada eslinga, encontrará las medidas por modelo y talla para identificar la selección adecuada.

► Tamaño	XS	S	M	L	XL
► Peso máximo de usuario	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg

Eslingas Invacare para grúas de elevación

Familia Universal

Eslingas versátiles para las rutinas diarias



◀ Universal Standard

- Soporta todo el cuerpo incluido los hombros
- Adecuada para usuarios con control de cabeza
- Puede ser usada para transferencias desde posición acostada, elevaciones desde el suelo y transferencias sentado - sentado



◀ Universal High


- Soporta todo el cuerpo incluida la cabeza
- El usuario estará en una posición ligeramente inclinada
- Adecuada para usuarios con control limitado de cabeza, tronco y caderas
- Puede ser utilizada para transferencias desde posición acostada, elevaciones desde el suelo y transferencias sentado-sentado
- Antes conocida como Eslinga Hamaca



◀ Universal High Plus

- Características similares a la Eslinga Universal High (Hamaca) pero permite a los usuarios mantener los brazos fuera de la eslinga y ser más activos y participativos durante la transferencia.
- Antes conocida como Universal con reposacabezas

	XS	S	M	L	XL	
Universal Standard	A	1000	1085	1180	1240	
	B	915	1050	1095	1240	
	C	510	560	585	590	
	D	410	480	555	720	
Universal High	A	1040	1080	1425	1555	1600
	B	740	845	1000	1120	1190
	C	615	770	900	1000	1000
	D	310	350	375	450	570
Universal High Plus	A	1385	1510	1580	1590	
	B	570	660	740	850	
	C	880	935	970	970	
	D	345	455	565	630	

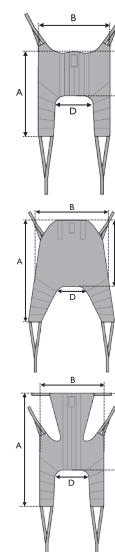

Eslinga con mayor soporte


Para pacientes más pasivos que necesitan más apoyo



◀ Easy-Fit

- Soporta todo el cuerpo y la cabeza
- Adecuado para usuarios con control limitado de la cabeza, tronco y caderas
- Soporte de piernas separadas que facilita su colocación y permite colocarlas en dos posiciones : cruzada o súperpuesta.
- Brinda una buena posición de la cadera que permite al usuario mantener una posición más erguida.
- Antes conocida como Eslinga Fácil Colocación

	S	M	L
A	1130	1200	1270
B	760	800	860
C	630	675	720
D	185	235	245
E	180	190	210
F	150	195	215

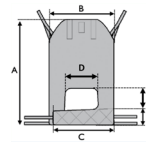

Eslingas con mayor apertura higiénica


Amplia apertura para facilitar la higiene y su colocación



◀ Dress Toileting Low

- Adecuado para usuarios con buen control de cabeza y tronco.
- El cinturón incrementa el soporte alrededor del cuerpo y un posicionamiento seguro
- Se puede utilizar para transferencias sentado - sentado
- Antes conocida como eslinga Higiene

	S	M	L	XL
A	870	950	1020	1100
B	710	800	900	1080
C	200	230	230	270
D	430	495	600	760

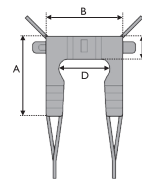

Familia Comfort

Eslingas estilo Hamaca ideal para usuarios con dolor crónico. La eslinga también es útil para amputados por encima de la rodilla. La eslinga Comfort In Situ es la mejor elección cuando la eslinga tiene que permanecer entre el usuario y la superficie después de una transferencia a posición sentado.



◀ Comfort High

- Soporta todo el cuerpo incluida la cabeza
- Adecuado para los usuarios con control limitado de la cabeza, el tronco y la cadera
- Incorporan dos asas adecuadamente posicionadas para facilitar el manejo.
- Antes conocida como eslinga Comfort




◀ Comfort In Situ

NUEVO

- Soporta todo el cuerpo
- Adecuada para aquellos con buen control de cabeza
- Diseñada sin asas para permanecer entre el usuario y la superficie después de la transferencia
- Elaborada con material especialmente certificado como ignífugo en red y spacer
- Respetuosa con el medio ambiente
- Probada por terceros conforme las normas EN1021 partes 1 y 2



	S	M	L	XL	
Comfort in Situ	A	960	1020	1160	1170
	B	1050	1170	1290	1330
	C	550	610	675	745
	D	1000	1050	1110	1275
Comfort High	A	1150	1395	1445	1460
	B	1050	1170	1290	1330
	C	550	610	675	745
	D	1020	1160	1280	1470

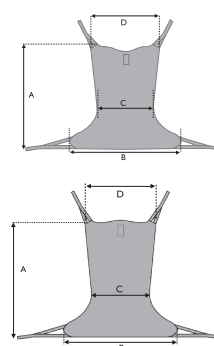

Eslingas Invacare para grúas de bipedestación



◀ Stand Assist

- Adecuada para usuarios con suficiente control corporal pero que no pueden permanecer de pie sin soporte
- El paciente debe poseer equilibrio mental y corporal, control de cabeza y habilidad para sujetar la grúa
- Está extra-acolchada para comodidad adicional
- Material antideslizante en la espalda
- Antes conocida como eslinga Transferencia de Pie




◀ Transfer Stand Assist

- Características similares a la Eslinga Stand Assist pero con soporte adicional de piernas.
- Antes conocida como eslinga Transferencia Sentado

	S	M	L	XL	
Stand Assist	A	260	330	360	360
	B	840	895	950	1020
	C	950	1170	1270	1810
Transfer Stand Assist	D	965	1060	1160	1260


Medidas como Stand Assist + "D"

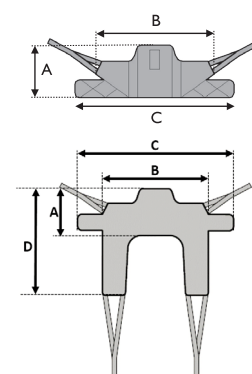

Tallas & Materiales ▼


▼ Familia	▼ Modelo	▼ Tallas					▼ Materiales		
		XS	S	M	L	XL	Tejido	Red	Spacer
Universal	Universal Standard		◆	◆	◆	◆	●	●	
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆			●
	Universal High Plus		◆	◆	◆	◆	●		
Mayor soporte	Easy Fit		◆	◆	◆				●
Apertura higiénica	Dress Toileting Low		◆	◆	◆	◆	●		
Comfort	Comfort High		◆	◆	◆	◆			●
	Comfort In Situ		◆	◆	◆			●	●
Bipedestación	Stand Assist		◆	◆	◆	◆	●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆	●		

Materiales ▼

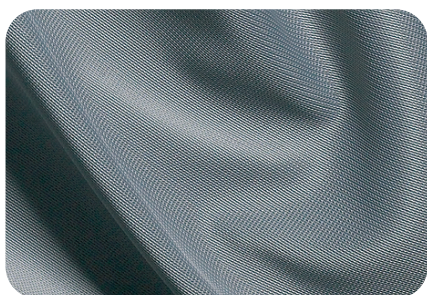


Poliéster - Tejido

▲ Material fuerte, resistente y de fácil aplicación. Se desliza suavemente al ser colocado y se seca rápidamente después del lavado.

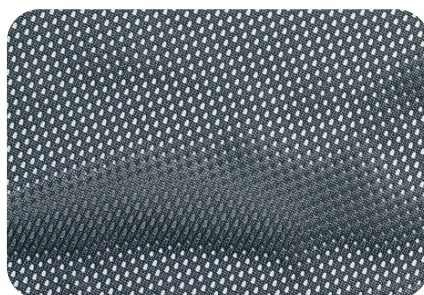

Poliéster - Red

▲ También conocida como Red, la opción de red es ideal para entornos húmedos, de ducha o baño. Comparado con los otros materiales tiene mejores propiedades de drenaje y secado rápido.

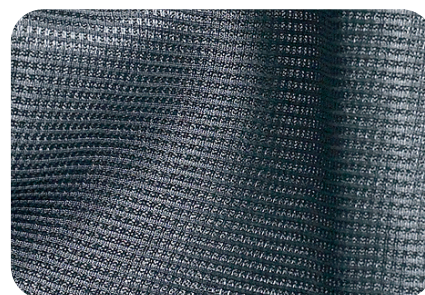

Spacer

▲ Tejido transpirable y bi-elástico que permite al material adaptarse al contorno corporal del usuario, que brinda mayor comodidad y soporte.

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Peso max. usuario ▼



Temperatura max. lavado ▼



Blanqueadores ▼



Secadora ▼

Eslingas Invacare

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg

90° C

No utilizar blanqueadores

Baja temperatura

Todas las eslingas deben ser probadas y ajustadas al usuario para asegurar comodidad durante las transferencias

Es importante realizar un análisis de riesgo de la piel de las personas que deben permanecer en la eslinga largos períodos de tiempo.

También se debe realizar un análisis de riesgo antes de utilizar eslingas de un fabricante en grúas de uno diferente.

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
46001 Valencia
España

