


Invacare® Positionierungshilfen, Bett-Tisch

Invacare® **Softform® Fersenkissen**



- Verteilt den Druck auf die Fersen
- Fersen sinken in voneinander unabhängige medizinischen Silikonkissen zur Druckverteilung
- In einfacher (320 mm breit) oder doppelter (620 mm breit) Ausführung erhältlich
- Durch verschweißte Nähte hohe Infektionsprophylaxe und leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- In Kombination mit Keilkissen ideale Entlastung der unteren Extremitäten

Invacare® **Softform® Keilkissen**

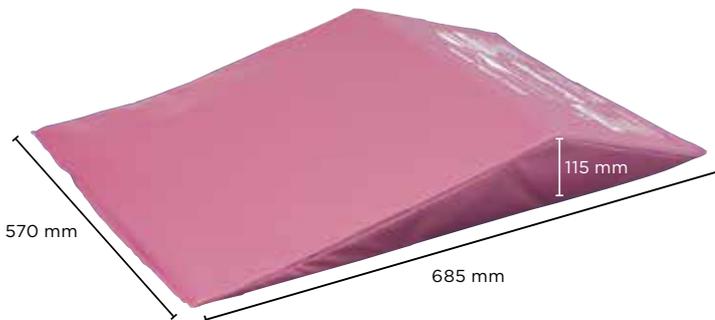

- In Zusammenarbeit mit Medizinern entwickelt, um die punktuelle Druckbelastung auf das Sakrum und die Fersen zu reduzieren - ohne dabei den Druck auf Ober- und Unterschenkel zu erhöhen
- Verbessert und unterstützt die Haltung des Patienten in der Rückenlage
- Reduziert Scher- und Reibungskräfte, speziell auf das Sakrum, da es ein Rutschen des Patienten gegen die Fußende des Bettes verhindert
- Besonders für Patienten mit Rückenschmerzen geeignet, da durch die leichte Beckenneigung der Rücken entlastet wird
- Durch verschweißte Nähte hohe Infektionsprophylaxe und leicht zu reinigen und zu desinfizieren



Kombination von Fersen- und Keilkissen bietet eine ideale Druckentlastung von Rücken, Sakrum und der Fersen

Technische Daten

	Invacare® Softform® Fersenkissen (einfach)	Invacare® Softform® Fersenkissen (doppelt)	Invacare® Keilkissen
Bestellnummer	HP50	HP100	OSW100
Hilfsmittelverzeichnisnummer	11.11.05.0006	11.11.05.0007	
Weiteres			
Breite	320 mm	620 mm	570 mm
Länge	480 mm	480 mm	685 mm
Gewicht	1,5 kg	3,6 kg	1,5 kg
Benutzergewicht max.	245 kg	245 kg	