

**rea**<sup>®</sup>

# Azalea<sup>®</sup> familie



Èn stor familie supplerer hinanden













**Invacare® Rea Azalea** komfortkørestole giver brugeren den perfekte komfort og mulighed for individuel justering af sæde og ryglæn. Et stort tilbehørsprogram, der er kompatibelt på tværs af Azalea familien, gør kørestolen meget fleksibel og økonomisk i brug. Udover standard modellerne af Azalea, har Rea udviklet en række nichemodeller. Alle Azalea kørestole kan nemt justeres, så de passer til den enkeltes behov. De er yderst stabile med glidende balancepunkt samt omdrejningspunkter, der får stolen til at følge kroppens bevægelser - dette kaldes **Dual Stability System®** (DSS).

## Rygtilt og sædekip med omtanke

Azalea er udstyret med rygtilt og sædekip. Sædet kan kippes  $-1^{\circ}$  -  $+23^{\circ}$ , eller som valgmulighed  $+1^{\circ}$  -  $+25^{\circ}$ . Ryggen kan tiltes  $30^{\circ}$ . Rygtilt og sædekip kan betjenes enten manuelt eller elektrisk. Derudover tilbyder Azalea også bredde- og dybdeindstilling af ryggen. Ryggen på Azalea kan tilpasses brugerens rygform med en helt unik indstillingsmulighed. For at opnå den bedst mulige siddestilling, kan det være en fordel at kunne låse rygvinklen eller sædevinklen. Derfor har Rea opfundet et låsesystem, der kan betjenes af terapeuten, så vinklen ikke utilsigtet ændres af plejepersonalet eller pårørende.

## Utallige muligheder for valg af ryg eller sædebredde

 <b>Lav</b> Sæde- og rygindstillinger så tæt på chassiset som muligt. Vælg evt Azalea Minor.	 <b>Høj</b> Forlænget ryghøjde, dybere sæde. Vælg evt en Azalea Tall.	 <b>Normal</b> Tilpasninger af sæde og ryg indenfor standard mål.	 <b>Bred</b> Ryglænet og sæde udvides.	 <b>Bred foroven</b> Ryglænet bredt foroven, og smalt fornedet samt et smalt sæde.
 <b>Bred fornedet</b> Ryglænet smalt foroven, og bredt fornedet samt et bredt sæde.	 <b>Stor fortal</b> Øverste del af ryglænet med øget plads til skuldre og øverste del af ryggen.	 <b>Stor bagtil</b> Nederste del af stroppryggen indstilles med god plads.	 <b>Kyfotisk ryg</b> Midtersektionen af stroppryggen tillader ekstra plads til den kyfotiske ryg.	 <b>S-formet ryg</b> Stroppryggen kan indstilles til ekstra støtte eller plads, hvor der er behov.



### ◀ Flere rygmuligheder - samme stol

Flex 3 ryggen er justerbar med mange bløde stopper og kan tilpasses efter brugerens ønsker og behov for støtte i både bredde og højde - evt. asymmetrisk. Fx bred fornedet og smal foroven. Desuden tilbyder ryggen som standard en unik mulighed for at skabe ekstra meget vinkling foroven eller fornedet.



Den faste rygplade kan indstilles i højden og bredden - Fx bred foroven og smal for nedet.

## Fantastisk siddekomfort og mange justeringsmuligheder

**Rea Azalea** er det naturlige valg for den moderat aktive eller den mere passive bruger. Det komfortable sædesystem giver brugeren mulighed for at ændre siddestilling, hvilket sikrer maximal komfort og aflastning. Dette kombineret med gode køreegenskaber gør **Azalea** til den ideelle komfortkørestol.



### ◀ Rea Azalea

**Azalea** er udstyret med enten 22" eller 24" drivhjul, så brugeren evt selv kan køre stolen.

## Rygtilt og sædekip giver mulighed for en fleksibel siddestilling

Både **Azalea** og **Azalea Assist** har mulighed for 25° sædekip og en ryg, der kan tiltes 30°. Både tilt og kip kan nemt justeres manuelt eller elektrisk af hjælperen, eller af brugeren ved valg af en brugervenlig elektrisk betjening.



### ◀ Rea Azalea Assist

Transitversionen er faktisk nøjagtig samme chassis som **Rea Azalea** med 16" drivhjul - kaldet **Rea Azalea Assist**.

## Tekniske data ▼

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website:  
<http://www.invacare.dk>

22"/24" drivhjul	390-450/440-500/490-550 mm	430 - 500 mm	360 1/400/450 mm	Rygplade 540 -790 mm Justerbar stroppryg (uden sædepudd)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	- 1°+ 23° (Std) +1°-25°	0°-30°
16" drivhjul	390-490/440-540/490-590 mm	430 - 500 mm	400/450 mm	540 -790 mm (uden sædepudd)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	- 1°+ 23° (Std) +1°-25°	0°-30°


  

22"/24" drivhjul	SB + 220 mm	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SB 440)	Max 135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°
16" drivhjul	SB + 230 mm	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SB 440)	Max 135 kg	16,5 kg	ISO 7176-19	7°

## Stelfarve ▼



## Betræk ▼

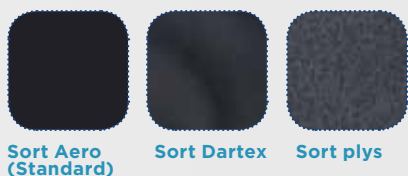

1. Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk betjening af ryg og sædevinkler.

2. Som specialprodukt, mod merpris, kan **Rea Azalea** bestilles i sædehøjde 360 mm

## Det unikke sædekip med glidende balancepunkt sikrer stabiliteten

**Azalea Base** er velegnet til brugere, der har behov for skalsæde eller andet sædesystem for tilstrækkelig støtte og komfort kombineret med en let betjent kørestolsbase.

**Azalea Base** findes i 4 stelstørrelser.



### ◀ **Rea Azalea Base**

Ryggen på **Azalea Base** kan vinkles via en vantskrue eller et ledsagerbetjent hydraulisk reb. Ryglænets rør er afrundede, hvilket gør det nemmere at fastgøre et skalsæde. Sædebredden kan justeres ved hjælp af armlæn og benstøtterne, og selve sædet kan justeres i dybden.

## Tekniske data ▼

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website:  
<http://www.invacare.dk>

								
Sædebredde ▼	Sædedybde ▼	Sædehøjde ▼	Ryghøjde ▼	Armlæns højde ▼	Benstøtte- længde ▼	Sædevinkel ▼	Rygvinkel ▼	
<b>Azalea Base</b>	340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm <sup>1</sup> 430 - 500 mm	400/450 mm	600 <sup>1</sup> / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° til 23° (22 / 24") (+1° til 25°) (16")	0° - +30°
								
Totalbredde ▼	Totalhøjde ▼	Totallængde inkl. benstøtter ▼	Total vægt ▼	Max brugervægt ▼	Transportvægt ▼	Crashtestet ▼	Maximum vejhældning ved håndbremse ▼	
<b>Azalea Base</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300 <sup>1</sup> / 1400 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg <sup>3</sup>	ISO 7176-19 <sup>2</sup>	7°	

1. **Rea Azalea Minor** har mindre dimensioner.
2. Crashtestet i særlige konfigurationer.
3. Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk betjening af ryg og sædevinkler.

## Stelfarve ▼



Antracitblå



## Rea **Azalea Minor** - designet til små voksne eller teenagere

**Azalea Minor** er designet til brugere, som har brug for et sæde, der er mindre i dybden og bredden end en traditionel komfortstol. Ligesom **Azalea**, har **Azalea Minor** alle fordelene ved en pålidelig, kip-bar kørestol med det særlige glidende balancepunkt.



### ◀ Rea **Azalea Minor**

Skubbehandtagene på **Azalea Minor** er fremstillet specielt udadvinklet, så de passer til hjælperens skulderstørrelse for at modvirke arbejdsskader.

## Rea **Azalea Tall** - Særligt egnet til høje brugere

**Azalea Tall** er specielt designet til at imødekomme behovene hos høje brugere, som har brug for en komfortkørestol med sædekip og stor komfort samtidig med en højere sædehøjde, højere rygghøjde samt et dybere sæde end på en standard komfortkørestol.



### ◀ Rea **Azalea Tall**

Azalea Tall er yderst stabil dels vha. et længere chassis dels et unikt glidende balancepunkt. Ud over at give en utrolig stabil stol, bliver stolen lettere at manøvrere for bruger eller hjælper.

## Tekniske data ▼

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website:  
<http://www.invacare.dk>

								
<b>Azalea Tall</b>	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Rygplade: 560 - 790 mm Justerbar stroppryg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° til 23° (+1° til 25°)	0° - 30°
<b>Azalea Minor</b>	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° til 25°	0° - 30°

								
<b>Azalea Tall</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	18,7 kg <sup>5</sup>	ISO 7176-19	7°
<b>Azalea Minor</b>	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg <sup>5</sup>	ISO 7176-19	7°

## Stelfarve ▼



Antracitblå

## Betræk ▼



Sort Aero  
(Standard)



Sort Dartex



Sort plys

- Som specialprodukt, mod merpris, kan Rea Azalea Minor bestilles i sædedybder fra 360 - 380 mm
- Som specialprodukt, mod merpris, kan Rea Azalea Minor bestilles i sædehøjde 360 mm
- Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk betjening af ryg og sædevinkler.

## En skræddersyet løsning til store brugere

Azalea Max er komfortkørestolen for tunge og store brugere med behov for tilt og sædekip. Azalea Max er designet til at opfylde de særlige behov, man finder hos brugere med et handicap som følge af en høj vægt, eller hvor en forøgelse af vægten er sekundær til en anden sygdom.



### ◀ Rea Azalea Max

Azalea Max er et supplement til den eksisterende Azalea familie, og her er taget ekstra hensyn til stabilitet, holdbarhed og komfort for bariatiske brugere.

## Kompatibilitet

Azalea Max tilbyder de samme funktioner som resten af Azalea-familien såsom sædekip og DSS® (Dual Stability System). Stabiliteten i denne kørestol fuldendes med længdekompensation i kørestolsryggen og benstøtterne. Dette har stor betydning og er til stor lettelse for brugere med begrænset bevægelse og problemer med selvstændigt at ændre siddestilling.



### ◀ 2 forskellige rygformer

Den øverste og nederste del af rygrygere med velcro er formet forskelligt. Ved at vende ryggen rundt kan der vælges mere eller mindre plads til enden/skuldrene.

## Tekniske data ▼

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website:  
<http://www.invacare.dk>

	Sædebredde ▼	Sædedybde ▼	Sædehøjde ▼	Ryghøjde ▼	Armlæns-højde ▼	Benstøtte-længde ▼	Sædevinkel ▼	Rygvinkel ▼
<b>Azalea Max</b>	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
<b>Azalea Max Assist</b>	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°

	Totalbredde ▼	Totalhøjde ▼	Totallængde inkl. benstøtter ▼	Totalvægt ▼	Max brugervægt ▼	Transportvægt ▼	Maximum vejhældning ved håndbremse ▼	
<b>Azalea Max</b>	SB + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg <sup>1</sup>	7°	1. Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk betjening af ryg og sædevinkler.
<b>Azalea Max Assist</b>	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	37 kg <sup>1</sup>	7°	

## Stelfarve ▼ Betræk ▼



Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark

Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International.  
Rea Azalea fremstillet med DSS (Dual Stability system). Det tilbyder brugeren øget stabilitet og sikkerhed, når stolen er kippet eller ryglænet er tiltet.



Yes, you can.®