

Action^{®3} Junior



label 2018
observateur
du design


JUNIOR

Jouw avontuur, jouw manier



Yes, you can.

Lightweight and foldable


Een lichte, opvouwbare en handbewogen rolstoel die speciaal ontworpen is voor kinderen. De **Action³ Junior** is in staat om mee te groeien met het kind en voor de benodigde klinische ondersteuning te zorgen.

- ▶ Telescopisch kruisframe
- ▶ Instelbare zithoogte
- ▶ Maak je stoel uniek



KEY

EXCLUSIVE
FEATURES

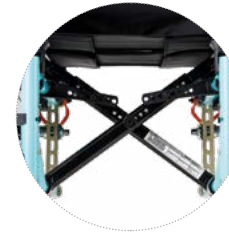

1

Telescopisch kruisframe

De instelbaarheid van de **Action³ Junior** laat deze toe om mee te groeien met uw kind. Zo is de rolstoel uitgerust met een instelbare zitbreedte en zithoogte.

2

Instelbare zithoogte

Om de hoogte te veranderen, kan het achterwiel op 20 verschillende posities gemonteerd worden.



3

Maak je stoel uniek

De rolstoel werd speciaal ontworpen om aan de eisen van ieder kind tegemoet te komen en om hun eigen stijl te creëren. Er kan gekozen worden uit 3 moderne spaakbeschermers en talrijke accessoires zijn beschikbaar.

Opties ▼



◀ Spaakbeschermers

Moderne spaakbeschermers en 6 framekleuren.



◀ Voorwielen

3 types voorwielen:
① 5" x 1" met lichtje,
② 5" x 1 3/4" massief,
③ 5" x 1" massief.



◀ Armsteunen

Afneembaar en hoogteverstelbaar
① Armsteunen
② junior armsteunen
③ kledijbeschermers
④ spatborden



▲ Beensteunen

① Beensteun 90°,
② Beensteun 80°,
③ Comfort beensteun met
verstelbare hoek 0°-80°.



▲ Naspanbare bekleding

De rugbekleding kan aangepast
worden met behulp van klittenband.

Opties ▼




▲ Werkblad

Naast het standaard werkblad, ook een
wegzwenkbaar werkblad beschikbaar.



▲ Zitkussen

Een 50 mm schuimkussen
verkrijgbaar.

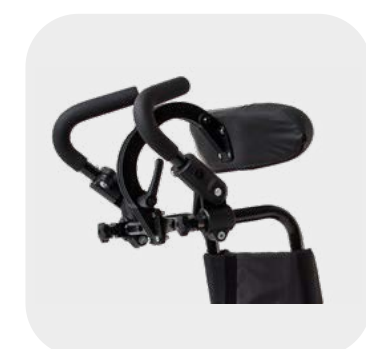

▲ Ergonomische duwhandvaten

Ergonomische duwhandvaten
voor gemakkelijk duwen.



▲ Abductie
beensteunpositie

Een 30° abductiepositie is
mogelijk met 80° beensteunen.



▲ Transitversie

Zithoogte 460 mm en
12" achterwielen.



▲ Posture Belt

Available in 2 sizes, it can be
adjusted to secure children's
positioning. Developed with
Bodypoint® with a central
adjustment and easy to use
buckle.





▲ Stabilisatiekit voorzijde

Om de stabiliteit te vergroten
bij actieve kinderen.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

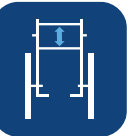							
	Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithelling ▼	Zithoogte ▼	Rughelling ▼	Rughoogte ▼	Voorste framehoek ▼
Zelfrijder	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
Transit	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°

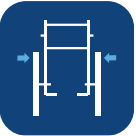							
	Onderbeenlengte ▼	Hoogte armsteun ▼	Totale breedte ▼	Totale breedte (dichtgevouwen) ▼	Totale lengte incl. voetsteunen ▼	Totale lengte zonder voetsteunen ▼	Totale hoogte ▼
Zelfrijder	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
Transit	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm

					
	Max. veiligheidshelling ▼	Draaicirkel ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Totaalgewicht ▼	Transportgewicht ▼
Zelfrijder	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg
Transit	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	8.5 / 12 ¹ kg




1. Transit versie

Framekleuren ▼



Bekleding ▼

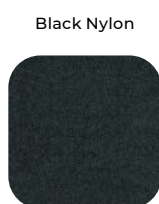

Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Nederland

