


TER INFORMATIE BESLISBOOM ACTION 5 VOORRAADMODELLEN

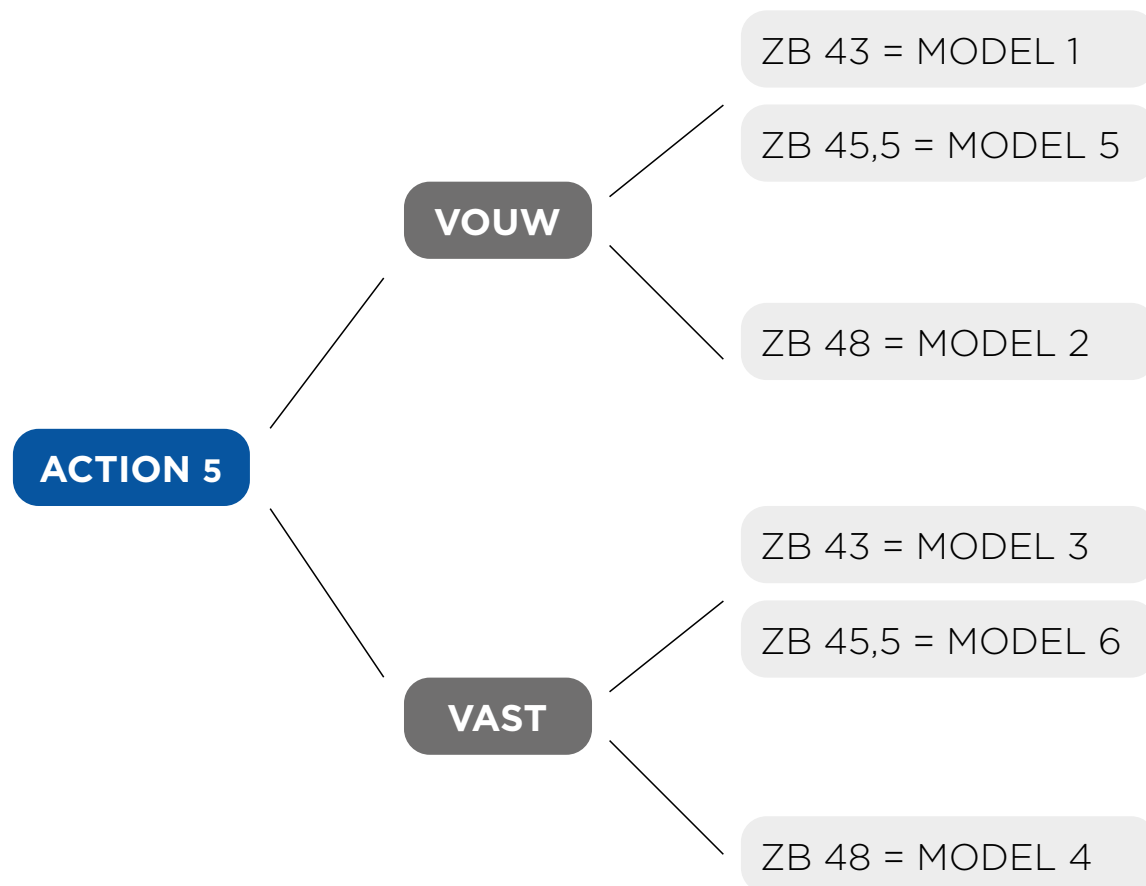

OPTIES

FUNCTIONELE

- Zithoogte 39,5 - 56,5 cm
- Zitdiepte 40 - 53 cm

ZITKUSSEN

- Lite
- Contour
- Contour Visco
- Stabilisator

RUG

- Spanbanden
- Matrx Elite E2 rughoogte: 46 cm
- Matrx Elite E2 Deep rughoogte: 46 cm

BEENSTEUN

- STD 80°
- Comfort

HOOFDSTEUN

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vouwframe € voorraadmodellen



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



130 KG



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

| Code | | Omschrijving | € |
|-------------------|--------------------------|--|----------------|
| BASISMODEL | | | |
| SJC0100 | ◆ | Basismodel Action5 vouwframe | 2637,00 |
| SJC1050 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 1 zitbreedte 430 mm | |
| SJC1060 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 5 zitbreedte 455 mm | 134,00 |
| SJC1070 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 2 zitbreedte 480 mm | 134,00 |
| SJC0200 | ◆ | Frame met wegzwenkbare beensteunen | |
| SJC0300 | ◆ | Zelbeweeger | |
| SJC1190 | ◆ | Zitdiepte instelbaar 400 - 530 mm, geleverd op 475 mm * | |
| SJC1230 | ◆ | Zithoogte voor instelbaar 435 - 460 mm, vork S, geleverd op 435 mm, icm 6" X 1.3/8", alu softroll voorwiel * | |
| SJC1340 | ◆ | Zithoogte achter instelbaar van 360 mm - 485 mm, geleverd op 410 mm | |
| SJC1520 | ◆ | Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar | |
| SJC2010 | ◆ | Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15° | |
| SJC2310 | ◆ | Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm | |
| SJC2410 | ◆ | Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar | 296,00 |
| SJC2510 | ◆ | Rugbekleding nylon met spanbanden | |
| SJC5500 | ◆ | Rugfixatiestang opvouwbaar | 119,00 |
| SJC4020+4120 | ◆ | Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar | |
| SJC6060 | ◆ | Framekleur pearl grey | |
| SJC6100 | ◆ | Accentkleur: grey | |
| SJC7230 | ◆ | Achterwielen 24", gekruist gespaakt | |
| SJC7302 | ◆ | Massieve banden, zwart, 1.3/8" | |
| SJC7400 | ◆ | Hoepels aluminium | |
| SJC7500 | ◆ | Quick Release assen | |
| SJC7610 | ◆ | Achterwielpositie instelbaar van passief tot zeer actief, geleverd op actief | |
| SJC7700 | ◆ | 0° camber | |
| SJC8100 | ◆ | Standaard drukremmen | |
| SJC8500+8550 | ◆ | Wegzwenkbare anti-tip, set | 256,00 |
| SJC8200 | ◆ | Taxifixatiebevestigingen | |
| SJC9250 | ◆ | Trapdop type Rea Focus, rechts | 33,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 1 | 3341,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 2 | 3475,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 5 | 3475,00 |

* Functioneel bereik middels voorraadopties:
zitdiepte: 400 - 530 mm
zithoogte (inclusief zitkussen): 395-565 mm

| Voorraadopties | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---------|
| SJCI200+7000 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 360 mm (4" x 1.1/4" softroll voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584356 en 2xSPI584029-0601) | 41,00 |
| SJCI210+7055 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 385 mm (5" X 1", massieve voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584354+ 2xSPI584029-0601) | 41,00 |
| SJCI220+7055 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 410 mm (5" X 1", massieve voorwielen, worden los meegeleverd) (2xSPI584354) | 41,00 |
| SJCI250 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 485 mm (lange vorken, worden los meegeleverd) (2xSPI584025-0005) | GM |
| I626666 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I626667 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I627621 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I575612 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I575614 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I575616 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I631378 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 500 mm | 211,00 |
| I631380 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm | 211,00 |
| I631383 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 500 mm | 211,00 |
| I548222 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 450 mm | 211,00 |
| I548224 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm | 211,00 |
| I631382 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 450 mm | 211,00 |
| I634493 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Medium, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm | 304,00 |
| I634494 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Medium, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm | 304,00 |
| I634492 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Firm, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm | 304,00 |
| I634488 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Firm, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm | 304,00 |
| I632543 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632551 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632559 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632664 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| I632672 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| I632769 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| SJC3020+3120 | <input type="checkbox"/> | Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, set (2xSPI584369-0515) | GM |
| SJC3040+3140 | <input type="checkbox"/> | Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat, set (SPI671234+SPI671238) | 334,00 |
| SJC3210+3310+3420 | <input type="checkbox"/> | Voetplaat, opklapbaar, hoek,- en diepte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, std insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm), set (I428659+I428653) | GM |
| SJC3210+3310+3430 | <input type="checkbox"/> | Voetplaat, opklapbaar, hoek, diepte en breedte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm), set - meest gekozen comfort beensteun (SPI603263+SPI603259) | GM |

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------|
| SJC5090 | <input type="checkbox"/> | Zitting stabilisator 395 x 480 mm (1494499) | 116,00 |
| SJC5650 | <input type="checkbox"/> | Matrx hoofdsteun soft kussen met standaard bevestigingsmateriaal (alleen i.c.m. Matrx rugleuning) (1634173) | 777,00 |
| SJC7200 | <input type="checkbox"/> | Achterwielen 22", gekruist gespaakt (2xSPI588643) | GM |
| SJC8120 | <input type="checkbox"/> | Drukremmen, verlengd (niet i.c.m. comfort beensteunen), worden los meegeleverd (SPI581545+SPI581546) | 62,00 |
| SPI585529 | <input type="checkbox"/> | Eenhandig bedienbare rem, links | 265,00 |
| SPI585518 | <input type="checkbox"/> | Eenhandig bedienbare rem, rechts | 265,00 |

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vastframe CE voorraadmodellen



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



130 KG



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

| Code | | Omschrijving | € |
|-------------------|--------------------------|--|----------------|
| BASISMODEL | | | |
| SJE0100 | ◆ | Basismodel Action5 vastframe | 2638,00 |
| SJEI050 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 3 zitbreedte 430 mm | |
| SJEI060 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 6 zitbreedte 455 mm | 134,00 |
| SJEI070 | <input type="checkbox"/> | Voorraadmodel 4 zitbreedte 480 mm | 134,00 |
| SJE0200 | ◆ | Frame met wegzwenkbare beensteunen | |
| SJE0300 | ◆ | Zelfbeweger | |
| SJEI190 | ◆ | Zitdiepte instelbaar 400 - 530 mm, geleverd op 475 mm * | |
| SJEI230 | ◆ | Zithoogte voor instelbaar 435 - 460 mm, vork S, geleverd op 435 mm, icm 6" X 1.3/8", alu softroll voorwiel * | |
| SJEI340 | ◆ | Zithoogte achter instelbaar van 360 mm - 485 mm, geleverd op 410 mm | |
| SJEI520 | ◆ | Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm) | |
| SJE2010 | ◆ | Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15° | |
| SJE2310 | ◆ | Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm | |
| SJE2410 | ◆ | Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar | 296,00 |
| SJE2510 | ◆ | Rugbekleding nylon met spanbanden | |
| SJE5600 | ◆ | Rugfixatiestang | 84,00 |
| SJE4020+4120 | ◆ | Armsteunen (N°I) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar | |
| SJE6060 | ◆ | Framekleur pearl grey Accentkleur: grey | |
| SJE6100 | ◆ | Accentkleur: grey | |
| SJE7230 | ◆ | Achterwielen 24", gekruist gespaakt | |
| SJE7302 | ◆ | Massieve banden, zwart, 1.3/8" | |
| SJE7400 | ◆ | Hoepels aluminium | |
| SJE7500 | ◆ | Quick Release assen | |
| SJE7610 | ◆ | Achterwielpositie instelbaar van passief tot zeer actief (geleverd op actief) | |
| SJE7700 | ◆ | 0° camber | |
| SJE8100 | ◆ | Standaard drukremmen | |
| SJE8500+8550 | ◆ | Wegzwenkbare anti-tip, set | 256,00 |
| SJE8200 | ◆ | Taxifixatiebevestigingen | |
| SJE9250 | ◆ | Trapdop type Rea Focus, rechts (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde) | 33,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 3 | 3307,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 4 | 3441,00 |
| | | Totaalprijs voorraadmodel 6 | 3441,00 |

* Functioneel bereik middels
voorraadopties:
zitdiepte: 400 - 530 mm
zithoogte (inclusief zitkussen):
395-565 mm

| Voorraadopties | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---------|
| SJEI200+7000 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 360 mm (4" x 1.1/4" softroll voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584356 en 2xSPI584029-0601) | 41,00 |
| SJEI210+7055 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 385 mm (5" X 1", massieve voorwielen en extra korte voorvork, worden los meegeleverd) (2xSPI584354+ 2xSPI584029-0601) | 41,00 |
| SJEI220+7055 | <input type="checkbox"/> | Zithoogte voor 410 mm (5" X 1", massieve voorwielen, worden los meegeleverd) (2xSPI584354) | 41,00 |
| SJEI250 | | Zithoogte voor 485 mm (lange vorken, worden los meegeleverd) (2xSPI584025-0005) | GM |
| I626666 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I626667 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I627621 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm | 196,00 |
| I575612 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I575614 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I575616 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm | 196,00 |
| I631378 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 500 mm | 211,00 |
| I631380 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 500 mm | 211,00 |
| I631383 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 500 mm | 211,00 |
| I548222 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 430 mm diepte 450 mm | 211,00 |
| I548224 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 455 mm, diepte 450 mm | 211,00 |
| I631382 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour kussen, stretch hoes, breedte 480 mm diepte 450 mm | 211,00 |
| I634493 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Medium, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 450 mm | 304,00 |
| I634494 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, stretch hoes, breedte 430 mm, diepte 500 mm | 304,00 |
| I634492 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, Firm, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 450 mm | 304,00 |
| I634488 | <input type="checkbox"/> | Matrx Flo-tech Contour Visco kussen, stretch hoes, breedte 480 mm, diepte 500 mm | 304,00 |
| I632543 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632551 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632559 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1007,00 |
| I632664 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 430 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| I632672 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 460 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| I632769 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep, B 480 mm H 460 mm incl.bevestiging met hoogteverstelling (wordt los meegeleverd) | 1134,00 |
| SJE3020+3120 | <input type="checkbox"/> | Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, set (SPI584369-0515) | GM |
| SJE3040+3140 | <input type="checkbox"/> | Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat, set (SPI671234+SPI671238) | 334,00 |
| SJE3210+3310+3420 | <input type="checkbox"/> | Voetplaat, opklapbaar, hoek,- en diepte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, std insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm), set (I428659+I428653) | GM |
| SJE3210+3310+3430 | <input type="checkbox"/> | Voetplaat, opklapbaar, hoek, diepte en breedte instelbaar, inclusief verstelbare hielband, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm), set - meest gekozen comfort beensteun (SPI603263+SPI603259) | GM |

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------|
| SJE5090 | <input type="checkbox"/> | Zitting stabilisator 395 x 480 mm (1494499) | 116,00 |
| SJE5650 | <input type="checkbox"/> | Matrx hoofdsteun soft kussen met standaard bevestigingsmateriaal (alleen i.c.m. Matrx rugleuning) (1634173) | 777,00 |
| SJE7200 | <input type="checkbox"/> | Achterwielen 22", gekruist gespaakt (2xSPI588643) | GM |
| SJE8120 | <input type="checkbox"/> | Drukremmen, verlengd (niet i.c.m. comfort beensteunen), worden los meegeleverd (SPI581545+SPI581546) | 62,00 |
| SPI585529 | <input type="checkbox"/> | Eenhandig bedienbare rem, links | 265,00 |
| SPI585518 | <input type="checkbox"/> | Eenhandig bedienbare rem, rechts | 265,00 |

TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



Zithoogtes (framehoogtes) voorzijde: wiel- en vorkcombinaties

Fork Type

| Fork Type | Front wheel size | Seat height in front (FSTF) in mm | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SH360 / 14" [SJ_1200] | SH385 / 15" [SJ_1210] | SH410 / 16" [SJ_1220] | SH435 / 17" [SJ_1230] | SH460 / 18" [SJ_1240] | SH485 / 19" [SJ_1250] | SH510 / 20" [SJ_1260] | SH510 / 21" [SJ_1270] |
| Ultra Low (UL) | 4" (100 mm) [SJ_7000] [SJ_7020] [SJ_7030] [SJ_7040] | UL1 | | S2 | S4 | L3 | L2 | | |
| Small (S) | 5" (125 mm) [SJ_7055] [SJ_7060] [SJ_7070] | Ultra Low | UL2 | S1 | S3 | L2 | L1 | L3 | |
| Large (L) | 6" (150 mm) [SJ_7080] [SJ_7090] [SJ_7100] | | | | S2 | S4 | L3 | L2 | |
| | 7" (180 mm) [SJ_7110] | | | | | S3 | L2 | L1 | L3 |


Be aware : ONLY 16.5mm between floor and fork

Spacer is added to achieve height

In geel: Haalbaar met Action 5 voorraad-modellen

Verhouding zithoogte voorzijde ten opzichte van achterzijde (wig)

| | | Zithoogte voorzijde | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | (mm) | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 |
| Zithoogte achterzijde | 360 | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 385 | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 410 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 435 | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 460 | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 485 | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 510 | | | | | | | | ○ | ○ |

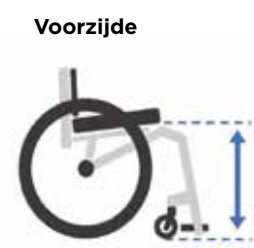

Zithoogtes achterzijde: bijbehorende wielcombinaties

| | | Achterwiel in relatie tot zithoogte achter (ZHA) | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | (mm) | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 |
| Wielmaat | 22" | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 24" | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 25" | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN




Zithoogtes achterzijde: wielposities

ZITHOOGTE ACHTER AANPASSEN

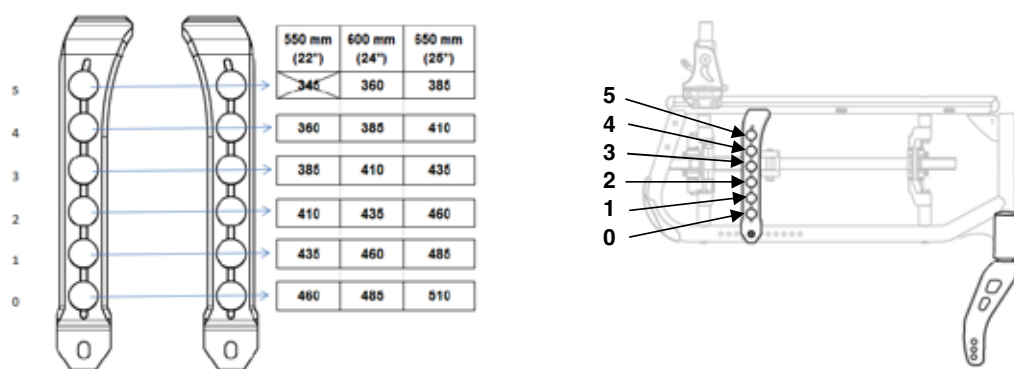


Mate van actief afstellen aan de hand van asplaatpositie (kantelmoment): van standaard (veilig/passief) tot zeer actief

REAR WHEELS/FRONT CASTORS

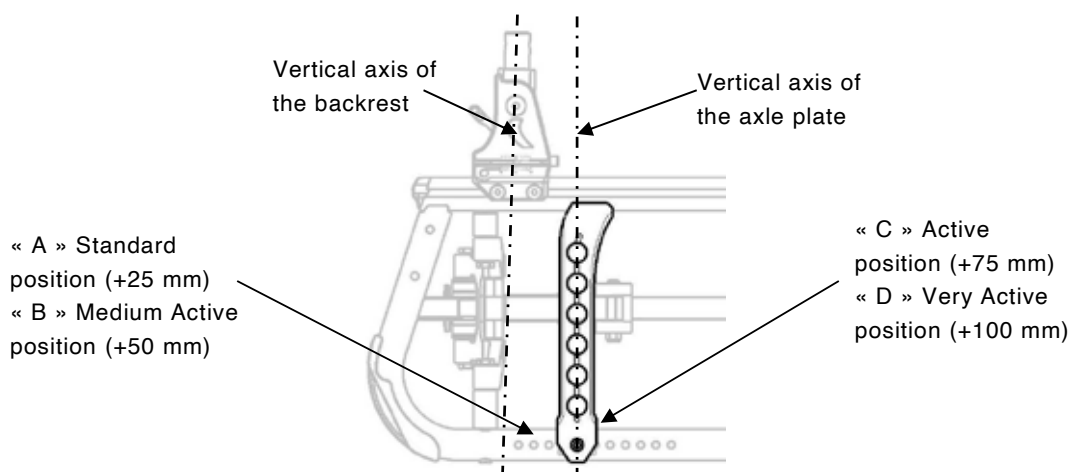

Kussendiktes (zonder belasting; ter bepaling functionele zithoogte)

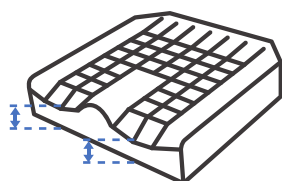

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Flo-tech Lite: | 6 cm |
| Flo-tech Contour en Contour Visco: | 8 cm |
| Matrx Libra: | 6 cm |
| Stabilisator: | 1,5 cm |
| Zitkussen belast: | +/- -2 cm |

TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



Werkinstructie Action 5 voorraadmodellen

Instructie Action 5 voorraadmodel gereed maken voor gebruik

1. Zitdiepte instellen



De zitdiepte is instelbaar door de rugbuis naar voren of naar achteren te schuiven.



Het achterste gedeelte van de zitmat schuift daarbij mee.



Evt. is de zitdiepte ook instelbaar middels de Matrix bevestiging.

2. Functionele zithoogte = framehoogte + dikte belast kussen - inzakking spanbanden (+ optionele stabilisator)



TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



3. Met de stabilisator wordt de functionele zithoogte 1,5 cm hoger.



4. Instellen achterwielpositie

Af-fabriek wordt de Action 5 geleverd in achterwielpositie Actief (achterwielas 75 mm voor de rug). Afhankelijk van het gebruik kan deze actiever of minder actief worden ingesteld.



REAR WHEELS/FRONT CASTORS

