

Maak kennis met de Ocean Dual VIP Ergo

Ontdek onze meest geavanceerde douche-/toiletstoelen met zitkantelverstelling met de nieuwste doorontwikkelingen. De Ocean VIP Ergo en de Ocean Dual VIP Ergo zijn uiterst configureerbaar en modulair. Zij bieden oplossingen met een hoog niveau van comfort en ondersteuning voor in de badkamer.



Ocean VIP Ergo

Een geavanceerd model met zitkantelverstelling van -5° tot 40°.



Ocean Dual VIP Ergo

Een geavanceerd exemplaar met zitkantelverstelling van -5° tot 40° en extra rugverstelling.

NIEUW Verbeterde ergonomische hoofdsteenhouder




Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing en de onderdelenlijst, raadpleeg de Invacare website.



Zitbreedte ▼ Zitdiepte ▼ Totale breedte ▼ Totale diepte ▼ Breedte tussen armsteunen ▼

Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm

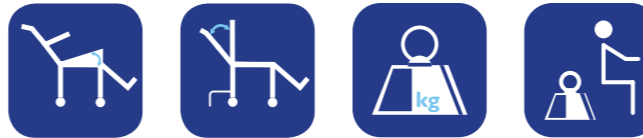

Hoek zitkanteling ▼ Hoek rugkanteling ▼ Gewicht ▼ Belastbaar gewicht ▼

Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Frame kleur

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

© 2021 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging. Ocean VIP Ergo - NL - 05/2021



Yes, you can.®



AQUATEC®
Ocean VIP Ergo
Ocean Dual VIP Ergo

onze meest geavanceerde douche-/toiletstoelen met zitkantelverstelling

Premium oplossingen voor persoonlijke hygiëne

Ontwerp naar klinisch inzicht, verstelbaar en ondersteunend



Yes, you can.®

Onze volgende generatie douche-/toiletstoelen met zitkanteling

Onze nieuwste Aquatec Ocean VIP Ergo en Ocean Dual VIP Ergo zijn modulaire douche-/toiletstoelen met zitkantelverstelling waarmee tegemoet kan worden gekomen aan een variëteit aan gebruikers en hun positioneringsbehoeften. Beide modellen hebben een zitkanteling van -5° tot 40° en de Ocean Dual VIP Ergo heeft ook nog een rugverstelling van 5° tot 35° voor complexere zit- en positioneringsbehoeften.

Zoals bij alle Ocean Ergo modellen, kunnen ook de VIP en de Dual VIP Ergo naar wens worden aangepast door het maken van kleine veranderingen of het toevoegen van accessoires. Het op klinisch inzicht gebaseerde ontwerp zorgt voor eenvoudig gebruik door de zorgverlener terwijl tegelijkertijd optimale veiligheid en comfort wordt geboden aan de zorgvrager.

NIEUW

Ergonomische hoofdsteunhouder

Met verschillende asverstellingen biedt de ergonomische hoofdsteunhouder superieure houdingsondersteuning voor de hoofd/nek regio. Verstelen gaat snel en simpel door het los- en aandraaien van de handschroeven om de correcte positie te bewerkstelligen voor de gebruiker. Eenvoudig te verstellen zonder gebruik van gereedschap.

NIEUW

Stopfunctie zitkanteling

Een eenvoudige optionele functie die voorkomt dat de zitkanteling onder de 0° komt. Dit zorgt ervoor dat het frame horizontaal blijft en helpt wanneer iemand in/uit de stoel wordt getild met een tillift.

Kenmerken en voordelen



Unieke zitkanteling

Het zitkantelmechanisme zorgt ervoor dat de zitting tijdens het kantelen ook naar beneden en naar voren beweegt, zodat het zwaartepunt van de gebruiker dichtbij dat van de stoel blijft. Dit maakt de kantelhandeling lichter en intuïtief voor de zorgverlener, zorgt voor een soepele en comfortabele ervaring voor de zorgvrager en heeft de voetafdruk van de stoel verkleind zonder in te leveren op stabiliteit.

Rugverstelling

Kanteling van de rug van 5° tot 35°, van toepassing op de Ocean Dual VIP Ergo.



Voorgevormde, ergonomische zitting

Ontworpen rondom de afdrukken die mensen achterlaten bij het zitten. Stimuleert een rechtopzittende houding voor meer onafhankelijkheid en comfort.

Een 5° zitkanteling tilt de knieën op in een natuurlijke squatpositie voor de toiletgang.

Transferondersteuning aan de voorzijde van de zitting faciliteren dat de gebruiker zichzelf kan positioneren in een comfortabele positie tijdens het douchen en de toiletgang.

NIEUW

Verbeterd armsteun systeem

Nieuw ontworpen armsteunen bieden meer ondersteuning en comfort voor de gebruiker. De nieuwe, optionele armleggers bieden een zachter rustoppervlak. Eenvoudig geïntegreerd vergrendelmachisme optioneel verkrijgbaar.

Verstelbare arm- en voetsteunen

Hoogte van de armsteun en voetsteun en ook van de zithoogte kunnen eenvoudig worden aangepast.



Zeer configureerbaar

Verkrijgbaar met een uitgebreide range accessoires voor positionering, toiletgang en zitten. Ter ondersteuning van een variëteit aan gebruikerscondities en positioneringsbehoeften



Extreem stabiel

Uitzonderlijk stabiel voor extra veiligheid en een vertrouwd gevoel, ook bij maximale kanteling.



Kleinere voetafdruk

Een compacte voetafdruk en een geoptimaliseerde wielbasis maken de stoel goed manoeuvreerbaar in kleine ruimtes.



Stalen frame

Frame van corrosie- en roestvrij staal.



Machine wasbaar

Naspanbare rug kan worden gewassen in de wasmachine.



5° - 35°



Bekijk de Ocean VIP Ergo online op www.invacare.nl