

AQUATEC®

Ocean Ergo

Opties en aanpassingen



Eenvoudige aanpassingen die een verschil maken

Aanpasbaar, ergonomisch en veelzijdig



Yes, you can.®

Aanpassingen en opties

Onze Ocean Ergo range biedt een geavanceerde oplossing in douche-/toiletstoelen. Elke stoel is ontworpen met eenvoudige mogelijkheden voor aanpassingen. Om de stoel verder passend te maken bieden onze opties extra comfort, ondersteuning en veiligheid.



Voetplaten

- > Hoekverstelbare, opklapbare en anti-slip voetsteunen met hielbanden
- > Geen gereedschap vereist

Beensteunen

- > Hoogteverstelbare, wegzwenkbare en afneembare beensteunen
- > Geen gereedschap vereist

Armsteunen

- > Ergonomische, opklapbare armsteunen kunnen in verschillende hoogtes worden geplaatst

Zithoogte

- > Zithoogte kan worden ingesteld tussen 440 - 600 mm* of 475 - 600 mm **.
- * Ocean Ergo, Ergo XL en 24" Ergo modellen
- ** Ocean 24" Ergo XL en VIP modellen
- > Geen gereedschap vereist

Opties

Zittingen en rugleuningen



Zachte zitting

Contouren volgen het zitvlak voor meer comfort. Ook verkrijgbaar met kleinere hygiënische uitsparing. Eenvoudig te reinigen.



Opvulstuk voor zachte zitting

Kan worden gebruikt met de zachte zitting wanneer de toiletfunctie niet gebruikt wordt. Verkrijgbaar in twee versies, voor een standaard zachte zitting en één met kleine opening. De standaard uitvoering past ook direct op de zitplaat.



Ergonomisch vormgegeven extra zacht zitkussen

Extra zacht, gevormd zitvlak van traagschuim met hygiënische uitsparing. De diepere immersie in het schuim draagt bij aan een betere bekkenstabiliteit en positionering.



Variabele comfortzitting met 4 posities

Draaibare, hygiënische uitsparing met 4 posities voor eenvoudige toegang voor zorgverleners.



Gesloten zachte zitting

Comfortabel, gesloten zitvlak voor wanneer de toiletfunctie niet gebruikt wordt.



Stevige rugleuning in kunststof

Zorgt voor een stabiele, rechte positie en is eenvoudig schoon te maken.



Armleggers

Nieuw ontwerp biedt meer ondersteuning en comfort voor de cliënt (niet voor XL armsteunen).



XL-rug

Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 80 mm. Kan als ombouwset gebruikt worden op de Ocean Ergo modellen.



Brede +80 mm XL armsteunen

Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 40 mm aan beide zijden.



Zacht rugkussen

Verhoogt de stabiliteit en comfort - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen. Verkleint de zitdiepte.



Zachte rugleuning


Van zachter materiaal, voor extra comfort.



Ocean VIP Ergo backrest frame

Voor achteraf aanpassen van de Ocean Ergo of Ocean 24" Ergo om een hoofdsteun of neksteun te plaatsen (hoofdsteun, armsteunen, rughoes niet).

Veiligheid

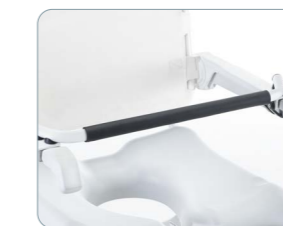

Veiligheidsbeugel

Voor extra veiligheid.



Armsteunvergrendeling

Vergrendelt de armsteun in horizontale of verticale positie.



Anti-tip voor en achter

Voor extra veiligheid bij VIP en Dual VIP.



Kantelstop

Extra veiligheid voor cliënten die in en uit de stoel gaan met behulp van een tillift. De kantelstop schroeven zorgen ervoor dat de zitting horizontaal blijft.

Positionering



Veiligheidsgordels

Brede gordel van zacht materiaal met enkele gesp. Kan worden gebruikt over het bekken of extra over de borst voor veilige positionering. Eenvoudig te monteren. Machine wasbaar.



Pelotten

Voor goede positionering. Verstelbaar in breedte en hoogte - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen.



Ergonomische hoofdsteunhouder

Veilig en comfortabel met verschillende instelmogelijkheden voor complexe hoofd-/nekpositionering. (hoofdsteun niet inbegrepen).



Ergonomische hoofd-/neksteun

Biedt uitzonderlijke controle over de hoofdpositie. (Neksteun op de afbeelding)

Toiletgebruik



Comfort beensteun met voetplaat

Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar met extra voetondersteuning. Beschikbaar links en rechts.



Amputatiesteun

Zonder voetsteun.



Spatbescherming

Eenvoudig opklembaar, voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens.



Ondersteek

Dankzij de ergonomische handgreep kan de emmer eenvoudig uit de houder genomen worden. Dekselhouder wanneer deksel niet vereist is.

Personaliseer elk van onze Ocean Ergo modellen

Dit praktische overzicht legt uit hoe de Ocean Ergo Familie kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de gebruiker. Dit gebeurt door eenvoudige aanpassingen aan te brengen of door de eenvoudig te monteren, kant-en-klare opties.



Ocean Ergo

Een verrijdbaar
basismodel



Ocean Ergo XL

Een verrijdbaar
basismodel met een max.
gebruikersgewicht van 180 kg



Ocean 24'' Ergo

Een zelfrijder basismodel



Ocean 24'' Ergo XL

Een zelfrijder basismodel met
een max. gebruikersgewicht
van 180 kg



Ocean VIP Ergo

Een model met
zitkantelverstelling voor extra zit-
en positioneringsondersteuning



Ocean Dual VIP Ergo

Een model met zitkantel- én
rugverstelling voor extra zit- en
positioneringsondersteuning

Compatibiliteit

✓ Compatibel
x Niet compatibel
+ Inbegrepen

De meeste accessoires zijn compatibel met alle Ocean Ergo-modellen.

	Product code	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Zachte zitting	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opvulstuk voor zachte zitting	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachte zitting met kleine opening	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opvulstuk voor kleine opening	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spatbescherming	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesloten zachte zitting	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomisch vormgegeven extra zacht zitkussen	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variabele comfortzitting met 4 posities	1544469	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Veiligheidsbeugel 2.0 (alleen met armsteunen 2.0)	AP60123732	✓	✓	x	x	✓	✓
XL veiligheidsbeugel 2.0 (alleen met armsteunen 2.0)	AP60123771	x	x	✓	✓	x	x
XL veiligheidsbeugel (alleen met bredere XL armsteunen)	1470078	✓	✓	x	x	✓	✓
Veiligheidsgordel voor borst	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsgordel voor bekken	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL-rug	AP1604015	✓	✓	+	+	x	x
Stevige rugleuning	1575299	✓	✓	x	x	✓	✓
Zacht rugkussen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlegger pad (1 pad; alleen voor armsteun 2.0)	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bredere XL armsteunen	1470086	✓	✓	x	x	✓	✓
Vergrendeling voor XL armsteun	1470077	✓	✓	x	x	✓	✓
Vergrendeling 2.0 (voor armsteunen 2.0)	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24" wielen (set)	16379	✓	+	✓	+	x	x
Amputatiesteun rechts	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputatiesteun links	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comfort beensteun met voetplaat rechts	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comfort beensteun met voetplaat links	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelot	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomische hoofdsteunhouder	AP1531613	✓ ²	✓ ²	x	x	✓	✓
Ergonomische hoofdsteun	1531465	✓ ²	✓ ²	x	x	✓	✓
Ergonomische neksteun	1531608	✓ ²	✓ ²	x	x	✓	✓
Ondersteek	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geleiderails voor ondersteek	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-tip voor- en achter	AP1603992	x	x	x	x	✓	✓
Anti-tip Ocean Ergo-modellen voor	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x	x
Zachte rugleuning VIP Ergo modellen	AP1603606	x	x	x	x	✓	✓
Zachte rugleuning Ocean Ergo modellen	AP1604136	✓	✓	x	x	x	+
Zachte rugleuning Ocean Ergo XL modellen	AP1604016	x	x	✓	✓	x	x
Kantelstop schroefset	AP60129156	x	x	x	x	✓	✓

1/ alleen samen met beschermhoezen, item no. AP1605002

2/ hoofdsteun of neksteun allen in combinatie met Ocean VIP Ergo rugframe, item no. AP1606985

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®