



# aquatec®

## Pure-assortiment

---

Discreet ontwerp voor  
alledaagse routines





## Past in elk huishouden

Het Aquatec **Pure** assortiment brengt doordacht ontworpen producten samen die persoonlijke verzorging ondersteunen op een manier die natuurlijk, discreet en betrouwbaar aanvoelt. Ontwikkeld voor thuis- en zorgomgevingen en ontworpen om het bijbehorende stigma te doorbreken en de zelfredzaamheid in het dagelijks leven te bevorderen.

---

### aquatec®

Aquatec blijft een vertrouwde naam voor oplossingen op het gebied van persoonlijke verzorging. Al tientallen jaren zijn veiligheid, eenvoud en duurzame kwaliteit de kenmerken van het merk.



Toiletgang



Douchen



In bad gaan



Veiligheid



# Pure Sol, Bay & Siro Douchekrukken

De Aquatec **Pure Sol**, **Bay** en **Siro** douchekrukken zijn ontworpen om het comfort, de veiligheid en de onafhankelijkheid te vergroten.

Deze elegante en compacte krukken zijn ideaal voor hoeken en kleinere ruimtes.



Ronde  
douche kruk  
**Pure Sol**



Rechthoekige  
douche kruk  
**Pure Bay**

## Hoofdkenmerken



-  **Lichtgewicht en meeneembaar**  
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
-  **Verstelbare zithoogte**  
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.
-  **Meer comfort**  
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.
-  **Poten van geanodiseerd aluminium**  
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
-  **Stabiel op oneffen ondergronden**  
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten\* en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

## Eenvoudig in montage en onderhoud

 **Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap**  
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik

 **Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem**  
Voor veilige en snelle (de) montage

 **Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken**  
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

Driehoekige  
douche kruk  
**Pure Siro**

\*Uitsluitend voor een horizontale zitpositie.



# Pure Isla Douchestoelen

De Aquatec **Pure Isla** douchestoelen zijn ontworpen om een veilige en comfortabele zitoplossing te bieden voor persoonlijke verzorging.

Het ontwerp is geïnspireerd op balans en beweging, en combineert een gevoel van rust met kracht en stabiliteit.



**Pure Isla**  
Zitting



**Pure Isla**  
Zitting met  
armsteunen



**Pure Isla**  
Zitting met  
rugleuning

## Eenvoudig in montage en onderhoud



**Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap**  
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik



**Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem**  
Voor veilige en snelle (de)montage



**Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken**  
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

## Hoofdkenmerken



**Lichtgewicht en meeneembaar**  
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.



**Verstelbaar in zithoogte en voorwaartse kanteling**  
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.



**Meer comfort**  
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.



**U-vormige zitting**  
Verbeterd de toegankelijkheid. Kan voor of achter worden geplaatst, afhankelijk van de persoonlijke behoeften.



**Poten van geanodiseerd aluminium**  
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.



**Stabiel op oneffen ondergronden**  
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

**Pure Isla**  
Zitting met  
armsteunen en  
rugleuning



# Pure Azure Douche-/ toiletstoelen

De Aquatec **Pure Azure** heeft een 3-in-1-ontwerp en kan worden gebruikt als douchestoel, toiletframe of toiletstoel.

Zorgt voor comfort en veiligheid, zelfs als persoonlijke behoeften in de loop der tijd veranderen.



**Pure Azure**  
Geconfigureerd als douchestoel



**Pure Azure**  
Geconfigureerd als toiletframe

## Hoofdkenmerken



- 

**Lichtgewicht en meeneembaar**  
Eenvoudig op te tillen en te verplaatsen.
- 

**Verstelbaar in zithoogte en voorwaartse kanteling**  
De verstelbare positionering verlicht de druk op de rug, heupen en knieën.
- 

**Meer comfort**  
De gladde randen van de zitting verminderen de druk en verbeteren het comfort.
- 

**Brede hygiënische uitsparing**  
Voor handig gebruik als alternatief voor het toilet.
- 

**Veelzijdige houder voor de toiletemmer**  
Hierdoor kan de toiletemmer zowel aan de voor- als achterkant worden verwijderd.
- 


**Poten van geanodiseerd aluminium**  
Bieden stabiliteit, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
- 

**Stabiel op oneffen ondergronden**  
Kan worden gebruikt met de in hoogte verstelbare poten en is voorzien van antislip rubberen dopjes voor veilig gebruik.

## Eenvoudig in montage en onderhoud

 **Montage en hoogteverstelling zonder gereedschap**  
Vereenvoudigt de installatie en het gebruik

 **Gebruiksvriendelijk vergrendelingssysteem**  
Voor veilige en snelle (de)montage

 **Onderhoudsvrij en gemakkelijk schoon te maken**  
Geschikt voor dagelijks gebruik in een thuis- of zorgomgeving.

**Pure Azure**  
Geconfigureerd als toiletstoel



# 🔧 Pure Cala Toiletverhoger

De Aquatec **Pure Cala** toiletverhoger is ontworpen voor ondersteuning bij persoonlijke verzorging. Hij is gebruiksvriendelijk en gebouwd voor blijvende stabiliteit en zorgt ervoor dat dagelijkse zorgroutines natuurlijk, discreet en geruststellend aanvoelen.



### Eenvoudig te installeren

Installatie zonder gereedschap: snel en eenvoudig.



### Easy-grip bevestiging

De voorgevormde, opgeruwde stelschroef maakt het monteren gemakkelijker voor mensen met beperkte behendigheid.



[Klik hier om de video te bekijken >>](#)



## Hoofdkenmerken



### Optionele deksel

Kies Pure Cala met of zonder deksel.



### Optionele zachte zitting

Voor extra comfort.



### Optimale hoogte

Met 10 cm verhoogd voor eenvoudigere beweging van zitten naar staan.



### Veilig en ondersteunend

Ingebouwd vergrendelingssysteem met rubber antislip-inzetstukken zorgt voor stabiliteit.



### Voor comfort ontworpen

Subtiel geronde zitting geeft optimale ondersteuning en comfort.



### Universeel passend

Compatibel met vele verschillende toiletten en badkamers.



Opening aan voor- en achterkant



Resistent tegen vlekken en eenvoudig schoon te maken



Discreet design



# Technische gegevens

## Douchekrukken Pure Sol, Bay en Siro



Zitbreedte



Zitdiepte



Zithoogte

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (op het breedste punt)	440 mm	420 – 570 mm




Gewicht



Belastingcapaciteit

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg

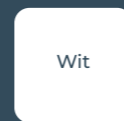

Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa

## Douchestoel Pure Isla



Zitbreedte



Zitdiepte



Zithoogte



Totale hoogte

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Rughoogte



Breedte rugleuning



Hoogte armsteunen



Breedte armsteunen

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Totale breedte



Gewicht



Belastingcapaciteit

615 mm	2,8 kg (zitting) 3,5 kg (zitting + armsteunen) 3,7 kg (zitting + rugleuning) 4,4 kg (complete stoel)	160 kg
--------	---	--------



Kleur



Levensduur

Geproduceerd in Europa



# Technische gegevens

## Douche-/toiletstoel Pure Azure



**Zitbreedte**

500 mm



**Zitdiepte**

420 mm



**Zithoogte**

420 – 570 mm



**Totale hoogte**

780 – 930 mm



**Rughoogte**

360 mm



**Breedte rugleuning**

435 mm



**Hoogte armsteunen**

210 mm



**Breedte armsteunen**

250 mm



**Totale breedte**

615 mm



**Breedte hygiënische uitsparing**

195 mm



**Diepte hygiënische uitsparing**

235 mm



**Gewicht**

5,1 kg (met emmer)



**Kleur**



**Levensduur**

**Geproduceerd in Europa**



**Belasting-capaciteit**

160 kg

## Toiletverhoger Pure Cala van Aquatec



**Breedte van de opening**

205 mm



**Totale breedte**

365 mm




**Diepte van de opening**

255 mm



**Totale diepte**

405 mm

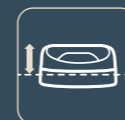

**Verhoogde zithoogte vanaf toiletpot**

100 mm



**Totale hoogte product**

155 mm is inclusief het geïnstalleerde vergrendelingssysteem



**Gewicht**

1,1 kg (met deksel)  
0,7 kg (zonder deksel)



**Belasting-capaciteit**

250kg



**Kleur**



**Levensduur**

**Geproduceerd in Europa**



Wij leggen ons toe op het gebruik van ecologisch bewuste materialen, vermijden waar mogelijk plastic en onderzoeken slimmere verpakkingsoplossingen.

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede, Nederland  
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem, België  
Tel. : +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)