



aquatec®

Gama Pure

Diseño discreto para
las rutinas diarias





Diseñada para integrarse en cualquier hogar

La gama Aquatec **Pure** reúne productos cuidadosamente diseñados que facilitan el cuidado personal de una forma natural, discreta y fiable. Creada para el ámbito doméstico y sanitario, y diseñada para romper con el estigma asociado y fomentar la independencia en la vida cotidiana.

[Click here to discover the range >>](#)

aquatec®

Aquatec sigue siendo una marca de confianza en el ámbito de las soluciones para el cuidado personal. Durante décadas, la seguridad, la sencillez y la calidad duradera se han convertido en su sello distintivo.



WC



Ducharse



Bañarse



Seguridad



Pure Sol, Bay & Siro Taburetes de ducha

Los taburetes de ducha Aquatec **Pure Sol, Bay y Siro** se han diseñado para aumentar la comodidad, la seguridad y la independencia.

Elegantes y compactos, estos taburetes se han diseñado para que se adapten perfectamente a las esquinas o a los espacios reducidos.



Taburete de ducha **Pure Sol** redondo



Taburete de ducha **Pure Bay** rectangular

Principales características



Taburete de ducha **Pure Siro** triangular

-  **Ligero y portátil**
Facilita la elevación y el movimiento.
-  **Altura de asiento regulable**
El posicionamiento personalizado contribuye a aliviar la tensión en la espalda, la cadera y las rodillas.
-  **Comodidad mejorada**
Los bordes lisos del asiento ayudan a reducir la presión y a mejorar la comodidad.
-  **Patas de aluminio anodizado**
Ofrecen estabilidad, durabilidad y resistencia a la corrosión.
-  **Estable en superficies irregulares**
Se puede utilizar con las patas ajustadas* a diferentes alturas que están provistas de conteras de goma antideslizantes para garantizar un uso seguro.

Fácil montaje y mantenimiento



Montaje y ajuste de altura sin herramientas
Simplifica la configuración y utilización



Sistema de bloqueo fácil de manejar
Para un montaje y desmontaje seguro y rápido.



No requiere mantenimiento y es fácil de limpiar
Apto para el uso diario en el hogar o en entornos sanitarios.

*For a horizontal seating position only.



Pure Isla

Sillas de ducha

Las sillas de ducha Aquatec **Pure Isla** se han diseñado para proporcionar una solución de asiento segura y digna para el aseo personal.

Diseño inspirado en el equilibrio y el movimiento, que combina una sensación de calma con fuerza y estabilidad.



Taburete **Pure Isla**




Taburete **Pure Isla** con reposabrazos





Taburete **Pure Isla** con respaldo


Principales características





- 

Ligera y portátil
Facilita elevación y movimiento.
- 

Ajustes de altura de asiento e inclinación anterior
El posicionamiento personalizado contribuye a aliviar la tensión en la espalda, la cadera y las rodillas.
- 

Comodidad mejorada
Los bordes lisos del asiento ayudan a reducir la presión y a mejorar la comodidad.
- 

Asiento con forma de U
Mejora la accesibilidad. Puede colocarse en la parte delantera o trasera, según las necesidades particulares.
- 

Patas de aluminio anodizado
Ofrecen estabilidad, durabilidad y resistencia a la corrosión.
- 

Estable en superficies irregulares
Se puede utilizar con las patas ajustadas a diferentes alturas que están provistas de tapas de goma antideslizantes para garantizar un uso seguro.

Fácil montaje y mantenimiento



Montaje y ajuste de altura sin herramientas
Simplifica la configuración y el uso.



Sistema de bloqueo fácil de manejar
Para un montaje y desmontaje seguro y rápido.



No requiere mantenimiento y es fácil de limpiar
Apto para el uso diario en el hogar o en entornos sanitarios.

Silla **Pure Isla** con reposabrazos y respaldo



Pure Azure Silla de WC

La silla inodora Aquatec **Pure Azure** presenta un diseño 3 en 1, por lo que puede utilizarse como silla de ducha, marco de lavabo o inodoro portátil.

Garantía de comodidad y seguridad a medida que las necesidades personales van cambiando.



Pure Azure configurado como silla de ducha



Pure Azure configurado como marco de lavabo

Principales características



-  **Ligera y portátil**
Facilita la elevación y el movimiento.
-  **Ajustes de altura de asiento e inclinación anterior**
El posicionamiento personalizado contribuye a aliviar la tensión en la espalda, la cadera y las rodillas.
-  **Comodidad mejorada**
Los bordes lisos del asiento ayudan a reducir la presión y a mejorar la comodidad.
-  **Amplio acceso higiénico amplio**
Para un uso cómodo como alternativa al inodoro.
-  **Soporte de cubeta versátil**
Permite retirar la cubeta por la parte frontal y trasera.
-  **Patas de aluminio anodizado**
Ofrecen estabilidad, durabilidad y resistencia a la corrosión.
-  **Estable en superficies irregulares**
Se puede utilizar con las patas ajustadas a diferentes alturas e incluyen conteras de goma antideslizantes para un uso seguro.

Fácil montaje y mantenimiento



Montaje y ajuste de altura sin herramientas
Simplifica la configuración y el uso.



Sistema de bloqueo fácil de manejar
Para un montaje y desmontaje seguro y rápido.



No requiere mantenimiento y es fácil de limpiar
Apto para el uso diario en el hogar o en entornos sanitarios.

Pure Azure configurado como silla inodora



Pure Cala Elevador de inodoro

El asiento elevador de inodoro Aquatec **Pure Cala** se ha diseñado para facilitar el aseo personal. Fácil de usar y diseñado para ofrecer estabilidad duradera, aportar naturalidad, discreción y comodidad en las rutinas de cuidado diario.



Fácil de montar

El montaje sin herramientas facilita y agiliza la instalación.



Fijación de fácil agarre

La palomilla facilita el montaje a personas con movilidad reducida, gracias a su forma y textura.



Haga clic aquí para ver el vídeo >>



Principales características



Tapa opcional

Pure Cala con o sin tapa.



Asiento blando opcional

Para mayor comodidad.



Altura óptima

La altura del WC incrementa en 10cm para facilitar el sentarse y levantarse.



Seguro y con buen soporte

El sistema de bloqueo integrado con inserciones de goma antideslizantes garantiza la estabilidad.



Diseño cómodo

El elevador suavemente contorneado ofrece soporte y comodidad óptimos.



Ajuste universal

Compatible con una amplia gama de inodoros y cuartos de baño.



Apertura delantera y trasera



Resistente a las manchas y fácil de limpiar



Diseño discreto y sobrio



Especificaciones técnicas

Taburetes Pure Sol, Bay y Siro



Ancho de asiento



Profundidad de asiento



Altura de asiento

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (en el punto más ancho)	440 mm	420 – 570 mm




Peso



Capacidad de carga

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg

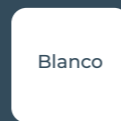

Color



de vida útil

Fabricado en Europa

Silla de ducha Pure Isla



Ancho de asiento



Profundidad de asiento



Altura de asiento



Altura total

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Altura del respaldo



Ancho del respaldo



Altura del reposabrazos



Ancho del reposabrazos

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Ancho total




Peso



Capacidad de carga

615 mm	2,8 kg (asiento) 3,5 kg (asiento + reposabrazos) 3,7 kg (asiento + respaldo) 4,4 kg (silla completa)	160 kg
--------	---	--------

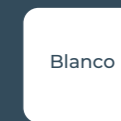

Color



de vida útil

Fabricado en Europa



Especificaciones técnicas

Silla WC Pure Azure



Ancho de asiento

500 mm



Profundidad de asiento

420 mm



Altura de asiento

420 – 570 mm



Altura total

780 – 930 mm



Altura del respaldo

360 mm



Ancho del respaldo

435 mm



Altura del reposabrazos

210 mm



Ancho del reposabrazos

250 mm



Ancho total

615 mm




Ancho de apertura

195 mm




Profundidad de apertura

235 mm

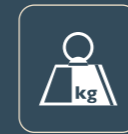

Peso

5,1 kg (con cubeta)

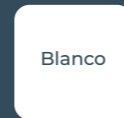

Color



5 años

de vida útil

Fabricado en Europa



Capacidad de carga

160 kg

Elevador de inodoro Pure Cala



Ancho de apertura

205 mm



Ancho total

365 mm




Profundidad de apertura

255 mm



Profundidad total

405 mm

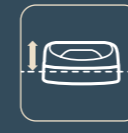

Altura del elevador desde el inodoro

100 mm



Altura total del producto

155 mm, con el sistema de fijación




Peso

1,1 kg (con tapa)
0,7 kg (sin tapa)



Capacidad de carga

250 kg

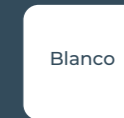

Color



5 años

de vida útil

Fabricado en Europa



Nos comprometemos a utilizar materiales más respetuosos con el medio ambiente, a reducir el uso del plástico siempre que sea posible y a buscar soluciones de embalaje más inteligentes.

Tel.: +34 972 493 214
contactsp@invacare.cm
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste N.51, 1.1ra
46001 Valencia
España