



aquatec®

Gama Pure

Design discreto para
as rotinas diárias





Concebidas para se integrarem em todos os ambientes

A gama Aquatec **Pure** integra produtos cuidadosamente pensados para auxiliar os cuidados pessoais de uma forma natural, discreta e fiável. Foi criada para ambientes domésticos e de prestação de cuidados de saúde e projetada para combater o estigma associado e promover a independência no dia a dia.

[Click here to discover the range >>](#)

aquatec®

A Aquatec continua a ser um nome de confiança entre as soluções de cuidados pessoais. Há décadas que se rege pela segurança, simplicidade e qualidade duradoura.



Sanitário



Duche



Banheira



Segurança



Pure Sol, Bay & Siro

Bancos de duche

Os bancos de duche Aquatec **Pure Sol, Bay e Siro** foram desenvolvidos para proporcionar mais conforto, segurança e independência.

Com estilo e design compacto, estes bancos foram criados para se encaixarem perfeitamente em cantos ou espaços pequenos.



Pure Sol Banco de duche redondo





Pure Bay Banco de duche retangular


Principais funcionalidades





Pure Siro Banco de duche triangular

- 

Leve e portátil
Fácil de pegar e transportar.
- 

Altura do assento ajustável
O posicionamento personalizado ajuda a aliviar a tensão nas costas, anca e joelhos.
- 

Conforto melhorado
As arestas suaves do assento ajudam a reduzir a pressão e a melhorar o conforto.
- 

Pernas em alumínio anodizado
Oferece estabilidade, durabilidade e resistência à corrosão.
- 

Estável em superfícies irregulares
Pode ser utilizado com as pernas ajustadas em alturas diferentes* e está equipado com pontas de borracha antiderrapantes para um uso seguro.

Fácil montagem e manutenção



Montagem e ajuste em altura sem ferramentas
Simplifica a montagem e utilização.



Sistema de bloqueio fácil de manusear
Para montagem e desmontagem rápidas e seguras.



Sem necessidade de manutenção, limpeza fácil
Adequado para uso diário em ambientes domésticos ou de prestação de cuidados de saúde.

*For a horizontal seating position only.



Pure Isla

Cadeiras de duche

As cadeiras de duche Aquatec **Pure Isla** foram pensadas para fornecer uma solução de assento seguro e digno no âmbito dos cuidados pessoais.

Design inspirado no equilíbrio e movimento, combinando a tranquilidade com a força e a estabilidade.



Pure Isla
Banco



Pure Isla
com apoios de braços



Pure Isla
com encosto

Fácil montagem e manutenção



Montagem e ajuste em altura sem ferramentas
Simplifica a montagem e utilização.



Sistema de bloqueio fácil de manusear
Para montagem e desmontagem rápidas e seguras.



Sem necessidade de manutenção, limpeza fácil
Adequado para uso diário em ambientes domésticos ou de prestação de cuidados de saúde.

Principais funcionalidades



Leve e portátil
Fácil de pegar e transportar.



Altura do assento e inclinação anterior ajustáveis
O posicionamento personalizado ajuda a aliviar a tensão nas costas, anca e joelhos.



Conforto melhorado
As arestas suaves do assento ajudam a reduzir a pressão e a melhorar o conforto.



Assento em forma de U
Melhora a acessibilidade. Pode ser de posicionado para a frente ou para trás, dependendo das necessidades pessoais.



Pernas em alumínio anodizado
Oferece estabilidade, durabilidade e resistência à corrosão.



Estável em superfícies irregulares
Pode ser utilizado com as pernas ajustadas em alturas diferentes e está equipado com pontas de borracha antiderrapantes para um uso seguro.

Pure Isla cadeira com apoios de braços e encosto



Pure Azure

Cadeira sanitária multifunções

A cadeira multifunções Aquatec **Pure Azure** tem um design 3 em 1 para uso como cadeira de duche, quadro sanitário ou cadeira sanitária.

Permite assegurar o conforto e a segurança à medida que as necessidades pessoais mudam com o tempo.







Pure Azure
cadeira de duche




Pure Azure
quadro sanitário


Principais funcionalidades




- 
Leve e portátil
Fácil de pegar e transportar.
- 
Altura do assento e inclinação anterior ajustáveis
O posicionamento personalizado ajuda a aliviar a tensão nas costas, anca e joelhos.
- 
Conforto melhorado
As arestas suaves do assento ajudam a reduzir a pressão e a melhorar o conforto.
- 
Recorte sanitária amplo
Para uso prático em alternativa à sanita tradicional.
- 
Aparadeira versátil
Permite remover a aparadeira pela parte frontal ou traseira.
- 
Pernas em alumínio anodizado
Oferece estabilidade, durabilidade e resistência à corrosão.
- 
Estável em superfícies irregulares
Pode ser utilizado com as pernas ajustadas em alturas diferentes e está equipado com pontas de borracha antiderrapantes para um uso seguro.

Fácil montagem e manutenção

 **Montagem e ajuste em altura sem ferramentas**
Simplifica a montagem e utilização.

 **Sistema de bloqueio fácil de manusear**
Para montagem e desmontagem rápidas e seguras.

 **Sem necessidade de manutenção, limpeza fácil**
Adequado para uso diário em ambientes domésticos ou de prestação de cuidados de saúde.

Pure Azure
cadeira sanitária multifunções



Pure Cala Elevador de sanita

O elevador de sanita Aquatec **Pure Cala** foi projetado auxiliar nos cuidados pessoais. Simples de usar e construído para uma estabilidade duradoura. Permite que as rotinas diárias sejam naturais, discretas e reconfortantes.



Fácil de Montar

A montagem sem ferramentas torna a instalação rápida e fácil.



Fixação lateral com elevada aderência

O manípulo com rosca texturizada e facilita a montagem para pessoas com destreza limitada.



[Clique aqui para assistir ao vídeo >>](#)



Principais funcionalidades



Com opção de tampa

Escolha o Pure Cala com ou sem tampa.



Assento macio opcional

Para maior conforto.



Altura ideal

Aumento de 10 cm na altura para facilitar a alternância da posição sentada para a posição em pé.



Seguro e com suporte

Sistema de fixação integrado com inserções de borracha antiderrapantes, que proporcionam estabilidade.



Moldado para o conforto

Assento com contorno suave, oferece suporte e o conforto ideais.



Compatibilidade universal

Compatível com uma vasta gama de sanitas e casas de banho.



Recorte anterior e posterior



Resistente a manchas e fácil de limpar



Design discreto



Especificações técnicas

Bancos de duche Pure Sol, Bay e Siro



Largura do assento



Profundidade do assento



Altura do assento

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455mm (no ponto mais largo)	440 mm	420 – 570 mm



Peso



Capacidade de carga

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Cor



de vida útil

Fabricado na Europa

Cadeira de duche Pure Isla



Largura do assento



Profundidade do assento



Altura do assento



Altura total

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Altura do encosto



Largura do encosto



Altura do apoio de braço



Largura do apoio de braço

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Largura total



Peso



Capacidade de carga

615 mm	2,8 kg (Banco) 3,5 kg (banco + apoio de braço) 3,7 kg (banco + encosto) 4,4 kg (cadeira completa)	160 kg
--------	--	--------



Cor



de vida útil

Fabricado na Europa



Especificações técnicas

Cadeira Multifunções Pure Azure



Largura do assento

500 mm



Profundidade do assento

420 mm



Altura do assento

420 – 570 mm



Altura total

780 – 930 mm



Altura do encosto

360 mm



Largura do encosto

435 mm



Altura do apoio de braço

210 mm



Largura do apoio de braço

250 mm



Largura total

615 mm



Largura do recorte sanitário

195 mm




Profundidade do recorte sanitário

235 mm



Peso

5,1 kg (com aparadeira)

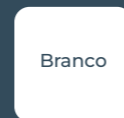

Branco

Cor



de vida útil

Fabricado na Europa



Capacidade de carga

160 kg

Elevador de sanita Pure Cala



Largura da abertura

205 mm



Largura total

365 mm




Profundidade da abertura

255 mm



Profundidade total

405 mm

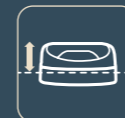

Altura do assento elevado em relação à sanita

100 mm



Altura total do produto

155 mm, inclui o sistema de bloqueio montado




Peso

1,1 kg (com tampa)
0,7 kg (sem tampa)



Capacidade de carga

250 kg

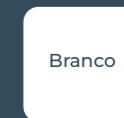

Branco

Cor



de vida útil

Fabricado na Europa



Empenhamo-nos em utilizar materiais mais conscientes em termos ecológicos com vista a reduzir a utilização de plástico tanto quanto possível e explorar soluções de embalagem mais adequadas.

Tel.: +351 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio