



scalamobil®



Sikker og pålidelig - Trin for trin

scalamobil – Brugervenlig og sikker trappemaskine.



www.alber.de



scalamobil er en velegnet løsning:

- ✓ Når der er udfordringer med at komme ind eller rundt i egen bolig.
- ✓ Når det ønskes at kunne forcere trapper, når som helst og hvor som helst.
- ✓ Når det er væsentligt at kunne blive i egen kørestol under trappetransport.
- ✓ Når der ønskes høj sikkerhed for både kørestolsbruger og hjælper.
- ✓ Når der ønskes en trappemaskine, der kan tages med på tur i en almindelig personbil.
- ✓ Når der ønskes en brugervenlighed løsning.
- ✓ Når det ønskes at kunne forcere trapper, uden at have en fast trappelift monteres.

scalamobil – Frihed på dine vilkår

Hvis mobiliteten i hverdagen begrænses, som følge af uheld eller sygdom, kan trapper udgøre en væsentlig og ofte uoverkommelig forhindring. Et enkelt trappetrin kan medføre, at boligen eller dele af den, ikke længere kan anvendes og at det derfor bliver nødvendigt at overveje fraflytning fra eget hjem. Små forhindringer i hverdagen kan være til stor belastning for kørestolsbruger, hjælpere og familie.

Fastmonterede trappemaskiner indebærer ofte komplekse og omkostningstunge bygningsmæssige ændringer og er ikke nødvendigvis compatible med alle typer trapper.

Scalamobil kræver ikke bygningsmæssige ændringer. Den er hurtig og let at anvende og kan anvendes på de fleste typer trapper, der overholder de på området gældende regler i bygningsreglementet.



Pålidelig og intelligent løsning

MOBILITET

Fleksibel og alsidig

Scalamobil er en trappemaskine, som kan tilpasses efter individuelle behov hos både bruger og hjælper. Scalamobil kan anvendes på de fleste typer trapper, såfremt de overholder gældende regler i bygningsreglementet.

Scalamobil kan leveres i to udgaver. Den ene er designet til anvendelse sammen med en manuel kørestol, og den anden er monteret med sædeenhed beregnet til borgere med stå- eller gangfunktion.

Scalamobil kan hurtigt og let adskilles og tages med i bagagerummet på en almindelig personbil.

- ✓ **Installation:** Klar til brug på mange forskellige typer af trapper.
- ✓ **Fleksibilitet:** Kan anvendes sammen med mange forskellige typer af kørestole fra forskellige producenter.

KOMFORT

Komfortabel og smart

Sikkerhed, brugervenlighed og komfort har været nøgleordene i udviklingen af den nye Scalamobil. Scalamobil er designet med nyt kontrolpanel, nye ergonomiske betjeningshåndtag, nye betjeningsknapper, nye sensorer og forprogrammerede køreprogrammer, ISOFIX® beslag, nødstop, m.m.

Det nye kontrolpanel er overskueligt og let at forstå. De nye ergonomiske betjeningshåndtag, nye sensorer og nye forprogrammerede køreprogrammer gør det ekstra trygt og sikkert, at anvende Scalamobil for både kørestolsbruger og hjælper.

- ✓ **Komfortabel:** Softstep-funktion, der giver blød og behagelig overgang fra trin til trin.
- ✓ **Kvalitet:** Scalamobil er produceret i Tyskland og kvaliteten er i top.
- ✓ **Design:** Smart og moderne design.

Easy to stow and disassemble for transport.




TRAPPER


Tag trapper alvorligt. Og hverdagen med ro

I modsætning til fastmonterede trappelifte kræver Scalamobil ikke, at hjemmet skal bygges om, eller der er en trappelift permanent monteret på trappen. Scalamobil er klar til brug og kan tages i anvendelse med det samme.


Dette sparer tid og giver ro i sindet. Scalamobil kan tages med og anvendes såvel ude, som hjemme. Scalamobil kan anvendes på de fleste typer trapper, såfremt de overholder gældende regler i bygningsreglementet.

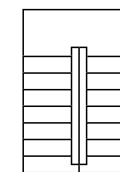


Trinhøjde op til 20 cm

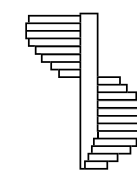

Snoede trapper

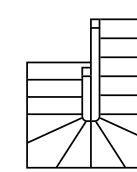

Trapper med eller uden trappeafsats

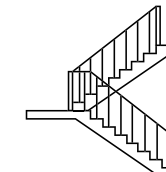

Udvendige trapper med gelænder


Uanset trappetype er ombygning ikke nødvendig.

Skånsom, men sikker


Trapper adskiller sig ikke kun i struktur, men også i materiale og design.

Scalamobil kan anvendes på de fleste typer trapper, uanset om trinene er lavet af træ, sten eller metal, eller om de er dækket med tæppe. Hjulene på Scalamobil er skånsomme mod trappebelægninger, men samtidigt i et slidstærkt materiale, der giver sikker kontakt med de overflader, som der typisk anvendes på trapper.


Sten og fliser

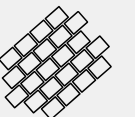


Tæpper og gulvtæpper

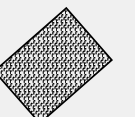

Træ og laminat

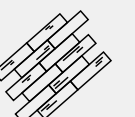

Riste og metaloverflader

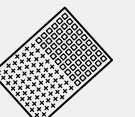

Glas og plastmaterialer



i I pgr. „Manuel“ kan alle tørre overflader problemfrit passeres.

MODELVERSIONER

scalamobil®

Docking til kørestolen

Scalamobil kan hurtigt, let og uden brug af værktøj, kobles på de fleste manuelle kørestole. Dette gør det muligt for kørestolsbrugere at blive siddende i kørestolen, når de skal op eller ned af trapper.

- i** Scalamobil kan også anvendes sammen med Scalaport X7, der er en universal løsning, som gør det muligt at anvende Scalamobil uden monteringsbeslag. Scalaport er en typisk anvendt løsning af handicaptransportselskaberne.



scalacombi®

Med integreret sæde

Scalacombi er ideel til personer, der ikke er afhængige af en kørestol, men har brug for hjælp til at komme op eller ned ad trapper. Scalacombi har et komfortabelt, integreret sæde, der kan foldes sammen, når trammemaskinen ikke anvendes.



Scalamobil leveres med:



Batteripakke

Kan klare op til 300 trin



Batterilader

Automatisk frakobling og indikator for ladestatus.



Kontrolpanel

Overskueligt og let at forstå.

KONTROLPANEL

Let at håndtere

Overskueligt og letbetjent kontrolpanel



Indikator for om Scalamobil er i korrekt vinkel og det er sikkert at køre



Forhindringer:

Denne funktion gør det lettere at komme over en forhindringer på vej til trappen.



Lås:

Tastaturlås, der kan beskytte mod uautoriseret brug.



Tænd/sluk:

Hovedafbryder til tænd/sluk.

AUTO

I AUTO overvåges betjeningsvinkel og trappens beskaffenhed, inden klatremekanismen automatisk aktiveres.

ASSIST

I ASSIST overvåges betjeningsvinkel og trappens beskaffenhed, inden klatremekanismen kan aktiveres manuelt.


MANUAL

I MANUEL er alle sensorer og sikkerhed deaktiveret og Scalamobil skal betjenes manuelt.




Overskueligt kontrolpanel med batteriindikator og kørselsretning

BREDDE OG HØJDE

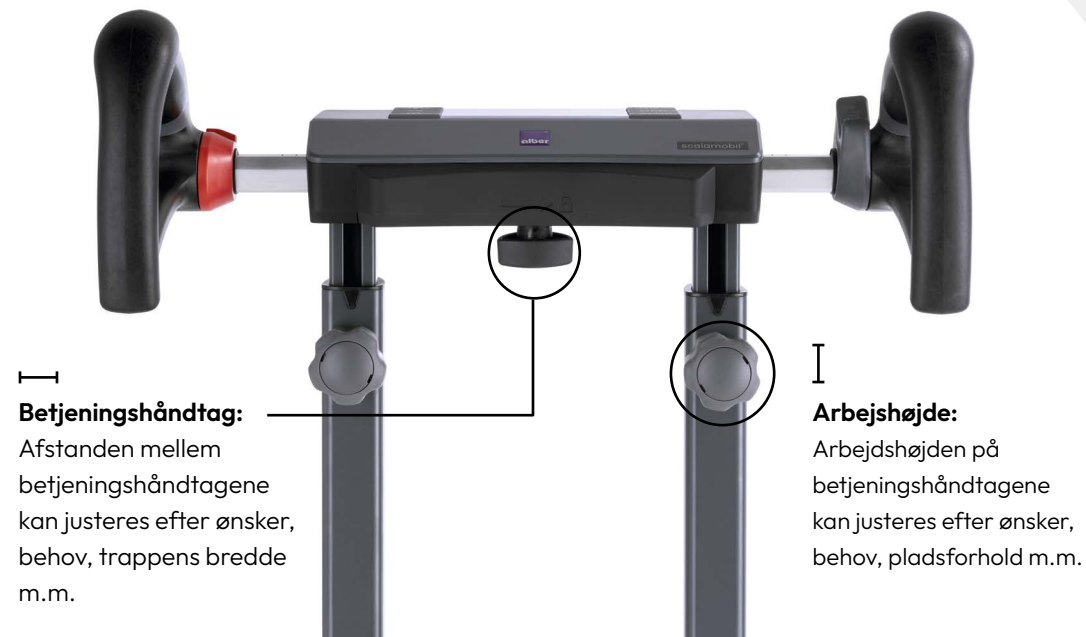

SENSORER:

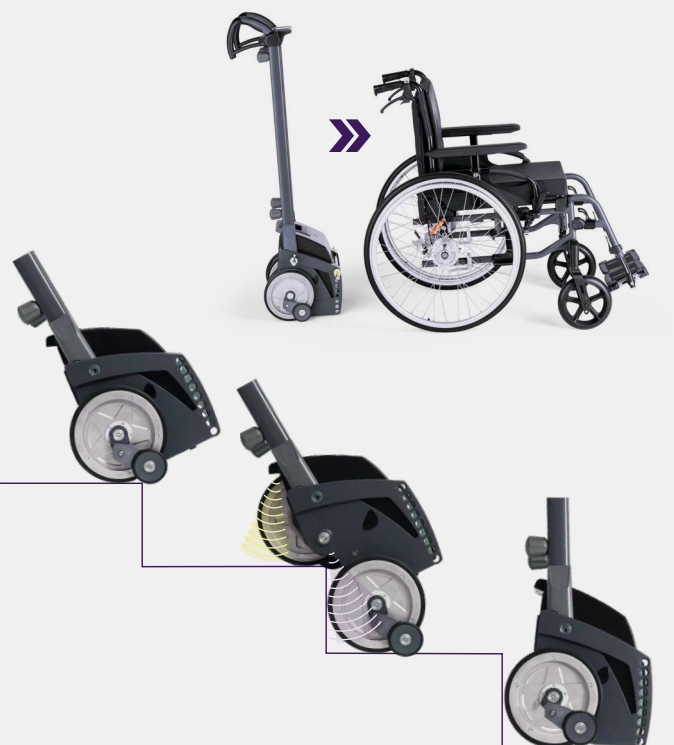

Tryghed og sikkerhed

"Soft Step":

Scalamobil er forsynet med "Soft step", der giver mere komfortabel kørsel.

Sensorer integreret i Scalamobil aflæser trindhøjden og medfører, at hjulene reducerer hastigheden lige inden kontakt med det næste trappetrin.

Ved at nedsætte hastigheden inden kontakt med det næste trappetrin, reducerer følelsen af bump i ryg, krop og nakke.



Sikkerhedsbremsene sikrer, at Scalamobil stopper sikkert og pålideligt, når den nærmer sig kanten på et trappetrin.

Tilbehør

01. Beslag til kørestol

Med specialdesignede monteringsbeslag kan Scalamobil monteres på langt de fleste manuelle kørestole.

02. Hovedstøtte

Hovedstøtten giver støtte og stabilitet til nakke og hoved. Hovedstøtten kan justeres i højde, vinkel og dybde.

03. Holder til kørestolshjul

Kørestolens hjul skal afmonteres, når man anvender Scalamobil og hjulene kan evt. placeres i dertil indrettede holdere imens.

04. Anti-tipper

Monteringsbeslag er designet således, at de passer til både Scalamobil og anti-tipper. Når Scalamobil ikke anvendes, benyttes anti-tip og omvendt.

05. Problemfri montering

Med specialdesignede monteringsbeslag kan Scalamobil hurtigt, let og problemfrit sættes på kørestolen og tages af igen.

06. Hjul med Quick-release

For at kunne forcere trapper med Scalamobil og kørestol, skal kørestolens hjul afmonteres. Det er derfor praktisk, at kørestolens hjul er monteret med Quick-release.



07. ISOFIX®-beslag (Scalacombi S46)

Scalacombi S46 kan monteres med ISOFIX®-beslag, som gør det simpelt at montere barnestole.

08. Scalaport X7

En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle kørestole uden monteringsbeslag.

Få yderlige oplysninger om Scalamobil trappemaskiner, tilbehør mm. på: www.invacare.dk

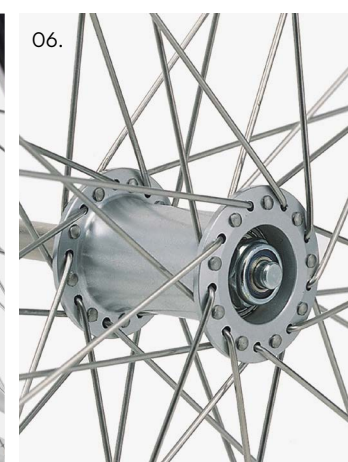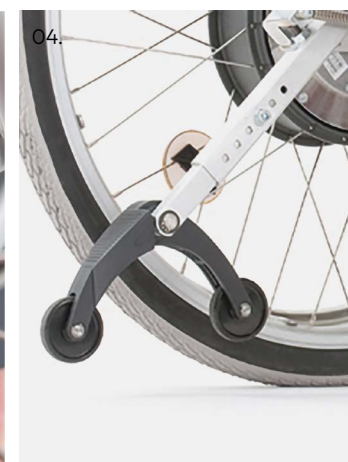

Tekniske data

	scalamobil S45	scalacombi S46
Egenvægt	26 kg	37 kg
Max. brugervægt	140 kg	140 kg
Totalvægt	180 kg (Brugervægt m.m. + Trappemaskine + Manuel kørestol)	
Kørestrækning	Op til 300 trappetrin (ca. 20 etager)*	
Hastighed	Ca. 12 trin/minut inkl. Soft Step*	
Batteri	2 x 12 V; 3,4 Ah GEL batteri (lækagesikker og vedligeholdelsesfri).	

*Afhængig af brugerens og kørestolens vægt samt trappens geometri



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen, Germany
info@alber.de

MADE IN GERMANY 



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby, Danmark
www.invacare.dk