

Comet[®] Pro



**Scooteren for dig, som ønsker
masser af komfort og overskud**



Yes, you can.

Invacare **Comet PRO** er for dig, som vil have høj siddekomfort, køre lidt længere og lidt hurtigere.

Comet PRO giver dig masser af komfort og overskud, uanset om du skal en tur ud at handle, på tur i nærområdet eller længere ture rundt i byen.

Comet PRO er en stor solid, pålidelig og stabil scooter, som du vil føle dig tryk og sikker på i trafikken, på stier i parken eller, hvor du vil have dit daglige kørselsbehov.



Komfort, ergonomi og stil

Comet PRO er ikke bare en sikker scooter - den har også fremragende komfort, ergonomi og køreegenskaber.

Comet PRO har mange smarte egenskaber, der er kombineret i et smart og stilfuldt design.

Comet PRO har affjedring på alle 4 hjul, store hjul, stærk motor og lang kørestrækning. Du kan med ro i sindet stole på, at **Comet PRO** bringer dig sikkert hen, hvor du ønsker det.

Comet PRO er et godt valg for dig, der ønsker at komme stilfuld, komfortabelt og sikkert rundt på længere ture.



Godkendt og certificeret

Comet PRO er forsynet med kraftige LED lygter, blinklys og bremselys. Således er det tydeligt at se **Comet PRO** i mørke, ved nedsat sigtbarhed eller for bagvedkørende, når der bremses.

Comet PRO er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der reducerer farten, når du kører i kurver eller drejer om hjørner. Således at du føler, at du styrer scooteren og ikke omvendt.

Ønsker du ikke hastighedsreduktionen skal være aktiv, kan den frakoblet via en kontakt i kontrolpanelet.

Comet PRO har været forbi TÜV - verdens største og mest respekterede institut for certificering af tekniske produkter - hvor **Comet PRO** er testet, godkendt og certificeret.



Egenskaber og tilbehør



Komfortabel affjedring

En god affjedring på alle 4 hjul virker støddæmpende og giver større stabilitet, optimal kørekomfort og sikker manøvrering.



Retningsstabilitet

God retningsstabilitet minimerer behovet for korrigering, selv ved høje hastigheder, hvilket giver ekstra sikkerhed og stabilitet.



Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtigt og nemt justeres efter ønsker og behov.



Ergonomisk styr

Forhindrer udmattelse i arme og hænder på længere køreture.



Moderne display

Et moderne og intuitivt display gør det let og overskueligt at kontrollere scootere.



Bremselys

Bremselygten advarer bagvedkørende om, at scooteren sænker farten.




To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept forhindrer, ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



Elektronisk fartreduktion

Sænker automatisk farten, når der drejes. Det giver en komfortabel og sikker kørsel.

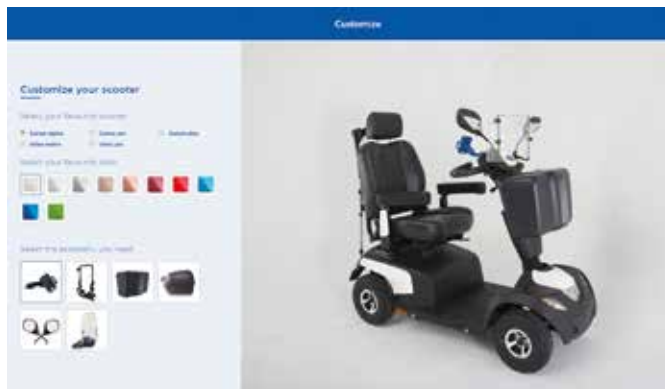












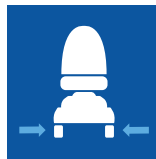


Skræddersy din scooter efter ønsker og behov




Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, tilbehør etc., på vores website: www.invacarescooter.com.

Tekniske data


For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt
							
Comet Pro	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	665 mm - 685 mm	1450 mm	136 kg

	Tungeste del	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Max. hældning
							
Comet Pro	63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah	2750 mm	100 mm	100 mm	10°


	Kørestrækning	Hastighed	Motorer	
			1. Max. effekt	
Comet Pro	55 km	15 km/t	550 W / 1600 W ¹	

Farver

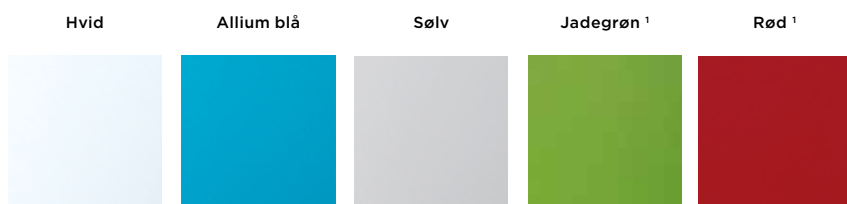

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

Polstring

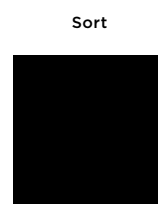

Scan her for få adgang til websiden invacarescooter.com.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®

