

Orion[®] Pro



Ideel til længere ture



Yes, you can.

Invacare **Orion PRO** er for dig med fokus på ergonomi, siddekomfort, smarte detaljer og som ønsker mere end en standard scooter.

Orion PRO er designet til være ergonomisk og smart, men samtidig være let, overskuelig og komfortabelt at køre, for både nye og erfarne scooterbrugere.

Orion PRO er moderne designet, har store batterier, lang kørestrækning og høj hastighed.

Ønsker du en scooter med ekstra god komfort, ekstra god ydeevne, der er sikker, pålidelig og ideel til længere ture i byen eller en tur i parken. Så er **Orion PRO** det ideelle valg.



Kontrolleret og komfortabel kørsel

Når man kører, er det vigtigt at føle sig tryk og føle, at man har kontrol over scooteren.

Orion PRO er forsynet med et nyt smart og funktionelt affjedringssystem, der giver bedre køreegenskaber og højere komfort, uanset hastighed, hvor du kører eller hvilket underlag du kører på.

Orion PRO har store 12" hjul med lavprofildæk, god affjedring og er forsynet med et Deluxe ekstra komfortabelt sæde.

Orion PRO har fået en ny styring, der gør det lettere at køre scooteren og kræver mindre armbevægelser. Kontrolpanelet er designet, så det er let at overskue og forstå.

Med **Orion PRO** kan du slappe af og nyde en kontrolleret, stabil og komfortabel køreoplevelse.



Godkendt og certificeret

Orion PRO er forsynet med kraftige LED lygter, blinklys og bremselys. Således er det tydeligt at se **Orion PRO** i mørke, ved nedsat sigtbarhed eller for bagved kørende, når der bremses.

Orion PRO er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der reducerer farten, når du kører i kurver eller drejer om hjørner. Således at du føler, at du styrer scooteren og ikke omvendt.

Ønsker du ikke hastighedsreduktionen skal være aktiv, kan den frakoblet via en kontakt i kontrolpanelet.

Orion PRO har været forbi TÜV - verdens største og mest respekterede institut for certificering af tekniske produkter - hvor **Orion PRO** er testet, godkendt og certificeret.



Egenskaber og tilbehør



4-hjulet Orion PRO



3-hjulet Orion PRO



Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtig og nemt justeres efter ønsker og behov.



Ergonomisk styr

Forhindrer udmattelse i arme og hænder på længere køreture.



Håndbremse

Sikrer hurtig og stabil opbremsning i nødstilfælde.



Bremselys

Bremselygten advarer bagved kørende om, at scooteren sænker farten.




To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept forhindrer, ved hjælp af et to-trins frikoblingssystem, at scooteren kan trille ukontrolleret.



Elektronisk fartreduktion

Sænker automatisk farten, når der drejes. Det giver en komfortabel og sikker kørsel.

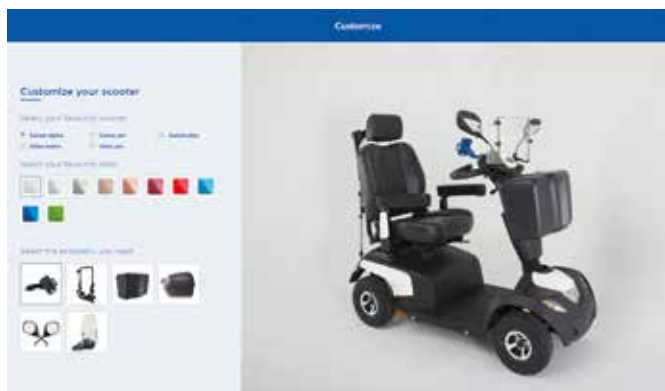

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, tilbehør etc., på vores website: www.invacarescooter.com.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.


	Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt
3-hjulet	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	650 mm	1300 mm	126 kg
4-hjulet	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	650 mm	1320 mm	136 kg

	Tungeste del	Max. brugervægt	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Max. hældning
3-hjulet	62 kg	127/150 kg	2 x 12 V/75 Ah	2500 mm	100 mm	100 mm	10 °
4-hjulet	62 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah	2750 mm	100 mm	100 mm	10 °

	Kørestrækning	Hastighed	Motorer
3-hjulet	52 km	15 km/t	550 W / 1600 W ¹
4-hjulet	52 km	15 km/t	550 W / 1600 W ¹

1. Max. effekt.

Farver

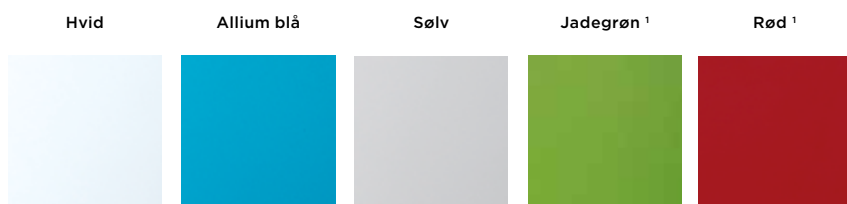

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

Polstring



Scan her for få adgang til websiden invacarescooter.com.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®

