



Invacare *Bora*[®]

**Le confort
personnalisé**

LiNX[®]



Yes, you can.[®]



Des fauteuils remarquables

La gamme des fauteuils roulants électriques Invacare assure **qualité, fiabilité et performances de conduites** exceptionnelles à ses utilisateurs. Grâce à une **manoeuvrabilité** et des **fonctionnalités optimisées**, vous pouvez aller là où vous le souhaitez.

Le fauteuil Invacare **Bora** est un fauteuil compact doté d'un sens du style étudié pour correspondre à votre mode de vie et à votre personnalité.

Ce **remarquable fauteuil** procure une expérience de conduite **souple** combinée à un large choix de couleurs pour un **look unique** et des sensations de conduite optimales.



Simplement intelligente

Non satisfait de notre gamme de fauteuils roulants électriques développée et assemblée en **Allemagne**, nous souhaitons les rendre encore meilleure en y intégrant un système de contrôle de nouvelle génération.

Invacare **LiNX** est notre **nouvelle électronique** pour fauteuil roulant électrique qui **acquiert constamment de nouvelles données** selon le type d'utilisation afin d'apporter aux utilisateurs une **expérience de conduite révolutionnaire**. Grâce à sa conception modulaire, ce système est évolutif afin de **s'adapter** à l'évolution des besoins de chaque utilisateur.

LiNX[®]

Profitez des performances du fauteuil Invacare Bora


Grâce à ses nombreuses caractéristiques le **Bora** se révèle être un excellent compromis entre l'intérieur et l'extérieur:

- Des dimensions compactes pour une parfaite maniabilité en intérieur. Les roues avant de 8" disponibles sans supplément offrent au fauteuil une largeur hors tout totale de moins de 590 mm.
- Un système de suspension conçu pour offrir une conduite plus souple et plus confortable.
- La nouvelle électronique **LINX** permet un meilleur contrôle du fauteuil à petite vitesse et dans les espaces réduits. Le **LINX** offre également une meilleure tenue dans les pentes et réduit le blocage des roues avant sur les surfaces molles, vous libérant ainsi de tous les soucis que vous pourriez avoir.
- La technologie **LINX G-Trac**® disponible en option détecte et corrige même les plus petits écarts de trajectoire qui peuvent par exemple résulter d'un changement de sol et réduit le nombre d'actions correctives nécessaires.
- Disponible en deux versions: moteurs 6 km/h ou moteurs 10 km/h.
- Batteries de 50 Ah pour profiter d'une autonomie suffisante.




Personnalisez-le !

Vous avez la liberté de personnaliser votre fauteuil selon vos propres goûts grâce à un large panel de coloris. Vous pouvez choisir parmi 7 couleurs de carénage en option...

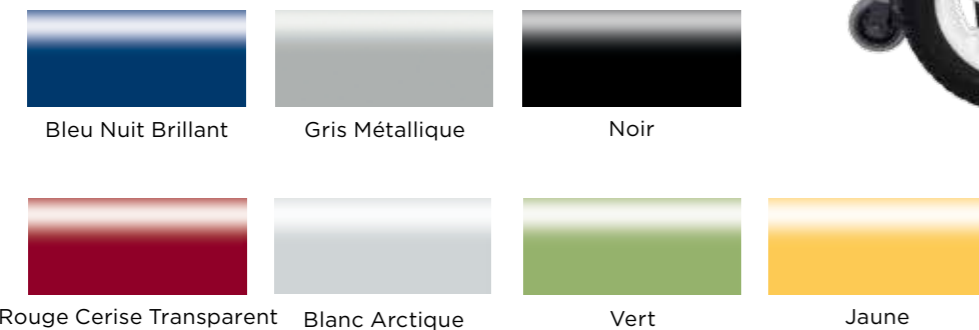

Mais également 2 coloris de châssis...

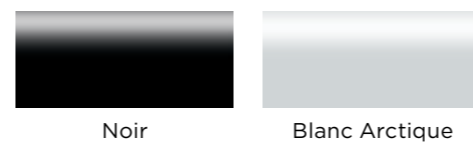

...et 3 coloris de jantes.



Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre fauteuil roulant électrique grâce à notre service Unique ?

Invacare Unique est un service spécialisé qui offre une expertise dans la personnalisation de produits pour répondre aux besoins individuels. Que vous ayez des exigences classiques comme des manchettes d'accoudoirs plus longues, une assise plus large ou besoin de commandes spéciales; ou si vous pensez à quelque chose de plus surprenant comme un châssis rose vif; notre équipe d'experts dispose des connaissances et de l'expérience nécessaire pour vous fournir un fauteuil unique qui correspond à vos attentes.



Caractéristiques et options

Invacare Bora possède un grand nombre de caractéristiques et options pour permettre à votre fauteuil de correspondre à votre mode de vie:



Assise Modulite™

Composé d'un châssis télescopique et d'un système de rails pour permettre de **moduler facilement les accoudoirs** et d'**installer de nombreux accessoires** afin de répondre à vos besoins.

Invacare® **Modulite™**
Individual fit and adaptability



Dossiers Invacare Matrix®

Les différents types de dossiers de positionnement **Matrix®** combinés à l'assise **Modulite™** offrent aux utilisateurs un positionnement et un confort optimal.

matrix®
SEATING SERIES



Revêtement non-marquant

Equipé de pneumatiques ou bandages noirs non marquants pour un look encore plus moderne.

BANDAGE
NON
MARQUANT





Manipulateurs

L'électronique **LiNX** disponible sur le **Bora** a été spécialement conçue pour être facile à utiliser, simple et fiable.

Ses principales caractéristiques sont:

- Un large bouton marche/arrêt facile d'accès
- Un joystick ergonomique nécessitant une force de seulement 190 g pour l'actionner
- Un état du système précis et un affichage de la jauge de batterie
- Un potentiomètre facile à utiliser
- Un visuel précis et intuitif
- Une fonction de verrouillage du manipulateur simple et sans clé



Données techniques Invacare Bora

Assise Modulite ™ standard	440-480 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ³
Assise Modulite ™ souple ou rigide	380-530 mm ²	410 - 510 mm	480 mm
		450 mm ³ / 450 - 750 mm ^{3,10}	480, 540, 560 mm ^{3,11}
Assise Modulite ™ standard	275-340 mm	290 - 470 mm ^{3,4}	0° - 20°
Assise Modulite ™ souple ou rigide	245-310 mm	290 - 470 mm ^{3,4}	90° - 120°
		0° - 20° / 0° - 30° ¹⁰	90° - 120°

Assise Modulite ™ standard	590 / 620 mm ⁵	930 mm	1160 mm ⁶ / 1210 mm ¹⁰
Assise Modulite ™ souple ou rigide	590 / 620 mm ⁵	970 mm	1160 mm ⁶ / 1210 mm ¹⁰
Assise Modulite ™ standard	98 kg ⁹	130 kg	50 Ah
Assise Modulite ™ souple ou rigide	94 kg ⁹	130 kg	1600 mm / 1630 mm ¹⁰
60 mm ⁷	18% (10°)	2 x 230 W	jusqu'à 30 km ⁸
			6 / 10 km/h

1/ Coussin d'assise 430 mm
 2/ + 25 mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs
 3/ Mesuré sans coussin d'assise / toile
 4/ Certaines longueurs de repose-jambes sont restreintes à un certain type de repose-jambes
 5/ La largeur de la base motrice dépend de la taille des roues avant
 6/ Inclus repose-pieds standards

7/ 100 mm avec monte-trottoir
 8/ Conforme à la norme ISO 7176-4:2008
 9/ Le poids total dépend de la configuration
 10/ Avec lift ou inclinaison d'assise électrique à compensation à 30°
 11/ Dépend du dossier choisi

Invacare Bora

Le mot, la marque et le logo LiNX sont des marques déposées appartenant à Dynamic Controls, et utilisés par Invacare sous licence.

Pour plus d'informations à propos de ce fauteuil roulant électrique, merci de consulter le site www.invacare.fr. Pour plus d'informations sur l'utilisation, les réglages et le transport, merci de vous référer au manuel d'utilisation.

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tél.: +33 2 47 62 64 00
Fax: +33 2 47 42 12 24
Email: contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Informations données à titre d'information
(information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.
Bora - FR - 08/2016 - 1607568



- 1/ Les composants de l'assise Invacare **Modulite™** sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils Invacare Rea.
- 2/ Conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EC) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 3/ Conforme à la réglementation concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

