

Action^{®4}
NG



Elegante, estável e com uma
excelente funcionalidade



Estabilidade e **Funcionalidade**

A versão atual da **Action⁴_{NG}** foi desenhada para ter uma redução de peso de praticamente 1 kg em comparação com o modelo anterior. A **Action⁴_{NG}** consegue esta redução do peso enquanto mantém a funcionalidade excepcional. Com um sistema de cruzeta dupla, a **Action⁴_{NG}** oferece agora uma condução mais estável e fácil. Além disso, é fácil de configurar como os outros membros da Família Action e partilha os elementos de compatibilidade cruzada que tornam a família Action única.

- ▶ Redução significativa do peso da cadeira
- ▶ Funcionalidade aumentada e novas opções
- ▶ Novo design com mais cores disponíveis



4

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1

Redução de peso significativo

Sem comprometer a funcionalidade - ou limitar a flexibilidade de ajuste da cadeira de rodas - o peso da **Action⁴_{NG}** foi reduzido em aproximadamente 1kg. Isto é, em parte, graças ao novo design da forqueta e fixação da roda traseira que são ambos feitos em alumínio. Esta alteração no design torna a **Action⁴_{NG}** ainda mais fácil de propulsionar e de pôr e tirar do carro para transporte.

2

Atenção ao detalhe

A equipa da Invacare redesenhou a **Action⁴_{NG}** em múltiplas áreas. O novo design da forqueta proporciona um look mais leve, a tela de encosto tem um design melhorado e as novas cores levam a **Action⁴_{NG}** ao próximo nível em termos de estilo. Pode verificar a nossa atenção ao detalhe em cada componente da cadeira, que reflete o nosso objetivo de promover estilo sem compromisso de funcionalidade.

3

Fácil de configurar e ajustar

Apesar destas novas melhorias, a **Action⁴_{NG}** continua a ser completamente compatível com os restantes membros da Família Action, o que significa que todos os novos componentes da cadeira servem para os modelos anteriores.

4

Funcionalidade melhorada

As novas características tornam a **Action⁴_{NG}** ainda mais simples do que a sua antecessora. A alavanca para rebater o apoio de braços é de fácil utilização, facilitando as transferências do utilizador e o design do protetor de roupa foi otimizado com um recorte e uma proteção superior em espuma para permitir uma transferência mais suave (na versão regulável em altura).

O sistema do encosto patenteado com ajuste intuitivo do ângulo com função rebatível também foi adicionado como opção, o que torna possível a otimização da posição do encosto. Além disso, a nova tela do encosto cobre agora os tubos do encosto para conforto aumentado, enquanto a faixa lombar é regulável em altura para permitir um posicionamento perfeito independentemente da altura da almofada.

Adicionamos estas funcionalidades porque sabemos que os detalhes contam, todos os dias.



► **Leve**

A **Action⁴_{NG}** tem um peso total de 14.7kg e um peso de transporte de 8kg (sem apoios de pernas, apoios de braços ou rodas traseiras). Com as rodas mais leves o peso total pode ser reduzido para 14kg.



► **Suporte da roda traseira**

O novo suporte da roda traseira em alumínio combina leveza com funcionalidade.



► **Forqueta Dianteira**

A forqueta em alumínio tem um novo design que combina redução de peso com estilo.




▲ **Apoio de braços rebatíveis nr. 2 e nr. 3**

Ambas as opções de apoios de braços conjugam agora uma característica de extração da alavanca e um recorte no protetor com proteção em espuma para facilitar as transferências de e para a cadeira. Além disso, o apoio de braços nr. 3 é também ajustável em altura.

Encosto rebatível e ajustável

O encosto é ajustável em ângulo através do sistema inovador - incorporado a partir da **Action⁵** - e permite um ótimo ajuste do ângulo do encosto enquanto o utilizador permanece na cadeira. O sistema de encarte único permite que os utilizadores rebatem o encosto para o assento para fácil arrumo ou transporte no carro. Além disso, a escala incorporada permite a definição mais precisa do ângulo do encosto para que seja personalizado ao utilizador (opcional).

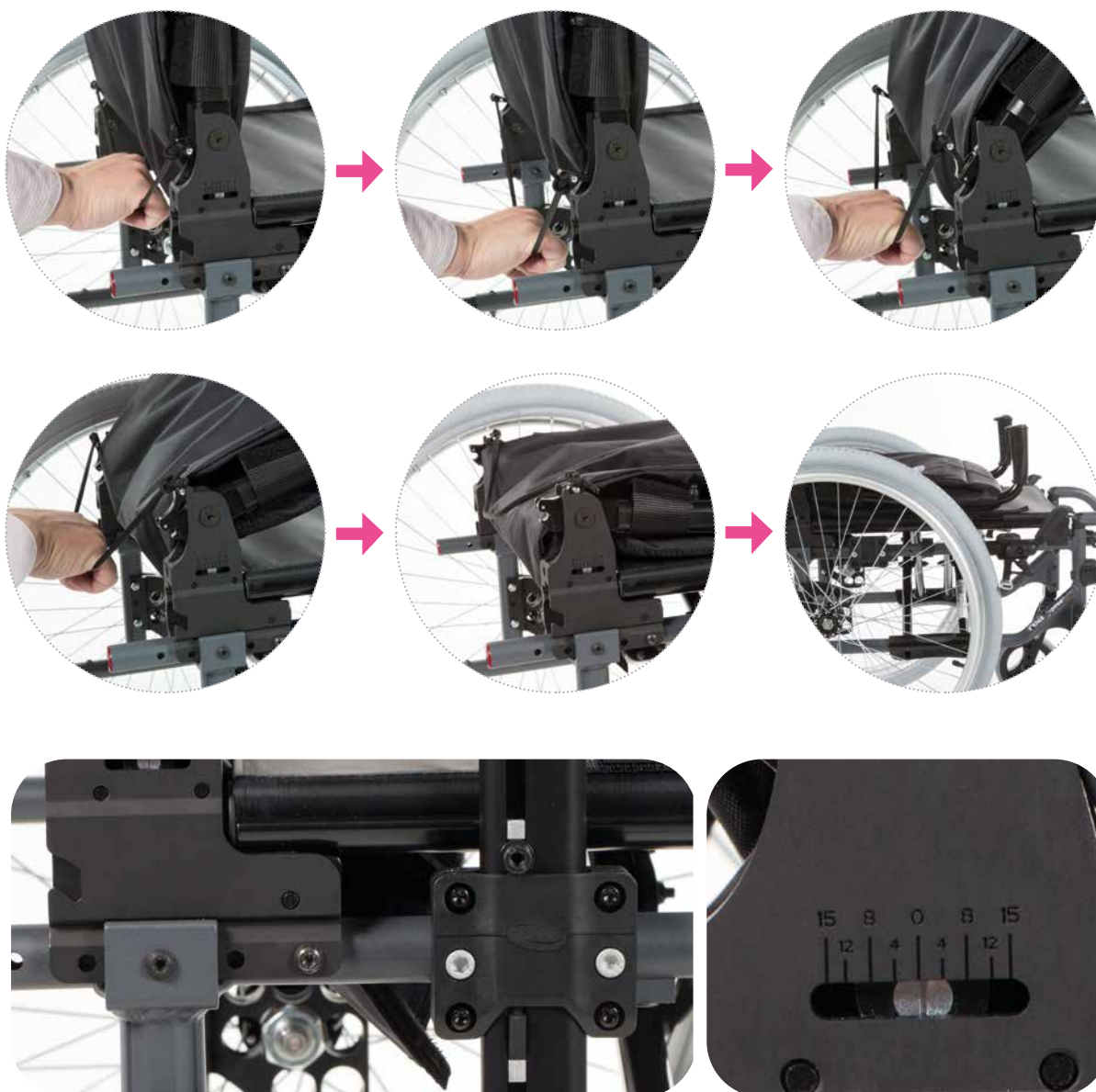



◀ Suporte para amputado

Ao oferecer ajustes de altura, ângulo e profundidade com um design aprovado e durável, este suporte rebatível é ideal para transferências (opcional).



◀ Gancho de fixação para transporte

Um gancho brilhante e colorido permite a fixação da cadeira ao carro de forma simples e segura (opcional).



◀ Propulsão com aro duplo

A versão com aro duplo é ideal para utilizadores hemiplégicos. As conexões telescópicas com mola podem ser removidas para que a cadeira se mantenha encartável.

200x30



125x30



150x30



▲ Rodas dianteiras

Rodas dianteiras disponíveis em 5", 6" e 8" pneus maciços ou pneumáticos, com uma vasta opção de largura das rodas também disponível.



▲ Cinto pélvico

Estão disponíveis diferentes tipos de cintos pélvicos, incluindo cintos Bodypoint almofadados de 2 e 4 pontos.

Opções ▾



▲ Almofadas Matrx®

Desde as almofadas básicas até à mais configurada que é a almofada *Invacare Matrx Libra*, a Invacare oferece uma vasta variedade de almofadas de assento para acomodar várias necessidades. Os encostos *Invacare Matrx Elite* e *Elite Deep* vêm completos com o sistema de extração rápida EasyMount, que permite remover o encosto de forma rápida e simples quando a cadeira está encartada. Esta compatibilidade com a nossa gama extensiva de assentos e encostos põem o conforto e o suporte no coração da **Action⁴ NG**.



▲ Apoios de pernas elevatórios com compensação

Estes apoios de pernas combinam uma boa compensação em comprimento com elevação entre 0-80°. Incluem almofada de suporte de gemeos.



▲ Encosto reclinável

O encosto reclinável tanto de forma mecânica (cremalheira) como através de um pistão de gás permitem que os cuidadores façam ajustes rápidos na posição do utilizador, contribuindo para o conforto e alívio de pressão.



▲ Opções de apoio de cabeça e pescoço

Estão disponíveis opções de apoios de cabeça e pescoço - incluindo o premiado apoio de cabeça Elan - para dar ao utilizador um nível máximo de conforto e suporte.

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura de assento ▼	Profundidade de assento ▼	Ângulo de assento ▼	Altura de assento ▼	Ângulo do encosto ▼	Altura do encosto ▼	Ângulo do chassis dianteiro ▼	
Auto-propulsão	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
Trânsito	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°
Comprimento dos apoios de pernas ▼	Altura do apoio de braços ▼	Largura total ▼	Largura total encartada ▼	Comp. total incluindo apoios de pernas ▼	Comp. total sem os apoios de pernas ▼	Altura total ▼	
Auto-propulsão	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
Trânsito	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm
Max. inclinação ▼	Raio Viragem ▼	Peso máx. utilizador ▼	Peso total a partir de ▼	Peso do componente mais pesado ▼			
Auto-propulsão	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.0 kg	8.0 kg		
Trânsito	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.5 kg	11.7 kg		

1. Versão Heavy Duty

Cores do chassis ▼



As cores reais podem variar das acima apresentadas.

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

Tela do encosto ▼

