



scalamobil®



De trap af. De veiligheid op.

scalamobil – het mobiele hulpmiddel voor eenvoudig en veilig trapklimmen.



www.alber.de



scala, u hebt de leiding.

Als dagelijkse mobiliteit een probleem wordt door ziekte of een ongeval, kunnen trappen vaak een onoverkomelijk obstakel zijn. Hierdoor kunnen verdiepingen in huizen volledig ongebruikt blijven of moet de getroffen persoon overwegen om zijn eigen huis te verlaten. Bovendien kunnen partners en familieleden moeite hebben om met de situatie om te gaan. Vaste mobiliteitsoplossingen vereisen ingewikkelde en dure renovaties en zijn niet altijd geschikt voor alle soorten trappen.

Dankzij scalamobil behoren beperkingen door trappen tot het verleden. Er zijn geen structurele veranderingen nodig om deze veelzijdige klimhulpmiddelen te gebruiken, die compatibel zijn met alle soorten trappen.

Zowel de getroffen personen als hun familieleden zullen in gelijke mate profiteren van deze herwonnen vrijheid en kunnen daardoor weer onafhankelijk en flexibel hun dagelijkse bezigheden uitvoeren.

scalamobil is de juiste keuze voor u als:

- ✓ u toegang nodig hebt tot de bovenste verdiepingen in uw eigen huis.
- ✓ u de veiligheid van zowel rolstoelgebruikers als hun zorgverleners wilt garanderen.
- ✓ u op zoekt bent naar een mobiliteitsoplossing die geen structurele aanpassingen vereist.
- ✓ u de voorkeur geeft aan een traphulpmiddel waarmee u in uw rolstoel kunt blijven zitten.
- ✓ u een hulpmiddel nodig hebt, maar niet afhankelijk bent van een rolstoel voor dagelijks gebruik.
- ✓ u gemak belangrijk vindt en u wilt de last van uw verzorgers en dierbaren verlichten.





Thuis in de bloei van uw leven.


VEILIGHEID

Betrouwbaar & slim

Veiligheid en gebruiksgemak zijn de belangrijkste kenmerken van de scala modellen. Dankzij hun eenvoudige en bewezen technologie wekken deze mobiliteitshulpmiddelen vertrouwen, waardoor bediening een fluitje van een cent is. U zult snel vertrouwd raken met het gebruik van de mobiliteitshulpmiddelen, wat leidt tot onmiddellijke verlichting in het dagelijks leven.

Dankzij automatische hellingbewaking en talloze andere intelligente functies is de veiligheid op alle soorten trappen gegarandeerd.

- ✓ **Stabiliteit:** Stevige arm- en voetsteunen
- ✓ **Besturing:** Intuïtieve bedieningseenheid
- ✓ **Veelzijdig:** Verschillende slimme rijmodi, een startonderbreker en een noodstopschakelaar

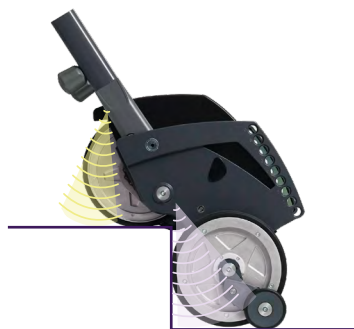

MOBILITEIT

Veelzijdig & flexibel

De mobiele traphulp is geschikt voor alle soorten trappen en kan worden afgestemd op de individuele behoeften van gebruikers en zorgverleners. Een ware verrijking van uw dagelijks leven staat u te wachten.

scalamobil kan met slechts één handbeweging in twee delen worden gedemonteerd en eenvoudig aan vrijwel elk type rolstoel worden bevestigd.

scalacombi is uitgerust met een obstakelmodus en opklapbare armleuningen en voetsteunen, zodat u elke uitdaging in de thuissituatie aankunt.

- ✓ **Installatie:** Klaar voor gebruik op vele soorten trappen, zonder aanpassingen
- ✓ **Flexibiliteit:** scalacombi overtuigt door zijn eenvoudige opvouwbaarheid

COMFORT

Comfortabel & chic

Bij de ontwikkeling van de nieuwe scalamobil modellen stond gebruiksgemak voor de verzorger voorop. De brede, stabiele zitting is bekleed met een zacht, maar toch ondersteunend materiaal voor optimaal comfort.

De dynamische soft-step functie zorgt voor een soepele, gelijkmatige trapbeweging. Esthetisch gezien passen de scalamobil en scalacombi modellen naadloos in elk interieur.

Hun minimalistische, heldere design zorgt voor een hoogwaardige uitstraling.

- ✓ **Comfortabel:** Soepel traplopen dankzij de soft-step functie
- ✓ **Kwaliteit:** Gefabriceerd volgens een hoge standaard – Made in Germany
- ✓ **Uiterlijk:** Aantrekkelijk design

Gemakkelijk op te bergen en te demonteren voor transport.






TRAP

Neemt trappen serieus. En maakt het leven gemakkelijk.


In tegenstelling tot trapliftten vereisen de mobiele trapliftten van Alber geen structurele veranderingen aan uw huis. Dit bespaart tijd, zorgt voor gemoedsrust en biedt een snelle, flexibele oplossing. Deze apparaten zijn geschikt voor alle trapontwerpen en zijn compatibel met vrijwel elk type trap, inclusief smalle, steile of wenteltrappen.

Dankzij hun compacte ontwerp en eenvoudig opvouwbaar ontwerp zijn deze trapliftten ideaal voor op reis.


Hierdoor kunt u gemakkelijk trappen beklimmen, zowel binnen als buiten uw huis.

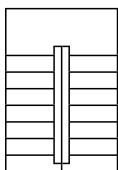


Traphoogte tot 20 cm

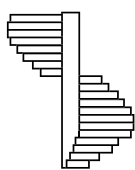

Wenteltrappen

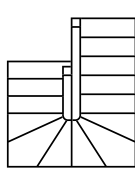

Smalle, gebogen trappen

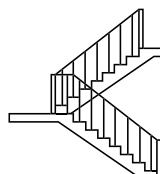

Buitentrappen met leuningen


Geen renovatie nodig, ongeacht het type trap

Een blij gezicht op elk oppervlak


Trappen verschillen niet alleen in hun structuur, maar ook in hun materiaal en ontwerp, afhankelijk van hun doel en locatie.

scalamobil kan vrijwel elke situatie aan, of de treden en bordessen nu van hout, steen of metaal zijn, of bedekt zijn met tapijt. De banden - gemaakt van een slijtvast materiaal - bieden voldoende grip en stabiliteit op alle conventionele oppervlakken, wat begeleiders vertrouwen geeft tijdens het gebruik. De scala modellen zijn teder voor trapbekleding, zelfs na intensief gebruik.


steen &
tegels

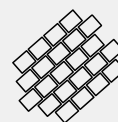


tapijt &
vloerkleed

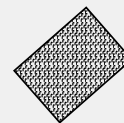


hout &
laminaat

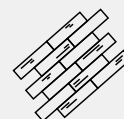

rooster & metalen
oppervlakken

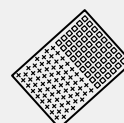

glas &
kunststoffen

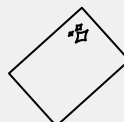

i In de manuele modus kunt u eenvoudig over alle droge oppervlakken navigeren.



”

De scalamobil is gewoonweg fantastisch! Mijn vrouw en ik kunnen nu gemakkelijk de trap op en hoeven niet langer op externe hulp te vertrouwen. Bedankt voor dit innovatief ontwerp dat ons leven gemakkelijker heeft gemaakt!

Max M. uit München

De scalamobil heeft ons leven ten goede veranderd. Mijn man, die moeite heeft met trappen vanwege zijn rugklachten, kan ze nu zonder problemen beklimmen. We zijn dankbaar voor deze uitstekende technologie, die hem zijn mobiliteit en onafhankelijkheid terug heeft gegeven!

Hanna K. uit Stuttgart

“







Voor betrouwbaarheid

scalamobil is het ideale apparaat voor mensen die in hun eigen rolstoel trappen moeten beklimmen. scalamobi is de perfecte oplossing voor mensen die alleen een hulpmiddel nodig hebben om trappen te beklimmen en voor gebruik in smalle trappenhuizen.


De klimtechnologie is in beide modellen identiek: twee elektrisch aangedreven wielparen beklimmen continu de trap, de ene trede na de andere. De veiligheid van gebruikers en begeleiders is een topprioriteit sinds de eerste patentaanvraag in 1986.

MODELVERSIES

scalamobil®**Koppelen aan de rolstoel**

scalamobil kan snel en zonder gereedschap aan vrijwel elk type rolstoel worden bevestigd. Rolstoelgebruikers kunnen zo blijven zitten en gemakkelijk obstakels overwinnen, thuis of onderweg.

- i** scalamobil kan ook gecombineerd worden met verpleegrolstoelen of bijzonder smalle rolstoelen.

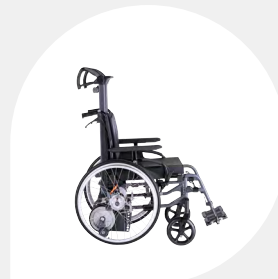**scalacombi®****Met geïntegreerde zitting**

scalacombi is ideaal voor mensen die hulp nodig hebben bij het traplopen, maar in het dagelijks leven niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Het traploopparaat beschikt over een comfortabele, geïntegreerde zitting en kan worden opgevouwen en opgeborgen om ruimte te besparen.

**Inbegrepen bij de levering:****Accu**

De krachtige accu kan tot 200 stappen aan

**Automatische lader**

Slim automatisch opladen en uitschakelen

**Stuur met display**

In breedte en hoogte verstelbaar stuur voor ergonomisch gebruik

DISPLAY

Stevig in de hand

Slim bedieningsconcept voor veiligheid en comfort.



De kantelassistent geeft aan of de scalamobil in de juiste positie staat.



Obstakelmodus:

Dankzij de functie voor het overwinnen van obstakels wordt het nemen van obstakels op weg naar de trap een stuk eenvoudiger.



Vergrendeling:

De startblokkering beveiligt het traploophulpmiddel tegen onbevoegd gebruik.



Aan/uit:

Hoofdschakelaar voor het aan- en uitzetten.

AUTO

In de automatische modus wordt de klimrichting door sensoren gedetecteerd en automatisch gestart.

ASSIST

Het klimmen wordt ondersteund wanneer het apparaat zich in de juiste positie bevindt en de knop "omhoog/omlaag" wordt ingedrukt.


MANUAL

In de manuele modus is traplopen in elke situatie mogelijk, omdat de sensorfuncties zijn uitgeschakeld.



Duidelijk display met informatie over de accu en de klimrichting.

BREEDTE & HOOGTE

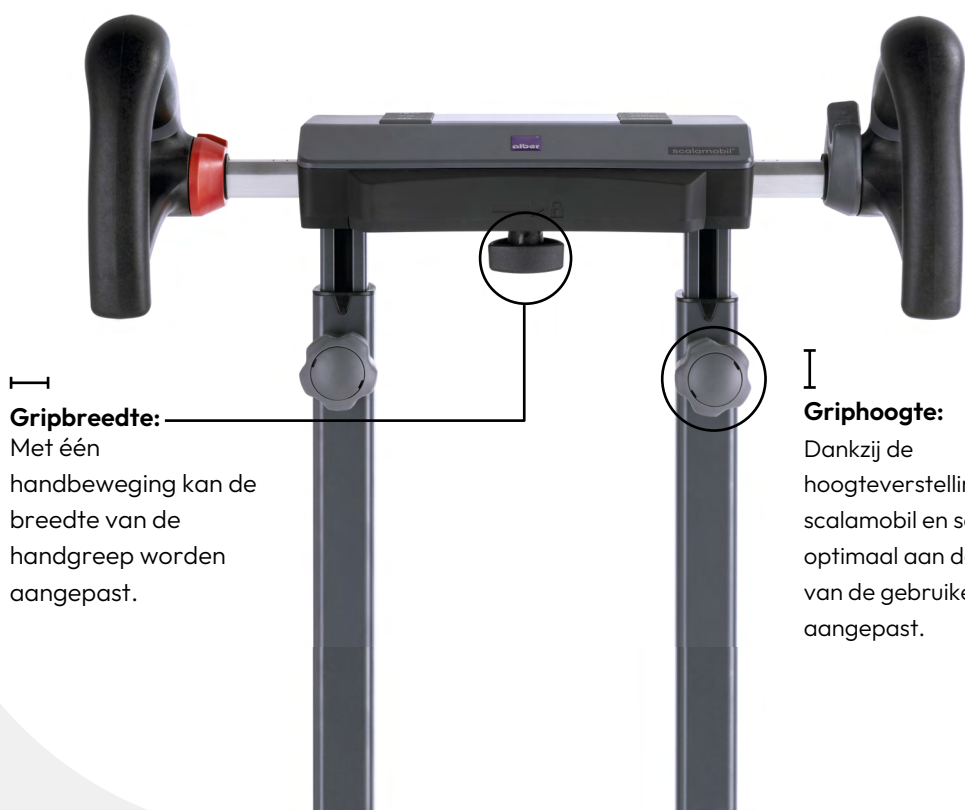

Gripbreedte:
Met één handbeweging kan de breedte van de handgreep worden aangepast.

Griphoogte:
Dankzij de hoogteverstelling kunnen scalamobil en scalacombi optimaal aan de lengte van de gebruiker worden aangepast.

SENSORS

Voor veiligheid

Veiligheid staat voorop bij het gebruik en de bediening van scala apparaten. Een groot aantal ingenieuze functies zorgen voor betrouwbare beklimmingen en afdalingen. Geïntegreerde sensoren verzamelen en verwerken alle benodigde informatie.

Koppeling:

Bij gebruik van het scalamobil model moet u de wielen van de rolstoel demonteren tijdens het klimmen.

Sensoren tijdens het klimmen:

Voor het gebruikerscomfort is de dynamische soft-step functie een van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe scala-generatie. Deze functie verlaagt de snelheid individueel en automatisch vóór elke trede. Sensoren die in het traplooppapparaat zijn geïntegreerd, meten de tredelhoogte, waardoor het traplopen optimaal en soepel kan worden ingesteld.





Technische gegevens

	scalamobil S45	scalacombi S46
Gewicht		
Algemeen	26 kg	37 kg
Max. gebruikersgewicht	140 kg	140 kg
Max. toegestane totaalgewicht	180 kg (scalamobil, rolstoel en rolstoelgebruiker)	
Bereik	Tot 200 treden*	
Snelheid	Ca. 12 stappen/minuut*	
Accu	2x12 V; 3.4 Ah lood-gel, lekvrij en onderhoudsvrij.	

*afhankelijk van het gewicht van de rolstoelgebruiker en de rolstoel, evenals de geometrie van de treden



Accessoires

1. Bracket

De bracket dient voor het bevestigen van het scalamobil apparaat aan de rolstoel. U moet het rolstoeltype en de zitbreedte opgeven bij uw bestelling.

2. Hoofdsteun

De zacht beklede hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek verstelbaar. Het biedt ondersteuning en stabiliteit voor de nek en het hoofd.

3. Bracket voor het vervoeren van wielen

De bracket maakt het mogelijk om de wielen van de rolstoel te vervoeren samen met het scalamobil apparaat om onnodige reizen te voorkomen. Compatibel met alle standaard rolstoelmodellen.

4. Anti-tippers

De anti-tippers kunnen worden verwijderd met behulp van de quick release sluiting en kunnen in hoogte en lengte worden aangepast. De automatische zwenkfunctie stelt u in staat om stoepanden en bordessen te navigeren.

5. Automatische vergrendeling

Eenvoudige vergrendeling van de rolstoel aan scalamobil (geen quickpins en niet meer bukken).




6. Quick-release as

Om met de scalamobil trappen te beklimmen, verwijderd u eerst de wielen van de rolstoel. Er is een quick-release as systeem nodig, dat verkrijgbaar is als ombouwset en alle benodigde componenten bevat - incl. montage voor standaardhaven en trommelremmen.

7. ISOFIX® verbinding (enkel scalacombi S46)

Maakt het eenvoudig om kinderzitjes te bevestigen.

Voor een overzicht van het volledige assortiment accessoires, zoals veiligheidsgordels, enz., gaat u naar: www.alber.de/scalamobil/accessories

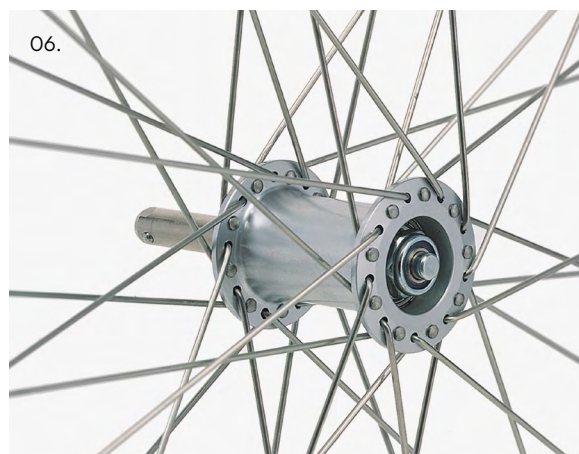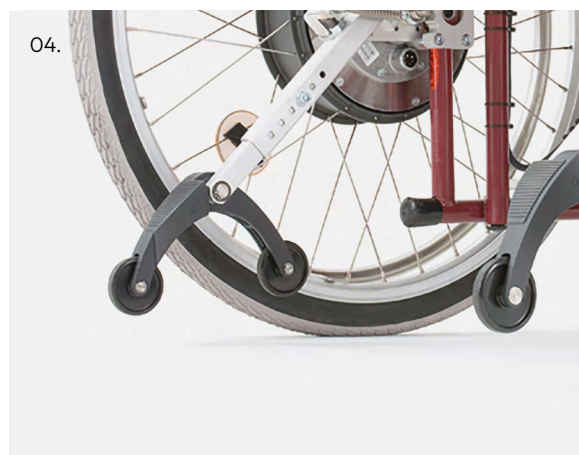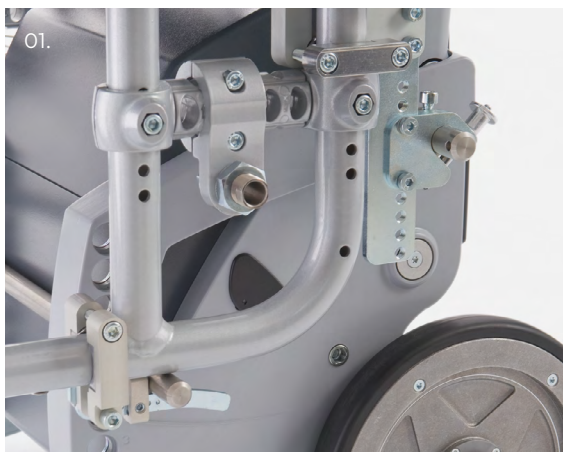

scalamobil en scalacombi worden
geleverd met:

een stuur met display
een klimunit met veiligheidsrem
een accupakket met oplader



scalamobil – de mobiele hulp voor eenvoudig en veilig traplopen.

Scalamobil en Scalacombi dragen het CE-keurmerk voor conformiteit met de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) 2017/745, zijn op vrijwillige basis getest door TÜV Süd en gecertificeerd volgens productnorm EN 7176-28.

Onze kwaliteitsgarantie – uw veiligheid!
Alber is gecertificeerd volgens de huidige kwaliteitsmanagementnorm ISO 13485 voor medische hulpmiddelen. Ons milieumanagementsysteem, gecertificeerd volgens ISO 14001, garandeert dat onze producten op een milieuverantwoorde manier worden geproduceerd.



Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem - België
marketingbelgium@invacare.com
tel: +32(0)50 83 10 10

MADE IN GERMANY ■■■