

viaplus®

Eenvoudig duw- en remhulpsysteem voor comfortrolstoelen



De alber® **viaplus** aandrijfmotor wordt gebruikt om de Invacare® **Dahlia**®, **Azalea**® en **Clematis**® **Pro** comfortstoelen moeiteloos en in alle veiligheid te duwen en af te remmen.

Dankzij deze motorisering blijft de zitkanteling van de stoelen toegankelijk.

Het aandrijfsysteem is comfortabel en eenvoudig te bedienen met een simpele druk op de trekker.

De met één hand te bedienen draaiknop geeft toegang tot diverse functies zoals aan/uit, snelheidsaanpassing en vrijloop.

Het automatische remsysteem biedt optimale veiligheid op hellingen voor de gebruiker en begeleider.



De viaplus aandrijfmotor past perfect onder de frames van de Invacare® **Rea**®, **Azalea**®, **Clematis**® **Pro** en **Dahlia**®.

Dankzij het kleine formaat blijft de zitkanteling van de stoel behouden.

Dankzij het ingenieuze viaplus dempingssysteem kunnen de aandrijfwielen met een simpele pedaal worden in- en uitgeschakeld.

via GO®



De Alber® **via GO** motorisering is een krachtig en compact duwhulpmiddel. Deze duwhulp zorgt ervoor dat stoelen moeiteloos kunnen worden voortgeduwd, terwijl het transport- en gebruiksgemak behouden blijft.

Uitgerust met een handgreep aan de achterkant en een gewicht van slechts 6kg, is hij eenvoudig te vervoeren en te monteren aan de stoel met een simpele klik.

De handbediening is bevestigd aan de stangen van de rugleuning, vlakbij de duwhandgrepen en kan worden aangepast om het rijcomfort te vergroten. De bediening heeft een statusindicator, een activeringsbediening en een aan/uit-knop.

De montagebracket is compatibel met 80% van de standaard en lichtgewicht rolstoelen en zorgt ervoor dat de rolstoel optimaal opgevouwen blijft wanneer de motorunit wordt verwijderd.

TECHNISCHE GEGEVENS / VERGELIJKINGSTABEL

Technische gegevens	viamobil V25	viamobil eco	viaplus	via GO
Montée/ Pente maximum	18%	10%	10%	16%
Snelheid	5,5 km/h	6 km/h	6 km/h	
Accu				
Accu	36V, 6.6Ah Lithium-Ion	2 x 12 V, 7.2Ah	2 x 12 V, 12Ah	36 V, 4.5 Ah
Bereik*	20 km	12 km	16 km	16 km
Oplaadtijd	5 h	7 h	12 h	5 h
Gewicht				
Batterijpakket	2,3 kg	6,0 kg	6,0 kg	
Aandrijfmotor	10,3 kg	10,5 kg	10,7 kg	5,85 kg
Bedieningshendels/ bediening	0,9 kg	2,0 kg	0,3 kg	0,14 kg
Totale gewicht	13,5 kg	18,5 kg	17 kg	6 kg
Max. gebruikersgewicht	160 kg	120 kg	120 kg	150 kg

* Afhankelijk van bodem, gebruiker en topografie



Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België
Tel. : +32 (0)50 83 10 10

Meer info:
www.invacare.be



Simpelweg mobiel.



viamobil® V25

viamobil® eco

viaplus®

via GO®

Een stoel duwen en remmen met gemak



NEEM MOBILITEIT VANZELFSPREKEND. DAT IS HET IDEE.

Het assortiment **alber® via** bestaat uit elektrische duwhulpaandrijvingen die aan uw rolstoel kunnen worden toegevoegd. Dankzij deze hulpsystemen wordt het duwen en remmen nu echt kinderspel voor de begeleider. De fysieke inspanningen die vandaag de dag nodig zijn om de stoel omhoog of omlaag te duwen, zullen verdwijnen. Het intuïtieve rijgedrag is eenvoudig en praktisch te beheren, waardoor de begeleider moeiteloos lange afstanden kan afleggen. De ergonomische, anti-sliphandgreep zorgt voor extra veiligheid en comfort. Deze hulpaandrijvingen zijn eenvoudig en snel aan de stoel te bevestigen en vereisen geen gereedschap of speciale vaardigheden. Bovendien blijven alle functionaliteiten van de stoel toegankelijk.

GEMAKKELIJK VERVOERBAAR.



Het vervoeren van deze motoren is mogelijk, zelfs in kleine auto's. In slechts enkele seconden kunnen **alber® via** motoren zonder gereedschap worden gedemonteerd en eenvoudig worden opgeslagen en vervoerd. De modules zijn licht, sterk en voorzien van handgrepen om ze snel vast te nemen.

viamobil® V25

Een stoel duwen en remmen met gemak



DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN DE VIAMOBIL V25

De **V25** reeks is het model dat zich kan aanpassen aan verschillende stoelconfiguraties. De begeleider kan hem gemakkelijk van de ene stoel naar de andere verplaatsen dankzij het paar anti-tip wieltjes en de standaard meegeleverde telescopische handgrepen. Enkel compatibel met Invacare **Clematis Pro**.



① **KRACHTIG** – de motor kan hellingen tot 18% aan. Het aandrijf wiel, voorzien van banden, helpt de grip op de grond te optimaliseren. Elke wandeling zal dus veilig zijn, zelfs op moeilijk terrein.



② **COMPACT** – het ultramoderne **accupakket** zorgt ervoor dat de compacte accumodule hem uitzonderlijk licht en voor iedereen toegankelijk maakt. Dankzij het magnetische systeem positioneert het batterijpakket zichzelf op natuurlijke wijze tijdens elke hermontage.




③ **INTUÏTIEF** – de **bedieningshendel** met zijn ergonomische design ligt ideaal in de hand om het rijden aangenamer te maken. De versnellingsstrekker, uitgerust met een veiligheidsvoorziening die een noodstop mogelijk maakt (gepatenteerd systeem), zorgt voor een perfecte veiligheid voor de begeleider en de rolstoelgebruiker.

④ **DISCREET** – de beugels

Het enige wat u nodig hebt, zijn eenvoudige beugels om de viamobil aan uw stoel te bevestigen.



INTELLIGENT – de **acculader** past zich aan de spanning van de elektrische stroom aan en stopt automatisch zodra de accu volledig is opgeladen.

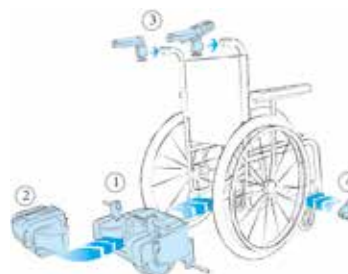

viamobil® eco

Een stoel duwen en remmen met gemak



DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN DE VIAMOBIL ECO



① **BEDIENINGSHENDEL** – De ergonomische trekker zorgt voor optimaal rijcomfort. Met de draaipotentiometer kunt u verschillende functies activeren, zoals snelheidsaanpassing, aan/uit-modus en vrijloop. De bediening geeft ook het batterijniveau weer.



② **ACCUPAKKET** – Maakt een bereik van maximaal 12 km mogelijk. Dankzij het systeem kunt u de accu in een handomdraai verwijderen. Met zijn geïntegreerde draagbeugel en zijn gewicht van 6 kg is hij gemakkelijk te hanteren. Het ABS-kunststofmateriaal is slagvast. De laadaansluiting is in de accumodule geïntegreerd. Het is mogelijk om als optie een extra batterijmodule te verkrijgen.



③ **AANDRIJFUNIT** – De massief rubberen zijwieltjes zijn antislip voor maximale controle. Automatische veerophangingen bieden comfort en constante druk op de grond. Een voetpedaal maakt het omhoog en omlaag brengen van de aandrijfwielen mogelijk. Er zijn staven aanwezig voor een eenvoudige en snelle plaatsing in de bevestigingsset. Bij hellingen van meer dan 8% (bergop en bergaf) zijn anti-tip wieltjes essentieel.



AUTOMATISCHE OPLADER – Hij past zich automatisch aan de netspanning aan (90 - 240 V). Het stopt automatisch zodra de accu volledig is opgeladen. Op de lader is een visuele oplaadindicatie aanwezig.

