



PLUS DE  
FONCTIONNALITES CLINIQUES

*Invacare*<sup>®</sup> *Rea*<sup>®</sup> ***Flex 3***



Confidence in posture solutions




Yes, you can.

# FLEX 3

## Découvrez le système Flex 3

Le système Flex 3 a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, grâce à un dossier qui s'adapte aux différentes morphologies et pathologies. Le dossier Flex 3 contribue à améliorer le positionnement et la stabilité de l'utilisateur et permet d'accroître son niveau d'activité et sa qualité de vie.

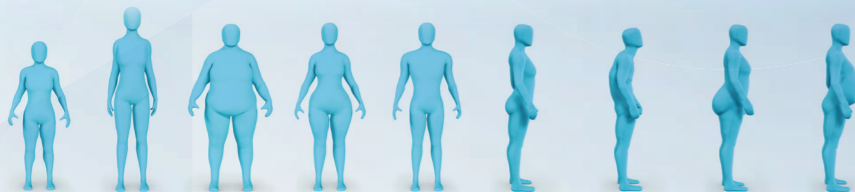

## Compatible avec nos fauteuils de confort

Nos fauteuils de confort\* bénéficiant tous des mêmes pièces et accessoires, le système Flex 3 permet d'associer un type de coussin d'assise et un type de dossier de la même gamme. Nos fauteuils sont donc rétrocompatibles, ce qui en facilite la maintenance.



\* Sauf le Clematis® Pro et l'Azalea® Minor

# → Trouvez le fauteuil adéquat

## Gamme Rea Azalea®

La gamme **Rea Azalea** convient aussi bien aux utilisateurs modérément actifs qu'aux utilisateurs passifs. Il est doté d'une bascule d'assise à 25° et d'un dossier inclinable à 30°. La gamme offre de nombreuses solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs.

- Azalea** Il répond à un grand nombre de besoins en matière de confort et de positionnement.
- Azalea Base** Conçu pour adapter un corset-siège.
- Azalea Minor** Avec ses dimensions réduites, il convient aux adolescents et aux adultes de petite taille.
- Azalea Tall** Avec sa hauteur d'assise sur élevée et sa profondeur d'assise rallongée, il est adéquat pour les personnes de grande taille.
- Azalea Max** Il répond aux besoins des personnes de forte corpulence.



## Gamme Rea Dahlia®

Le **Rea Dahlia** est facilement manoeuvrable, compact et réglable avec des options de bascule d'assise ainsi qu'une option d'inclinaison de dossier à 30°. Ce fauteuil roulant polyvalent est idéal pour les utilisateurs qui recherchent de la mobilité, du confort et une décharge importante des points de pression.

**Dahlia 45** - Sa bascule d'assise à 45° permet de faire varier les points de pression et maintient de manière optimale les zones les plus vulnérables de l'utilisateur. Afin de réduire les points de pression à l'aide de la bascule d'assise, il est recommandé de basculer le fauteuil au maximum, soit à 45°.

**Dahlia 30** - La version inclinable à 30° avec une hauteur sol/siège réduite est destinée aux utilisateurs pouvant se déplacer par traction podale. L'auto-inclinaison d'assise est disponible en option et permet à l'utilisateur de changer de position de façon autonome.



→ **Choisissez à présent votre dossier**

# GUIDE DE CHOIX DU DOSSIER



## Lateral

Le coussin de dossier latéral combiné au dossier réglable en tension permet une bonne immersion à l'utilisateur et un maintien optimal.



## Laguna

Le coussin de dossier Laguna offre un maintien latéral modéré et procure plus de stabilité et de soutien à l'utilisateur.



## Mistral 2

Avec ses maintiens thoraciques et sa découpe scapulaire, le coussin de dossier Mistral 2 offre une meilleure stabilité au niveau de la taille et une bonne liberté de mouvements au niveau des épaules.



## Passad 2

Grâce à ses maintiens latéraux au niveau des épaules, le coussin de dossier Passad 2 est idéal pour les utilisateurs ayant un déséquilibre important postural. Les maintiens latéraux supérieurs sont renforcés.



### Dossier réglable en tension

Le dossier est adaptable à la morphologie de l'utilisateur en ajustant les sangles. Il est réglable en angle, en largeur et en hauteur afin d'offrir un maintien et un confort optimaux.



### Plaque de dossier

Plaque de dossier réglable en largeur et hauteur, rigide et stable.



## Guide de choix du dossier Flex 3

Plaque	Plaque	Plaque ou rég. en tension	Plaque	Rég. en tension
<b>Petite taille</b>	<b>Grande taille</b>	<b>Taille moyenne</b>	<b>Obésité</b>	<b>Epaules larges</b>
Rég. en tension	Rég. en tension	Rég. en tension	Rég. en tension	Rég. en tension
<b>Bassin large</b>	<b>Ventre proéminent</b>	<b>Fessier proéminent</b>	<b>Cyphose</b>	<b>Lordose</b>

Visionnez la vidéo du dossier  
**Rea Flex 3** sur notre chaîne  
YouTube „**Invacare France**“.



**Une large gamme d'accessoires est disponible pour plus de  
maintien et de confort. Pour plus d'informations, consultez  
notre brochure d'accessoires Rea.**



Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch - 37230 Fondettes  
France  
Tel: +33 2 47 62 64 00  
Fax: +33 2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

© 2023 Invacare International Sàrl  
Tous droits réservés.

Tout a été mis en œuvre pour que  
le contenu de cette publication soit  
le plus actuel possible au moment  
de l'impression ; Dans le cadre  
d'un perfectionnement continu des  
produits, Invacare se réserve le droit  
d'entreprendre à tout moment des  
modifications sur les modèles présentés.



Yes, you can.