

Accent[®]

Pour les soins quotidiens



Lit à orientation médicale

Approuvé par les professionnels de la santé



Qualité abordable

Le lit Accent offre une solution de qualité simple et abordable pour les soins à domicile et les soins de longue durée.



Sécurité

Tous les lits Invacare sont conformes aux normes de sécurité CEI 60601-2-52.



Qualité

Nos conceptions et spécifications de lit respectent les normes les plus élevées.



Axé sur les soins

Chaque lit Invacare est conçu en tenant compte des spécificités des environnements de soins.



Confort

Accent favorise le repos, la dignité et l'indépendance.



Prêt pour les soins à domicile

Accent est un choix simple et convivial pour les patients, les familles et les soignants.



*Matelas Invacare vendu séparément

Conçu avec soin

01

Avec un assemblage simple, des réglages fluides et des détails bien pensés, Accent soutient des soins de qualité au quotidien.



Choix abordable

Un lit de qualité, simple et abordable.

11°

09

Inclinaison de soutien

Pour le positionnement et la gestion de la pression.


02



Mise en place simple et rapide

Montage et démontage simples et sans outils. Facilité de manipulation.

03

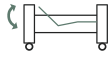

Positionnement réglable

Le dossier et les sections des cuisses s'ajustent par simple pression sur un bouton.

04



Hauteur réglable

Réglable entre 400 et 800 mm pour des hauteurs de travail confortables et des soins optimaux aux patients.

05



Commande manuelle intuitive

Affichage visuel clair pour une utilisation facile. Inclinaison verrouillable disponible en option.

06



Gamme de barrières latérales

Choisissez parmi les options Slim, Scala 2, Verso HC ou Aria.

08



Nettoyage facile

Le nettoyage est possible avec des détergents doux, ce qui le rend idéal pour les environnements à usage unique ou multiple. Reportez-vous au manuel d'utilisation.

07



Unité d'alimentation compacte et câblage

Grâce à la petite taille de l'unité ainsi qu'à ses câbles plus ordonnés et détachables, l'espace sous le lit est accru et son déplacement est facilité.



Options Accent[®]


Des soins simplifiés
grâce à un choix
d'options quotidiennes.



Slim
Barrière latérale
pleine longueur en
bois de pin.



Scala 2
Barrière latérale
en acier.

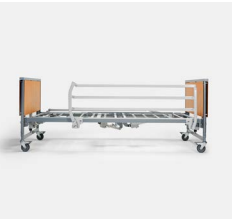

Verso HC
Barrière latérale
rabattable en acier.



Aria
Barrière latérale
pleine longueur en
acier.



Panneau
Panneau en
option.




Télécommande
alternative
Avec inclinaison
verrouillable pour une
tranquillité d'esprit
optimale.



Potence de levage

Transport facile

Le kit de transport
en option facilite
encore plus le
déplacement et le
rangement du lit.

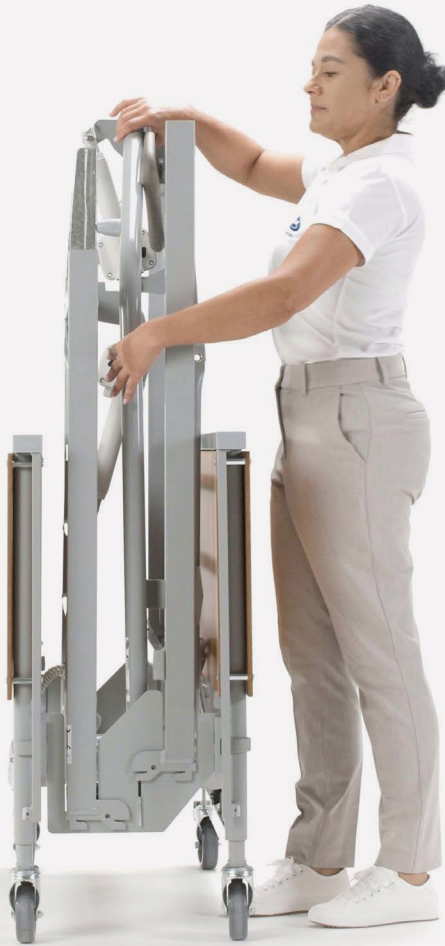

Regardez la vidéo
explicative sur
le montage et le
démontage.



Assistance technique
et service après-vente

Demandez conseil à notre
équipe. Nous sommes
toujours là pour vous aider.

Tél: +32 (0)50 83 10 10

Caractéristiques techniques



Largeur
intérieure
90 cm



Largeur
extérieure
102 cm



Réglage de la
hauteur
40 - 80 cm



Longueur
intérieure
208 cm



Longueur
extérieure
224 cm



Angle
d'inclinaison
11°



Poids maximal
de l'utilisateur
145 kg



Poids
total
64 kg



Partie la plus
lourde
16 kg



Plan de couchage
**80 - 23 - 30
- 67 cm**



Angle du dossier
0 - 70°




Angle de cuisse
0 - 33°

Couleur



Acier

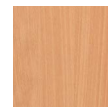

Bois



Conforme à la norme de sécurité
CEI 60601-2-52



Certifications ISO 9001 et ISO 13485

Tél: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem, Belgique