

# Unbeatable



Design. Tecnologia. Prestazioni.



Yes, you can.®


AVIVA RX

# Carrozine elettroniche per un comfort senza precedenti

Le nostre carrozzine elettroniche **AVIVA RX** sono state progettate per affrontare con il giusto piglio tutte le sfide che la vita, ogni giorno, ci riserva.

A casa, al lavoro o durante i nostri spostamenti: con Aviva non ci faremo mai trovare impreparati!

Compatta, personalizzabile e comodissima. Non potremmo desiderare di più!

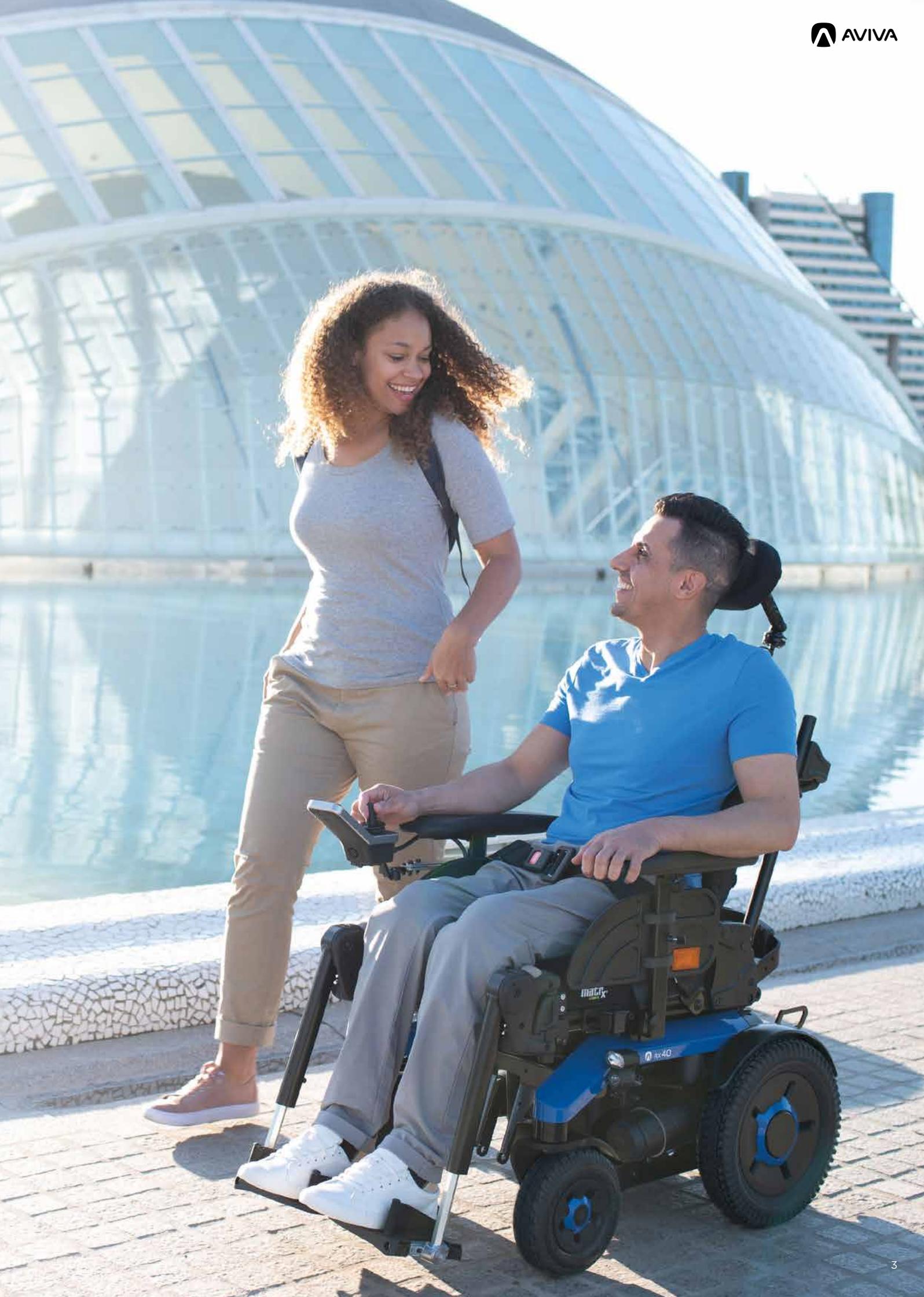

AVIVA base

# Vai dove ti porta il cuore!



Salite da affrontare in libertà, ciottoli e selciati che le tue ruote solcano con leggerezza: un avanzare, il tuo, al passo con i tempi della vita moderna. Godrai di una migliore visibilità nei tuoi spostamenti e sarai più visibile per gli altri; potrai personalizzare la tua carrozzina affinché ti rappresenti appieno.

## Da sapere:

### > Sospensioni

La novità che riguarda la base di questa carrozzina è rappresentata dalle sospensioni brevettate CTC: grande controllo, trazione migliorata ed extra comfort. La carrozzina è compatta, ma adatta alle lunghe percorrenze.

In base alle tue esigenze potrai regolare agevolmente la rigidità delle sospensioni. Il concetto di fondo è quello del giunto sferico: la carrozzina asseconderà tutti gli avvalamenti del terreno in ogni direzione assicurandoti un'esperienza di guida confortevole.

### > Tecnologia LINX® G-TRAC®

La tecnologia con giroscopio digitale rileva e corregge anche la minima deviazione rispetto al percorso impostato, per consentirti di andare esattamente dove vuoi, senza bisogno di "ritoccare" i settaggi del controllo. E' particolarmente utile in caso di utilizzo di comandi alternativi.

Equilibrio perfetto

# Stabile su superfici irregolari (ciottoli, selciato)

capace di affrontare quasi tutti i tipi di terreno

Grazie alle quattro ruote che rimangono sempre a contatto con il suolo l'esperienza di guida sarà piacevole e confortevole, anche sulla lunga distanza.

## Tecnologia di base

### > La salita non ci spaventa

Affrontare percorsi in salita non sarà più un problema - accendi la carrozzina e parti, in tutta sicurezza, senza sforzo.

### > Funzionamento silenzioso

Nessun cigolio a livello delle molle o del telaio grazie agli ammortizzatori in elastomero.

**Per apprezzare al meglio la qualità di AVIVA RX, ti invitiamo a provarla e viverla in prima persona!**



**Un design lineare e compatto** per garantire libertà di movimento anche negli spazi più ristretti

**560** mm

Larghezza

**420** mm

Altezza seduta-pavimento\*

**73.5** Ah

Capacità max batteria

Le nostre carrozzine sono larghe solo 560 mm: in questo modo ti sarà più semplice muoverti anche negli spazi più stretti:

- > a casa
- > negli ascensori dei centri commerciali
- > lungo i corridoi...

potrai spostarti agevolmente anche in spazi angusti, sentendoti al sicuro e protetto a bordo della tua carrozzina.

\*AVIVA RX con Ultra Low Maxx

### **Raggio di sterzata piccolo e compatto**

La base ridotta della AVIVA RX garantisce un raggio di sterzata minimo, che ti consente di curvare senza difficoltà lungo corsie o corridoi stretti.



Ultra compatta 560 mm



## Nessun compromesso sulla lunga distanza!

Le carrozzine AVIVA RX montano batterie molto performanti, con capacità fino a 73.5 Ah e una potenza decisamente maggiore rispetto allo standard. Ciò che si ottiene è una combinazione davvero unica nel suo genere: nessun'altra carrozzina elettronica è in grado di assicurare percorrenze così elevate a fronte di dimensioni tanto ridotte. Bando ai compromessi: con AVIVA RX il vantaggio è duplice!





Libera la tua creatività

# Sarà proprio come tu la vuoi!

Scegli tra una palette di colori quello che più ti piace e personalizza carenature, ruote e inserti. Il colore di serie è il nero, ma puoi optare anche per blu, rosso, argento o viola. Se questa selezione di colori ancora non ti soddisfa, scegli quello che preferisci tra i codici RAL.

Siamo in grado di realizzare la combinazione di colori che più ti rappresenta.

Le nostre carrozine elettroniche si distinguono per le linee eleganti e il design moderno. Stai tranquillo: a bordo della tua Aviva RX non passerai inosservato.

## COLORI DISPONIBILI



Quando si fa buio...

# **Faro Ultra-Beam con protezione antirottura: lo montiamo solo noi!**





Con il nostro nuovo e potente kit luci AXENDO potrai viaggiare in tutta sicurezza anche al calar della sera. I fari montati sulla carrozzina hanno una potenza maggiore rispetto a quelli attualmente in commercio e ti consentono di vedere ed essere visto meglio.

Il sistema di fari e illuminazione AXENDO è disponibile in due versioni, entrambe conformi alla normativa sulla circolazione stradale.



Altezza da terra

# Fatti sotto!

**L'altezza da terra  
della AVIVA RX è  
sorprendentemente  
ridotta: accostarsi ad  
un tavolo, allo stesso  
livello di altre sedie, con  
AVIVA RX è ora realtà.**

L'altezza ridotta da terra, 435 mm  
con seduta Modulite, rende più  
semplice anche salire sui veicoli con  
accesso per sedia a rotelle.



**420 mm**

Regolazioni

# Tu cambi, la tua carrozzina cambia con te

Per fare in modo che tu possa stare sempre comodo sulla tua carrozzina abbiamo previsto una serie di regolazioni rapide per adattare la larghezza, la lunghezza, le sospensioni, l'altezza, il baricentro e la posizione della seduta.

Potrai configurare la tua carrozzina "su misura" per te, adottando batterie di diverse capacità, ruote di varie dimensioni e tipologie, diversi tipi di forcelle, fari e docking station.



## **SCEGLI LA BASE PIÙ ADATTA A TE 560 MM O 635 MM: AVRAI A DISPOSIZIONE LE SEGUENTI OPZIONI:**

- > Sospensione HD, dura, standard o morbida
- > Altezza da terra: 435 mm, 460 mm o 485 mm (Modulite)
- > Altezza da terra: 420 mm, 435 mm, 460 mm 485 mm (Ultra Low Maxx)
- > Interasse: 460 mm, 490 mm o 520 mm (base stretta)
- > Interasse: 490 mm, 520 mm 550 mm (base larga)
- > Capacità batterie: 52 Ah, 60 Ah o 73.5 Ah
- > Ruote da 8" o 9"



Nessun limite in altezza

# La funzione “Lift” ti consente di alzare la seduta fino a 300 mm in più

**Il piacere di  
chiacchierare con un  
amico, guardandolo  
dritto negli occhi, o di  
riuscire a prendere un  
oggetto dal ripiano  
più alto dello scaffale  
non ha prezzo!**

**> Discreto e dinamico**

Grazie ad un elegante meccanismo di elevazione sarai in grado di modificare l'altezza dell'ausilio quando lo vorrai e sempre in modo discreto.

**> In movimento!**

Non c'è bisogno di fermarsi per attivare le funzioni di salita/discesa; il meccanismo di elevazione di AVIVA RX è semplicemente intelligente e si attiva anche quando la carrozzina è in movimento.



Seduta

# Ultra Low Maxx

Abbiamo abbinato la base tecnologicamente avanzata della AVIVA RX alla seduta Ultra Low Maxx - una soluzione top di gamma che ti consente di controllare perfettamente la postura senza rinunciare alla comodità.



# 170°

reclinazione

# 50°

basculamento

## > Articolazione fisiologica

Il marchio di fabbrica delle sedute Ultra Low Maxx sono i punti di snodo delle articolazioni naturali pressoché “fisiologici”. In altre parole la tua testa, le tue spalle, le anche e i piedi rimangono sempre a contatto con la carrozzina che, in un certo senso, “imita” i punti di snodo del nostro corpo. E tu ti senti avvolto e sicuro.

## > Sostegno garantito

Il sostegno e la comodità sono sempre garantiti, indipendentemente dal posizionamento dinamico, perché la seduta Ultra Low Maxx si muove con te.

## > Guide a binario integrate

Consentono di integrare la tua carrozzina elettronica con gli accessori che desideri o ti possono servire.

## > Configura il modulo seduta

Larghezza: 405-610 mm

Profondità: 405-580 mm

Altezza schienale: 355-505 mm

Altezza bracciolo: 230-405 mm



Sistemi di seduta

# seduta fissa

> Versatile

E' la seduta perfetta nel segmento entry level se non sei alla ricerca di un sostegno top di gamma.

> Regolabile

Puoi regolare la tensione dello schienale, la pedana e i braccioli in base alle tue esigenze.



Seduta

# Modulte

Modulte: il piacere di cambiare. Troppo spesso il bisogno di bilanciare comfort e corretta gestione delle pressioni di carico impone di scendere a compromessi nell'assetto della carrozzina. Ma, per nuove esigenze, servono nuove soluzioni. Con Modulte, ad esempio, cambiare la base della seduta è un gioco da ragazzi.

- > Un sistema polifunzionale e flessibile, una gamma completa di soluzioni posturali.
- > Modulte offre una selezione di supporti seduta e cuscini per garantire allineamento e comfort

## Configurazione personalizzata

Adatta alle tue esigenze:

- > Profondità seduta
- > Larghezza seduta
- > Altezza schienale
- > Altezza bracciolo
- > Altezza seduta
- > Lunghezza pedane

## Comando REM400

# 3.5"

## touch screen a colori

### Bluetooth integrato

Collegati al tuo smartphone, laptop e smart speaker

### Accesso diretto

Salta direttamente ai menu - accesso diretto ai profili e alle funzioni

### Tecnologia Touchscreen

Sfiora o tocca il touch screen a colori per controllare i tuoi spostamenti con il nostro comando REM400

### Ambidestro

Comandi adattabili per utenti destrorsi o sinistrorsi. Se il joystick standard non soddisfa le tue esigenze potrai personalizzare la carrozzina con un comando alternativo.

### Tachimetro in vista

Sul display del comando, in alto a sinistra, un tachimetro indica la velocità della carrozzina durante la marcia. E' presente anche un contachilometri per tenere traccia della distanza percorsa.





# Comandi alternativi



**Con interruttore singolo**

**Joystick**



**MEC**

**Joystick**



**Comando a mento**

**Joystick**



**Compatto per utilizzo pediatrico**

**Joystick**



**Comando remoto compatto con display LED**

**Joystick**

**Prodotto**

- > Joystick per comando a mento
- > Joystick MEC
- > Comando remoto compatto con display LED
- > Joystick compatto per utilizzo pediatrico
- > Joystick con interruttore singolo

**Descrizione**

Mini joystick ideale come comando a mento, dotato di poggiatesta e pulsante esterno programmabile

Ideale in caso di indebolimento muscolare o capacità motorie limitate. Richiede poca forza, percepisce anche i più piccoli movimenti

Perfetto con capacità motorie limitate e/o forza ridotta

La sua base piatta lo rende ideale per un appoggio bilanciato

Pensato per utilizzatori con elevato tono muscolare o movimenti incontrollati

**Tipo**

Joystick

Joystick

Joystick

Joystick

Joystick

### Comando succhio e soffio con pulsante a labbra

Comando occipitale



### Comando occipitale ATOM/PROTON

Comando occipitale



### Comando a sensori di prossimità

Interruttore



### Comando accompagnatore

Doppio comando



### Doppio Comando Intuitivo IDC

Doppio comando



**Puoi scegliere un comando di altre aziende e utilizzarlo con il nostro sistema intelligente LiNX. In questo caso serviranno i nostri moduli di ingresso come interfaccia.**

Prodotto	Descrizione	Tipo
> Comando succhio e soffio con pulsante a labbra	Combina un dispositivo succhio e soffio con un poggiatesta a sensori di prossimità laterali	Comando occipitale
> Comando occipitale ATOM/PROTON	Tre sensori di prossimità montati sul poggiatesta con Bluetooth incorporato	Comando occipitale
> Comando a sensori di prossimità	Ideale per chi ha un range di movimenti limitati e poca forza	Interruttore
> Comando accompagnatore	Consente all'accompagnatore di gestire alcune funzioni della carrozzina	Doppio comando
> Doppio comando intuitivo IDC	L'accompagnatore ha la possibilità di controllare alcune funzioni della carrozzina, come l'arresto di emergenza	Doppio comando



# **E se qualcosa non va finché sono in giro? La nostra app avvisa subito il tuo rivenditore, che potrà intervenire per aiutarti a risolvere il problema**

## **> MyLiNX**

MyLiNX è una app in grado di mettere la parola fine a tutte le tue preoccupazioni sulla durata della batteria o sugli inconvenienti più frequenti nell'uso del mezzo. Con MyLiNX avrai sempre sott'occhio i parametri principali della carrozzina, come il tempo di percorrenza, la durata della batteria e l'utilizzo globale dell'ausilio. Attualmente non disponibile in tutti gli stati europei.





Per una scelta consapevole

# Vieni a farti un giro!

Scegliere la carrozzina giusta è importante, ma tutt'altro che semplice. Per un consiglio telefonico chiamaci: ti spiegheremo i vantaggi di ogni modello, per aiutarti a decidere consapevolmente. Se invece vuoi provare la carrozzina, ma non riesci a passare in uno dei nostri punti vendita, informaci. Se Maometto non va alla montagna...!

**Ora che hai auto modo di conoscere tutte le caratteristiche di AVIVA RX non ti resta che provarla!**

L'unico modo per sapere se hai scelto la carrozzina giusta per te è provarla!

Potrai eseguire un test drive su tutti i nostri modelli di carrozzina elettronica.

Prenota oggi stesso la tua prova gratuita presso il tuo rivenditore di fiducia!

# Unbeatable



Design. Tecnologia. Prestazioni.

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Switzerland

 [hqeuropa@invacare.com](mailto:hqeuropa@invacare.com)  
[www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com)

© 2020 Invacare International GmbH

All rights reserved.

All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. For more pre-sales information about this wheelchair, please consult [www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com).

For information about typical user description, intended use, adjustments and transportation, please refer to the user guide.

