

# Fauteuils Releveurs



Toujours plus de repos et de confort  
grâce à la nouvelle gamme de  
fauteuils releveurs et relax !

Le **Move Up** enrichit la gamme de fauteuils releveurs *Invacare*, en intégrant de nouvelles fonctionnalités, gage de confort, de mobilité et d'esthétisme.

## 4 roulettes pour plus de confort


Disponible en version électrique, 1 moteur, le **Move Up** affiche un design entièrement redessiné. Son style accueillant et chaleureux propose un dossier moelleux et rembourré. Pour un confort optimal, des appuis-tête latéraux ont été intégrés au dossier. De plus, la forme des accoudoirs avec ses angles arrondis favorise le confort des membres supérieurs et une meilleure circulation du sang.

Le **Move Up** se démarque grâce à son mécanisme innovant d'activation des 4 roulettes permettant de déplacer le fauteuil avec le patient au sein de son lieu de vie. Son allure subtile et élégante s'intègre aisément dans la plupart des environnements.



## Système d'activation unique des 4 roulettes

Afin de déplacer le fauteuil d'une pièce à une autre, le **Move Up** est équipé de 4 roulettes escamotables. L'activation se fait sans effort par le biais d'une pédale à l'arrière du fauteuil. L'utilisateur a la possibilité de rester assis confortablement dans son fauteuil durant la transition. Afin de retrouver sa stabilité initiale, la même pédale peut être utilisée pour rétracter les roulettes et assurer une sécurité lors de son usage.

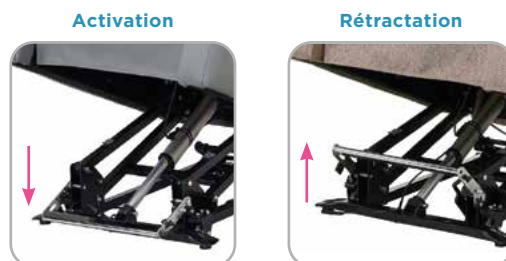

## Un design moderne et élégant

Découvrez notre nouveau revêtement Heritage, conçu avec des matériaux plus durables et résistants. Ses propriétés imperméables et déperlantes favorisent la pérennité du tissu. Facile d'entretien, les tâches se retirent aisément à l'aide d'un chiffon humide.

Ce modèle est disponible en deux coloris :

- Heritage Camel pour une allure cosy et raffinée.
- PVC/Polyester gris pour un design chic et tendance.



## Caractéristiques et Options ▼



### Revêtement amovible et déhoussable

Le **Move Up** offre un dossier amovible et déhoussable pour un lavage en machine. Deux zips en haut et en bas du dossier sont facilement accessibles afin de retirer le revêtement du dossier.



### Pochette latérale

Ce fauteuil propose un espace de rangement pour la télécommande afin de l'avoir à proximité. Cela évite ainsi de l'abimer.



### Télécommande deux boutons

Le **Move Up** est accompagné d'une télécommande ergonomique 2 boutons rétroéclairés, simple d'utilisation.

## Coloris revêtements ▼



Heritage Camel



PVC/  
Polyester Gris



Lavage



Chlorure



Séchage



Repassage



Nettoyage à sec

## Entretien revêtement Heritage ▼

## Référence & Certifications ▼

1673370 **MOVE UP** 1 moteur, Heritage Camel  
1673371 **MOVE UP** 1 moteur, PVC/ Polyester Gris

Conforme à la norme non feu 1021-1  
Conforme à la norme non feu 1021-1 et 1021-2

# Invacare **Cosy Up**

Le fauteuil releveur **Cosy Up** apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds.

Son look moderne et épuré convient au plus grand nombre et lui permet de trouver facilement sa place dans tout type d'environnement.



## Dossier réglable en profondeur de série

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier du **Cosy Up** est réglable en profondeur très simplement.

Ainsi, ce fauteuil releveur s'adapte parfaitement à toutes les morphologies, aussi bien aux plus petites (avec la profondeur 450 mm), qu'aux plus grandes (avec la profondeur 540 mm).



## Deux largeurs d'assise

Le fauteuil releveur **Cosy Up** est livré avec une paire d'accoudoirs rembourrés. La paire d'accoudoirs fins est disponible en accessoires afin de bénéficier de deux largeurs d'assise. Tous deux se fixent sur les accoudoirs rigides grâce à un système de velcro et de zip. Ils sont donc interchangeables très facilement.



Pour obtenir la petite largeur d'assise de 450 mm, il faut installer les revêtements d'accoudoirs rembourrés.



Pour obtenir la grande largeur d'assise de 530 mm, il faut installer les revêtements d'accoudoirs fins.

## Caractéristiques et Options ▼



### Grandes pochettes latérales

Fauteuil équipé de deux pochettes, une à gauche, l'autre à droite, pour y mettre des magazines ou des petits objets.



### Revêtements amovibles pour lavage en machine

Les accoudoirs, le dossier et l'assise couette sont fixés sur la base du fauteuil releveur grâce à des systèmes de zip et de velcro. Tous ces éléments sont donc amovibles très facilement, ce qui permet le lavage en machine à 30° ou 40° selon les tissus.



### La télécommande toujours à portée de main

Pratique, grâce à la conception des accoudoirs, l'utilisateur a la possibilité de placer la télécommande du fauteuil (ou celle de la télévision) sous les revêtements d'accoudoirs.

Ainsi, la télécommande est toujours accessible !

## Options et Configurations ▼



### Version 1 moteur

Télécommande ergonomique 2 boutons rétroéclairés, simple d'utilisation.



### Version 2 moteurs

Télécommande ergonomique 4 boutons avec port USB intégré de série, simple d'utilisation.



### Fonction dos au mur

Grâce à la fonction dos au mur, de série sur la version 1 moteur du **Cosy Up**, le dossier du fauteuil releveur peut être placé très près d'un mur sans que cela n'entrave la parfaite utilisation de toutes les fonctions. Grâce à une conception optimisée pour les petits espaces, seulement 9 cm sont nécessaires entre le mur et le fauteuil pour permettre une inclinaison totale du dossier.

## Caractéristiques et Options ▼

### Tissus EasyClean : nettoyable à l'eau !

Tissu antibactérien et déperlant, traité spécialement pour un nettoyage à l'eau. Les tissus EasyClean permettent d'enlever les tâches quotidiennes comme le café, le chocolat ou encore le vin uniquement avec un linge propre et de l'eau. Le tissu EasyClean empêche les tâches de pénétrer dans le tissu et protège ainsi durablement le fauteuil.

Pratique et esthétique, ce tissu anti-tâche prévient la moisissure et résiste au feu conformément aux normes non feu 1021-1 et 1021-2. Lavables en machine jusqu'à 40°C et aptes au sèche-linge, les coussins EasyClean tendances et confortables font du **Cosy Up**, le fauteuil idéal pour une utilisation en collectivité, en EHPAD et en maisons de retraite !



EasyClean Ocean



EasyClean Bleu



EasyClean Taupe



EasyClean Gris



EasyClean Anthracite

## Cosy Up : mixez, choisissez et changez de coloris suivant vos humeurs !

Avec ses **6 choix de coloris de coussins et ses 3 choix de bases**, le **Cosy Up** est LE fauteuil releveur **configurable**. Changez de housse comme d'humeur et transformez votre intérieur en seulement quelques minutes. La configurabilité du **Cosy Up** permet au distributeur, dans un espace réduit, de présenter plusieurs coloris en changeant uniquement le coussin (gains de place et d'inventaire !).

Vous pouvez commander au choix soit un fauteuil complet ou bien créer le fauteuil qui vous plaît, en sélectionnant la base et en choisissant les coussins que vous souhaitez : vous pouvez maintenant changer autant de fois que vous le voulez !

## Bases ▼



**Base télécommande 1 moteur PVC Taupe**

Réf. 1650169



**Base télécommande 2 moteurs PVC Taupe**

Réf. 1650205



**Base télécommande 1 moteur PVC Gris Foncé**

Réf. 1670878

## Coussins ▼



**EasyClean Ocean**

anti-feu 1021-1 et 1021-2


Réf. 1670881



**EasyClean Bleu**

anti-feu 1021-1 et 1021-2

Réf. 1650211

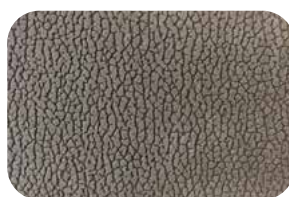

**EasyClean Taupe**

anti-feu 1021-1 et 1021-2

Réf. 1650212



**EasyClean Anthracite**

anti-feu 1021-1 et 1021-2

Réf. 1670880



**EasyClean Gris Clair**

anti-feu 1021-1 et 1021-2

Réf. 1670879



**Microfibre Taupe**

Réf. 1650208



**PVC/Polyester Taupe**

Réf. 1650209

# Invacare® **Fino**, Invacare® **Faro**

## Le bon compromis entre confort et simplicité

Fonctionnels et épurés, les fauteuils **Fino** et **Faro** présentent un design moderne qui s'adaptera facilement à tout type d'environnement. L'appui-tête, de série, offre un bon maintien et complète le look de ce fauteuil. Le nouveau coloris Heritage Camel trouvera parfaitement sa place dans des environnements modernes.

Le fauteuil **Fino** offre des dimensions d'assise réduites : largeur 450 mm x profondeur 450 mm et bénéficie d'accoudoirs rembourrés.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de seulement 90 mm pour la version 1 moteur.



**Faro**  
Heritage Camel

**Fino**  
Heritage Camel

## Plusieurs versions disponibles

Ces deux modèles existent en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément. Le fauteuil **Faro** quant à lui existe également en version 2 moteurs (permet un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds) et en version relax manuel (le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs).



**Faro**  
PVC/Polyester noir

## Caractéristiques et Options ▼



Appui-tête pour un meilleur maintien et un maximum de confort. Il est amovible si besoin.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 4 boutons. (Version 2 moteurs).



Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets. (Versions avec moteur).

## Coloris ▼



Heritage Camel



PVC/  
Polyester Noir

## Références ▼

1644969

**Fino** 1 moteur Heritage Camel

1608090

**Faro** 1 moteur Heritage Camel

1608091

**Faro** 1 moteur PVC/Polyester Noir

1608092

**Faro** 2 moteurs Heritage Camel



# Invacare® Douro

## La rencontre entre élégance et confort !

Le fauteuil **Douro** offre un confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds. Ce fauteuil bénéficie de maintiens latéraux et d'une protection en tissu amovible au niveau de la tête. Grâce à ses lignes épurées et à sa faible largeur hors tout, il trouvera facilement sa place au domicile de l'utilisateur.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de seulement 100 mm pour la version 1 moteur.



Heritage Camel

## Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil **Douro** existe en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.

Il est également disponible en version relax manuel : le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs.



Heritage Camel



Tissu PVC/Polyester  
Chocolat

## Caractéristiques et Options ▼



Maintiens latéraux de la tête pour toujours plus de confort.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).



Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets. (Version 1 moteur).



Livré avec une deuxième protection d'appui-tête en tissu pour permettre le lavage de la première.

## Coloris ▼



Heritage  
Camel



PVC/  
Polyester  
Chocolat

## Références ▼

1608093

**Douro** relax PVC/Polyester Chocolat

1608094

**Douro** 1 moteur Heritage Camel

1608097

**Douro** 1 moteur PVC/Polyester Chocolat

# Invacare® Porto<sub>NG</sub>

## Design sobre et classique

Le design du fauteuil **Porto<sub>NG</sub>** en Heritage Gris lui permet de s'intégrer dans tout type d'environnement. Il offre toujours plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds et aux maintiens latéraux présents au niveau de la tête.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de seulement 50 mm pour la version 1 moteur.



Heritage Gris

## Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil **Porto<sub>NG</sub>** existe en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.

La version 2 moteurs quant à elle permet un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds.



Heritage Gris

## Caractéristiques et Options ▼




Maintiens latéraux afin de soulager la tête et le cou.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 4 boutons. (Version 2 moteurs).

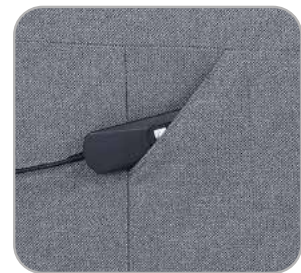

Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

## Coloris ▼



PVC/  
Polyester  
Taupe



PVC/  
Polyester  
Chocolat



Heritage Gris

## Références ▼

1608134

**Porto<sub>NG</sub>** 1 moteur PVC/Polyester Chocolat

1608135

**Porto<sub>NG</sub>** 2 moteurs Heritage Gris

1608136

**Porto<sub>NG</sub>** 2 moteurs PVC/Polyester Taupe

# Tableau des caractéristiques ▼

Coloris ▼



Position Relax ▼



Position Releveur ▼



Position Repos ▼



Continuité entre assise et repose-pieds ▼



Prof. d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Largeur d'assise ▼

1 MOTEUR								
1644969	Fino	Heritage Camel	◆	◆		450 mm	470 mm	450 mm
1608090	Faro	Heritage Camel	◆	◆		540 mm	470 mm	530 mm
1608091		PVC/Polyester Noir	◆	◆				
1608094	Douro	Heritage Camel	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608097		PVC/Polyester Chocolat	◆	◆	◆			
1608134	Porto NG	PVC/Polyester Chocolat	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1644970		PVC/Polyester Taupe & Microfibre taupe	◆	◆	◆			
1650215		PVC/Polyester Taupe	◆	◆	◆			
1650217	Cosy Up	PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu	◆	◆	◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm
1650227		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe	◆	◆	◆			
1660843		PVC/Polyester Gris foncé & EasyClean Gris clair	◆	◆	◆			
1673370	Move Up	Heritage Camel	◆	◆	◆	480 mm	500 mm	480 mm
1673371		Heritage Gris	◆	◆	◆			
2 MOTEURS								
1608092	Faro	Heritage Camel	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608135	Porto NG	Héritage Gris	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608136		PVC/Polyester Taupe	◆	◆	◆			
1644971		PVC/Polyester Taupe + Microfibre taupe	◆	◆	◆			
1650238	Cosy Up	PVC/Polyester Taupe	◆	◆	◆	"450 ou 540 mm"	480 mm	"450 ou 530 mm"
1650240		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu	◆	◆	◆			
1650241		PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe	◆	◆	◆			
MANUEL								
1608093	Douro	PVC/Polyester Chocolat	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm

Les Cosy Up sont également configurable

## Les différentes positions ▼



### POSITION RELAX

Position confort avec bascule de l'assise et du dossier. Cette action est combinée avec les fauteuils 1 moteur et peut être désynchronisée pour une position sur-mesure avec les fauteuils 2 moteurs.



### POSITION RELEVEUR:

Position permettant de s'asseoir et de se relever sans effort.



### POSITION REPOS:

Position couchée pour s'allonger et dormir.



Inclinaison maximum du dossier ▼



Hauteur hors tout ▼



Largeur hors tout ▼



Profondeur hors tout Fermé ▼



Profondeur hors tout Ouvert ▼



Recul nécessaire pour inclinaison maximale ▼



Hauteur sol/accoudoirs ▼



Poids maximum utilisateur ▼



Poids du produit ▼



Densité de la mousse ▼

#### 1 MOTEUR

<b>Fino</b>	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm*	670 mm	53 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Faro</b>	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm*	600 mm	50 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm*	640 mm	57 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto NG</b>	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1670 mm	50 mm*	600 mm	52 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	120°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm*	640(1)/ 700 mm	57 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 18kg/m <sup>3</sup>
<b>Move Up</b>	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm	360 mm	500 mm	65 kg	120 kg	Dossier 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 23kg/m <sup>3</sup>

#### 2 MOTEURS

<b>Faro</b>	135°	1080 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	480 mm	600 mm	50 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto NG</b>	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	52 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	135°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm*	640(1)/ 700 mm	57 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 18kg/m <sup>3</sup>

#### MANUEL

<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	200 mm	640 mm	57 kg	125 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
--------------	------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---

\* Modèle dos au mur

## Les accessoires ▼

1663212	Télécommande 2 boutons rétroéclairés bleu avec port USB intégré pour fauteuil releveur Cosy Up 1 moteur	1677119	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, Easyclean Bleu
1663213	Télécommande 4 boutons rétroéclairés bleu avec port USB intégré pour fauteuil releveur Cosy Up 2 moteurs	1677123	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, Easyclean Ocean
1677095	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, Microfibre Taupe	1677127	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, EasyClean Taupe
1677099	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, PVC Taupe	1677131	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, EasyClean Gris clair
		1677173	Paire d'accoudoirs fins Cosy Up, Easyclean anthracite

## Les pièces détachées ▼

### Pour les modèles avec moteur(s), pièces communes :

1577638	Transformateur + câble secteur
1577640	Batterie externe + câble (permet d'utiliser les modèles avec moteur(s) sans être branchés sur le secteur, de manière occasionnelle)

### Pour les modèles en version 1 moteur :

SP1604803	Moteur
SP1604806	Télécommande 2 boutons rétroéclairés, avec fil

### Pour les modèles en version 2 moteurs :

SP1604804	Moteur fonctions releveur et repose-pieds combinées
SP1604805	Moteur de dossier
SP1604807	Télécommande 4 boutons, avec fil