


Dyna-Form[®] Mercury[®]

Materasso antidecubito per la riduzione della pressione

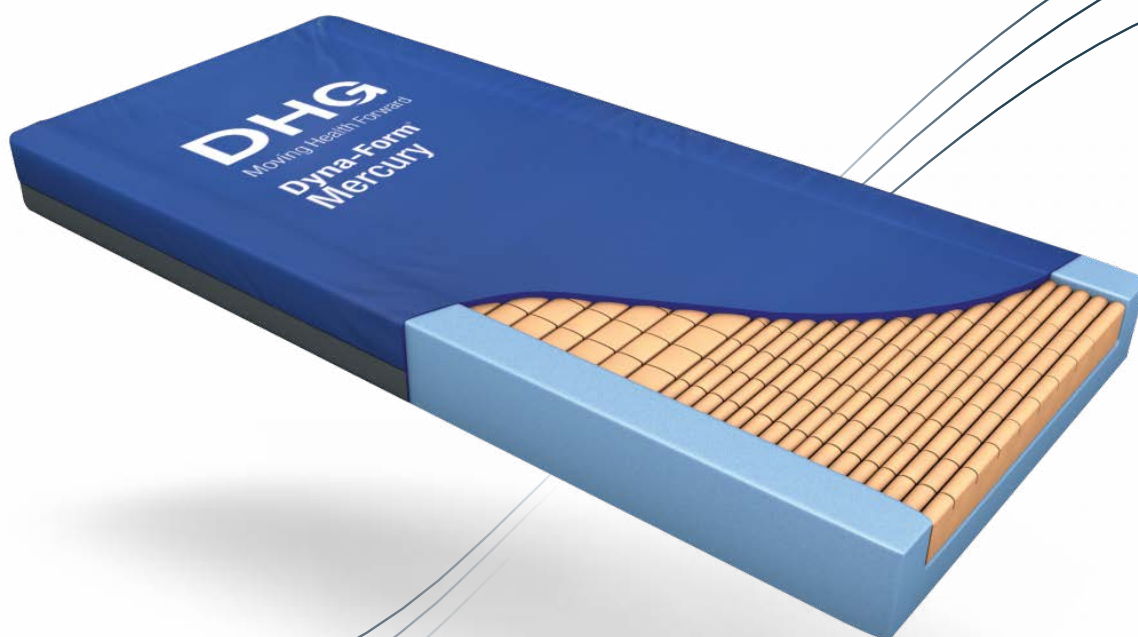


Grande comfort

Lavorazione superiore a torre



Supporto antidecubito per pazienti ad alto rischio

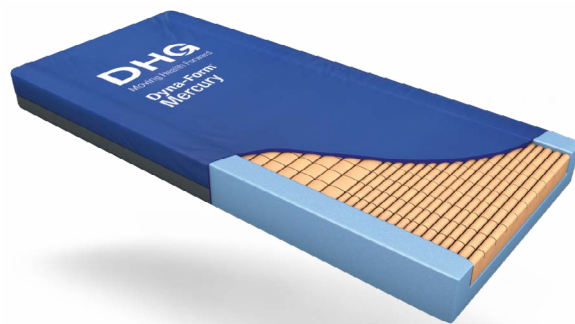

Comfort e Supporto

- > Inserto in schiuma bugnata con scanalature di alleggerimento: celle di dimensioni ridotte nella zona dei talloni e celle più ampie nella zona sacrale per una redistribuzione ottimale della pressione.
- > La base e i bordi laterali in schiuma CME garantiscono stabilità durante i trasferimenti del paziente, assicurando un supporto affidabile e uniforme durante l'utilizzo.
- > Progettato specificamente per pazienti ad alto rischio di lesioni da decubito.



Elasticità multidirezionale

- > Tessuto multielastico traspirante e permeabile al vapore, impregnato con agente antimicotico, che riduce le forze di taglio e di attrito.
- > Rivestimento completamente saldato ad alta frequenza, che impedisce la penetrazione dei liquidi e favorisce il controllo delle infezioni e i processi di decontaminazione.
- > Lavabile fino a 80 °C.



Qualità garantita

- > Base antiscivolo in PU rinforzato, che fornisce una superficie protettiva resistente contro l'idrolisi e la penetrazione dei liquidi.
- > Componenti completamente sostituibili che assicurano un valore duraturo e prolungano la vita utile del prodotto.
- > Prodotto in conformità alla norma BS 7177:2008 (Crib 5 Composite), classe di resistenza alla fatica "Very Severe".

Scheda tecnica ▼



Altezza ▼

150 mm*



Larghezza ▼

830-1200 mm



Lunghezza ▼

1900-2100 mm



Peso max
utilizzatore ▼

254 kg



Peso totale ▼

11 kg



Temperatura max
lavaggio ▼

80 °C

Prodotto in conformità alle norme: BS EN 597-1 (sigaretta), BS EN 597-2 (fiammifero) e BS 7177 (sorgente di accensione 5).

Un'assistenza infermieristica adeguata è fondamentale nella gestione delle lesioni da pressione. Questo materasso può contribuire positivamente agli esiti di un piano di prevenzione delle lesioni da pressione che includa formazione, valutazione clinica e pianificazione degli interventi basata sul livello di vulnerabilità del paziente, elementi essenziali per la prevenzione delle lesioni da pressione.

Per una valutazione formale del rischio di sviluppare lesioni da pressione possono essere utilizzate diverse scale di valutazione; queste devono essere impiegate in combinazione con una valutazione clinica informale (giudizio professionale infermieristico), nell'ambito di un piano assistenziale completo e personalizzato.

DHCare Italia S.r.l.
Via Marco Corner, 19 - 36016 Thiene (VI)
Tel: 0445 380059
Email: italia@dhcare.com
www.dhcare.it



Produttore Legale:
DHG Ltd.
Withey Court
Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

