

EasySlide

Matelas de transfert souple SystemRoMedic™



**Transferts horizontaux,
positionnement, confort du patient**

Pour des transferts plus simple qu'avec un
drap pour des poids jusqu'à 300 kg.



Une marque de confiance depuis 1984

EasySlide est le dispositif de transfert original de SystemRoMedic – utilisé dans les hôpitaux et les maisons de retraite du monde entier depuis plus de 40 ans.

Son matériau unique à ultra-faible friction (ULF) sur la surface intérieure permet aux soignants de transférer les utilisateurs sur pratiquement n'importe quelle surface avec un minimum d'effort et sans avoir à les soulever. Disponible en plusieurs modèles, matériaux et tailles, EasySlide convient à une grande variété

de situations de transfert. Les modèles classiques sont fabriqués en microfibre avec un rembourrage en polyester et une doublure ULF. La plupart des tailles peuvent être équipées d'une housse de protection remplaçable ou jetable pour une meilleure hygiène.

EasySlide 190 x 60

Conçu pour les transferts en position couchée sur le dos depuis et vers les lits, les tables de radiographie, les tables d'opération, les chariots de douche et les brancards – et tout aussi efficace pour les changements de position et les repositionnements dans le lit.

> Matériau de transfert ULF

La couche intérieure à très faible friction réduit la résistance sur toutes les surfaces.

> Ceinture de sécurité incluse

Contribue à stabiliser l'utilisateur en toute sécurité pendant le transfert.

> Surface rembourrée douce

Doux pour la peau – confortable pour les utilisateurs comme pour les soignants.

> Housse de protection disponible

Revêtement en polyester remplaçable avec fibres de carbone réduisant l'électricité statique.

> Housses jetables disponibles

Housses en plastique à usage unique pour une hygiène maximale et moins de lessive.



Friction ultra-faible

Le matériau ULF unique réduit la friction sur toutes les surfaces, permettant des transferts en douceur avec un minimum d'effort et sans soulèvement.



Plusieurs modèles et tailles

Disponible en version microfibre et jetable pour s'adapter à toutes les situations de transfert et exigences d'hygiène.

EasySlide jetable – Usage Unique

EasySlide jetable est une housse de transfert fine, souple et polyvalente présentée en rouleau – jusqu'à 60 housses individuelles par paquet. Convient pour les retournements, les repositionnements, les transferts en position couchée et assise, le levage des jambes, l'aide à l'habillage et la pose d'une sangle. Chaque rouleau est présenté dans un distributeur mural hygiénique pour un accès facile.

> Jusqu'à 60 housses par rouleau

Toujours neuves, propres et prêtes à l'emploi, conditionnées en paquets pratiques de deux.

> Tubulaire ou ouvert

À utiliser en tube ou à séparer en une feuille plate.

> Matériau écologique

Résistant, durable et non soluble dans l'eau – idéal pour une utilisation sous la douche.

> Instructions sur chaque tapis

Guide d'utilisation imprimé directement sur chaque feuille.

> Perforée tous les 50 cm

Il suffit de dérouler et de déchirer la longueur nécessaire.

> Distributeur mural disponible

Rangement hygiénique à portée de main – également disponible sous forme de distributeur de table en acier.




Housse jetable EasySlide

Les housses en plastique jetables pour EasySlide réduisent le volume de lessive et améliorent la prévention des infections. Fabriquées en polyéthylène biodégradable.

> **Polyéthylène biodégradable**

Hygiénique, écologique et nécessitant peu d'entretien.

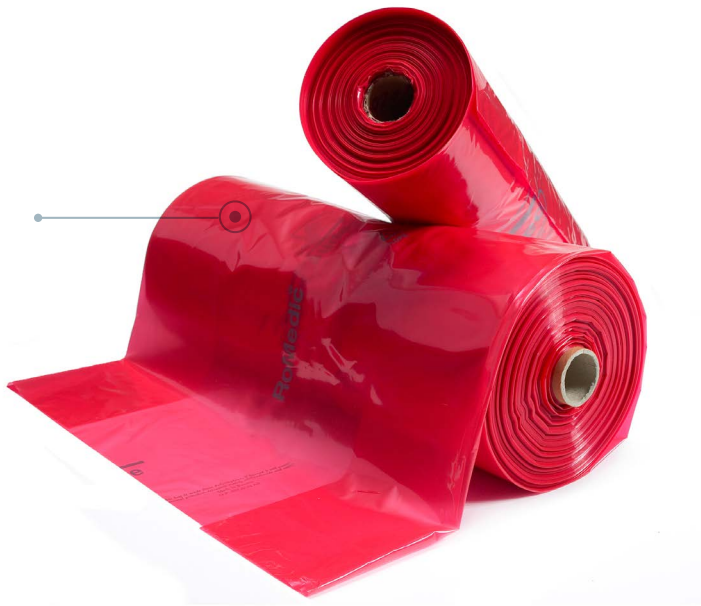

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@dhcare.com
www.dhcare.be/fr

DHCare Belgium SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

