

Eva

Mobiele Tilliften



Sterk, veilig en eenvoudig te manoeuvreren

met elektrisch verstelbaar onderstel



Eva450EE

De Eva450 is een veelzijdige mobiele passieve tillift, geschikt voor uiteenlopende tilsituaties en voor gebruikers met een maximale belasting van 205 kg.

In combinatie met de functionele en gebruiksvriendelijke tilaccessoires van SystemRoMedic is de Eva450 de ideale keuze voor transfers van en naar de vloer, stoel of bed, maar ook voor horizontale tilhandelingen en looptraining.

De Eva450 is verkrijgbaar met onderstel op standaardhoogte of in een speciale uitvoering

met een laag onderstel, geschikt voor gebruik in combinatie met laag-laagbedden. Alle uitvoeringen van de Eva450 worden compleet en gebruiksklaar geleverd, voorzien van een stabiel tiljuk met betrouwbare veiligheidsvergrendelingen en een handbediening. Het standaard tiljuk heeft een breedte van 450 mm en is geschikt voor de meeste gebruikers en tilsituaties.

> Betrouwbare veiligheidsvergrendelingen

Stabiel aluminium tiljuk met een standaardbreedte van 450 mm, geschikt voor de meeste gebruikers en tilsituaties.

> Groot hefbereik

De mast is verstelbaar in drie hoogtestanden en biedt een hefbereik van 500 tot 1.790 mm

> Nooddaalfunctie

Standaard voorzien van zowel een elektrische als een handmatige nooddaalfunctie.

> Maximale belasting: 205 kg

Sterk en stabiel aluminium frame dat tegelijkertijd licht van gewicht en eenvoudig te manoeuvreren is

> Ergonomische duwbeugels

In hoogte verstelbaar voor een comfortabele en ergonomische werkhouding.

> Accu met hoge capaciteit

Voorzien van geïntegreerde laadfunctie en een lange gebruiksduur.

> Elektrisch verstelbaar onderstel

Het onderstel kan soepel en moeiteloos elektrisch worden verbreed en versmald voor optimale toegankelijkheid en stabiliteit tijdens iedere transfer.



Eva600EE

De Eva600EE is een veelzijdige mobiele passieve tillift voor uiteenlopende tilsituaties en is speciaal ontwikkeld voor zwaardere gebruikers met een maximale belasting van 270 kg.

In combinatie met de functionele en gebruiksvriendelijke tilaccessoires van SystemRoMedic is de Eva600EE de ideale keuze voor transfers van en naar de vloer, stoel of bed, maar ook voor horizontale tilhandelingen en looptraining. De Eva600EE is tevens verkrijgbaar in een speciale uitvoering met een laag onderstel, geschikt voor gebruik

in combinatie met laag-laagbedden. Beide uitvoeringen van de Eva600EE worden compleet en gebruiksklaar geleverd, voorzien van een breder tiljuk van 600 mm, waardoor de tilband ruimer opent en optimaal geschikt is voor grotere gebruikers. Daarnaast is de tillift standaard uitgerust met een handbediening.

> Betrouwbare veiligheidsvergrendelingen

Stabiel aluminium tiljuk met een standaardbreedte van 450 mm, geschikt voor de meeste gebruikers en tilsituaties.

> Breder tiljuk van 600 mm

Zorgt voor een ruimere positie van de tilband en is daardoor ideaal voor grotere lichaamsbouw.

> Groot hefbereik

De mast is verstelbaar in drie hoogtestanden en biedt een hefbereik van 500 tot 1.810 mm.

> Nooddaalfunctie

Standaard voorzien van zowel een elektrische als een handmatige nooddaalfunctie.

> Maximale belasting: 270 kg

Extra sterk aluminium frame, speciaal ontworpen voor zwaardere gebruikers.

> Ergonomische duwbeugels


In hoogte verstelbaar voor een comfortabele en ergonomische werkhouding.

> Accu met hoge capaciteit

Voorzien van geïntegreerde laadfunctie en een lange gebruiksduur.


> Elektrisch verstelbaar onderstel

Breed verstelbereik van het onderstel, met een buitenmaat van 750 tot 1.150 mm.

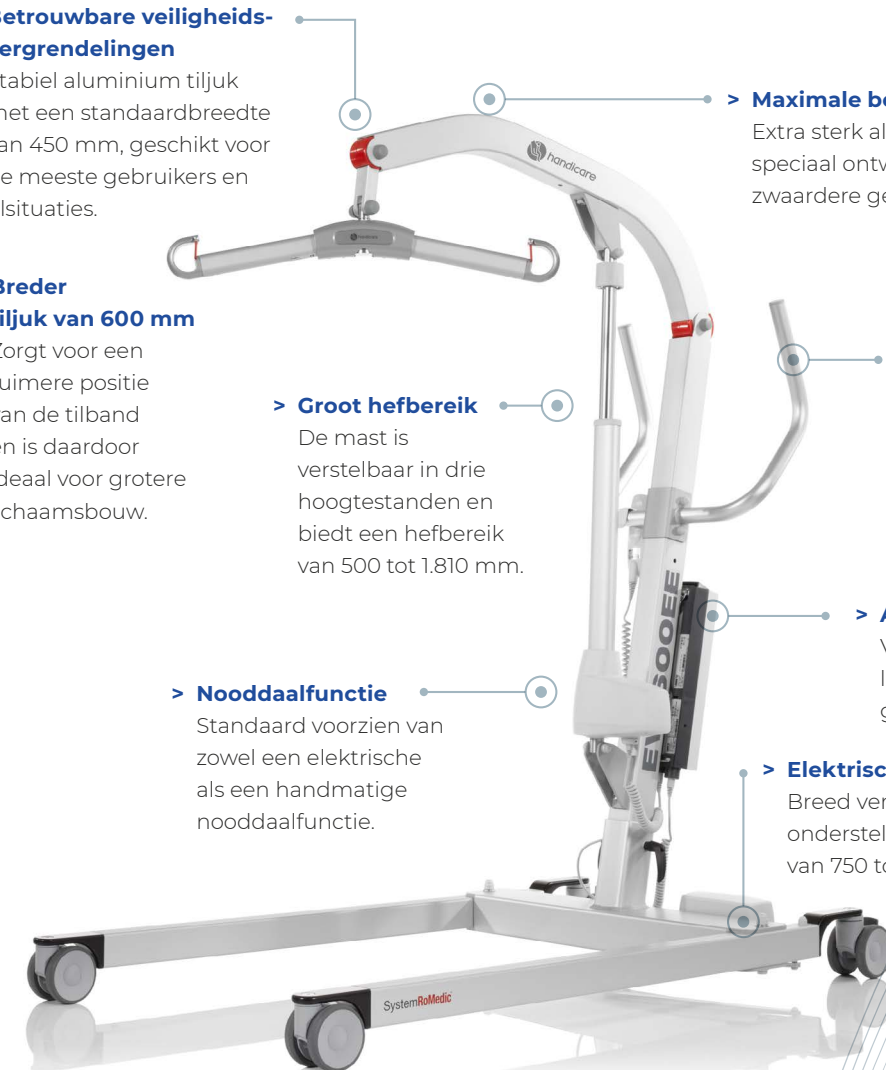

Technische specificaties ▼

	Eva450EE ▼	Eva600EE ▼
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Pootspreiding	Elektrisch	Elektrisch
Nooddaalfunctie	Manueel en elektrisch	Manueel en elektrisch
Materiaal tiljuk	Aluminium	Aluminium

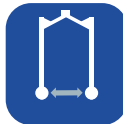						
	Lengte onderstel ▼	Onderstelbreedte (buitenmaat) ▼	Onderstel breedte (binnenmaat) ▼	Min. - max. hoogte van het ophangpunt van het tiljuk ▼	Max hoogte ▼	Totaal gewicht ▼
Eva450EE	1310 mm	685-980 mm	585-880 mm	500 - 1790 mm	2005 mm	34 kg
Eva600EE	1410 mm	750-1150 mm	650-1050 mm	500 - 1790 mm	2005 mm	39 kg

						
	Max veilige belasting ▼	Hoogte poten ▼	Hoogte wanneer ingevouwen ▼	Hefbereik ▼	Tilnelheid zonder belasting ▼	Draaicirkel ▼
Eva450EE	205 kg	115 mm	1330 mm	500-1790 mm	35 mm/s	1340 mm
Eva600EE	270 kg	115 mm	1330 mm	500-1810 mm	35 mm/s	1340 mm

					
	Breedte tiljuk ▼	Diameter voorwielen ▼	Diameter achterwielen ▼	Vrije hoogte onder het onderste ▼	Accucapaciteit ▼
Eva450EE	450 mm	100 mm	100 mm	60 mm	2.9 Ah
Eva600EE	600 mm	100 mm	100 mm	60 mm	2.9 Ah

Voor alle afmetingen geldt een tolerantie van ± 5 mm.

DHCare Belgium NV
Autobaan 22
8210 Loppem België
www.dhcare.be

