

Raizer® II

Hefstoel



Kan een gevallen persoon binnen 30 seconden optillen

Veilig en waardig een gevallen persoon van de vloer tillen – te bedienen door één zorgverlener




Ervaar de veiligheid en het comfort van de Raizer II

De Raizer II is een mobiele, accuaangedreven hefstoel waarmee een gevallen persoon in slechts 20 tot 30 seconden veilig van de vloer naar een vrijwel staande positie wordt gebracht.

De Raizer is eenvoudig door één persoon te monteren en te bedienen, zonder dat daarbij fysieke inspanning nodig is, behalve het bieden van een

ondersteunende hand. Dankzij het doordachte ontwerp is de Raizer niet alleen gemakkelijk te monteren en te gebruiken, maar ook eenvoudig te reinigen.

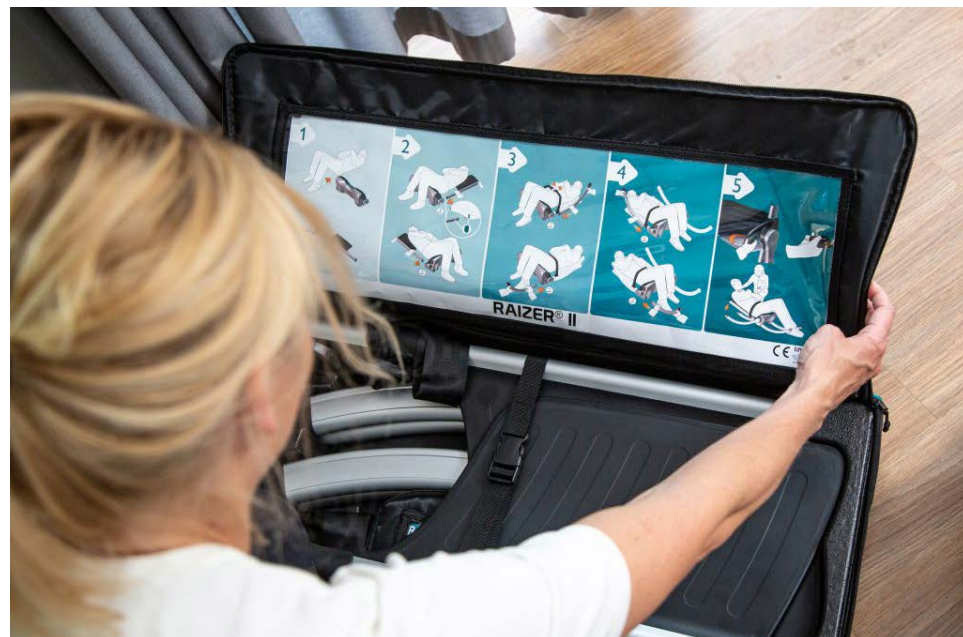

80 tilbewegingen per acculading

Met één acculading zijn tot 80 tilbewegingen mogelijk. Is de accu leeg? Na slechts 10 tot 15 minuten opladen is er capaciteit voor één extra tilbeweging.



4 identieke poten en 2 identieke rugleuningen

Eenvoudige montage – alle onderdelen zijn uitwisselbaar voor een correcte installatie, elke keer weer.




> **Alle oppervlakken** zijn uitgevoerd in materialen die eenvoudig kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd.

> **Extra veiligheidsgordels** kunnen worden aangebracht voor extra stabiliteit van de gevallen persoon tijdens het tillen.


> **Intuïtieve geluids- en led-indicatoren** voor correcte montage.

> **De afstandsbediening** wordt opgeborgen in de zitting, zodat deze altijd binnen handbereik is.

> **Wegwerpbare hygiënehoezen** verkrijgbaar (optioneel accessoire).

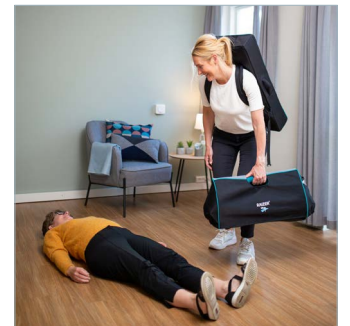

Stap 1 – Plaats de zitunit naast de gevallen persoon.

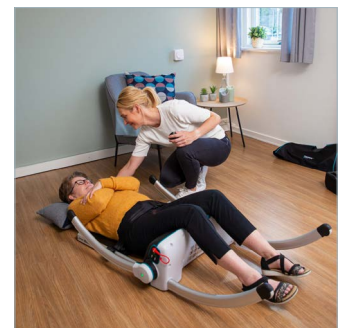

Stap 2 – Monteer de poten en rugleuning rond de persoon.



Stap 3 - Zet de persoon veilig vast en start met tillen



Stap 4 – De persoon bereikt een vrijwel staande positie en kan veilig plaatsnemen in een stoel.

Technische specificaties ▼



Tilvermogen ▼

Max. 150kg



Hefduur ▼

20-30 seconden



Gewicht ▼

Zitting: 8,5 kg
Poten en rugsteun:
4,5 kg
Totaal: 13 kg



Aantal tilbewegingen per volledige acculading ▼

40 bij maximale
belasting. Tot circa 80
bij een gemiddelde
belasting.



Oplaadtijd ▼

Tot 6 uur