

ReTurn™

Aide au passage de la position assise
à la position debout et au transfert



Gamme ergonomique de guidons de transfert

déplacer en toute sécurité une personne d'une assise à une autre éloignée, en passant par la position debout



Un dispositif d'assistance à la verticalisation ergonomique et innovant

Le ReTurn est plus qu'une simple plateforme de transfert : il s'agit d'un dispositif de rééducation. Plus polyvalent qu'un plateau tournant classique et plus abordable qu'un dispositif de relevage de personne mécanique, le ReTurn est toujours à portée de main et s'adapte facilement à différents utilisateurs.

Sa simplicité et sa grande variété d'applications font du ReTurn un dispositif d'assistance réellement utilisé, contribuant à un meilleur environnement de travail et à la réduction des troubles musculo-squelettiques chez le personnel soignant.

Pour l'utilisateur, le ReTurn stimule le schéma de mouvement naturel lors du passage de la position assise à la position debout, renforçant les muscles et les capacités fonctionnelles et favorisant ainsi l'indépendance, la confiance et la dignité.



ReTurn7400™

Le ReTurn7400 est doté d'une échelle basse, ce qui le rend idéal pour les adultes de petite taille et les enfants, et parfaitement adapté aux situations de soins particuliers, telles que les appareils de radiographie. Poids patient maximum = 150 kg

Le ReTurn7400 facilite les transferts en toute sécurité entre le lit, le fauteuil roulant ou les toilettes, et aide à repositionner les utilisateurs plus en arrière dans un fauteuil. L'échelle basse convient aux adultes de petite taille, aux enfants et aux situations de soins particuliers telles que les appareils de radiographie.

Pour les utilisateurs ayant encore de la force, le ReTurn7400 stimule le mouvement naturel de passage de la position assise à la position debout tout en renforçant les muscles et les capacités fonctionnelles, ce qui en fait un appareil de rééducation tout aussi efficace. Un seul soignant suffit dans la plupart des situations.

> Échelles interchangeables

Partage la même embase que le ReTurn7500i – interchangez les échelles basses et standard selon les besoins.

> Modèle breveté

Embase unique qui roule, tourne et pivote en douceur – même dans des espaces restreints

> Hauteur d'accès réduite

Des marquages clairs au niveau des pieds et un profil arrière étroit permettent un positionnement précis au niveau du fauteuil roulant ou des toilettes.

> Repose-jambes réglables

Hauteur, largeur et angle facilement adaptables à différents utilisateurs.

> Mouvement naturel

L'inclinaison de l'échelle favorise un mouvement naturel de passage de la position assise à la position debout, avec une prise en main sûre et ferme.

> Roues verrouillables

Stables et assurant une sécurité directionnelle optimale, même avec des utilisateurs plus lourds.



ReTurn7500i™

Le ReTurn7500i partage la même embase stable que le ReTurn7400, mais dispose d'une échelle de hauteur standard. Les échelles des deux modèles sont interchangeables, ce qui permet de couvrir un plus large éventail d'utilisateurs avec un seul investissement. Poids patient maximum = 150 kg

Crochet d'échelle compatible avec la fixation ReTurnBelt. Supports de jambe réglables en hauteur et en largeur pour s'adapter à différents utilisateurs.

Roues verrouillables, design hygiénique soigné et poids léger. Sacoche accessoire disponible pour le transport et le rangement.

> Échelles interchangeables

Partage la même embase que le ReTurn7400 – interchangez les échelles pour couvrir un plus large éventail d'utilisateurs.

> Repose-jambes réglables

Hauteur, largeur et angle facilement adaptables à différents utilisateurs.

> Roues verrouillables

Stable et directionnellement sûr – effort minimal même pour les utilisateurs plus lourds.

> Mouvement naturel


L'inclinaison croissante de l'échelle favorise un passage naturel de la position assise à la position debout grâce à une prise en main sûre.

> Échelle de hauteur standard

Échelle plus haute pour les adultes de grande taille – compatible avec l'embase ReTurn7400.

> Compatible avec ReTurnBelt

Crochet intégré pour une fixation facile de la ceinture ReTurnBelt et une stabilité accrue.

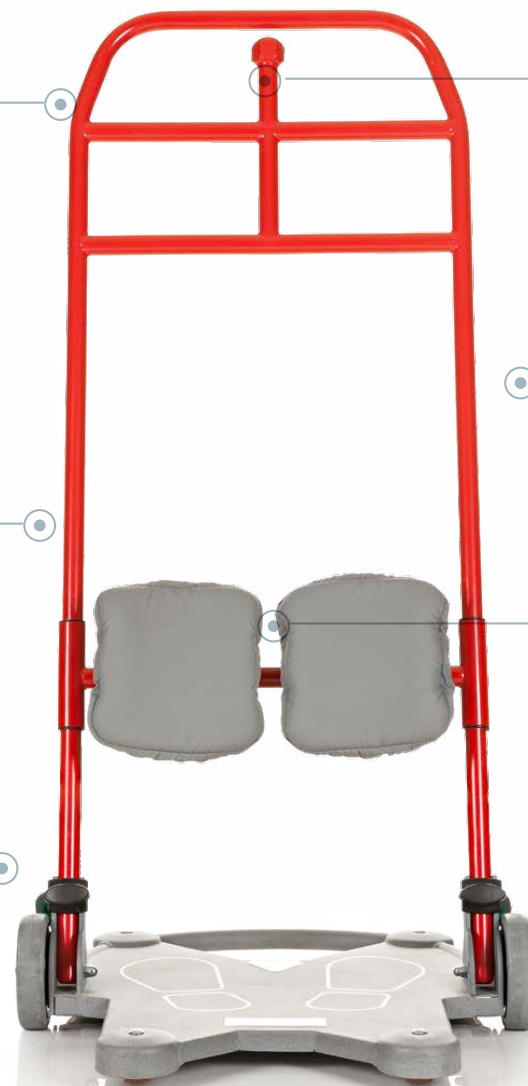

ReTurn7600™

Le ReTurn7600 est conçu pour les utilisateurs plus grands et plus lourds – Poids patient maximum = 205 kg. Une embase et une échelle plus larges ainsi que des supports de jambes adaptés offrent l'espace et la stabilité nécessaires aux utilisateurs plus lourds.

Échelle plus haute et plus large que le 7500i et roulettes plus grandes (75 mm) pour une maniabilité plus fluide avec des charges accrues.

Poids total 26 kg. Embase 795 × 672 mm. Convient à tous les scénarios de transfert standard – lit, fauteuil roulant, toilettes.

> Max. 205 kg

Embase extra-large et échelle plus large pour des utilisateurs plus grands et plus lourds.

> Repose-jambes réglables

Hauteur, largeur et angle facilement adaptables aux utilisateurs de grande taille.

> Roues verrouillables

Stables et assurant une sécurité directionnelle optimale, même avec des utilisateurs plus lourds.

> Échelle plus large

Plus haute et plus large que les modèles 7500i et 7400 – supports de jambe adaptés inclus.

> Grandes roulettes

Roulettes de 75 mm pour une maniabilité fluide même avec des charges importantes.

> Mouvement naturel

L'inclinaison croissante de l'échelle favorise un passage naturel de la position assise à la position debout grâce à une prise en main sûre.



ReTurnBelt

La ceinture ReTurnBelt se fixe directement à l'échelle ReTurn et compense la faiblesse des jambes, offrant ainsi une stabilité supplémentaire lors du passage de la position assise à la position debout, de l'entraînement debout, de l'entraînement à la marche et des transferts.

Modèle breveté, disponible uniquement sur modèle Return7500i, existe en 8 tailles (du XXS au XXL) pour convenir à tous les utilisateurs. Peut également être utilisée indépendamment de ReTurn.

Stabilise l'utilisateur en position verticale et permet une meilleure activation – idéale pour les utilisateurs dont la capacité de charge est variable ou limitée.



ReTurn utilise la force existante et contribue à développer les muscles

ReTurn convient à la plupart des utilisateurs, enfants comme adultes. Pour ceux qui conservent une certaine force, elle stimule le mouvement naturel de passage de la position assise à la position debout tout en développant les muscles et les capacités fonctionnelles. Un utilisateur qui utilise ReTurn à domicile peut généralement vivre plus longtemps de manière autonome avec le soutien d'un seul soignant.

Nombreux domaines d'application différents

Tous les modèles ReTurn sont conçus pour impliquer au maximum l'utilisateur. Ce dernier doit être en mesure de supporter son poids en position debout et de bénéficier d'une certaine force dans les bras

ainsi que d'un bon équilibre. Le soignant garde un pied sur l'embase comme contrepois. À combiner avec ReTurnBelt pour un soutien supplémentaire.



Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.be/fr

	ReTurn7500i, avec une ouverture pour accrocher la ReTurnBelt ▼	ReTurn7400 ▼	ReTurn7600 ▼
CMU	150 kg	150 kg	205 kg
Hauteur globale	1150 mm	995 mm	1210 mm
Dimensions extérieures, embase (longueur x largeur)	685 mm x 570 mm	685 mm x 570 mm	795 mm x 672 mm
Hauteur de l'embase	40 mm	40 mm	45 mm
Échelle interchangeable	Oui, standard 7501i	Oui, standard 7401	–
Échelles alternatives	7501, 7401	7501, 7501i	–
Roues centrales	2 pces, 125 mm Ø	2 pces, 125 mm Ø	2 pces, 125 mm Ø
Roulettes	4 pces, 35 mm/1.38" Ø	4 pces, 35 mm/1.38" Ø	4 pces, 75 mm/2.95" Ø
Poids total	16,5 kg	16,5 kg	26 kg
Brevet / Brevet en cours d'homologation	*) SE-0300528-7 **) PCT/SE2012/050160	*) SE-0300528-7	*) SE-0300528-7
Protection de la conception	Communauté enregistrée Conception : RCD-529631-1	Communauté enregistrée Conception : RCD-529631-1	Communauté enregistrée Conception : RCD-529631-1
Accessoires ▼			
ReTurnBelt	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	–	–

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@dhcare.com
www.dhcare.be/fr

DHCare Belgium SA
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 Belgique

