

ReTurn™

Opsta- en transferhulpmiddel



Een compleet assortiment hulpmiddelen

voor veilig en actief opstaan en transfereren.



Het hulpmiddel dat de standaard heeft gezet

De ReTurn is meer dan een transferplatform – het is ook een revalidatiehulpmiddel. Veel veelzijdiger dan een conventioneel draaischijf en voordeliger dan een actieve sta-lift, is de ReTurn altijd binnen handbereik en eenvoudig aan te passen aan verschillende gebruikers.

Dankzij de eenvoudige bediening en brede inzetbaarheid is de ReTurn een hulpmiddel dat daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit draagt bij aan een betere werkomgeving en helpt de fysieke belasting en het risico op musculoskeletale klachten bij zorgverleners te verminderen.

Voor de gebruiker stimuleert de ReTurn het natuurlijke bewegingspatroon tijdens het opstaan vanuit zit, waardoor spieren en functionele vaardigheden worden versterkt. Zo ondersteunt de ReTurn de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de waardigheid van de gebruiker.



ReTurn7400™

De ReTurn7400 is voorzien van een lage opstabeugel, waardoor deze ideaal is voor kleinere volwassenen en kinderen. Daarnaast is hij bijzonder geschikt voor specifieke zorgsituaties, zoals op röntgenafdelingen. Maximale belasting: 150 kg.

De ReTurn7400 ondersteunt veilige transfers van en naar bed, rolstoel of toilet en helpt gebruikers eenvoudig verder naar achteren in een stoel te positioneren. De lage opstabeugel is ideaal voor kleinere volwassenen, kinderen en specifieke zorgsituaties, zoals op röntgenafdelingen.

Voor gebruikers met voldoende restfunctie stimuleert de ReTurn7400 het natuurlijke sta-op-bewegingspatroon, terwijl spierkracht en functionele vaardigheden worden opgebouwd. Hierdoor is de ReTurn7400 niet alleen een effectief transferhulpmiddel, maar ook een waardevol revalidatiehulpmiddel. In de meeste situaties is één zorgverlener voldoende om de transfer veilig uit te voeren.

> Verwisselbare opstabeugels

Maaakt gebruik van dezelfde bodemplaat als de ReTurn7500i. Wissel eenvoudig tussen een lage en een standaard opstabeugel, afhankelijk van de gebruiker of de zorgsituatie.

> Verstelbare scheensteunen

Hoogte, breedte en hoek eenvoudig aan te passen voor verschillende gebruikers.

> Vergrendelbare wielen

Stabiel en richtingsvast – minimale inspanning zelfs met zwaardere gebruikers.

> Gepatenteerd ontwerp

De unieke bodemplaat rolt, draait en zwenkt soepel, zelfs in krappe ruimtes.

> Lage instaphoogte

Duidelijke voetmarkeringen en een smal achterprofiel zorgen voor een optimale positionering bij een rolstoel of toilet.

> Natuurlijke sta-op-beweging

De schuine opstabeugel ondersteunt een natuurlijke opstaande beweging en zorgt voor een stevige grip.



ReTurn7500i™

De ReTurn7500i maakt gebruik van dezelfde stabiele bodemplaat als de ReTurn7400, maar is uitgerust met een opstabeugel op standaardhoogte. De opstabeugels van beide modellen zijn onderling uitwisselbaar, waardoor met één investering een bredere groep gebruikers kan worden ondersteund. Maximale belasting: 150 kg.

Compatibele opstabeugel met bevestigingsopening voor de ReTurnBelt. De onderbeensteunen zijn zowel in hoogte als in breedte verstelbaar, zodat ze eenvoudig kunnen worden aangepast aan verschillende gebruikers.

Voorzien van vergrendelbare wielen, een hygiënisch ontwerp en een laag eigen gewicht. Optioneel is een transport- en opbergtas verkrijgbaar voor eenvoudig vervoer en opslag.



ReTurn7600™

De ReTurn7600 is ontworpen voor grotere en zwaardere gebruikers – tot max. 205 kg. Een bredere bodemplaat en opstabeugel en aangepaste onderbeensteunen bieden ruimte en stabiliteit.

De opstahulp is hoger en breder dan die van de 7500i en 7400. Grotere zwenkwielen (75 mm) zorgen voor soepelere manoeuvreerbaarheid bij hogere belastingen.

Totaalgewicht: 26 kg. Bodemplaat 795 × 672 mm. Geschikt voor alle standaard transfersituaties: bed, rolstoel, toilet.



ReTurnBelt

De ReTurnBelt wordt rechtstreeks aan de opstabeugel van de ReTurn bevestigd en compenseert verminderde beenkracht. Hierdoor biedt de gordel extra stabiliteit tijdens het opstaan vanuit zit, sta oefeningen, looptraining en transfers.

Dankzij het gepatenteerde ontwerp is de ReTurnBelt verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, zodat hij geschikt is voor de meeste gebruikers. De gordel kan ook onafhankelijk van de ReTurn worden gebruikt.

De ReTurnBelt stabiliseert de gebruiker in een rechtopstaande positie en stimuleert een actieve deelname aan de beweging. Hierdoor is hij ideaal voor gebruikers met een wisselende of beperkte belastbaarheid van de benen.




De ReTurn benut de aanwezige kracht van de gebruiker en stimuleert de opbouw van spierkracht.

De ReTurn is geschikt voor de meeste gebruikers, van kinderen tot volwassenen. Voor gebruikers met voldoende restfunctie stimuleert de ReTurn de natuurlijke sta-op-beweging, terwijl tegelijkertijd spierkracht en functionele vaardigheden worden opgebouwd. Gebruikers die de ReTurn thuis inzetten, kunnen dankzij de ondersteuning van slechts één zorgverlener vaak langer zelfstandig blijven wonen.

Breed inzetbaar in uiteenlopende zorgsituaties

Alle ReTurn-modellen zijn ontworpen om de gebruiker zo actief mogelijk te laten deelnemen aan de transfer. De gebruiker moet tijdens het staan gewicht kunnen dragen en beschikken over enige armkracht en balans. De zorgverlener plaatst één voet op de bodemplaat voor extra stabiliteit tijdens de transfer. Voor aanvullende ondersteuning kan de ReTurn worden gecombineerd met de ReTurnBelt.

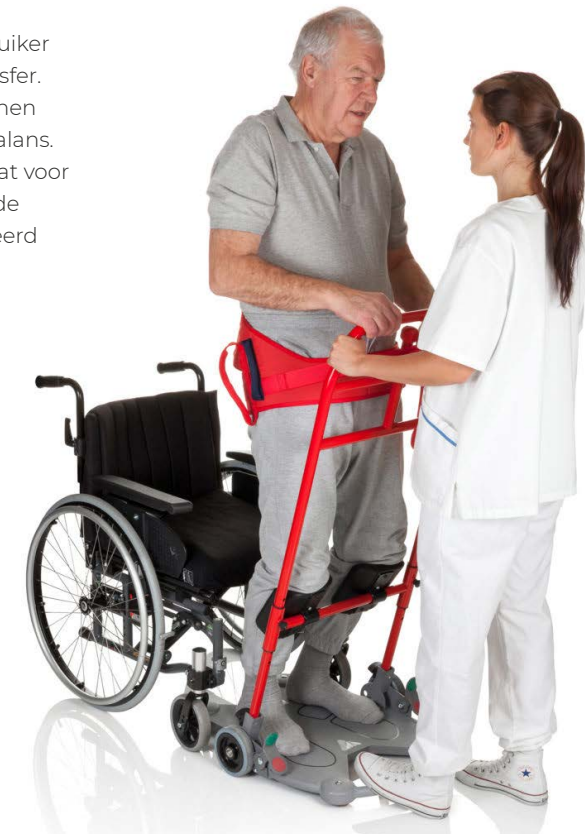

Technische specificaties ▼

				
	Max gebruikers- gewicht ▼	Totale hoogte ▼	Buitenafmetingen bodemplaat (lengte x breedte) ▼	Hoogte bedemplaat ▼
ReTurn7500i, met opening voor ReTurnBelt	150 kg	1150 mm	685 x 570 mm	40 mm
ReTurn7400	150 kg	995 mm	685 x 570 mm	40 mm
ReTurn7600	205 kg	1210 mm	795 x 672 mm	45 mm

					
	Verwisselbare opstabeugel ▼	Alternatieve opstabeugels ▼	Centrale wielen ▼	Zwenkwielen ▼	Totaal gewicht ▼
ReTurn7500i, met opening voor ReTurnBelt	Ja, standaard 7501i	7501, 7401	2 stuks, 125mm Ø	4 stuks, 35mm/1.38" Ø	16.5 kg
ReTurn7400	Ja, standaard 7401	7501, 7501i	2 stuks, 125mm Ø	4 stuks, 35mm/1.38" Ø	16.5 kg
ReTurn7600	–	–	2 stuks, 125mm Ø	4 stuks, 75mm/2.95" Ø	26 kg