

WendyDrive2

Tillift met elektrische rij-ondersteuning



De Zorg vooruit helpen

Minder inspanning, betere zorg



De zorg vooruit helpen

Zorgprofessionals zetten zich iedere dag maximaal in voor het welzijn van hun cliënten. Dat is een fysiek veeleisende taak. DHCare ondersteunt zorgprofessionals bij het creëren van een veilige werkomgeving. Fysieke belasting is een veelvoorkomend probleem in de zorg. Het jarenlang dagelijks uitvoeren van fysiek zware handelingen vraagt veel van het lichaam en kan leiden tot lichamelijke klachten en verzuim op de werkvloer.



Lichamelijke klachten

85% van de zorgprofessionals ervaart **lichamelijke klachten**.¹



Top 5 Risico's

Duwen en trekken behoren tot de vijf belangrijkste risicofactoren voor **fysieke overbelasting**.



Rug-klachten

60–70% van de zorgprofessionals ervaart **rugklachten**.²



Verzuim

33% van het ziekteverzuim houdt verband met **fysieke overbelasting**.³

Wij helpen zorgprofessionals om veilig en gezond te werken en dragen bij aan een betere balans tussen werk en gezondheid.



Ervaar meer veiligheid en verbondenheid met de WendyDrive2

De ergonomische passieve tillift met elektrische rijondersteuning.

De WendyDrive2 is een passieve tillift met een roterende arm en flexibel juk, waardoor het voor zorgmedewerkers makkelijker is om de gebruiker achter in de stoel te plaatsen.

Het juk heeft een flexibele ophanging, die automatisch het evenwichtspunt zoekt van de cliënt. Dit garandeert maximaal comfort tijdens transfers.



1

Correcte positionering

De lange, roterende hefarm en de verstelbare tiljukophanging zorgen voor een comfortabele en veilige transfer

2


Moeiteloze transfer

Dankzij de gepatenteerde elektrische rijondersteuning kan de WendyDrive2 met minimale inspanning in iedere gewenste richting worden verplaatst.

3

Voorkomt fysieke overbelasting


Daarnaast is de esense WendyDrive2 voorzien van ErgoFeedback, dat de gebruiker waarschuwt wanneer er te veel kracht wordt uitgeoefend om de tillift te verplaatsen.

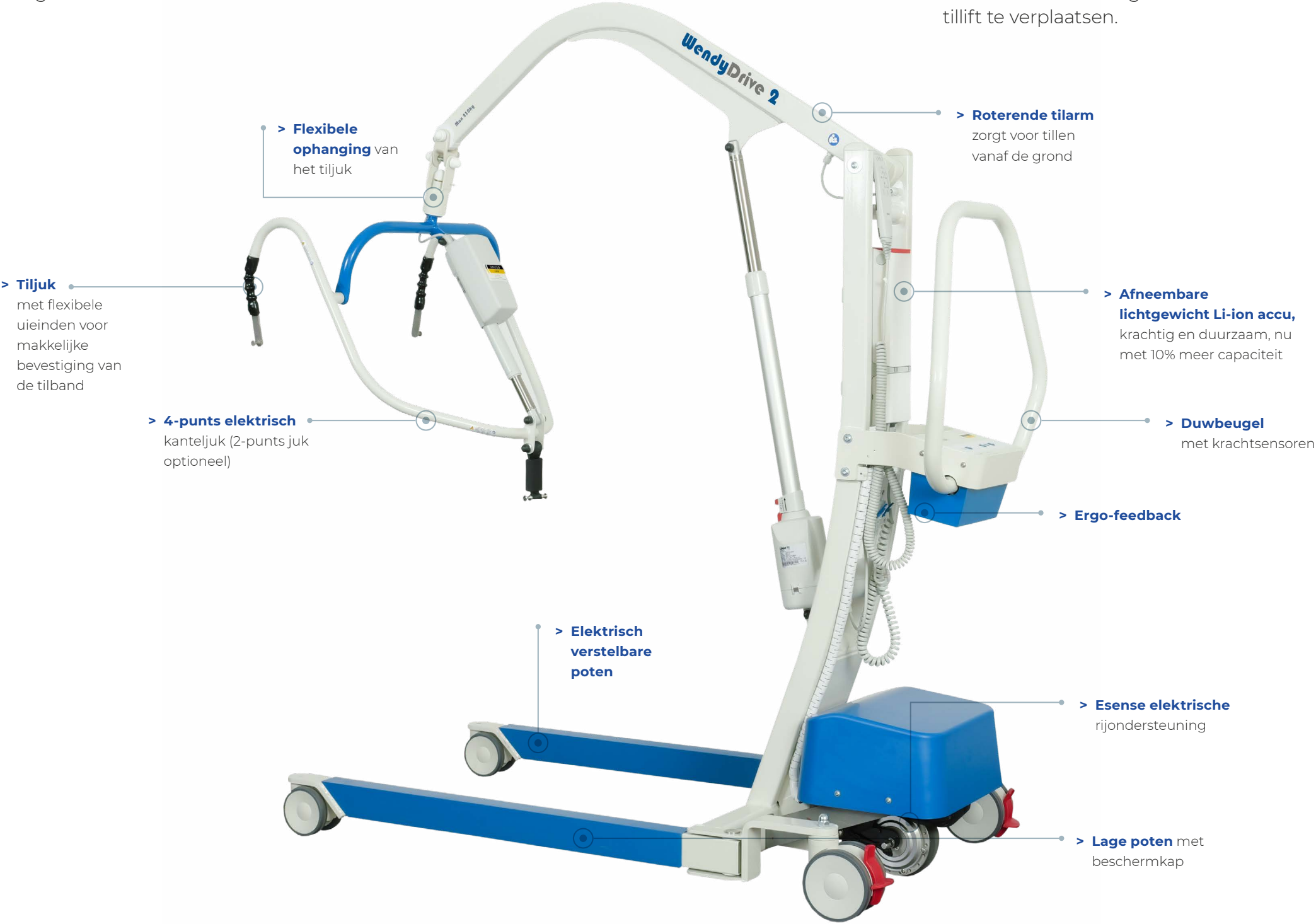

Ergonomische functies



Ergo-feedback

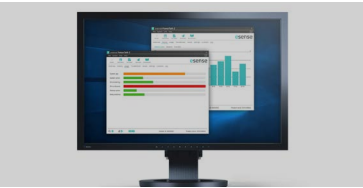

Inzicht in gebruiksgegevens (PowerTalk)

Accessories



Standaard voorzien van baleinhouder



Tilband met veilige iQ-clip

Technische specificaties ▼



Maximale
tilcapaciteit ▼

230 kg



Lengte van het
frame ▼

134.2 cm



Hoogte
onderstel ▼

11.5 cm



Max. externe
breedte – gesloten
poten ▼

71.9 cm



Max. interne
breedte – gespreide
poten ▼

123 cm



Verticaal tilbereik
(lift) ▼

131.5 cm



Horizontale
reikwijdte (tilarm) ▼

95.3 cm



Draaicirkel ▼

149.2 cm



Oplaadtijd ▼

3-4 hrs.



Accutype ▼

Li-ion



Accuspanning en
-capaciteit ▼

24V 2.85 Ah



Gemiddeld aantal
transfers bij een
volle accu ▼

69 met 80 kg
41 met 230 kg



Waterdichtheids-
klasse ▼

IPX4