

AQUATEC®

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo

Vår mest avancerade toa- och Hygienstol



Avancerade hjälpmedel för personlig hygien

Klinisk utformad design, justerbar och anpassad



Yes, you can.®

Vår nästa generation av tilt-in-space duschstolar

Vår senaste Aquatec Ocean VIP Ergo och Ocean Dual VIP Ergo är modulära tilt-in-space duschstolsstolar utformade för att passa ett brett spektrum av individer och deras kroppsställning. Båda modellerna klarar av -5° till 40° säteslutningsvinkel, medan Ocean Dual VIP Ergo har en extra rygglutning på 5° till 35° för de med mer komplexa sittställningar och positioneringskrav.

Som med alla Ocean Ergo-modeller, kan VIP och Dual VIP Ergo skräddarsys individuellt för var och en genom att göra enkla justeringar eller genom att addera tillbehör. Den kliniskt ledda designen säkerställer enklare användning för vårdpersonalen samtidigt som den tillhandahåller optimal säkerhet och komfort för användaren.

NEW

Förbättrad ergonomi med justerbart huvudstöd

Det multijusterbara, ergonomiska nackstödet erbjuder överlägset posturalt stöd för huvudet/nacken. Justeringarna görs snabbt och enkelt genom att vrida de integrerade handskruvarna för att uppnå rätt position för individen. Idealiskt under utprovning, att kunna och justera utan verktyg.

NEW

Ny tilt-stop-funktion

En lättapplicerad tillvalsfunktion som förhindrar att ramen lutar framåt, förbi 0°. Detta säkerställer att ramen förblir horisontell mot marken och är ett hjälpmedel för den som hissas i/ur stolen.



Funktioner och fördelar



Unik tilt-in-space

Tilt-in-space-mekanismen betyder att under tiltingen rör sig stolen nedåt och framåt, detta behåller användarens tyngdkraft nära stolens mittpunkt. Detta gör tiltingen lättare och mer intuitivt för vårdgivaren, skapar en smidigare och mer bekväm upplevelse för användare och har minskat den totala hjulbasens storlek utan att påverka dess stabilitet.

Fällbart ryggstöd

Fäll ryggstödet bakåt mellan 5°-35°, applicerbart på Ocean Dual VIP Ergo. För en planare sittställning vid ex duschning.



Ergonomiskt formad sits

Designad utifrån de avtryck människor lämnar efter sig, för att säkerställa en mer upprätt och stabil sittställning. För ökad självständighet och komfort.

En 5° sitslutning för att lyfta knäna i naturlig knäböj vid toalettbesök.

Toalett- och förflyttningsstöd framtill så att användaren kan positionera sig i en bekväm position för toalettbesök och duschande.

5° - 35°



NEW

Förbättrade armstöd

Nydesignade armstöd ger ökat stöd och komfort för användaren.

De nya och valfria armstödsdynorna erbjuder individer en mjukare yta att placera armen på. Med ett integrerat säkerhetslåssystem som tillval.

Justerbara arm- och fotstöd

Armstödshöjd, fotstödshöjd och sitthöjd kan enkelt justeras.



Lätt att anpassa

Finns med ett brett sortiment för positionering, toalettbesök och olika sitsar. Tillbehör som kan användas till att stödja ett brett spektrum av individer och posturala behov.



Extremt stabil

Förbättrad stabilitet, ram i rostfritt stål för extra säkerhet och trygghet.



Mindre produktomfång

Mindre produktomfång Optimerad hjubas skapar enklare manövrering på mindre ytor



Korrosionsfri

Rosfri och corrosionsfri ram skapar möjlighet till att ställa hela stolen i vatten.



Maskintvättbart

Maskintvättbart (60°) ryggstöd med justerbara spännen.



Se Ocean VIP Ergo online
www.invacare.se

Lär dig mer om vår senaste **Ocean** Dual VIP Ergo

Våra mest avancerade duschstolar med de senaste designförbättringarna som kan tiltas. Mycket konfigurerbara och modulära, Ocean VIP Ergo och Ocean Dual VIP Ergo erbjuder bad- och duschlösningar för ökad komfort och stöd.



Ocean VIP Ergo

En avancerad Tilt-in-space-stol med tilt mellan -5° till 40°




Ocean Dual VIP Ergo

En avancerad tilt-in-space-stol med tilt mellan -5° till 40° och ytterligare ryggvinkling upp till liggande läge.

NEW

Förbättrat ergonomiskt, justerbart, nackstöd

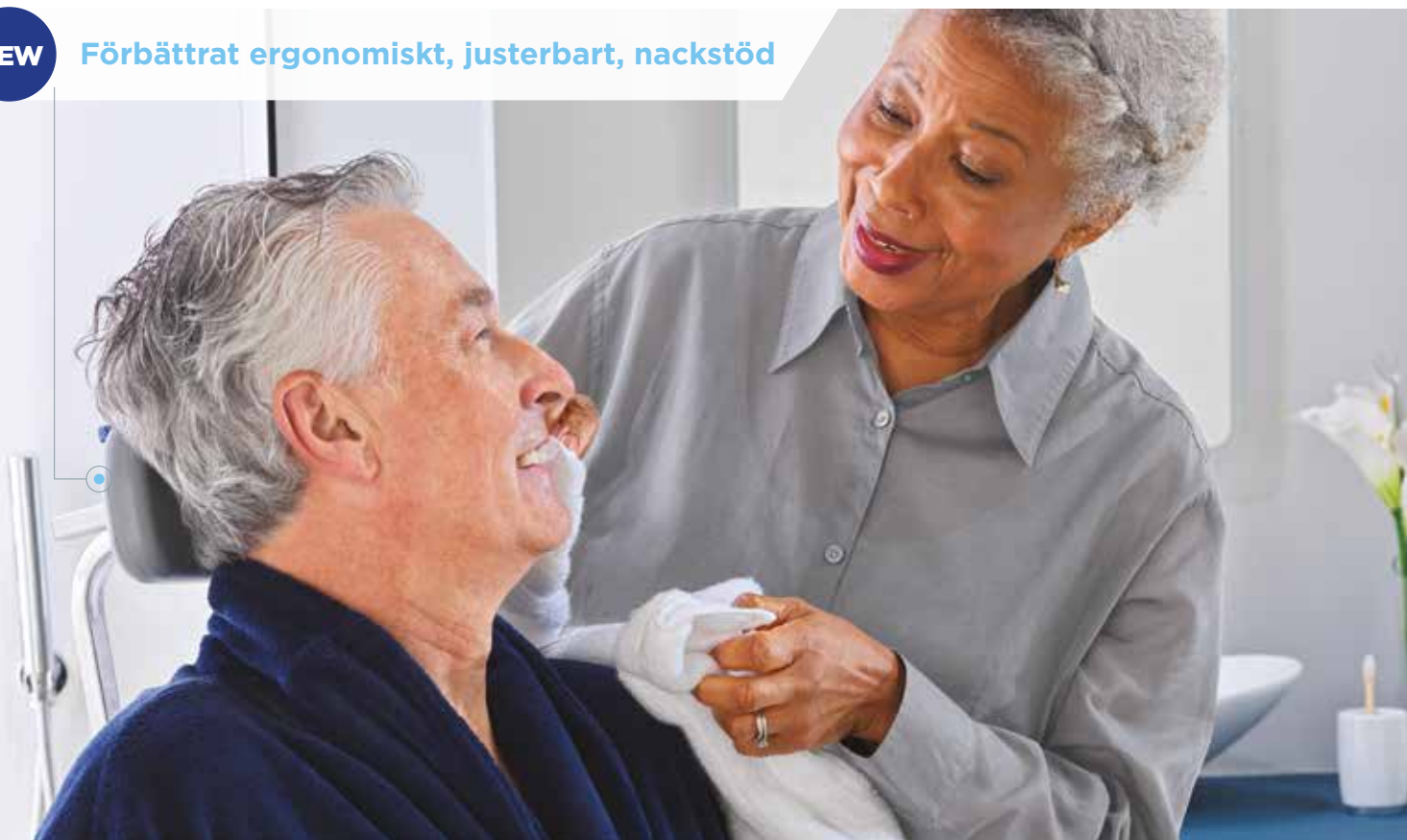

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.



Sittbredd ▾



Sittdjup ▾



Totalbredd ▾



Totaldjup ▾

Bredd mellan
armstöd ▾

	Sittbredd ▾	Sittdjup ▾	Totalbredd ▾	Totaldjup ▾	Bredd mellan armstöd ▾
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Sitstilt ▾



Ryggvinkel ▾



Vikt ▾



Max brukarvikt ▾

	Sitstilt ▾	Ryggvinkel ▾	Vikt ▾	Max brukarvikt ▾
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Vit

Ramfärg

Kundservice: 08-761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®