

matrix[®]
SEATING SERIES

Ryggsystem



Yes, you can ... och det har aldrig varit enklare!

INVACARE
Yes, you can.[®]

Invacare **Matrx**[®] Ryggssystem

Med antalet nya produkter inom sittande och positionering som finns tillgängliga idag är det naturligt att välja de produkter som känns bekanta och som kan skapa en lösning.

Vårt nya ryggsystem *Invacare **Matrx*** ger dig en lösning som effektivt uppfyller ett brett utbud för brukarnas behov.

Då utvecklingen inom sittande och positionering går framåt är Invacare's motto - innovation och kvalitet samt inte minst hög bibehållen komfort.



Invacare **Matrx**[®] Elite rygg



*Invacare **Matrx Elite*** ryggen är utformad för att ge optimalt stöd och support i rullstolen. Den attraktiva, lätta designen är tänkt för den mer aktiva brukaren.

Fördelar och tekniska data

Överdrag:

- Överdimensionerat överdrag/ skum för att ge extra skydd och komfort
- Fuktbeständigt, ångandas
- Inkluderar ett löst svankstöd i skum

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget monteras och justeras på några minuter- justeringar kan göras medan brukaren sitter i rullstolen
- Easy set, 2-delat eller fasta beslag, finns tillgängliga
- Hänvisning till sidan med monteringsbeslag

Ryggskal

- Modernt och luftigt ryggskal
- Låg vikt -de flesta modeller väger under 1,36 kg

Bäcken-/ svankstöd

- Inkluderar ett löst skumstöd för support

Standard -76 mm djup form



Bäcken-/ svankstöd



Standard	
Bredd	305 mm - 505 mm
Höjd	255mm, 305mm, 355mm, 405mm, 455mm, 505mm
Max brukarvikt	136 kg

Elite TR är speciellt designat för rullstolar med ryggtilt och/eller sitstilt.

Elite TR är större och har extra mjukt skuminlägg, vilket ger extra komfort och stöd omkring skulderområdet när man använder ryggtilt och/eller sitstilt.



Fördelar och tekniska data

Skum

- Det överdimensionerade mjuka skummet ovanpå den fasta och stödjande skumkärnan ger extra avlastning och komfort
- Fuktbeständigt överdrag som ångandas.

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslagen monteras och justeras enkelt och lätt. Efterjusteringar kan göras med användaren kvar i stolen.
- Välj mellan Easysset eller delade fästen.
- För mer information se på sidan med monteringsbeslag


Ryggskal

- Modernt och luftigt ryggskal av aluminium som ger extra stöd omkring skulderområdet.
- Adapter till huvudstöd medföljer som standard.

Bäcken/svankstöd

- Som standard ingår alltid ett extra bäcken/svankstöd i skum

75 mm djup form

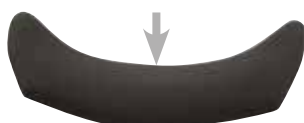

Bäcken-/ svankstöd



	Djup
Bredd	410, 435, 460, 485, 510 mm
Höjd	410 mm, 460 mm, 510 mm
Max brukarvikt	136 kg

Invacare **Matrx Elite rygg Djup**

Invacare **Matrx Elite rygg Djup** är utformad med lateralt bålstöd och att samtidigt tillåta fritt utrymme för skulderblad och höfter. Den perfekta passformen erbjuder stöd och stabilitet för att underlätta aktivitet.



Fördelar och tekniska data

Överdrag

- Överdimensionerat överdrag/ skum för att ge extra skydd och komfort
- Fuktbeständigt, ångandas
- Inkluderar ett löst svankstöd i skum

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget monteras och justeras på några minuter-justeringar kan göras medan brukaren sitter i rullstolen
- Easy set, 2-delat eller fasta beslag finns tillgängliga
- Hänvisning till sidan med monteringsbeslag

Ryggskal

- Modernt och luftigt ryggskal
- Låg vikt -de flesta modeller väger under 1,81 kg

Bäcken-/ svankstöd

- Inkluderar ett löst skumstöd för support

Djup -152 mm djup form



Bäcken-/ svankstöd



Djup	
Bredd	355 mm - 505 mm
Höjd	305 mm, 405 mm 455 mm, 505 mm
Max brukarvikt	136 kg

Tillbehör **Matrx Elite ryggsystem** – Bålstöd



Fasta bålstöd

Justerbar höjd 64 mm på ryggplattan. Monteras på insidan av ryggskalet utan att påverka justeringen av sittdjup/-vinkel.

Finns i standardstorlek HxB 127 x 191 mm.
Barn storlek HxB 76 x 140 mm

1545167 Ett komplett standard bålstöd vänster HxB 127x191 mm

1545168 Ett komplett standard bålstöd höger HxB 127x191 mm

1545172 Ett komplett litet bålstöd vänster HxB 76 x 140 mm

1545225 Ett komplett litet bålstöd höger HxB 76 x 140 mm



Fasta höjdjusterbara bålstöd

Erbjuder ytterligare 76 mm höjdjustering (högre eller lägre) i relation till monteringskåran

1545169 (vå) eller **1545170** (hö)

Ett komplett fast höjdjusterbart bålstöd för vänster eller höger sida.



Swing -away

Justerbar höjd 64 mm på ryggplattan. Monteras på insidan av ryggskalet utan att påverka justeringen av sittdjup/-vinkel.

Enkel tryckknapp för att svänga bort bålstödet. Finns i 4 dynstorlekar. Svänger hela vägen bakom ryggen. Kommer inte i konflikt med svängbara armstöd.

Ett komplett Swing-away bålstöd för vänster eller höger sida.



Höjdjusterbart Swing away bålstöd

Erbjuder ytterligare 76 mm höjdjustering (högre eller lägre) i relation till monteringskåran

Monteras på insidan av ryggskalet utan att påverka justeringen av sittdjup/-vinkel. Enkel tryckknapp för att svänga bort bålstödet. Finns i 4 dynstorlekar.

1544798 (vå) eller **1544799** (hö)

Ett komplett höjdjusterbart swing away bålstöd för vänster eller höger sida.

Tillbehör



Huvud-/ nackstödsadapter

Tillåter att huvud-/ nackstödet monteras direkt på *Invacare Matrx Elite ryggar*

- 3 storlekar
- Small 1544189 För montering av huvud-/ nackstöd till Elite ryggar bredd 310 mm
 - Medium 1544188 För montering av huvud-/ nackstöd till Elite ryggar bredd 330 - 430 mm
 - Large 1544187 För montering av huvud-/ nackstöd till Elite ryggar bredd 460 - 510 mm



Huvud-/ nackstödsdyna komplett med stag


1545274

- Multiaxel som är justerbar
- Pivotkula för justering av huvudstöddyna
- Djupjusterbar genom en horisontel glidskena
- Dynstorlek 254 mm



Förstärkt håltagning för huvudstöd

Matrx PB och **Elite-**ryggarna har förborrade hål samt ett utklippt område på överdraget för att enkelt kunna montera på huvudstöd. Detta förhindrar överdraget från att fransa sig samtidigt som det är enkelt att ta av överdraget vid tvätt utan att behöva ta bort huvudstödsadaptern.

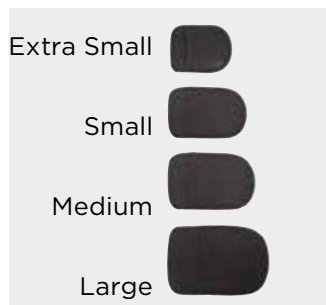

Bålstödsdynor

Att användas tillsammans med swing away och höjdjusterbara swing away (passar till **Elite ryggar**)

- 3 storlekar
- 1544292** Extra small (st) HxB 82,5 x108 mm
 - 1544291** Small (st) HxB 89 x 133 mm
 - 1544239** Medium (st) HxB 95 x146 mm
 - 1544238** Large (st) HxB 108 x165 mm

Invacare **Matrx Posture back rygg** är utformad för att ge stöd och support. Det omfattande utbudet av storlekar erbjuder optimalt stöd och komfort till en mängd olika användare.



Fördelar och tekniska data

Skum

- Formgjutet skum överlappat runt kanten på skalet för skydd och maximal komfort

Överdrag

- Fuktbeständigt, ångandas
- Finns även i svart

Bäcken-/ svankstöd

- Inkluderar ett löst skumstöd för support

Ryggskal

- Format skal (standard och djup) ger kroppen stöd och positionering
- Tåliga och lätta ABS-skal inkluderar en inbyggd platta för huvud/nackstödet infästning

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget monteras och justeras på några minuter - justeringar kan göras medan brukaren sitter i rullstolen.
- Easy set, 2-delat eller fasta beslag finns tillgängliga
- Hänvisning till sidan med monteringsbeslag

Standard -127 mm djup form



Bäcken-/ svankstöd



Standard

Bredd	355 mm, 405 mm, 430 mm, 455 mm, 505 mm
Höjd	305mm, 405mm, 505mm
Max brukarvikt	136 kg

Tunga brukare

Bredd	505 mm, 560 mm, 610 mm
Höjd	405mm, 505mm
Max brukarvikt	227 kg

Extra bred

Bredd	610 mm - 760 mm
Höjd	405mm, 505mm
Max brukarvikt	227 kg

Invacare **Matrx Posture back rygg**

Invacare **Matrx Posture back rygg** är utformad för att mer ökat stöd och support. Erbjuder samma fördelar som Posture Back standard men med en djupare form.



Fördelar och tekniska data

Skum

- Formgjutet skum överlappat runt kanten på skalet för skydd och maximal komfort

Överdrag

- Fuktbeständigt, ångandas
- Finns även i svart

Bäcken-/ svankstöd

- Inkluderar ett löst skumstöd för support

Ryggskal

- Format skal (standard och djup) ger kroppen stöd och positionering
- Tåliga och lätta ABS skal inkluderar inbyggd platta för huvudstödet infästning

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget monteras och justeras på några minuter – justeringar kan göras medan brukaren sitter i rullstolen.
- Easy set, 2 delat eller fasta beslag finns tillgängliga
- Hänvisning till sidan med monteringsbeslag

Djup -178 mm djup form



Bäcken-/ svankstöd



Djup	
Bredd	355 mm, 405 mm, 430 mm, 455 mm, 505 mm
Höjd	305mm, 405mm, 505mm
Max brukarvikt	136 kg

Tunga brukare	
Bredd	505 mm, 560 mm, 610 mm
Höjd	405mm, 505mm
Max brukarvikt	227 kg

Extra bred	
Bredd	610 mm - 760 mm
Höjd	405mm, 505mm
Max brukarvikt	227 kg



Invacare **Matrx** monteringsbeslag

Invacare **Matrx** monteringsbeslag Easy Set - enkla att montera och justera på bara några minuter. Alla justeringar kan göras när brukaren sitter i stolen.



Fördelar och tekniska data

- Snabbkoppling för att enkelt kunna ta bort ryggdynan
- Steglös justering av djupet 102 mm, vinkel (40°) och rotation
- Passar till 19 mm och 25 mm ryggrör
- Justeras att passa stolar som är 25 mm smalare upp till 25 mm bredare

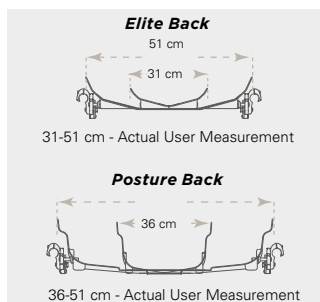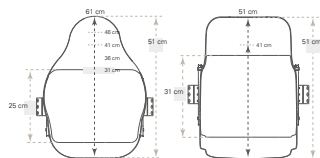

Modeller

Invacare **Matrx ryggdynor**: Elite, Elite djup Posture back och Posture back djup är kompatibel med **Easy Set**.

Höjder

Olika rygghöjder finns tillgängliga för att ge stöd på olika nivåer.

Bredder

Ryggbredder från 280 mm - 735 mm finns tillgängliga för att ge exakt stöd för varje brukare.

Formdjup

Välj mellan 4 olika djup för att få ett optimalt stöd.

Tillbehör - Monteringsstift

Standard - monteringsstift

Standard monteringsstift (inkluderat i alla **Matrx PB/Elite ryggar**) tillåter Invacare **Matrx PB ryggar** att passa till stolar 25 mm smalare eller till stolar med samma bredd. Tillåter **Elite ryggar** att passa till stolar med samma bredd.

Förlängda monteringsstift

Förlängda monteringsstift (inkluderat i alla **Matrx PB/Elite ryggar**) tillåter Invacare **Matrx PB** och **Elite ryggar** att passa till 25 mm bredare stol.

Extra långa monteringsstift

Speciallånga monteringsstift tillgängliga för Invacare **Matrx PB & Elite** (ej tillgänglig för Tunga brukare PB ryggar) Tillåter ryggen att passa till stolar up till 50 mm bredare.

Justering Easy Set monteringsbeslag



Djup

Justering med 50 mm bakom ryggrören.



Djup

Justering med 50 mm framför ryggrören.



Vinkel

Justering av ryggvinkel 20° framåt.



Vinkel

Justering av ryggvinkel 20° bakåt.



Rotation

Ryggen kan roteras för att anpassa/stötta bäcken-/ bålrotation.

Alternativa förslag av monteringsbeslag



Monteringsbeslag Easy Set - Tungare brukare

- Standard till tunga brukare PB rygg
- Rekommenderas till brukare över 136 kg, vid spasticitet eller hårt slitage



Fasta monteringsbeslag för att spara plats

- Ej avtagbar
- Krävs verktyg för att ta bort ryggen från rullstolen
- Sparar utrymme ur bredd-perspektiv
- Fullt justerbar



2-delat monteringsbeslag

- Kan användas vid ryggbåge i trånga utrymmen eller vid bakom påliggande körhandtag
- Rekommenderas inte till tunga brukare ryggar




Monteringsbeslag Etac Cross

Monteringsbeslag som gör det möjligt att montera Matrxryggar på Etac Cross.


Specifikation *Invacare* **Matrix ryggar**



C

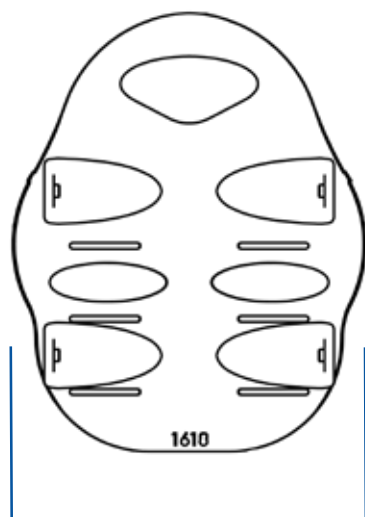

A

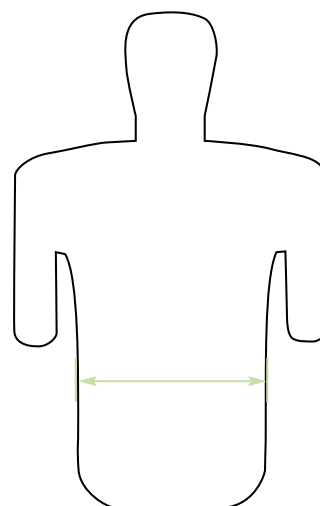


B - Aktuellt brukarmått


<i>Invacare</i> Matrix Elite rygg									
Rygghöjd	255 mm, 305 mm, 355 mm (Finns i 305 mm, 330 mm, and 355 mm bredd), 405 mm, 455 mm, 505 mm								
Bredd	305 mm	330 mm	355 mm	380 mm	405 mm	430 mm	455 mm	480 mm	505 mm
A- Yttermått	250 mm	260 mm	320 mm	340 mm	370 mm	390 mm	420 mm	445 mm	470 mm
B- Innermått	215 mm	240 mm	290 mm	320 mm	340 mm	370 mm	390 mm	420 mm	445 mm
C- Formdjup	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm



C

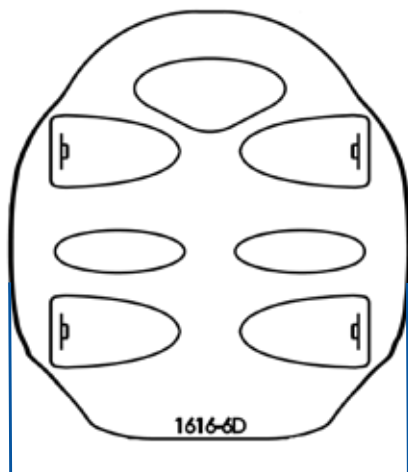

A

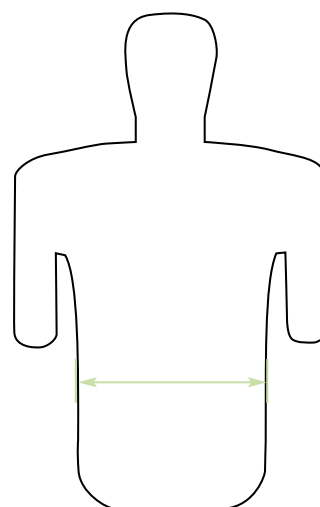


B - Aktuellt brukarmått

<i>Invacare</i> Matrix Elite rygg djup							
Rygghöjd	305 mm, 405 mm, 455 mm, 505 mm						
Bredd	355 mm	380 mm	405 mm	430 mm	455 mm	480 mm	505 mm
A- Yttermått	330 mm	355 mm	380 mm	405 mm	430 mm	455 mm	480 mm
B- Innermått	290 mm	320 mm	340 mm	370 mm	390 mm	420 mm	445 mm
C- Formdjup	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Justering i djup	100 mm (50 mm framför eller bakom)						
Justering av vinkel	40 °						
Ryggvikt	Standard - 1.36 kg Djup - 1.81 kg						
Max brukarvikt	136 kg						


Specifikation *Invacare* **Matrix ryggar**



C

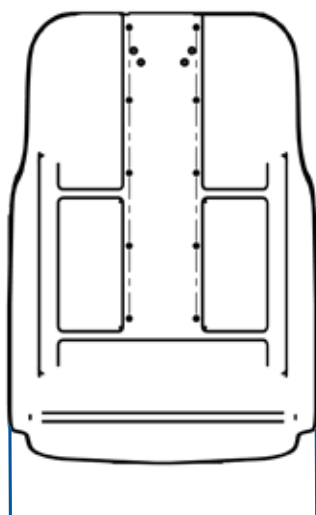


A

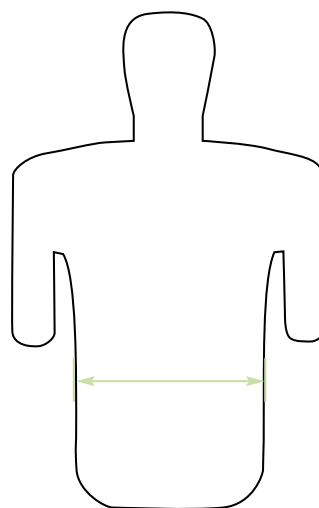


B - Aktuellt brukarmått


<i>Invacare</i> Matrix PB ryggar					
Rygghöjd	305 mm, 405 mm, 505 mm				
Bredd	355 mm	405 mm	430 mm	455 mm	505 mm
A- Yttermått	300 mm	350 mm	375 mm	400 mm	450 mm
B- Innermått	265 mm	320 mm	340 mm	370 mm	420 mm
C- Formdjup	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm

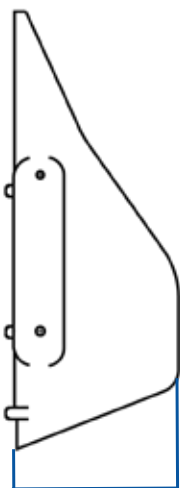

C

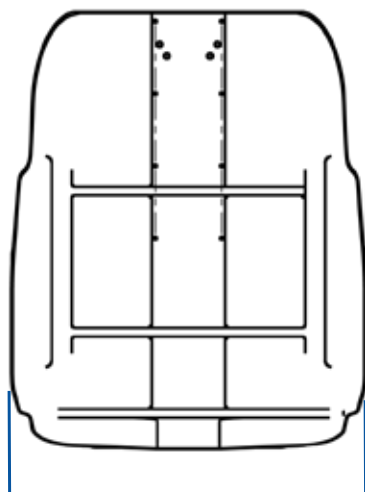

A

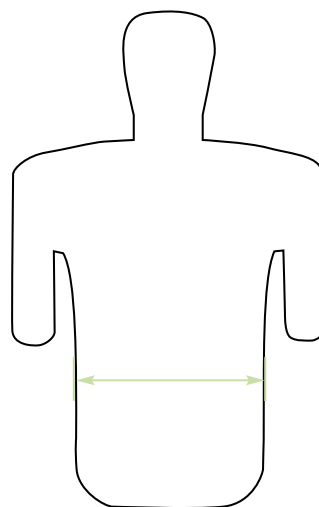

B - Aktuellt brukarmått

<i>Invacare</i> Matrix PB ryggar djup					
Rygghöjd	305 mm, 405 mm, 505 mm				
Bredd	330 mm-380 mm	380 mm- 430 mm	405 mm -455 mm	430 mm-480 mm	480 mm - 505 mm
A- Yttermått	305 mm	355 mm	380 mm	430 mm	480 mm
B- Innermått	305 mm	355 mm	380 mm	405 mm	455 mm
C- Formdjup	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm
Justering i djup	100 mm (50 mm framför eller bakom)				
Justering av vinkel	40 °				
Ryggvikt	Standard - 1.81 kg				
	Djup - 2.25 kg				
Max brukarvikt	136 kg				


Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

	Bredd	Ryggskalets vikt	Rengöring överdrag	Max brukarvikt
Elite Rygg	300mm - 505mm	1.36 kg	60°	136 kg
Elite TR Rygg	410mm - 510mm	> 2,0 kg	60°	136 kg
Elite Rygg Djup	300mm - 505mm	1.81 kg	60°	136 kg
PB Rygg	300mm - 760mm	1.81 kg	60°	136 kg
PB Rygg Djup	300mm - 760mm	2.25 kg	60°	136 kg

Färg

Svart Mesh textyg

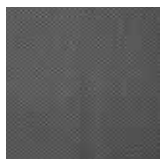

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®