

Action^{®3} Junior



label 2018
observateur
du design

**JUNIOR**

Din reise, på din måte



Yes, you can.



Lett og sammenleggbar

Den lette, sammenleggbare rullestolen **Action³ Junior** er designet med barnets behov og utvikling i tankene. Takket være det innovative designet og stolens smarte egenskaper kan barnet til enhver tid kjenne på frihetsfølelsen, ha det gøy og sitte komfortabelt - alt i en stilig og tilpasningsvennlig stol. De moderne designalternativene gjør **Action³ Junior** til en stol å være stolt av, og takket være den integrerte bredde- og dybdejusteringen av setet, kan barnet og stolen vokse sammen, noe som gjør den til den perfekte følgesvenn.

- ▶ Innovativt teleskopisk kryss
- ▶ Konfigurert for individuell tilpasning
- ▶ Justerbar setehøyde og balansepunkt

3

SMARTE OG SENTRALE EGENSKAPER

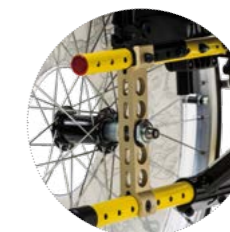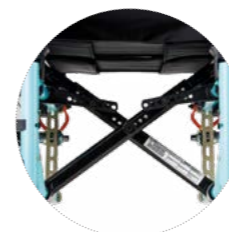

1

Innovativt teleskopisk kryss

Action³ Junior er designet for å tilpasse seg et barn i vekst, uten at noen deler på stolen må erstattes. Stolens innovative teleskopiske kryss gjør at setet enkelt kan justeres både i bredden og i dybden. I tillegg kan både sete- og ryggtrekket raskt og enkelt breddejusteres, uten behov for ekstra deler eller verktøy. Dette gjør at stolen til enhver tid vil ha en tilpasningsvennlig passform med mange størrelseskombinasjoner, slik at barnet alltid vil sitte riktig og komfortabelt.

2

Justerbar setehøyde og balansepunkt

Stolens smarte og funksjonelle design gjør det mulig å justere både setehøyde og balansepunkt, noe som bidrar til en forbedret kjøreeopplevelse for barnet. Stolens design tillater at bakhjulene kan monteres i flere ulike tyngdepunktsposisjoner (CoG) og setehøyden kan stilles inn i tre ulike høyder: 410, 435 og 460 mm. De ulike tilpasningsmulighetene sikrer samlet sett en optimal fremdrift av rullestolen.



3

Konfigurert for individuell tilpasning

Action³ Junior er ikke bare designet for å møte barnets utvikling og behov, men også for å møte dets individuelle ønsker og stil. Velg mellom et utvalg av duse og livlige rammefarger, samt 3 ulike eikebeskyttere i moderne design. I tillegg kan rullestolen tilpasses ytterligere med et utvalg av ulike svinghjul, armlener, benstøtter o.l., alt tilgjengelig som tilbehør.

Egenskaper og valg ▾



◀ Eikebeskyttere

Velg mellom 3 ulike eikebeskyttere i moderne design, samt 6 forskjellige og stilige rammefarger.



◀ Svinghjul

Velg mellom 3 ulike typer svinghjul (forhjul):
① 5" x 1" blinkende kompakte dekk, ② 5" x 1 3/4" kompakte dekk og ③ 5" x 1" kompakte dekk.



◀ Armlener

Velg mellom avtagbare og høydejusterbare armlener ①, junior-armlener ②, samt klesbeskytter ③ og hjulskjermer ④.



▲ Benstøtter

① 90° benstøtte, ② 80° benstøtte samt ③ hevbar benstøtte, justerbar fra 0° til 80°, er tilgjengelig for å passe en hel rekke brukerbehov.



▲ Lett setetrekk

Det justerbare setetrekket, som tillater rask og enkel breddejustering, gjør det enkelt å håndtere og transportere.

Egenskaper og valg ▾




▲ Bord

I tillegg til vårt faste bord, som skyves enkelt på plass, kan vårt utsvingbare bord være fint alternativ som enkelt kan tas av og på, og som kan foldes sammen når det ikke er i bruk.



▲ Pute

50 mm skumpute gir ekstra komfort for brukeren. Puten følger også dybdejusteringen til setetrekket.

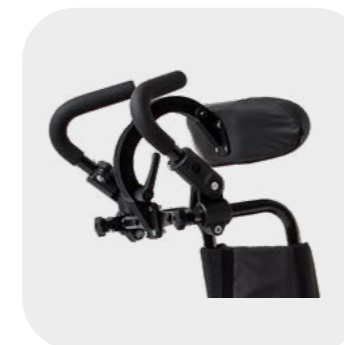

▲ Ergonomiske kjørehåndtak

De justerbare kjørehåndtakene sørger for god komfort og brukervennlighet for omsorgspersonen. En breddejusterbar ryggbøyle kan også legges til (eller brukes alene) for å stive opp ryggstøtten. Bøylene kan også benyttes som feste for nakkestøtte for økt komfort for brukeren.



▲ Benstøtte i abduksjonsstilling

En 30° abduksjonsstilling er mulig med 80° benstøtte for barn med ulike hofteutfordringer.



▲ Transport-versjon

Transportversjonen har en setehøyde på 460 mm med 12" bakhjul.



▲ Posisjoneringsbelte

Tilgjengelig i 2 størrelser, som enkelt kan justeres for å sikre barnets posisjonering. Utviklet av Bodypoint®, med sentral justering og spenne som er enkel å bruke.



▲ Frontstabilisator-kit

Gir økt stabilitet for aktive barn som kan finne på å klatre i rullestolen og/eller har en tendens til å være svært ivrige og entusiastiske når de sitter i rullestolen.

Tekniske data ▼



Setebredde ▼



Setedybde ▼




Setevinkel ▼



Setehøyde ▼



Ryggvinkel ▼

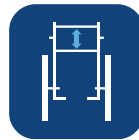

Rygghøyde ▼



Frontrammevinkel ▼

Ekspanderende	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
Standard	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°




Benstøttelengde ▼



Armlenehøyde ▼



Totalbredde rullestol ▼

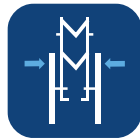

Totaltbredde sammenslått ▼



Total lengde inkl. benstøtter ▼



Total lengde uten benstøtte ▼



Totalhøyde ▼

Ekspanderende	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
Standard	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm



Maksimal trygg helning ▼



Radius ▼



Maksimal brukervekt ▼



Totalvekt, fra ▼



Vekt tyngste del, fra ▼

Ekspanderende	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 l kg	8.5 / 12 l kg
Standard	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 l kg	8.5 / 12 l kg



1. Transportversjon

Rammefarger ▼

Pearl White



Matt Black



Matt Red



Svart nylon




Intense Yellow



Polar Blue



Candy Pink

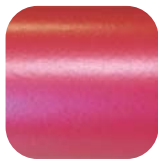

Trekk ▼

For mer informasjon om produktet, inkludert produktets brukermanual, se invacare.no.



Vennligst merk: Fargene kan avvike noe fra fargene på bildet

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

