

# Action<sup>®</sup> Ampla<sup>™</sup>



Legger til rette for en uavhengig og aktiv livsstil

INNOVATIV | SMART | PRISVINNENDE



Yes, you can.<sup>®</sup>

# Ampla tar bariatriske rullestoler til et nytt nivå

*Invacare* **Action® Ampla™** er spesielt utviklet for bariatriske brukere. Kroppsfasonger, ulike aktivitetsnivåer og forskjellige krav til vekt ble tatt i betraktning da rullestolen ble utviklet. Den elegante og minimalistiske rullestolen har et moderne utseende, med egenskaper som bidrar til uavhengighet og støtte for en behagelig og aktiv livsstil.



## Prisvinnende

**Action® Ampla™** er en prisbelønnet rullestol som har vunnet en Red Dot-pris for produktdesign. Denne utdelingen er den største produktkonkurransen i verden, i tillegg til å være en av de mest prestisjefylte utdelingene innenfor design. **Action® Ampla™** har også vunnet den italienske Platinum A'Design-prisen og Gold German Design-prisen.



reddot design award  
winner 2019



# 5

## SMARTE FUNKSJONER



1

### Integrert transportløsning

**Action® Ampla™** er designet slik at størrelsen er redusert i transportmodus som gjør det enkelt å ta den gjennom døråpninger, samt andre smale områder.

1. Legg ryggen ned
2. Ta tak i benstøtten
3. Vipp rullestolen opp til transportmodus. I denne posisjonen kan rullestolen enkelt flyttes.

1.



2.



3.



### Flere posisjoner for tippespunkt

5

- ▶ Enkel å kjøre
- ▶ Lettere å trille





2

## Ergonomisk rygg

- ▶ Maksimal tilgang til drivringer
- ▶ Ingen hindringer
- ▶ Mer bevegelsesfrihet
- ▶ Imponerende kjøreegenskaper og manøvrerbarhet



3

## Høyderegulerbare forflytningshåndtak

- ▶ Støtte ved inn- og utstigning av stol
- ▶ Kan roteres innover eller utover
- ▶ Kan senkes for å komme under bord



4

## Personlig preg


- ▶ Velg mellom tre stilige farger



## Innovativt ryggdesign



Rullestolens design gir en god passform både for mannlige bariatriske brukere som har en tendens til å ha «eple-fasong» og kvinnelige bariatriske brukere som ofte har en «pære-fasong». Den innovative ryggstøtten på **Action® Ampla™** er designet for å imøtekomme anatomien til begge kroppsfasongene, samt gi støtte og komfort til brukeren.

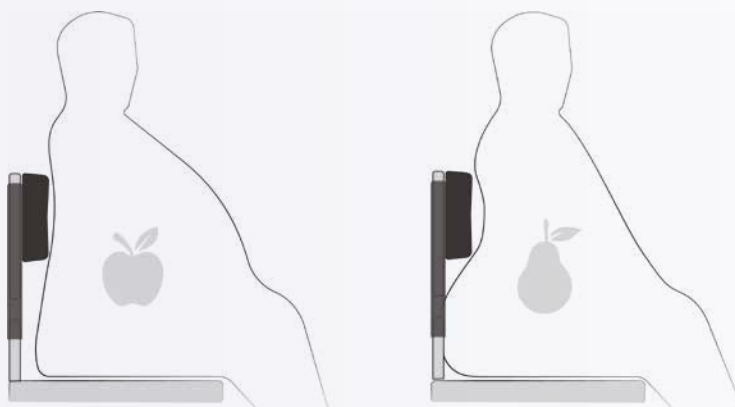

### Nøkkelegenskaper

- ▶ Integrert transportløsning
- ▶ Ergonomisk rygg
- ▶ Høyderegulerbare forflytningshåndtak
- ▶ Personlig preg
- ▶ Flere posisjoner for tippepunkt

### Tilleggslegenskaper

- ▶ Et pustende og elastisk ryggoverdrag
- ▶ Bremsesystem som er pent integrert i hjulskjermene og enkelt tilgjengelig for bruker.

## Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale Invacare-representant eller se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).



Setebredde ▼

**Action Ampla**

505 / 555 /  
605 / 655 /  
705 / 755 mm



Setedybde ▼

460 / 510 mm



Setevinkel ▼

5° / 6°



Setehøyde ▼

380 - 455 mm  
trinnsvis 25 mm



Ryggvinkel ▼

2° / 4°



Ryggghøyde ▼

450 - 525 mm




Benstøttevinkel ▼

90 - 100°



Lengde kne til  
hæl ▼

365 - 525 mm  
trinnsvis 25 mm

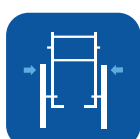

Total bredde ▼

Setebredde  
+ 205 mm



Total lengde  
inkl. fotstøtter ▼

1065 - 1145 mm



Total lengde  
eks. fotstøtter ▼

855 - 920 mm



Total høyde ▼

825 - 900 mm



Maks trygg helling ▼

7°



Svingradius ▼

1420 - 1660 mm



Maks.  
brukervekt ▼

300 kg



Total vekt fra ▼


27 kg



Transportvekt  
fra ▼

19.5 kg

## Rammefarger ▼

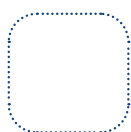

Tech hvit



Tech grå

## Logo-farger ▼



Blå Pulse



Rosa Pulse



Grønn Pulse

OBS: Fargene kan avvike noe fra fargene som er vist ovenfor

## Krasjtestet og prisvinnende ▼



reddot design award  
winner 2019

## Artikkelnummer ▼

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse
1663760	Action Ampla	50,5x54,5
1663761	Action Ampla	55,5x54,5
1663762	Action Ampla	60,5x54,5
1663763	Action Ampla	65,5x54,5
1663764	Action Ampla	70,5x54,5
1663765	Action Ampla	75,5x54,5

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo



Yes, you can.®