

Dacapo-serien



BREDT SORTIMENT



Dacapo-serien

Invacare **Dacapo** tilbyr et bredt utvalg av standard-, komfort- og trykkfordelende madrasser. **Dacapo**-sortimentet er utformet for å passe markedets tilbud av pleiesenger, samt tilgodese kravene til hygiene og miljøvennlighet. Madrassene er flammehemmende i samsvar med europeisk standard EN597-1 og EN 597-2.

Egenskaper



◀ Inkontinenstrekk

Alle **Dacapo**-madrassene har inkontinenstrekk i polyuretanbelagt polyester. Allergitestet og innsatt med middel mot støvmidd.

- ▶ 100 % vanntett
- ▶ Dampgjennomtrengelig
- ▶ Pustende og skånsomt mot huden
- ▶ Fireveis strekkbart
- ▶ Kan vaskes på 95°



◀ Skum som raskt kommer tilbake til opprinnelig form

Polyuretanskum varierer i cellestruktur og tetthet. Skum med relativt uniform, tett cellestruktur gir god støtte under belastning, samtidig som det kommer raskt tilbake til sin opprinnelige form når det er uten belastning.



◀ Enkel å håndtere

Trekk med to håndtak som forenkler håndtering.



◀ Glidelås

Trekket har glidelås på tre sider som er dekket av dryppkant.

Invacare **Dacapo Basic**

Dacapo Basic oppfyller grunnleggende krav for liggekomfort og hygiene til det fulle. Skumkjernen er av høy kvalitet med god bæreevne. Madrassen er konstruert med god ettergivelse slik at den gir et fast og støttende underlag. Det pustende og strekkbare inkontinestrekke er behagelig for brukeren å ligge på, og sikrer god hygiene. Et økonomisk meget godt alternativ.

Også tilgjengelig i **Basic Low** (5 cm høyde). Egnert som undermadrass til overmadrass, for eksempel til **SoftCloud Top**.



Dacapo Basic

- ▶ 120 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m³

Dacapo Basic Low

- ▶ 50 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m³

Invacare **Dacapo Combi**

Dacapo Combi er en trykkfordelende standardmadrass som understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko. Den består av to lag; en øvre del av viskoelastisk skum, og en nedre del av kaldskum med høy kvalitet og god bæreevne. Denne kombinasjonen gir god trykkfordeling ettersom det viskoelastiske skummet former seg etter brukerens konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeles over en større flate.

Brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve lindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig. Det nederste laget av kaldskum opprettholder madrassens stabilitet.



Overdel

- ▶ 60 mm viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³

Underdel

- ▶ 80 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 38 kg/m³

Invacare **Dacapo Comfort**

Dacapo Comfort oppfyller de grunnleggende kravene til god liggekomfort. Den er skåret i nøkkelhull-formede firkanter i ulike størrelser som gjør madrassen fleksibel slik at kroppen synker ned i materialet og trykket fordeles. Skummets åpne cellestruktur er dampgjennomtrengelig og lar kroppen puste.

Madrassen har god ettergivelse samtidig som den raskt går tilbake til opprinnelig form etter å ha vært utsatt for trykk.



- ▶ 120 mm miljøskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³


Invacare **Dacapo Comfort Plus**

Dacapo Comfort Plus er en trykksårforebyggende madrass som understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko.

Den er skåret i nøkkelhull-formede firkanter i ulike størrelser. Dette gir en fleksibel overflate som gir god trykkfordeling ved at kroppen synker ned i materialet. Skummets åpne cellestruktur er dampgjennomtrengelig og lar kroppen puste.

Madrassen har god ettergivelse samtidig som den raskt får tilbake opprinnelig form.


Standard høyde er 140 mm. 150 mm høyde er tilgjengelig som spesial.

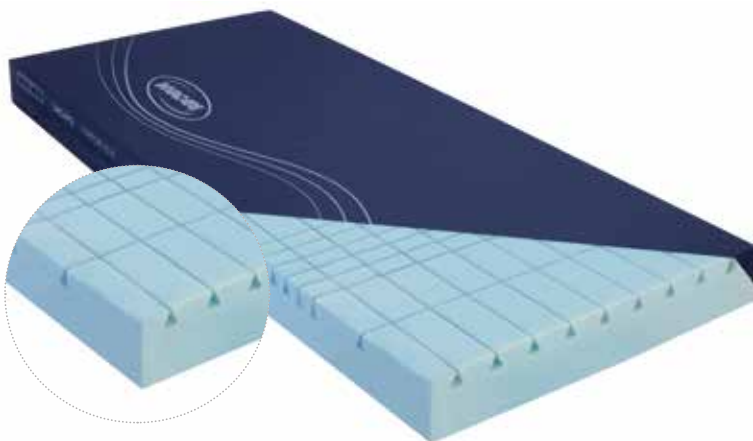

- ▶ 140 eller 150 mm miljøskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³

Invacare **Dacapo 2Sided**

Dacapo 2Sided er en vendbar madrass med gode trykkfordelende egenskaper. Den ene siden er fastere enn den andre, som gir mulighet for individuell tilpasning uten å måtte bytte madrass. Madrassen har ikke definert hode- eller fotende. Madrassen har én side i viskoelastisk skum som former seg etter kroppens temperatur og bevegelser. Den åpne cellestrukturen minimerer utvikling av varme og fukt og gir økt komfort. Den andre siden består av miljøskum skåret i firkanter som er individuelt fleksible og tillater kroppen å synke ned i materialet. Madrassen kommer raskt tilbake til sin opprinnelige form ved lette av trykk.

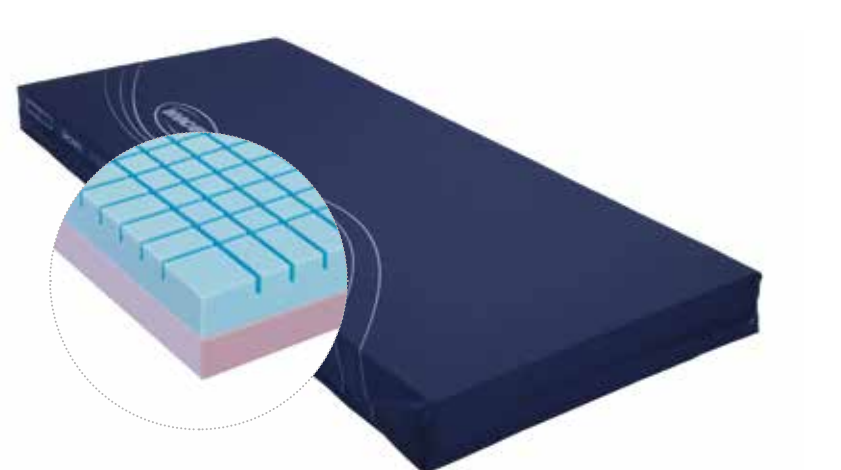

Side i viskoelastisk skum

▶ Tetthet 50 kg/m³


Side i miljøskum

▶ Tetthet 50 kg/m³

Bildet avviker noe fra virkeligheten.

Invacare **Dacapo Square**

Dacapo Square er en standardmadrass med svært gode trykkfordelende egenskaper. Den understøtter behandling og forebygging av trykksår ved lav og middels risiko. Den har en base i kaldskum og et øvre lag i miljøskum. Det øvre laget er skåret i firkanter som er fleksible seg imellom. Kroppen synker dermed godt ned i materialet slik at det blir god trykkfordeling og friksjon og shearing minimeres. Den åpne cellestrukturen er dampgjennomtrengelig og lar huden puste. **Dacapo Square** gir høy liggekomfort. Skummets høye volumvekt gjør at madrassen raskt går tilbake til opprinnelig form. Basen i kaldskum gir stabilitet.

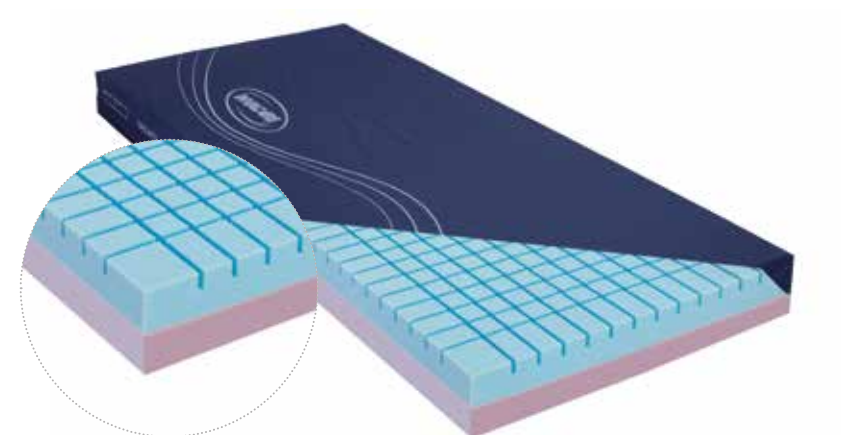

Overdel

▶ 80 mm miljøskum

▶ Tetthet 50 kg/m³

Underdel

▶ 60 mm kaldskum

▶ Tetthet 38 kg/m³

Invacare **Dacapo Heavy User Light og Heavy User**

Dacapo Heavy User er skreddersydd for å imøtekomme tunge brukeres behov, samt gi et fast og støttende underlag.

Madrassen består av tre lag skum med ulik volumvekt og fasthet. Underlaget består av hardt, elastisk kaldskum som gir stabilitet og sikrer at madrassen ikke «ligges igjennom». Det midterste laget består av et mykere kaldskum og gir høy komfort. Overdelen er av viskoelastisk skum, som har trykkfordelende egenskaper.

Dacapo Heavy User Light har maks brukervekt 350 kg.



Heavy User Light

Maksimal brukervekt 250 kg:

Overdel: (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m³. 100 N fasthet

Midt: (50 mm) Kaldskum 38 kg/m³. 140 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 50 kg/m³. 145 N fasthet

Heavy User

Maksimal brukervekt 350 kg:


Overdel: (50 mm) Viskoelastisk skum 50 kg/m³. 100 N fasthet

Midt: (50 mm) Kaldskum 38 kg/m³. 140 N fasthet

Underdel: (50 mm) Kaldskum 50 kg/m³. 200 N fasthet

Invacare **Dacapo Kid**

Dacapo Kid madrassen er designet spesielt til barnesengen **NordBed Kid**. Det øvre laget er skåret i firkanter som er fleksible seg imellom. Kroppen synker dermed godt ned i materialet slik at det blir god trykkfordeling og friksjon og shearing minimeres

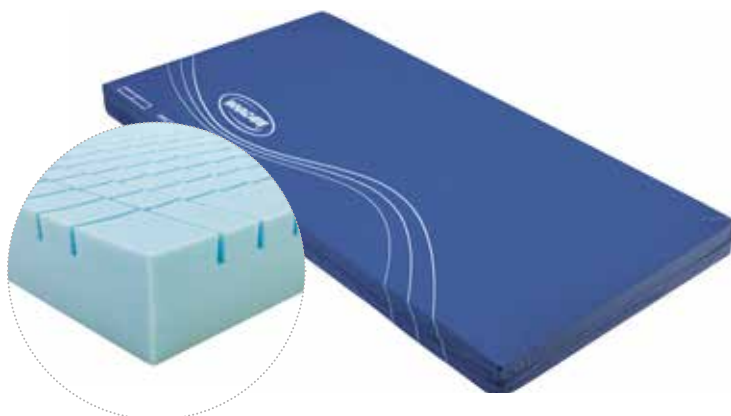


Dacapo Kid Trekk

- ▶ Inkontinestrekk
- ▶ Pustende polyuretan trekk
- ▶ Toveis strekkbart trekk
- ▶ Vaskbart på 95 grader
- ▶ Glidelås dekket med dryppkant

Invacare **Dacapo Top**


Dacapo Top er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet som kombineres med en standardmadrass. Madrassen er produsert i viskoelastisk skum som påvirkes av kroppstemperatur, og former seg etter brukers konturer og bevegelser. Skummet tillater brukeren å synke ned i materialet slik at trykket fordeler seg over en større flate. Mange brukere med muskel- og leddsmerter kan oppleve smertelindring på denne madrassen. Den åpne cellestrukturen i det viskoelastiske skummet minimerer utvikling av varme og fukt, noe som øker komforten betydelig.

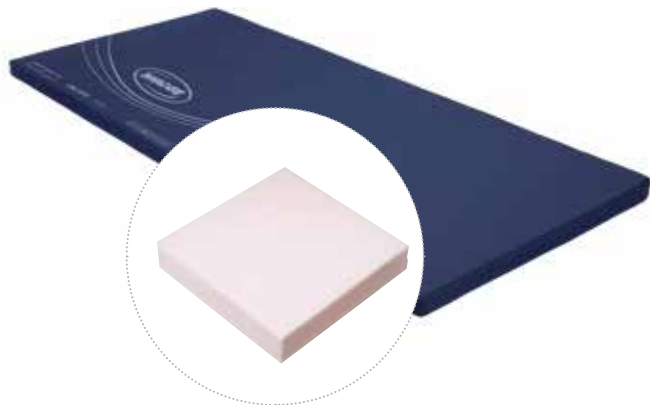

- ▶ 70 mm viskoelastisk skum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³

Invacare **Dacapo Top Pro**

Dacapo Top Pro er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet. Den er skåret i rektangulære firkanter som er større på midten og mindre ut mot hode- og hælområdet. Madrassen former seg etter kroppens konturer, gir god trykkfordeling og omslutter godt områder med benfremspring, som er ekstra utsatt for trykk.

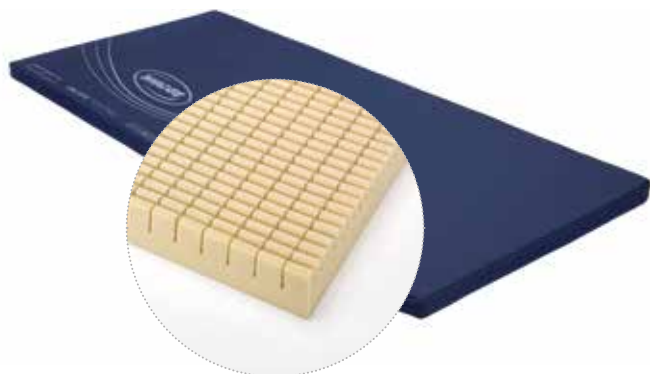

- ▶ 70 mm kaldskum
- ▶ Tetthet 50 kg/m³

Tilbehør




Evakueringstrekk

Alle **Dacapo**-madrasser kan leveres med evakueringstrekk. Trekkets to stropper holder personen på plass ved evakuering. Madrasstrekket har solide «håndtak» som er kraftige nok til å trekke personen ut av sengen og ut av rommet.

Bomullstrekk

Standard bomull, vaskbart på 40°.

Tekniske data ▼

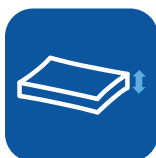

	Total vekt ▼	Maks. brukervekt ▼	Høyde ▼	Vask ▼	Tetthet (kg/m3) ▼
Basic	8.5 - 12.5 kg	130 kg	120 mm	95°	38
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	250 kg	150 mm	95°	50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)
Heavy User	12 - 17.5 kg	350 kg	150 mm	95°	50 (øverst) 38 (midt) 50 (nederst)
Comfort	11.5 - 17kg	130 kg	120 mm	95°	50
Comfort Plus	13.5 - 19kg	140 kg	140 mm	95°	50
Child	3 kg	100 kg	80 mm	95°	50
Square	10 - 15 kg	140 kg	140 mm	95°	50 (øverst) 38 (nederst)
Combi	8.5 - 13 kg	140 kg	140 mm	95°	50 (øverst) 38 (nederst)
2Sided	11.5 - 17 kg	130 kg	150 mm	95°	50 (miljøskum m/utskjæring) 50 (visko)
Top	5 - 7.5 kg	130 kg	70 mm	95°	50
Top Pro	4.5 - 5 kg	150 kg	70 mm	95°	50

Europeisk Standard EN 597 -1 og Europeisk Standard EN 597-2 gjelder for alle Dacapo-modeller med polyuretanbelagt trekk.

Art. nr.	Madrasser med inkontinenstrekk	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1432879	Dacapo Basic	85x200x12	Kaldskum	Standard skummadrass
1432878	Dacapo Basic	90x200x12	Kaldskum	Standard skummadrass
1523939	Dacapo Basic Low	85x200x5	Kaldskum	Standard skummadrass
1421489	Dacapo Combi	85x200x14	Kaldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
1421490	Dacapo Combi	90x200x14	Kaldskum og viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass
1514894	Dacapo Comfort	85x200x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1514897	Dacapo Comfort	90x200x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523859	Dacapo Comfort	85x215x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523860	Dacapo Comfort	90x215x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1529614	Dacapo Comfort	90x220x12	Miljøskum	Standard skummadrass, komfort
1523121	Dacapo Comfort Plus	85x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1523122	Dacapo Comfort Plus	90x200x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1531497	Dacapo Comfort Plus	85x215x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1548735	Dacapo Comfort Plus	85x220x14	Miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1630929	Dacapo 2sided	80x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630930	Dacapo 2sided	85x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630612	Dacapo 2sided	90x200x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1630613	Dacapo 2sided	90x220x15	Viskoelastisk skum	Vendbar trykkfordelende skummadrass
1432901	Dacapo Square	85x200x14	Kaldskum og miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1432902	Dacapo Square	90x200x14	Kaldskum og miljøskum	Trykkfordelende skummadrass, komfort
1484652	Dacapo Heavy User Light	85x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1484653	Dacapo Heavy User Light	90x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1451307	Dacapo Heavy User Light	90x215x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1543421	Dacapo Heavy User Light	90x220x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1484429	Dacapo Heavy User Light	116x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 250 kg
1451259	Dacapo Heavy User*	116x200x15	To lag kaldskum/viskoelastisk	Trykkfordelende skummadrass, brukervekt 350 kg
60131580	Dacapo Top	80x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
60131581	Dacapo Top	85x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
60133221	Dacapo Top	85x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
60131578	Dacapo Top	90x200x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
60131584	Dacapo Top	90x215x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk
60133222	Dacapo Top	90x220x7	Viskoelastisk skum	Overmadrass, statisk

*Flere størrelser kan bestilles ved forespørsel

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Yes, you can.®